

Validierungsdokumentation

BtM - Arzneistoffe Fest

HiperScan GmbH

4. Februar 2015

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Kontext dieses Dokuments	5
Gültigkeitsbereich dieses Dokuments	6
Validierungskonzept	6
Ablauf von Modellerstellung und Validierungsläufen	7
Besonderheiten einzelner Substanzklassen	9
Aussagekraft der Prüfung mit <i>Apo-Ident</i>	9
Fazit	10
Begriffserklärung	11
Zusammenfassung	15
Validierproben	15
Ergebnis der Validierung	16
Validierungsberichte	17
Amfetaminsulfat	17
Barbital-Natrium	21
Buprenorphinhydrochlorid	25
Cocainhydrochlorid	29
Codein Monohydrat	33
Codeinphosphat-Hemihydrat	37
Dexamfetaminsulfat	41
Dihydrocodeinhydrogentartrat	45
Fentanylcitrat	49
Hydromorphonhydrochlorid	53
Methadonhydrochlorid	57
Midazolam	61
Midazolamhydrochlorid	65
Morphinhydrochlorid	69
Morphinsulfat	73
Oxycodonhydrochlorid	77
Phenobarbital	81
Anhang	85
Zusätzliche Kalibrierproben (<i>Typ A</i>)	85
Zusätzliche Validierproben (<i>Typ B</i>)	101
Zusätzliche Validierproben (<i>Typ C</i>)	149
Anforderungen an die Validierung	271
Konformität von <i>Apo-Ident</i> mit dem <i>Europäischen Arzneibuch</i>	272
Literatur	273
Index	275

Einleitung

Der zweifelsfreie Nachweis der Identität von pharmazeutischen Ausgangsstoffen anhand einer Monographie oder herkömmlicher alternativer Methoden ist arbeitsaufwändig, zeitintensiv und ökonomisch oft nicht mehr sinnvoll. Neue Wege bietet hier die Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Durch sie ist es möglich, relativ einfach über die Erstellung und Auswertung von Spektren eine schnelle und trotzdem sichere Identitätsprüfung vorzunehmen.

Das Analysesystem *Apo-Ident* wurde speziell für den Einsatz in der Apotheke entwickelt. Der Apotheker ist verpflichtet alle Ausgangsstoffe für Rezepturen in seiner Apotheke auf Identität zu prüfen. Dies geschieht in der Regel anhand der im europäischen Arzneibuch enthaltenen Monographien zu den jeweiligen Substanzen. Aber auch die NIR-Spektroskopie ist im europäischen Arzneibuch als Methode zur Identifikation beschrieben, die, abweichend zu den in den jeweiligen Monographien enthaltenen Methoden, zur Prüfung zugelassen ist, [1]

unter der Voraussetzung, dass die gleichen Ergebnisse („nämlich die Feststellung der Identität“ [2]) wie mit den beschriebenen Methoden und Geräten erzielt werden.

Das Analysesystem *Apo-Ident* dient der Identifikation von Ausgangsstoffen für die Rezeptur, wie sie nach *ApBetrO* §§ 6, 11 in der Apotheke durchgeführt werden muss (NIR-Spektroskopie als alternative Prüfmethode). *Apo-Ident* besteht aus drei Komponenten:

- Ein *NIR-Spektrometer*, welches die Spektren nicht vorverarbeiteter Ausgangsstoffe in einem Messgläschen in diffuser Reflexion bzw. Transflexion aufnimmt.
- Die Spektroskopiesoftware *QuickStep* steuert das Gerät und erfasst die Spektren und die Benutzer-Eingaben mittels eines apotheken-spezifischen Software-Plugins. Es generiert auch das Prüfprotokoll für die Dokumentation der Prüfung und zur Ablage des zu unterschreibenden Ausdrucks in der Apotheke.
- *Referenzdatenbanken* sind im Softwaremodul *IdentModul* enthalten. Diesem werden die Spektren von der *QuickStep*-Software zur Bewertung vorgelegt.

Die NIR-Spektroskopie ist eine sehr mächtige analytische Methode. Sie ist unter anderem in der Lage die Identität vieler chemischer Verbindungen und Gemische festzustellen, sofern eine geeignete Datenbank (fachlich korrekt: ein [chemometrisches Modell](#)) erstellt wurde. Die Identitätsprüfung mit *Apo-Ident* ist eine sehr sichere, sehr schnelle und leicht zu bedienende analytische Methode zur Prüfung einer großen Anzahl von Rezepturausgangsstoffen.

Kontext dieses Dokuments

Die Eignung von Gerät, Methode und Datenbank wird folgendermaßen belegt:

- *NIR-Spektroskopie als Methode zur Prüfung auf Identität*: Das *Ph. Eur.* [3] beschreibt in *Abschnitt 2.2.40* die NIR-Spektroskopie als analytische Methode, die unter anderem zur Identifikation von Ausgangsstoffen geeignet ist. Eine Validierung der Methode selbst ist folglich nicht erforderlich.
- *Funktionsfähigkeit des Geräts*: Das *Ph. Eur.* [3] beschreibt in *Abschnitt 2.2.40* ferner die Apparatur und die *Überprüfung der Funktionsfähigkeit*. Das Dokument *Erfüllung von 2.2.40 Ph. Eur. durch Apo-Ident* [4] stellt dieser Monographie die Umsetzung durch *Apo-Ident* gegenüber, um zu belegen, dass *Apo-Ident* den Vorgaben des Arzneibuches entspricht. Jedes einzelne Gerät, welches an eine Apotheke ausgeliefert wird, wird durch die dort beschriebene *Überprüfung der Funktionsfähigkeit* validiert. Dabei wird die Einheit aus Analysegeräte-Hardware und der Spektroskopiesoftware *QuickStep* beurteilt. Das Ergebnis wird in einem Prüfprotokoll dokumentiert, welches in der Apotheke verbleibt.
- *Die Validierung der Datenbank* wird für jede Substanzklasse separat dokumentiert. Der vorliegende Bericht dokumentiert die Validierung der Substanzklasse *BtM - Arzneistoffe Fest*.

Die *Arbeitsgemeinschaft der Pharmazierate Deutschlands (APD)* hat in ihrer Resolution vom 16. Oktober 2013 [5] klargestellt:

Bei NIR handelt es sich um eine Prüfmethode des Arzneibuches. Die Qualität der Prüfung ist von der hinterlegten Datenbank abhängig. Die APD sieht die Verwendung von NIR-Geräten bei gesicherter Validierung der dazu verwendeten Datenbanken als eine von mehreren möglichen Methoden zur Identitätsprüfung an.

NIR ist also grundsätzlich geeignet. Eine valide Referenzdatenbank ist sicherzustellen.

Gültigkeitsbereich dieses Dokuments

Diese Validierungsdokumentation beschreibt die Ergebnisse der Validierung der Referenzdatenbank für die Substanzklasse *BtM - Arzneistoffe Fest*. Zu jeder veröffentlichten Version der Referenzdatenbank wird für alle enthaltenen Substanzklassen eine Validierungsdokumentation erstellt.

Die Referenzdatenbank ist in dem Softwaremodul *IdentModul* enthalten. Diesem werden während der Identprüfung mit *Apo-Ident* die Spektren von der dabei zum Einsatz kommenden *QuickStep*-Software zur Bewertung vorgelegt. In gleicher Weise werden bei den Validierungsläufen dem *IdentModul* alle Validierspektren nacheinander zur Bewertung vorgelegt. Das *IdentModul* antwortet jeweils (ohne Berücksichtigung der Eingangsvermutung) mit der identifizierten Substanz bzw. weist es als unbekannt ab. Diese Antwort wird für jede mögliche Eingangsvermutung auf Richtigkeit geprüft und gezählt.

Die Ergebnisse werden für jede Substanz zusammengefasst und in diesem Dokument wiedergegeben.

Die Kernaussagen dieses Validierungsberichts sind:

- Die Datenbank wird ausschließlich aus Spektren aufgebaut, welche durch die *HiperScan GmbH* an rückverfolgbaren Proben in pharmazeutischer Qualität aufgenommen wurden.
 - Die Proben werden über die apotheken-üblichen Quellen beschafft (*DAC III.2.: Bezugsquellennachweis für Rezepturbestandteile [6]*).
 - Ein valides Herstellerzertifikat liegt vor (Gehalt, Reinheit und Identität der Charge).
 - Die Identität wurde von einem zertifizierten Prüflabor oder der *HiperScan GmbH* bestätigt.
- Jede Version der Referenzdatenbank (jedes Update) wird komplett validiert.
 - In drei separat ausgewerteten Validierungsläufen werden Kalibrierspektren, Spektren von unabhängigen Proben und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (weiter unten als *Typ A, B* bzw. *C* bezeichnet) dem *IdentModul* zur Bewertung vorgelegt.
 - Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.
 - Dabei werden auch die verschiedenen Substanzklassen auf gegenseitige Ablehnung geprüft, wo dies sachlich gerechtfertigt ist (siehe Abschnitt *Zusammenfassung*).
- Für jede einzelne Substanz ist die eindeutige Identifizierbarkeit durch *Apo-Ident* und die Abgrenzung gegen alle anderen Substanzen der Datenbank belegt.

Validierungskonzept

Die *Chemometrie* ist ein statistisches Verfahren, um aus Spektren die relevante chemische Information zu extrahieren. Die Mathematik bezeichnet dieses Verfahren als *Multivariate Datenanalyse*. Die Chemometrie geht dabei folgendermaßen vor:

1. Sammlung von Spektren für die *Kalibrierprobe*. Die Ergebnisse (Identitäten) der Kalibrierprobe müssen bekannt sein. Die Kalibrierproben müssen für jene Proben repräsentativ sein, die später bewertet werden sollen. Sie müssen also die verschiedenen möglichen (physikalischen) Ausprägungen berücksichtigen. (Aus diesem Grund ist der Bezug der Kalibrierproben für NIR aus dem Fachhandel der Verwendung von CRS-Referenzsubstanzen überlegen.)
2. Der erste mathematische Schritt heißt *Kalibrierung*. Dabei wird das *chemometrische Modell* aus den Spektren der *Kalibrierprobe* (*Referenzspektren*) berechnet und Grenzen sowie einige Parameter werden festgelegt. Mit dem *chemometrischen Modell* wird später aus dem Proben-spektrum das Analyseergebnis berechnet (*Prediction*).

3. Sammlung von weiteren Spektren für die *Validierprobe*, die von der *Kalibrierprobe* unabhängig sein soll. Auch die Ergebnisse (Identitäten) der *Validierprobe* müssen bekannt sein. Das Lehrbuch sieht eine Stichprobe vor, deren Umfang meist mit 25 % bis 50 % der *Kalibrierprobe* vorgeschlagen wird [7].
4. Der zweite datentechnische Schritt heißt *Validierung*. Dabei wird das erstellte [chemometrische Modell](#) anhand der Spektren der *Validierproben* evaluiert. Als Validierungsparameter für die Identifikation gibt das *Ph. Eur. Abschnitt 2.2.40* [3] die [Spezifität](#) und [Robustheit](#) vor.

Der Validierungsschritt nach Lehrbuch hat das Ziel, die Leistungsfähigkeit des erstellten Modells anhand einer Stichprobe abzuschätzen. Um die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen, liegt das Augenmerk auf der Kalibrierprobe. In der Pharmazie steht die Sicherheit der Methode im Vordergrund. Um das Modell im regulatorischen Sinne [validieren](#) zu können, muss der Validierungsschritt Beweiskraft erhalten. Dafür muss die Validierprobe *repräsentativ und vollständig* sein, um alle Fälle abzuprüfen.

Die *ausreichende Anzahl an Chargen* muss in der Validierung sichergestellt werden, weil die Validierung letztlich belegt, ob die Anzahl an Chargen in der Kalibrierung ausgereicht hat.

Jede Substanz wird einzeln validiert. Die Validierungsergebnisse sind in diesem Report je Substanz dokumentiert. Außerdem geht aus den Unterlagen hervor, wie viele und welche Chargen zur Modellerstellung bzw. zur Modellvalidierung genutzt wurden.

Für jede Substanz wird mindestens ein Zertifikat von einem akkreditierten Prüflabor über die unabhängige Prüfung auf Identität der Probe eingeholt. Die Kennnummer des entsprechenden Prüfzertifikats wird im Report aufgeführt, sodass eine Rückverfolgbarkeit auf eine nach den Monographien des Arzneibuches geprüfte Substanz gegeben ist.

Ablauf von Modellerstellung und Validierungsläufen

Die Sicherheit der [chemometrischen Modelle](#) wird durch mehrere Maßnahmen bei der Modellerstellung gewährleistet, von denen der Validierungsschritt nur der letzte ist. Der Ablauf ist standardmäßig wie folgt. Er gilt insbesondere für die Arzneibuch-Substanzen *Arzneistoffe Fest*, *Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (mit Prüfzert.)*, *BtM-Arzneistoffe Fest* und *Drogen*. Sind bei einzelnen Substanzklassen Abweichungen erforderlich, so werden diese im Abschnitt [Besonderheiten einzelner Substanzklassen](#) dargelegt.

1. Sammeln der Referenzspektren (Kalibrierprobe)

- a) Beschaffung der Proben aus den gleichen Quellen, aus denen Apotheken ihre Rezeptursubstanzen beziehen (Caelo, Fagron, OTC, . . . , siehe auch *DAC III.2. Bezugsquellennachweis für Rezepturbestandteile* [6]).
- b) Überprüfung der Eignung nach *ApBetrO* §§ 6, 11, also Verfügbarkeit eines validen Herstellerzertifikates über Identität, Reinheit und Gehalt der Charge.
- c) Erfassen von standardmäßig 40 Spektren der Probe in unterschiedlichen Lagen, an standardmäßig vier Geräten. Dabei erfolgt die Handhabung und Präsentation der Proben so wie später in der Apotheke.
- d) Sichtkontrolle auf Auffälligkeiten in den Spektren. Bei Hinweisen auf Messfehler ist die Messung zu wiederholen. Fehlt eine Signatur im Spektrum, wird die Substanz ggf. als wenig aussichtsreich von vornherein ausgeschlossen (Die Spektren gehen trotzdem als unabhängige Spektren vom *Typ B* in die Validierung der Datenbank ein.)
- e) Prüfung auf Identität. Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist auf der jeweiligen Substanzseite dieser Validierungsdokumentation der [Mahalanobis-Abstand](#) zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz. Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

- f) Ist die Identität der neuen Probe nachgewiesen, wird sie als Referenzprobe deklariert und die Spektren werden für den Aufbau der Datenbank freigegeben.

2. Generieren der chemometrischen Modelle (Kalibrierung)

- a) Bestimmung der Transformationsmatrix aus den Referenzspektren mittels Varianzmaximierung [8, 7]. (Es gehen immer *alle* Referenzspektren ein, auch wenn bei einem Update nur wenige Spektren dazugekommen sind.) Alle Referenzspektren erhalten die gleiche Datenvorbehandlung, die auch später im Feld (in den Apotheken) auf jedes Messspektrum angewendet wird.
- b) Überprüfung, dass die Anzahl der verwendeten Hauptkomponenten weiterhin adäquat ist.
- c) Berechnen der Grenzen für jede Substanz aus den Streuungen der Referenzspektren. Die Rechenvorschrift ist für jede Substanz einer Substanzklasse einheitlich.
- d) Überprüfen der Abstände zwischen den Grenzen der trennbaren Substanzen: Die Distanzmatrix enthält die *Mahalanobis-Abstände* von jeder Substanz zu jeder anderen. Die Werte hin und zurück unterscheiden sich. Ist eine Distanz kleiner als 10, so müssen die Substanzen als nicht trennbar deklariert werden oder *beide* aus der Datenbank herausgenommen werden. (Die Spektren von herausgenommenen Substanzen verbleiben als unabhängige Spektren vom *Typ B* in der Validierung.)
- e) Überprüfung des Modells anhand der Referenzspektren. Kommt es zu *Falsch-Positiven* Ergebnissen, ist genauso zu verfahren wie im Falle zu geringer *Mahalanobis-Abstände*.
- f) Liegen für alle Substanzklassen chemometrische Modelle vor, die beide Kriterien erfüllen (Abstandsmatrix und keine *Falsch-Positiven*), so werden sie zusammen mit den Bewertungsalgorithmen zu einem *IdentModul* verbunden und verschlüsselt. Diese Einheit kann nicht mehr verändert werden. Sie wird durch die Validierung in ihrer Gesamtfunktion überprüft.

3. Zusammenstellen der Validierspektren (Validierproben)

Für die Validierung werden bereitgestellt:

- a) *Typ A*: Die Referenzspektren = Kalibrierspektren, aus denen die Datenbank aufgebaut wurde. Hierzu gehören auch Spektren von Substanzen, die mit dem *chemometrischen Modell* nicht identifiziert werden sollen, sie wurden aber in die Generierung mit aufgenommen, um die Selektivität zu erhöhen. (Das Modell „lernt“ dadurch, sich von anderen Substanzen abzugrenzen, die ihm eigentlich unbekannt sind.)
- b) *Typ B*: Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in die Generierung des jeweiligen Modells eingegangen sind, die aber durch die *HiperScan GmbH* gemessen wurden. Hierzu gehören auch Referenzspektren von anderen Substanzklassen und Spektren, die nicht als Referenzspektren deklariert sind.
- c) *Typ C*: Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld. Diese Messungen wurden in den Apotheken durch das Apothekenpersonal unter Alltagsbedingungen aufgenommen. Die Spektren gehören sowohl zu Substanzen der zu prüfenden Substanzklasse als auch zu Substanzen aus anderen Klassen.

Alle Hersteller-Chargen, von denen Spektren in die Validierung fließen, sind in diesem Dokument nach Substanzen sortiert aufgelistet: Für Substanzen welche in der Substanzklasse *BtM - Arzneistoffe Fest* enthalten sind in den jeweiligen Validierungsberichten; ansonsten in den Anhängen *A*, *B* und *C*.

Weiterhin gilt: Validierungsspektren dürfen nur entfernt werden, wenn sich ein Fehler des Spektrums belegen lässt. Die Spektren werden dabei nicht gelöscht, sondern mit Begründung, Datum und Namenszeichen im Kommentar auf eine *Blacklist* gesetzt.

Von welchen anderen Substanzklassen *Typ-B*- und *Typ-C*-Spektren für die Validierung herangezogen werden, behandelt der Abschnitt *Besonderheiten einzelner Substanzklassen*.

4. Validierungsläufe und Freigabe

- a) Dem *IdentModul* als Ganzes werden Validierspektren in gleicher Weise zur Bewertung übergeben, wie die Spektroskopiesoftware *QuickStep* gemessene Spektren übergibt.
- b) Nach Vorlage jedes Spektrums antwortet das *IdentModul*, ob es eine Substanz erkannt hat und welche Substanz erkannt wurde.
- c) die Antwort wird für jede mögliche Eingangsvermutung (jede messbare Substanz der Substanzklasse) auf Richtigkeit geprüft und nach *Richtig-Negativ*, *Falsch-Negativ*, *Richtig-Positiv* und *Falsch-Positiv* gezählt. Diese Zahlen werden für jede Substanz und zusätzlich im Abschnitt *Zusammenfassung* nach den Typen *A*, *B* und *C* getrennt angegeben.
- d) Es ist kein einziges *Falsch-Positives* Ergebnis zugelassen.
- e) Wird auch dieses Kriterium für alle Substanzklassen erfüllt, erfolgt die Freigabe des *IdentModuls*.

Besonderheiten einzelner Substanzklassen

Grundsätzlich beschafft und prüft die *HiperScan GmbH* das Hersteller-Zertifikat zur Charge, beauftragt eine externe Prüfung auf Identität der Probe oder führt diese selbst durch und bewahrt die Zertifikate auf. Dieser Ablauf ist wie beschrieben für die Arzneibuch-Substanzen eingerichtet, also für die Substanzklassen **Arzneistoffe Fest**, **Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (mit Prüfzert.)**, **BtM-Arzneistoffe Fest** und **Drogen**. Die *HiperScan GmbH* kann also die Identität der Referenzproben belegen. Bei den herstellerspezifischen Substanzklassen und anderen werden einzelne Schritte zum Teil etwas anders organisiert:

Die Substanzklasse **Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (sonstige)** (oft als *Kosmetika* bezeichnet) enthält Substanzen, für welche keine Spezifikation die Anforderungen an die pharmazeutische Qualität festlegt, weder in einer Arzneibuch-Monographie, in einer Monographie des DAC/NRF noch durch eine Herstellerspezifikation. Folglich können weder die Identität noch Gehalt unabhängig überprüft werden. Zu den Referenzproben liegen keinerlei Zertifikate vor. Es wird hier also nur die Übereinstimmung der Probe mit früheren Proben dieses Produkts festgestellt. Und es wird eine Verwechslung mit den anderen Substanzen ausgeschlossen. (Erstellt der Hersteller einer solchen Substanz eine Spezifikation, legt Prüfmethoden fest und stellt Herstellerzertifikate nach *ApBetrO* §§6,11 zur Verfügung, so kann die *HiperScan GmbH* die Substanz zukünftig in die Substanzklasse *Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (mit Prüfzert.)* neu aufnehmen.)

Die Substanzklasse **HCK** enthält die HCK-Mikronährstoffe des Schweizer Unternehmens *Hepart AG*. Die *HiperScan GmbH* erhält die Referenzproben direkt vom Hersteller. Zu jeder Referenzprobe erhält die *HiperScan GmbH* auch Herstellerzertifikate und bewahrt diese auf. Eine erneute Überprüfung der Identität der Referenzprobe führt die *HiperScan GmbH* nicht durch. Die Identität der Referenzproben wird also durch die *Hepart AG* belegt. Die Spektren aller Chargen werden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen und gehen in die Datenbank ein.

Auch die Substanzklassen mit **TCM-Granulaten** sind lieferantenspezifisch getrennt. Die Granulate der Lieferanten *HerbaSinica*, *PhytoComm* und *China-Medica* sind anhand ihrer Spektren miteinander kaum vergleichbar, denn es werden Extrakte jeweils verschiedener Drogen-Chargen mit unterschiedlichen Trägermaterialien granuliert. Die Spektren aller Chargen dieser Lieferanten werden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen und gehen in die jeweilige Datenbank ein. Die Lieferanten organisieren die Prüfungen jeweils selbst und bewahren die Prüfzertifikate auf. Eine Besonderheit bildet der implementierte Ablauf mit *HerbaSinica*: Sie senden die Referenzproben an ein Prüflabor, welches die Identität der Probe feststellt und das Gebinde weiter an die *HiperScan GmbH* schickt, wenn das Ergebnis positiv ist.

Das positive Prüfergebnis stellt fest, dass das Probenspektrum mit einer Charge des angegebenen Granulats dieses Lieferanten übereinstimmt und dass es keine Übereinstimmung mit einem anderen Granulat dieses Lieferanten gibt. Dabei sind alle Chargen der Lieferanten bekannt.

Aussagekraft der Prüfung mit *Apo-Ident*

Das Analyse-Ergebnis wird mit ausgefeilten statistischen Methoden nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik ermittelt. Chemisches und pharmazeutisches Wissen geht in die Auswahl der

Proben ein, an denen die Kalibrierspektren und die Validierspektren aufgenommen werden. Es beeinflusst ansonsten nicht die weiteren Schritte der Modellerstellung.

Verbal lässt sich die Aussage des Analyseergebnisses wie folgt formulieren. Dabei bedeutet „*die Spektren stimmen überein*“, dass die Kriterien *Mahalanobis-Abstand*, *Ausreißeranalyse* und *Korrelation* erfüllt sind, wie dies in *Erfüllung von 2.2.40 Ph. Eur. durch Apo-Ident* [4] dargestellt ist. „*Die Spektren stimmen nicht überein*“ bedeutet dagegen, dass mindestens das Kriterium *Mahalanobis-Abstand* nicht erfüllt ist.

Das positive Analyseergebnis „*wurde identifiziert als ...*“ ist sehr aussagekräftig, weil sowohl die Menge der berücksichtigten Substanzen als auch die Anzahl der zugrundeliegenden Proben sehr umfangreich ist.

1. Das Spektrum der vermessenen Probe stimmt mit Spektren der vorgegebenen Substanz überein.
2. Das Spektrum der vermessenen Probe stimmt mit keinem Spektrum irgendeiner anderen Substanz dieser Substanzklasse überein. Alle anderen Substanzen können also klar ausgeschlossen werden.
3. Da auch die Spektren von Substanzen aus anderen Substanzklassen, zur Validierung herangezogen wurden, ist belegt, dass kein Spektrum einer dieser anderen Substanzen mit der vorgegebenen Substanz übereinstimmt. (Zur Validierung herangezogen werden alle Substanzklassen mit denen ein Spektrenvergleich möglich und sinnvoll ist. Dies ist für jede Substanzklasse im Abschnitt *Zusammenfassung* dokumentiert.)
4. Gehört die vorgegebene Substanz zu einer Gruppe von Substanzen die untereinander nicht eindeutig mit *Apo-Ident* trennbar sind (*Substanzgruppe*), so wird die Übereinstimmung mit den Spektren einer oder mehrerer Substanzen dieser Gruppe bestätigt. Um welche dieser Substanzen es sich handelt, kann nicht eindeutig gesagt werden. Alle anderen Substanzen werden analog zu 2 und 3 ausgeschlossen.

Ein negatives Analyseergebnis „*wurde nicht identifiziert als ...*“ bedeutet dagegen:

1. Die angegebene Substanz konnte anhand des Spektrums dieser Probe nicht erkannt werden.
2. Die Identität dieser Probe wird nicht bestätigt.
3. Die Prüfung auf Identität ist nach den Vorgaben des Arzneibuches zu wiederholen.

Fazit

Bei der NIR-Spektroskopie handelt es sich um eine Prüfmethode des Arzneibuches. Sie ist bei gesicherter Validierung der Datenbank eine mögliche Methode zur Identitätsprüfung [5]. *Apo-Ident* entspricht als Nahinfrarot-Spektrometer den Kriterien des *Europäischen Arzneibuchs* und belegt mit der vorliegenden Validierungsdokumentation die Validität der Referenzdatenbank.

Damit ist Apo-Ident als alternatives Prüfverfahren für die Identifikation von Ausgangsstoffen in der Apotheke einsetzbar.

Begriffserklärung

Der folgende Abschnitt dient der Erklärung bzw. Definition von Fachbegriffen. Diese werden für das Verständnis dieser Dokumentation benötigt. Falls notwendig, werden Definitionen für das Analysesystem *Apo-Ident* konkretisiert.

Der Begriff Datenbank wird in diesem Dokument genauso wie im *Ph. Eur. Abschnitt 2.2.40* [3] synonym mit [chemometrisches Modell](#) verwendet. Zur Differenzierung der voneinander relativ unabhängigen Datenbanken verwendet die *HiperScan GmbH* häufig auch den Begriff der [Substanzklasse](#) (vor allem im Plural). Die zum Aufbau der Datenbank verwendeten Spektren werden dagegen als Spektrensammlung bezeichnet, nicht als Datenbank.

In Substanzklassen sind die Substanzen des *IdentModuls* organisiert. Die Substanzklassen sind voneinander unabhängige Substanz-[Datenbanken](#), die größtenteils auch unabhängig voneinander abonniert werden können. Zum einen werden in den Substanzklassen die flüssigen und halbfesten Substanzen von den festen Pulvern getrennt, weil sie gegen unterschiedliche Referenzen gemessen werden und deshalb die Spektren nicht vergleichbar sind. Zum anderen werden z.B. die Arzneibuch-Substanzen getrennt von den hersteller-spezifischen Datenbanken für TCM-Ausgangsstoffe (traditionelle chinesische Medizin) geführt.

Die einzelnen Substanzklassen müssen nur teilweise gegeneinander abgegrenzt werden. Oft besteht kein Verwechslungsrisiko, weil sie nur aus unterschiedlichen Quellen zu beziehen sind. Andererseits handelt es sich vielfach um Substanzen, die nicht unterschieden werden müssen. Beispielsweise muss *Huang Qi*-Granulat der Firma *HerbaSinica* weder von *Huang Qi*-Granulat der Firma *PhytoComm* abgegrenzt werden, noch ist eine Übereinstimmung zwingend. Hinter einer Substanzklasse steht jeweils ein einziges [chemometrisches Modell](#). (Wenngleich mehrere gegeneinander abgesicherte chemometrische Modelle zulässig wären.) Die Begriffe *Substanzklasse*, *chemometrisches Modell* und [Datenbanken](#) werden hier meist synonym gebraucht.

Eine Substanzgruppe fasst jeweils alle Substanzen innerhalb einer [Substanzklasse](#) zusammen, die anhand Ihrer NIR-Spektren nicht sicher voneinander unterschieden werden können. Alle anderen Substanzen der Datenbank können aber ausgeschlossen werden.

Die Bildung von Untergruppen wird im *Ph. Eur. Abschnitt 2.2.40* [3] angesprochen. Auf diese Weise können EDV-technische Beschränkungen bei umfangreichen Datenbanken umgangen werden, und es ist möglich, einzelne Untergruppen mit verschiedenen Spektrenvorbehandlungen aufzubereiten. Die Validierung der Untergruppen gegeneinander ist erforderlich. Die *HiperScan GmbH* hat diese technischen Beschränkungen gelöst und verwendet innerhalb einer Substanzklasse keine Untergruppen mehr.

Die Hauptkomponentenanalyse [8, 7], auch *Principal Component Analysis* (PCA), ist ein Verfahren der multivariaten Statistik bzw. multivariaten Datenanalyse. Sie dient dazu, umfangreiche Datensätze zu strukturieren, zu vereinfachen und zu veranschaulichen, indem eine Vielzahl statistischer Variablen durch eine geringere Zahl möglichst aussagekräftiger Linearkombinationen (die *Hauptkomponenten*) beschrieben werden. Im *Apo-Ident Identmodul* wird die *PCA* zur Bewertung der aufgenommenen Spektrendaten (entspr. *Ph. Eur. 2.2.40* [3]) genutzt.

Der Begriff Validierung ist in den beiden hier relevanten Zusammenhängen mit unterschiedlichen (wenn auch verwandten) Bedeutungen festgelegt.

Im Sinne der Fachdisziplin *Chemometrie* ist die Validierung ein Verfahrensschritt bei der Erstellung eines [chemometrischen Modells](#): Nachdem im Schritt der Kalibrierung aus einem Satz Referenzspektren eine Transformationsmatrix, Grenzen und verschiedene Parameter berechnet bzw. festgelegt worden sind [8, 7], bestimmt der Schritt der Validierung anhand der Validierspektren die Leistungsfähigkeit des Modells (Trennschärfe, Genauigkeit, ...). Standardmäßig ist hier eine Stichprobe vorgesehen. Damit die Validierung Beweiskraft erhält, muss der Validierspektren-Satz geeignet umfangreich gewählt werden (*repräsentativ* und *vollständig*). Mit den Begriffen *Validierungslauf* oder *Validierungsschritt* ist immer der Verfahrensschritt in diesem Sinne gemeint.

Im regulatorischen Sinne (der pharmazeutischen Produktion) ist die Validierung der dokumentierte Beweis, dass ein Prozess oder ein System die vorher spezifizierten Anforderungen im praktischen Einsatz reproduzierbar erfüllt. In diesem Sinne werden die Datenbanken von *Apo-Ident* erst mit der Validierungsdokumentation, zu der auch dieses Dokument gehört, zu validierten Datenbanken.

Das *Europäische Arzneibuch* verwendet den Begriff Validierung im *Abschnitt 2.2.40* im Sinne der Fachdisziplin *Chemometrie* [3].

Die Robustheit eines Verfahrens ist die Eigenschaft, durch Schwankungen der Umwelt (z.B. Temperatur oder Feuchtigkeit) nur wenig beeinflusst zu werden. Eine Methode ist robust, wenn die Umweltbedingungen das Endergebnis nicht oder nur unwesentlich verfälschen.

Die Spezifität einer Klassifikation (eines [chemometrischen Modells](#)) ist die [Richtig-Negativ-Rate](#).

Die Richtig-Negativ-Rate bezeichnet den Anteil der während der Validierung richtig als Nicht-Identität klassifizierten Spektren. Dies entspricht einer korrekten Klassifikation. Sie bedeutet, dass eine Substanz *A* bei der Identitätsprüfung auf Substanz *B* als „nicht identifiziert“ beurteilt wird. Die *Richtig-Negativ-Rate* entspricht der bedingten Häufigkeit

$$h(\text{abgewiesen}|\text{tatsächlich keine Identität}) = \frac{r_n}{r_n + f_p}$$

mit r_n als Gesamtzahl der *Richtig-Negativen* Klassifikationen und f_p als Gesamtzahl der *Falsch-Positiven* Klassifikationen. Für eine erfolgreiche Validierung eines *IdentModuls* müssen alle dieser Kategorie angehörenden vorgelegten Spektren als *entspricht nicht* klassifiziert werden.

Die Falsch-Positiv-Rate bezeichnet den Anteil der während der Validierung fälschlich als Identität klassifizierten Spektren. Dies ist die kritischste Art der möglichen Fehlklassifikation. Sie bedeutet, dass eine Substanz *A* bei der Identitätsprüfung auf Substanz *B* als „identifiziert“ beurteilt wird. Die *Falsch-Positiv-Rate* entspricht der bedingten Häufigkeit

$$h(\text{identifiziert}|\text{tatsächlich keine Identität}) = \frac{f_p}{r_n + f_p}$$

mit r_n als Gesamtzahl der *Richtig-Negativen* Klassifikationen und f_p als Gesamtzahl der *Falsch-Positiven* Klassifikationen. Für eine erfolgreiche Validierung eines *IdentModuls* wird eine *Falsch-Positiv-Rate* von Null für alle in die Validierung eingehenden Spektren verlangt. Dies ist gleichbedeutend mit einer Spezifität von 100%.

Die Richtig-Positiv-Rate bezeichnet den Anteil der während der Validierung richtig als Identität klassifizierten Spektren. Dies entspricht einer korrekten Klassifikation. Sie bedeutet, dass eine Substanz *A* bei der Identitätsprüfung auf Substanz *A* als „identifiziert“ beurteilt wird. Die *Richtig-Positiv-Rate* entspricht der bedingten Häufigkeit

$$h(\text{identifiziert}|\text{tatsächlich Identität}) = \frac{r_p}{r_p + f_n}$$

mit r_p als Gesamtzahl der *Richtig-Positiven* Klassifikationen und f_n als Gesamtzahl der *Falsch-Negativen* Klassifikationen. Die *Richtig-Positiv-Rate* ist ein Maß für die Erkennungsrate des validierten *Apo-Ident* Identmoduls.

Die Falsch-Negativ-Rate bezeichnet den Anteil der während der Validierung falsch als Nicht-Identität klassifizierten Spektren. Dies entspricht einer falschen Klassifikation. Sie bedeutet, dass eine Substanz *A* bei der Identitätsprüfung auf Substanz *A* als „nicht identifiziert“ beurteilt wird. Die *Falsch-Negativ-Rate* entspricht der bedingten Häufigkeit

$$h(\text{abgewiesen}|\text{tatsächlich Identität}) = \frac{f_n}{r_p + f_n}$$

mit f_n als Gesamtzahl der *Falsch-Negativen* Klassifikationen und r_p als Gesamtzahl der *Richtig-Positiven* Klassifikationen. Die *Falsch-Negativ-Rate* ist ein Maß für die Erkennungsrate des validierten *Apo-Ident* Identmoduls.

Ein chemometrisches Modell ist ein auf statistischen Methoden basierender Klassifikator [8, 7]. Durch den jeweiligen zum Einsatz kommenden Algorithmus (z.B. *Hauptkomponentenanalyse*, *Clusteranalyse*) wird das Maximum an chemischen Informationen aus Messdaten extrahiert. Dabei werden systematische oder physikalische Störgrößen durch geeignete Datenvorbehandlung möglichst eliminiert [9, 10].

An vielen Stellen in diesem Dokument wird im Sinne eines einfacheren Verständnisses der Begriff **Datenbank** anstelle von *chemometrisches Modell* verwendet – in gleicher Weise wie im *Ph. Eur. Abschnitt 2.2.40* [3].

Die Referenzproben werden zum Aufbau der Datenbank verwendet. An ihnen werden die *Referenzspektren* aufgenommen. In der Fachsprache der Chemometrie sagt man eher: Bei der *Kalibrierung* wird aus den an *Kalibrierproben* aufgenommenen *Kalibrierspektren* ein *chemometrisches Modell* generiert, dessen Qualität anschließend in der *Validierung* beurteilt wird.

Referenzproben werden aus apotheken-üblichen Quellen in pharmazeutischer Qualität beschafft. Ihre Identität wird geprüft. Die Referenzspektren werden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. In der Dokumentation werden u.a. Hersteller und Chargen-Nummer festgehalten.

Der Mahalanobis-Abstand ist ein Distanzmaß zweier Punkte im n -dimensionalen Vektorraum. Dabei wird die jeweilige Richtungskomponente des Abstands auf die *Standardabweichung* [11] einer n -dimensionalen Verteilung normiert. Im Falle der *Hauptkomponenten-Analyse* [8, 7] bezieht sich diese Normierung auf die Verteilung des jeweiligen Kalibrierdatensatzes einer Klassifikation (Substanz/Substanzgruppe) im *Hauptkomponentenraum* [7]. Der *Mahalanobis-Abstand* eines Punkts (Abbildung eines Spektrums) $\vec{y}$ im n -dimensionalen Hauptkomponentenraum zum Erwartungswert einer n -dimensionalen Verteilung $\mathbf{X}$ ergibt sich dann zu

$$d(\mathbf{X}, \vec{y}) = \sqrt{(\bar{\mathbf{X}} - \vec{y})^T \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \vec{y})} \quad \text{mit} \quad \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \vec{y} \in \mathbb{R}^m$$

[12]. Dabei entspricht m der Anzahl der genutzten Hauptkomponenten (Dimension des Hauptkomponentenraums) und n der Anzahl der im Kalibrierdatensatz vorhandenen Messungen (Spektren). $\bar{\mathbf{X}}$ ist der Erwartungswert der sich für den Kalibrierdatensatz ergebenden Verteilung (also der Mittelwert der n eingehenden Messungen). $\mathbf{S}^{-1}$ ist die inverse Kovarianzmatrix [11] der Verteilung $\mathbf{X}$.

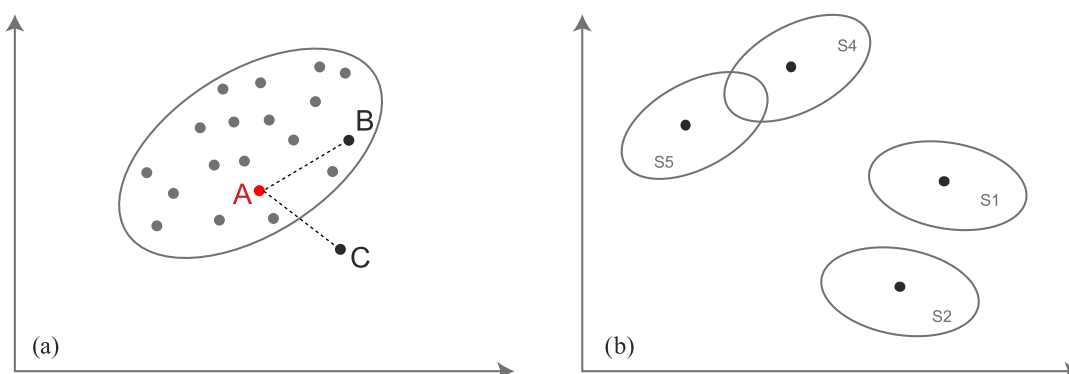


Abbildung 1: (a) Der *Mahalanobis-Abstand* von A zu B ist kleiner als von A zu C. Die euklidischen Distanzen sind jedoch gleich. (b) Der *Mahalanobis-Abstand* zwischen den beiden Messserien S4 und S5 ist kleiner als zwischen S1 und S2. Die euklidischen Distanzen sind jedoch gleich.

Der *Mahalanobis-Abstand* bietet Vorteile gegenüber dem euklidischen Abstand: Er berücksichtigt bei der Berechnung der Distanz die statistischen Eigenschaften einer Datenpunktmenge (Messserie), d.h. Mittelwert, Varianz und Kovarianz der Datenpunkte [13]. Der *Mahalanobis-Abstand* wird bei der Erstellung der Referenzdatenbank zur Bewertung der Spektren unterschiedlicher Proben einer Substanz eingesetzt.

Zusammenfassung

Zur Validierung der Substanzklasse *BtM - Arzneistoffe Fest* wurden insgesamt 180 639 Spektren von 9699 verschiedenen Chargen von insgesamt 1313 Substanzen herangezogen.

Validierproben

Die Validierproben lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen:

Typ A Kalibrierspektren. Dies sind die in die Generierung des chemometrischen Modells eingegangenen Spektren. Sie wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Detaillierte Informationen zu den Chargen bzw. Proben finden sich auf den jeweiligen Validierungsberichten in den Abschnitten *Kalibrierproben* und *Typ A* bzw. in [Anhang A](#).

Substanzklasse	Substanzen	Chargen	Spektren
BtM - Arzneistoffe Fest	17	56	2465
Arzneistoffe Fest	353	866	40 436

Aus Kategorie *A* wurden insgesamt 42 901 Spektren von 922 Chargen von 370 Substanzen in der Validierung berücksichtigt.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Detaillierte Informationen zu den Chargen bzw. Proben finden sich auf den jeweiligen Validierungsberichten im Abschnitt *Typ B* bzw. in [Anhang B](#).

Substanzklasse	Substanzen	Chargen	Spektren
BtM - Arzneistoffe Fest	17	43	297
Arzneistoffe Fest	256	380	16 297
Drogen	112	335	15 203
HCK	67	399	21 178
Granulate ChinaMedica	271	559	26 372
Granulate HerbaSinica	187	235	15 250
Granulate PhytoComm	224	570	26 938

Aus Kategorie *B* wurden insgesamt 121 535 Spektren von 2521 Chargen von 1134 Substanzen in der Validierung berücksichtigt.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgte durch *Apo-Ident*-Kunden. Detaillierte Informationen zu den Chargen bzw. Proben finden sich auf den jeweiligen Validierungsberichten im Abschnitt *Typ C* bzw. in [Anhang C](#).

Substanzklasse	Substanzen	Chargen	Spektren
BtM - Arzneistoffe Fest	10	52	89
Arzneistoffe Fest	304	5408	12 298
Drogen	76	798	1587
HCK	48	306	856
Granulate HerbaSinica	2	3	11

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzklasse	Substanzen	Chargen	Spektren
Granulate PhytoComm	161	420	803
Granulate ChinaMedica	169	293	559

Aus Kategorie *C* wurden insgesamt 16 203 Spektren von 7280 Chargen von 770 Substanzen in der Validierung berücksichtigt.

Ergebnis der Validierung

Alle in der Substanzklasse *BtM - Arzneistoffe Fest* enthaltenen Substanzen/Substanzgruppen sind mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,000 07 %)	2465 (> 99,979 72 %)	0 (< 0,020 28 %)	726 852 (> 99,999 93 %)
Typ B	0 (< 0,000 02 %)	293 (98,653 20 %)	4 (1,346 80 %)	2 065 798 (> 99,999 98 %)
Typ C	0 (< 0,000 18 %)	88 (98,876 40 %)	1 (1,123 60 %)	275 362 (> 99,999 82 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen).

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Amfetaminsulfat**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20299-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Amfetaminsulfat; Amfetamini sulfas; Amphetaminsulfat; Amphetaminum sulfuricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Amfetaminsulfat* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Th. Geyer	Amfetaminsulfat	67002	20299	40	20110601
Fagron	Amfetaminsulfat	13G08-N11	21130	40	0814K-03361
Caelo	Amfetaminsulfat	13344603	21132	40	0814J-03361
Th. Geyer	Amfetaminsulfat	67002	21134	40	0814I-03361

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 160 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Amfetaminsulfat*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet.
- 42 741 Spektren aus insgesamt 914 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des *chemometrischen Modells* eingegangen sind, sind die Proben in *Anhang A* aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 25 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Amfetaminsulfat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th.Geyer	Amfetaminsulfat	67002	10
Caelo	Amfetaminsulfat	13344603	5
Fagron	Amfetaminsulfat	13G08-N11	10

- 121 510 Spektren aus insgesamt 2457 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in *Anhang B* aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 34 Spektren von 19 *Apo-Ident*-Kunden aus 10 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Amfetaminsulfat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th. Geyer	Amfetaminsulfat	67002	22
Caelo	Amfetaminsulfat	12095607	1
Fagron	Amfetaminsulfat	12E11-N06	4
Caelo	Amfetaminsulfat	12I24-N03	1
Phönix	Amfetaminsulfat	13B11N04	1
Fagron	Amfetaminsulfat	11D04-N13	1
Fagron	Amfetaminsulfat	11/01-N01	1
Caelo	Amfetaminsulfat	1ot067002	1
Th. Geyer	Amfetaminsulfat	56047	1
Fagron	Amfetaminsulfat	13B11-N04	1

- 16 169 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7176 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Amfetaminsulfat* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	160 (> 99,6875 %)	0 (< 0,3125 %)	42 741 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	25 (> 98,0000 %)	0 (< 2,0000 %)	121 510 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	34 (> 98,5294 %)	0 (< 1,4706 %)	16 169 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der [Mahalanobis-Abstand](#) zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20299	21134	3,51	54,66
21130	21130	0,00	57,89
21132	21132	0,00	55,47
21134	21134	0,00	53,53

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Barbital-Natrium**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20297-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Barbital-Natrium; Barbitalum natriucum; Natrium diaethylbarbituricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Barbital-Natrium* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Th. Geyer	Barbital-Natrium	zu erfassen	20297	80	zu erfassen
Geyer	Barbital-Natrium	60508	20309	40	zu erfassen
Fagron	Barbital-Natrium	12F27-N02	21136	40	0814I-07775

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 160 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Barbital-Natrium*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 741 Spektren aus insgesamt 915 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 6 Spektren von 2 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Barbital-Natrium*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Barbital-Natrium	12F27-N02	1
Fagron	Barbital-Natrium	12F27-N02	5

- 121 529 Spektren aus insgesamt 2459 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 0 Spektren von 0 *Apo-Ident*-Kunden aus 0 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Barbital-Natrium*.
- 16 203 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7186 Chargen von 700 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Barbital-Natrium* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	160 (> 99,6875 %)	0 (< 0,3125 %)	42 741 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	6 (k.A.)	0 (k.A.)	121 529 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	0 (k.A.)	0 (k.A.)	16 203 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20297	21136	12,71	71,82
20309	21136	8,47	72,95
21136	21136	0,00	70,21

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Buprenorphinhydrochlorid**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20300-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Buprenorphinhydrochlorid; Buprenorphini hydrochloridum; Buprenorphinum hydrochloricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Buprenorphinhydrochlorid* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Buprenorphinhydr. . .	10242705	20300	40	20100910
Caelo	Buprenorphinhydr. . .	12172908	21138	40	0814I-07774

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 80 Spektren von 2 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Buprenorphinhydrochlorid*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 821 Spektren aus insgesamt 915 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 6 Spektren von 2 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Buprenorphinhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Buprenorphinhydrochlorid	12172908	1
Caelo	Buprenorphinhydrochlorid	12172908	5

- 121 529 Spektren aus insgesamt 2459 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 0 Spektren von 0 *Apo-Ident*-Kunden aus 0 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Buprenorphinhydrochlorid*.
- 16 203 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7186 Chargen von 700 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Buprenorphinhydrochlorid* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	80 (> 99,3750 %)	0 (< 0,6250 %)	42 821 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	6 (k.A.)	0 (k.A.)	121 529 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	0 (k.A.)	0 (k.A.)	16 203 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20300	21138	4,37	24,95
21138	21138	0,00	25,51

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Cocainhydrochlorid**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20298-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Cocainhydrochlorid; Cocaini hydrochloridum; Cocainum hydrochloricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Cocainhydrochlorid* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Fagron	Cocainhydrochlorid	11G28-N11	20298	80	zu erfassen
Fagron	Cocainhydrochlorid	11G15-N02	20301	40	zu erfassen
Caelo	Cocainhydrochlorid	13259305	21140	40	0814J-01278
Fagron	Cocainhydrochlorid	13I17-N02	21142	40	0814I-01278
Th. Geyer	Cocainhydrochlorid	60145	21144	40	0814K-01278

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 240 Spektren von 5 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Cocainhydrochlorid*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 661 Spektren aus insgesamt 912 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 22 Spektren von 6 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Cocainhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th.Geyer	Cocainhydrochlorid	60145	1
Caelo	Cocainhydrochlorid	13259305	1
Fagron	Cocainhydrochlorid	13/17-N02	1
Th.Geyer	Cocainhydrochlorid	60145	4
Caelo	Cocainhydrochlorid	13259305	10
Fagron	Cocainhydrochlorid	13I17-N02	5

- 121 513 Spektren aus insgesamt 2456 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 2 Spektren von 2 *Apo-Ident*-Kunden aus 2 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Cocainhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Cocainhydrochlorid	C17H22CIN04	1
Fagron	Cocainhydrochlorid	12G23-N13	1

- 16 201 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7184 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Cocainhydrochlorid* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	240 (> 99,7917 %)	0 (< 0,2083 %)	42 661 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	22 (> 97,7273 %)	0 (< 2,2727 %)	121 513 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	2 (k.A.)	0 (k.A.)	16 201 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20298	21144	10,73	21,82
20301	21144	6,74	25,43
21140	21140	0,00	25,21
21142	21142	0,00	26,86
21144	21144	0,00	25,31

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe	Codein Monohydrat
Substanzklasse	BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum	02.02.2015
Berichtsnummer	21146-2015-02-02
Ausführende Firma	HiperScan GmbH Weißeritzstraße 3 01067 Dresden Germany

Relevante Substanznamen

Codein Monohydrat; Codeinum monohydricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Codein Monohydrat* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Fagron	Codein Monohydrat	12C05-N05	21146	30	0814I-01280

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 30 Spektren von 1 Referenzprobe der Substanz/Substanzgruppe *Codein Monohydrat*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 871 Spektren aus insgesamt 916 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 1 Spektrum von 1 Referenzprobe der Substanz/Substanzgruppe *Codein Monohydrat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Codein Monohydrat	12C05-N05	1

- 121 534 Spektren aus insgesamt 2459 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 0 Spektren von 0 *Apo-Ident*-Kunden aus 0 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Codein Monohydrat*.
- 16 203 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7186 Chargen von 700 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Codein Monohydrat* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	30 (> 98,3333 %)	0 (< 1,6667 %)	42 871 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	1 (k.A.)	0 (k.A.)	121 534 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	0 (k.A.)	0 (k.A.)	16 203 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
21146	21146	0,00	43,12

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe	Codeinphosphat-Hemihydrat
Substanzklasse	BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum	02.02.2015
Berichtsnummer	20302-2015-02-02
Ausführende Firma	HiperScan GmbH Weißeritzstraße 3 01067 Dresden Germany

Relevante Substanznamen

Codeinphosphat-Hemihydrat; Codeini phosphas hemihydricus; Codeinum phosphoricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Codeinphosphat-Hemihydrat* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Codeinphosphat-H. . .	11234808	20302	40	20110923
Fagron	Codeinphosphat-H. . .	13C11-N10	21148	36	0814I-01279
Th. Geyer	Codeinphosphat-H. . .	67038	21150	40	0814K-01279
Caelo	Codeinphosphat-H. . .	13071504	21152	40	0814J-01279

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 156 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Codeinphosphat-Hemihydrat*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 745 Spektren aus insgesamt 913 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 20 Spektren von 6 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Codeinphosphat-Hemihydrat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th.Geyer	Codeinphosphat-Hemihydrat	67038	1
Caelo	Codeinphosphat-Hemihydrat	13071504	1
Fagron	Codeinphosphat-Hemihydrat	13C11-N10	1
Th.Geyer	Codeinphosphat-Hemihydrat	67038	9
Caelo	Codeinphosphat-Hemihydrat	13071504	5
Fagron	Codeinphosphat-Hemihydrat	13C11-N10	3

- 121 515 Spektren aus insgesamt 2457 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 5 Spektren von 4 *Apo-Ident*-Kunden aus 5 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Codeinphosphat-Hemihydrat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Merck	Codeinphosphat-Hemihydrat	120765	1
Fagron	Codeinphosphat-Hemihydrat	11/19-N10	1
Fagron	Codeinphosphat-Hemihydrat	12C05-N01	1
Caelo	Codeinphosphat-Hemihydrat	13G03-N10	1
Fagron	Codeinphosphat-Hemihydrat	11L20-N04	1

- 16 198 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7181 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Codeinphosphat-Hemihydrat* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	156 (> 99,6795 %)	0 (< 0,3205 %)	42 745 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	19 (95,0000 %)	1 (5,0000 %)	121 515 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	5 (k.A.)	0 (k.A.)	16 198 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der [Mahalanobis-Abstand](#) zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20302	21152	3,02	86,80
21148	21148	0,00	88,12
21150	21150	0,00	86,36
21152	21152	0,00	87,80

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Dexamfetaminsulfat**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20304-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Dexamfetaminsulfat; Dexamfetamini sulfas; Dexamphetaminsulfat; Dexamphetaminum sulfuricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Dexamfetaminsulfat* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Fagron	Dexamfetaminsulfat	11F29N01	20304	40	zu erfassen
Fagron	Dexamfetaminsulfat	13I23-N01	21154	40	0814M-03582

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 80 Spektren von 2 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Dexamfetaminsulfat*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 821 Spektren aus insgesamt 915 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 46 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Dexamfetaminsulfat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Dexamfetaminsulfat	13I23-N01	1
Fagron	Dexamfetaminsulfat	13I23-N01	5
zu erfassen	Dexamfetaminsulfat	zu erfassen	40

- 121 489 Spektren aus insgesamt 2459 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 4 Spektren von 2 *Apo-Ident*-Kunden aus 4 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Dexamfetaminsulfat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Dexamfetaminsulfat	11F29-N01	1
GEHE	Dexamfetaminsulfat	12F11-N01	1
GEHE	Dexamfetaminsulfat	635J7FA70021	1
GEHE	Dexamfetaminsulfat	635JFA70029	1

- 16 199 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7182 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Dexamfetaminsulfat* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	80 (> 99,3750 %)	0 (< 0,6250 %)	42 821 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	46 (> 98,9130 %)	0 (< 1,0870 %)	121 489 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	3 (k.A.)	1 (k.A.)	16 199 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20304	20304	0,00	44,26
21154	21154	0,00	42,81

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Dihydrocodeinhydrogentartrat**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20303-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Dihydrocodeinhydrogentartrat; Dihydrocodeini hydrogenotartras; Dihydrocodeinum bitartaricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Dihydrocodeinhydrogentartrat* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Dihydrocodeinhyd. . .	10223612	20303	40	20100823
Caelo	Dihydrocodeinhyd. . .	13267601	21156	40	0914A-03065
Caelo	Dihydrocodeinhyd. . .	12142506	21158	40	0914B-03065
Fagron	Dihydrocodeinhyd. . .	13H19-N03	21160	40	0914C-03065
Th. Geyer	Dihydrocodeinhyd. . .	67035	21162	40	0914D-03065

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 200 Spektren von 5 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Dihydrocodeinhydrogentartrat*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 701 Spektren aus insgesamt 912 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 30 Spektren von 8 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Dihydrocodeinhydrogentartrat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th.Geyer	Dihydrocodeinhydrogentartrat	67035	1
Caelo	Dihydrocodeinhydrogentartrat	12142506	1
Caelo	Dihydrocodeinhydrogentartrat	13267601	1
Fagron	Dihydrocodeinhydrogentartrat	13H19-N03	1
Th.Geyer	Dihydrocodeinhydrogentartrat	67035	10
Caelo	Dihydrocodeinhydrogentartrat	1214506	6
Caelo	Dihydrocodeinhydrogentartrat	13267601	5
Fagron	Dihydrocodeinhydrogentartrat	13H19-N03	5

- 121 505 Spektren aus insgesamt 2455 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 5 Spektren von 4 *Apo-Ident*-Kunden aus 3 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Dihydrocodeinhydrogentartrat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Dihydrocodeinhydrogentartrat	12G05-N01	1
Th. Geyer	Dihydrocodeinhydrogentartrat	67035	2
Fagron	Dihydrocodeinhydrogentartrat	13H19-N08	2

- 16 198 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7183 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierungsspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Dihydrocodeinhydrogentartrat* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	200 (> 99,7500 %)	0 (< 0,2500 %)	42 701 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	30 (> 98,3333 %)	0 (< 1,6667 %)	121 505 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	5 (k.A.)	0 (k.A.)	16 198 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20303	21156	5,04	29,35
21156	21156	0,00	28,57
21158	21158	0,00	28,69
21160	21160	0,00	28,63
21162	21162	0,00	29,99

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Fentanylcitrat**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20295-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Fentanylcitrat; Fentanili citras; Fentanylum citricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Fentanylcitrat* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Fagron	Fentanylcitrat	4511E-07449	20295	80	zu erfassen
Fagron	Fentanylcitrat	11/19-N07	20312	40	zu erfassen
Fagron	Fentanylcitrat	13G30-N06	21164	40	0814M-07678

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 160 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Fentanylcitrat*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet.
- 42 741 Spektren aus insgesamt 914 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des *chemometrischen Modells* eingegangen sind, sind die Proben in *Anhang A* aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 11 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Fentanylcitrat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Fentanylcitrat	13G30-N06	1
Fagron	Fentanylcitrat	13G430-N06	5
Fagron	Fentanylcitrat	13G30-N06	5

- 121 524 Spektren aus insgesamt 2458 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in *Anhang B* aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 2 Spektren von 2 *Apo-Ident*-Kunden aus 2 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Fentanylcitrat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Fentanylcitrat	20100911-1	1
Fagron	Fentanylcitrat	12G02-N03	1

- 16 201 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7184 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in *Anhang C* aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Fentanylcitrat* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	160 (> 99,6875 %)	0 (< 0,3125 %)	42 741 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	11 (k.A.)	0 (k.A.)	121 524 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	2 (k.A.)	0 (k.A.)	16 201 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20295	21164	7,95	54,01
20312	21164	7,23	50,78
21164	21164	0,00	54,95

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Hydromorphonhydrochlorid**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20296-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Hydromorphonhydrochlorid; Hydromorphinum hydrochloricum; Hydromorphoni hydrochloridum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Hydromorphonhydrochlorid* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Hydromorphonhydr. . .	10157908	20296	80	20100623
Caelo	Hydromorphonhydr. . .	11029713	20305	40	20110211
Caelo	Hydromorphonhydr. . .	13267702	21166	40	0914A-01334
Fagron	Hydromorphonhydr. . .	13E16-N02	21168	40	0914B-01334

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 200 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Hydromorphonhydrochlorid*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 701 Spektren aus insgesamt 913 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 12 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Hydromorphonhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Hydromorphonhydrochlorid	13267702	1
Fagron	Hydromorphonhydrochlorid	13E16-N02	1
Caelo	Hydromorphonhydrochlorid	13267702	5
Fagron	Hydromorphonhydrochlorid	13E16-N02	5

- 121 523 Spektren aus insgesamt 2458 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 0 Spektren von 0 *Apo-Ident*-Kunden aus 0 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Hydromorphonhydrochlorid*.
- 16 203 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7186 Chargen von 700 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Hydromorphonhydrochlorid* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	200 (> 99,7500 %)	0 (< 0,2500 %)	42 701 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	12 (k.A.)	0 (k.A.)	121 523 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	0 (k.A.)	0 (k.A.)	16 203 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20296	21166	7,42	73,68
20305	21166	4,16	72,37
21166	21166	0,00	73,66
21168	21168	0,00	72,08

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Methadonhydrochlorid**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20306-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Methadonhydrochlorid; Methadoni hydrochloridum; Methadonum hydrochloricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Methadonhydrochlorid* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Methadonhydrochl. . .	11043910	20306	40	20110218
Caelo	Methadonhydrochl. . .	12344818	21170	40	0914E-02949
Fagron	Methadonhydrochl. . .	13J24-B06	21172	40	0914F-02949
Th. Geyer	Methadonhydrochl. . .	67033	21174	40	0914G-02949
Th. Geyer	Methadonhydrochl. . .	67047	21176	40	0914H-02949

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 200 Spektren von 5 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Methadonhydrochlorid*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 701 Spektren aus insgesamt 912 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 29 Spektren von 8 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Methadonhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th.Geyer	Methadonhydrochlorid	67033	1
Th.Geyer	Methadonhydrochlorid	67047	1
Caelo	Methadonhydrochlorid	12344818	1
Fagron	Methadonhydrochlorid	13J24-B06-286906	1
Th.Geyer	Methadonhydrochlorid	67033	5
Th.Geyer	Methadonhydrochlorid	67047	5
Caelo	Methadonhydrochlorid	12344818	5
Fagron	Methadonhydrochlorid	13J24-B06-286906	10

- 121 506 Spektren aus insgesamt 2456 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 24 Spektren von 11 *Apo-Ident*-Kunden aus 15 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Methadonhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Methadonhydrochlorid	13B06-N02	5
Fagron	Methadonhydrochlorid	1213E-02949	1
Fagron	Methadonhydrochlorid	20130912-6	1
Fagron	Methadonhydrochlorid	12H07-N07	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Methadonhydrochlorid	171920-0009	1
Caelo	Methadonhydrochlorid	11227507	1
Fagron	Methadonhydrochlorid	12H07-N05	4
Fagron	Methadonhydrochlorid	1225H008	1
Caelo	Methadonhydrochlorid	12171902	1
Siegfried Ltd	Methadonhydrochlorid	12B21-N03	2
Fagron	Methadonhydrochlorid	12A05-No2	1
Fagron	Methadonhydrochlorid	13F17-N02	2
Fagron	Methadonhydrochlorid	11G11-N02	1
Fagron	Methadonhydrochlorid	414022-1-P	1
Fagron	Methadonhydrochlorid	12b21-n03	1

- 16 179 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7171 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Methadonhydrochlorid* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	200 (> 99,7500 %)	0 (< 0,2500 %)	42 701 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	26 (89,6552 %)	3 (10,3448 %)	121 506 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	24 (> 97,9167 %)	0 (< 2,0833 %)	16 179 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20306	21172	4,26	23,57
21170	21170	0,00	18,97
21172	21172	0,00	19,76
21174	21174	0,00	25,19
21176	21176	0,00	38,42

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Midazolam**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 21178-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Midazolam; Midazolamum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Midazolam* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Fagron	Midazolam	13K05-N01	21178	40	0914E-07393

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 40 Spektren von 1 Referenzprobe der Substanz/Substanzgruppe *Midazolam*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 861 Spektren aus insgesamt 916 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 1 Spektrum von 1 Referenzprobe der Substanz/Substanzgruppe *Midazolam*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Midazolam	13K05-N01	1

- 121 534 Spektren aus insgesamt 2459 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 0 Spektren von 0 *Apo-Ident*-Kunden aus 0 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Midazolam*.
- 16 203 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7186 Chargen von 700 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Midazolam* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	40 (> 98,7500 %)	0 (< 1,2500 %)	42 861 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	1 (k.A.)	0 (k.A.)	121 534 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	0 (k.A.)	0 (k.A.)	16 203 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
21178	21178	0,00	92,57

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Midazolamhydrochlorid**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20294-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Midazolamhydrochlorid; Midazolami hydrochloridum; Midazolamum hydrochloricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Midazolamhydrochlorid* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Fagron	Midazolamhydroch. . .	11F20-N01	20294	80	zu erfassen
Caelo	Midazolamhydroch. . .	11184701	20307	39	20110809
Caelo	Midazolamhydroch. . .	12215811	21180	40	0914E-03538
Fagron	Midazolamhydroch. . .	13E22-N09	21182	40	0914F-03538

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 199 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Midazolamhydrochlorid*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 702 Spektren aus insgesamt 913 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 12 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Midazolamhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Midazolamhydrochlorid	12215811	1
Fagron	Midazolamhydrochlorid	13E22-N09	1
Caelo	Midazolamhydrochlorid	12215811	5
Fagron	Midazolamhydrochlorid	13E22-N09	5

- 121 523 Spektren aus insgesamt 2458 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 5 Spektren von 4 *Apo-Ident*-Kunden aus 4 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Midazolamhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Midazolamhydrochlorid	13E22-N09	2
Caelo	Midazolamhydrochlorid	11184705	1
Caelo	Midazolamhydrochlorid	12094512	1
Eurho/Phoenix	Midazolamhydrochlorid	12L17-N10	1

- 16 198 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7182 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Midazolamhydrochlorid* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	199 (> 99,7487 %)	0 (< 0,2513 %)	42 702 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	12 (k.A.)	0 (k.A.)	121 523 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	5 (k.A.)	0 (k.A.)	16 198 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20294	21180	9,82	67,44
20307	21180	4,49	71,26
21180	21180	0,00	72,76
21182	21182	0,00	67,26

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Morphinhydrochlorid**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20308-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Morphinhydrochlorid; Morphini hydrochloridum; Morphinum hydrochloricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Morphinhydrochlorid* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Geyer	Morphinhydrochlo...	56311	20308	40	zu erfassen
Caelo	Morphinhydrochlo...	13125207	21190	40	0914E-01879
Caelo	Morphinhydrochlo...	13349505	21192	40	0914F-01879
Fagron	Morphinhydrochlo...	13G08-N04	21194	40	0914G-01879
Th. Geyer	Morphinhydrochlo...	67036	21196	40	0914H-01879

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 200 Spektren von 5 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Morphinhydrochlorid*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 701 Spektren aus insgesamt 912 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 24 Spektren von 8 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Morphinhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th.Geyer	Morphinhydrochlorid	67036	1
Caelo	Morphinhydrochlorid	13125207	1
Caelo	Morphinhydrochlorid	13349505	1
Fagron	Morphinhydrochlorid	13G08-N04	1
Th.Geyer	Morphinhydrochlorid	67036	5
Caelo	Morphinhydrochlorid	13125207	5
Caelo	Morphinhydrochlorid	13349505	5
Fagron	Morphinhydrochlorid	13G08-N04	5

- 121 511 Spektren aus insgesamt 2456 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 4 Spektren von 4 *Apo-Ident*-Kunden aus 4 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Morphinhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Morphinhydrochlorid	12104409	1
Caelo	Morphinhydrochlorid	12104403	1
Fagron	Morphinhydrochlorid	12E10-N04	1
Caelo	Morphinhydrochlorid	13125206	1

- 16 199 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7182 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierungsspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Morphinhydrochlorid* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	200 (> 99,7500 %)	0 (< 0,2500 %)	42 701 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	24 (> 97,9167 %)	0 (< 2,0833 %)	121 511 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	4 (k.A.)	0 (k.A.)	16 199 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20308	21196	3,20	47,53
21190	21190	0,00	47,32
21192	21192	0,00	48,75
21194	21194	0,00	46,79
21196	21196	0,00	46,58

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Morphinsulfat**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 21184-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Morphinsulfat; Morphini sulfas; Morphinum sulfuricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Morphinsulfat* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Morphinsulfat	12153212	21184	40	0914F-07776
Caelo	Morphinsulfat	11333103	21186	40	0914E-07776
Fagron	Morphinsulfat	13J07-N04	21188	40	0914G-07776

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 120 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Morphinsulfat*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 781 Spektren aus insgesamt 914 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 23 Spektren von 5 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Morphinsulfat*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Morphinsulfat	11333103	1
Caelo	Morphinsulfat	12153212	11
Fagron	Morphinsulfat	13J07/N04	1
Caelo	Morphinsulfat	11333103	5
Fagron	Morphinsulfat	13J07-N04	5

- 121 512 Spektren aus insgesamt 2456 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 0 Spektren von 0 *Apo-Ident*-Kunden aus 0 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Morphinsulfat*.
- 16 203 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7186 Chargen von 700 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Morphinsulfat* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	120 (> 99,5833 %)	0 (< 0,4167 %)	42 781 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	23 (> 97,8261 %)	0 (< 2,1739 %)	121 512 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	0 (k.A.)	0 (k.A.)	16 203 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
21184	21184	0,00	52,25
21186	21186	0,00	51,85
21188	21188	0,00	49,69

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Oxycodonhydrochlorid**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20310-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Oxycodonhydrochlorid; Oxycodoni hydrochloridum; Oxycodonum hydrochloricum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Oxycodonhydrochlorid* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Oxycodonhydrochl. . .	9190426	20310	40	20090701
Caelo	Oxycodonhydrochl. . .	12268908	21202	40	0914E-07734
Caelo	Oxycodonhydrochl. . .	12034515	21204	40	0914F-07734

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 120 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Oxycodonhydrochlorid*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 781 Spektren aus insgesamt 914 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 12 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Oxycodonhydrochlorid*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Oxycodonhydrochlorid	12034515	1
Caelo	Oxycodonhydrochlorid	12268908	1
Caelo	Oxycodonhydrochlorid	12034515	5
Caelo	Oxycodonhydrochlorid	12268908	5

- 121 523 Spektren aus insgesamt 2458 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 0 Spektren von 0 *Apo-Ident*-Kunden aus 0 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Oxycodonhydrochlorid*.
- 16 203 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7186 Chargen von 700 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Oxycodonhydrochlorid* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	120 (> 99,5833 %)	0 (< 0,4167 %)	42 781 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	12 (k.A.)	0 (k.A.)	121 523 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	0 (k.A.)	0 (k.A.)	16 203 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20310	21202	7,09	24,46
21202	21202	0,00	21,03
21204	21204	0,00	20,96

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

VALIDIERUNGSBERICHT

IdentModul 0.96-2015-01-28

Validierte Substanz/Substanzgruppe **Phenobarbital**
Substanzklasse BtM - Arzneistoffe Fest
Berichtsdatum 02.02.2015
Berichtsnummer 20311-2015-02-02
Ausführende Firma HiperScan GmbH
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Germany

Relevante Substanznamen

Phenobarbital; Acidum phenylaethylbarbituricum; Phenobarbitalum

Anwendbare Dokumente

978-3-7692-5416-7 *Europäisches Arzneibuch 7. Ausgabe, Grundwerk 2011* [3]
Komm2.2.40 *Erfüllung von Ph. Eur. 7.0 Monographie 2.2.40 durch Apo-Ident* [4]
AA004.01 *Arbeitsanweisung Datenbank-Validierung Apo-Ident*

Validierungsmethode

Die Validierung wird nach jeder Änderung des chemometrischen Modells (auch „Datenbank“) durchgeführt und erfolgt in drei Schritten:

1. Das chemometrische Modell wird aus den Kalibrierspektren durch einen PCA-Algorithmus errechnet. Die Kalibrierspektren stammen von den Kalibrierproben aller Substanzen dieser Klasse.
2. In dem generierten chemometrischen Modell werden die Abstände zwischen allen trennbaren Substanzen auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand überprüft.
3. Dem generierten chemometrischen Modell werden alle geeigneten Spektren zur Bewertung vorgelegt. In drei Läufen werden dabei nacheinander die Referenzspektren (*Typ A*), Spektren von unabhängigen Proben (*Typ B*) und Spektren von unabhängigen Proben aus dem Feld (*Typ C*) vorgelegt. Dabei darf es zu keinem einzigen *Falsch-Positiven* Ergebnis kommen.

Abschließend wird aus den Ergebnissen der Validierungsläufe ein Bericht generiert. Dieser wird revisionssicher zusammen mit den Parametern der Modellerstellung archiviert.

Kalibrierproben

In die Generierung der [chemometrischen Modelle](#) gehen ausschließlich Spektren ein, die durch die *HiperScan GmbH* an rückführbaren Proben aufgenommen werden. Von der Substanz/Substanzgruppe *Phenobarbital* sind folgende Proben eingegangen:

Lieferant	Substanz	Charge	Proben-ID	Spektren	Zertifikat
Caelo	Phenobarbital	11045503	20311	40	20110407
Caelo	Phenobarbital	12173202	21198	40	0914E-01040
Th. Geyer	Phenobarbital	67045	21200	40	0914F-01040

Validierproben

Zur Validierung wurden insgesamt 180 639 Spektren vorgelegt. Die Ergebnisse wurden nach folgenden Proben-Kategorien getrennt ausgewertet:

Typ A Alle Kalibrierspektren.

- 120 Spektren von 3 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Phenobarbital*. Diese Proben sind weiter oben im Abschnitt [Kalibrierproben](#) aufgelistet.
- 42 781 Spektren aus insgesamt 914 Chargen von 369 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet. Für Validierspektren von Substanzen die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, jedoch in die Generierung des [chemometrischen Modells](#) eingegangen sind, sind die Proben in [Anhang A](#) aufgelistet.

Typ B Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Ausführung der Messung durch die *HiperScan GmbH*.

- 17 Spektren von 4 Referenzproben der Substanz/Substanzgruppe *Phenobarbital*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Th.Geyer	Phenobarbital	67045	1
Caelo	Phenobarbital	12173202	1
Th.Geyer	Phenobarbital	67045	10
Caelo	Phenobarbital	12173202	5

- 121 518 Spektren aus insgesamt 2458 Chargen von 808 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie sind für alle weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ B* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang B](#) aufgelistet.

Typ C Spektren von unabhängigen Proben, die nicht in den Aufbau der Datenbank eingegangen sind. Die Ausführung der Messung erfolgt durch *Apo-Ident*-Kunden. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

- 4 Spektren von 3 *Apo-Ident*-Kunden aus 3 Chargen der Substanz/Substanzgruppe *Phenobarbital*.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Phenobarbital	13G05-N09	1
Th. Geyer	Phenobarbital	67045	2
Caelo	Phenobarbital	12D30-N02	1

- 16 199 Spektren von 186 *Apo-Ident*-Kunden aus 7184 Chargen von 699 weiteren Substanzen. Diese Spektren wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie sind bei allen weiteren Substanzen dieser Klasse im jeweiligen Abschnitt *Typ C* aufgelistet, sofern die Substanz mit diesem Modell identifizierbar ist. Für die Validierspektren von Substanzen, die nicht mit diesem Modell identifizierbar sind, sind die Proben in [Anhang C](#) aufgelistet.

Ergebnis der Validierung

Die Substanz/Substanzgruppe *Phenobarbital* ist mittels NIR-Spektroskopie mit *Apo-Ident* eindeutig von allen anderen Substanzen unterscheidbar.

	Falsch-Positiv	Richtig-Positiv	Falsch-Negativ	Richtig-Negativ
Typ A	0 (< 0,0012 %)	120 (> 99,5833 %)	0 (< 0,4167 %)	42 781 (> 99,9988 %)
Typ B	0 (< 0,0004 %)	17 (k.A.)	0 (k.A.)	121 518 (> 99,9996 %)
Typ C	0 (< 0,0031 %)	4 (k.A.)	0 (k.A.)	16 199 (> 99,9969 %)

Die in Klammern angegebenen Werte geben die jeweiligen aus den Häufigkeiten bestimmten Erwartungswerte für die Parameter in Prozent an. Ist die Häufigkeit Null oder gleich der Anzahl der Versuche, wird stattdessen die Größenordnung der statistischen Sicherheit ausgewiesen (Angabe mit Vergleichszeichen). Ist die Anzahl der Versuche kleiner als 20, wird kein Prozentwert angegeben.

Identitätsübereinstimmung laut Prüfung auf Identität mittels NIR

Für jede Substanz wird ein Zertifikat über die korrekte Identität bei einem unabhängigen GMP-zertifizierten Prüflabor eingeholt. Kann die Identität der Probe mittels NIR auf eine unabhängig geprüfte Referenzprobe bezogen werden, so ist in der folgenden Tabelle der *Mahalanobis-Abstand* zu dieser Referenzprobe angegeben, sowie der *Mahalanobis-Abstand* zur nächsten nicht-identischen Substanz:

Proben-ID	Referenz-proben-ID	Abstand zur Referenzprobe	Abstand zur nächsten Fremdprobe
20311	21198	4,63	55,94
21198	21198	0,00	55,64
21200	21200	0,00	56,54

Solche Proben untermauern die statistische Streuung der Originalen Referenzsubstanz, können aber keine neuen Aspekte bzw. Ausprägungsformen der Substanz hinzufügen.

Anhang A: Zusätzliche Kalibrierproben (Typ A)

In die Generierung des [chemometrischen Modells](#) gehen auch Spektren von Substanzen ein, die nicht mit diesem Modell identifiziert werden können. Dies hat den Zweck, dass Substanzen, die das Modell nicht erkennen soll, auch sicher abgewiesen werden. Die Spektren dieser Proben gehen als *Typ A* in die Validierung ein. Sie wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen.

Die Proben stammen aus 924 Chargen. Daran wurden 40 436 Spektren aufgenommen. Die Kalibrierspektren von Substanzen, die mit dem Modell identifiziert werden können, sind bei den einzelnen Substanzen jeweils im Abschnitt *Kalibrierproben* aufgelistet und tauchen in dieser Liste nicht noch einmal auf.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
abcr GmbH	Dimercaptobernst...	1005874	39	zu erfassen
Alfa Aesar	Theobromine, 99%	A11861	44	1404522
AppliChem	Papain	1G000215	40	1407433
AppliChem	Riboflavin	3E003567	40	zu erfassen
Berco	Maltodextrin	445-11	40	1403228
Bombastus	Nichtionische em...	267575	40	zu erfassen
Bulk Medicine...	alpha-Tocopherol...	2009060301	40	AR-12-FG-010838-01
Caelo	Acetylcystein	8309805	40	20090109
Caelo	Acetylcystein	12299020	40	20121026
Caelo	Acetylsalicylsäure	11257102	40	AR-14-FG-002828-01
Caelo	Acetylsalicylsäure	13297509	40	20131014
Caelo	Alfatradiol	13201601	120	20130812
Caelo	Alfatradiol	11061005	40	20110406
Caelo	Allantoin	91749379	60	F 2009 000 959
Caelo	Ascorbinsäure	9306404	40	AR-12-FG-009254-01
Caelo	Ascorbinsäure	12350011	40	20121122
Caelo	Atropinsulfat	13173808	40	1403483
Caelo	Atropinsulfat	13357405	45	zu erfassen
Caelo	Atropinsulfat	11180602	40	1405538
Caelo	Benzocain	12341904	40	1411055
Caelo	Benzocain	13213509	100	20130726
Caelo	Benzoesäure	13391310	60	20131216
Caelo	Betain-Monohydrat	11117715	40	20110518
Caelo	Betain-Monohydrat	12336602	40	1403327
Caelo	Betamethasondipr...	13236803	40	20130730
Caelo	Betamethasondipr...	13372501	40	zu erfassen
Caelo	Betamethasondipr...	13236803	35	20130730
Caelo	Betamethasonvale...	13225507	60	20130821
Caelo	Betamethasonvale...	13091213	40	20130506
Caelo	Betamethasonvale...	82806109	40	I 2009 000 283
Caelo	Bismutgallat, ba...	13179105	100	20130701
Caelo	Bismutgallat, ba...	13179105	40	1412254
Caelo	Budesonid, mikro...	11351706	40	1312398
Caelo	Budesonid, mikro...	11351706	40	zu erfassen
Caelo	Budesonid, mikro...	11351704	30	zu erfassen
Caelo	Butylhydroxytoluol	92714409	20	F 2009 000 960
Caelo	Butylhydroxytoluol	13354602	40	20131105
Caelo	Butylhydroxytoluol	13354604	40	20131105
Caelo	Calciumascorbat	13105624	40	20130620
Caelo	Calciumascorbat	10365208	40	AR-12-FG-008408-01
Caelo	Calciumcitrat-Te...	13391203	40	20131205
Caelo	Calciumcitrat-Te...	90034189	80	I 2009 000 304
Caelo	Calciumgluconat	12236502	40	1401575
Caelo	Calciumgluconat	12335829	40	20121121
Caelo	Calciumglyceroph...	13007912	40	20130124
Caelo	Calciumglyceroph...	12012403	40	AR-13-FG-002432-01
Caelo	Calciumglyceroph...	11160607	40	AR-12-FG-007581-01
Caelo	Calciumglyceroph...	12012417	40	zu erfassen

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Calciumglyceroph...	12012411	40	20120131
Caelo	Captopril	12339610	30	1403227
Caelo	Carbachol	11150302	40	1401147
Caelo	Carbomer 35000 /...	11351507	40	20120105
Caelo	Carbomer 35000 /...	11351604	40	20120106
Caelo	Carbomer 35000 /...	11351611	40	20120106
Caelo	Carbomer 35000 /...	13135601	40	1403767
Caelo	Carbomer 35000 /...	14057902	40	20140228
Caelo	Carbomer 35000 /...	13186207	40	1403768
Caelo	Carmellose-Natri...	13104807	40	1401186
Caelo	Carmellose-Natri...	12354404	40	1401185
Caelo	Carmellose-Natri...	13299310	60	20131002
Caelo	Carmellose-Natri...	14029211	40	20140127
Caelo	Cetylalkohol	13096901	40	1405179
Caelo	Cetylalkohol	13286502	60	20130925
Caelo	Cetylalkohol	13286502	40	20130925
Caelo	Cetylpalmitat 15	13295919	40	20130930
Caelo	Cetylpalmitat 15	12331916	40	1402429
Caelo	Cetylstearylalko...	14054504	40	20140226
Caelo	Cetylstearylalko...	14054504	60	20140226
Caelo	Chininsulfat Dih...	13024604	60	20130201
Caelo	Chinolingelb E104	12042010	40	20120314
Caelo	Chinolingelb E104	13109108	40	20130415
Caelo	Chinolingelb E104	11089608	40	AR-13-FG-002959-01
Caelo	Chinolinolsulfat...	13403501	60	20131218
Caelo	Chinolinolsulfat...	13071104	40	1403095
Caelo	Chloramphenicol	11370716	40	20120202
Caelo	Chloramphenicol	12248507	40	20120831
Caelo	Chloramphenicol	82853369	20	F 2010 000 086
Caelo	Chlorhexidindiac...	12142727	30	20120711
Caelo	Chlorhexidindiac...	12142726	40	1402685
Caelo	Chlorhexidindiac...	9113914	40	20090513
Caelo	Chlorocresol	13275106	60	20130828
Caelo	Chlorocresol	9282613	50	AR-12-FG-002991-01
Caelo	Cholesterol	11242104	40	AR-13-FG-002658-01
Caelo	Ciclopirox-Olamin	12040904	40	1401161
Caelo	Ciclopirox-Olamin	13343209	40	20131113
Caelo	Ciclosporin	13148604	60	20130613
Caelo	Ciclosporin	13148604	60	1412541
Caelo	Ciclosporin	12317707	40	20121119
Caelo	Citronensäure, w...	12043112	40	20120229
Caelo	Citronensäure, w...	13396502	60	20140110
Caelo	Citronensäure, w...	11380204	40	20120127
Caelo	Citronensäure, w...	91584259	80	I 2009 000 298
Caelo	Citronensäure, w...	13243213	40	20130821
Caelo	Citronensäure-Mo...	82803249	40	I 2009 000 297
Caelo	Clindamycin-2-di...	13166605	30	1403485
Caelo	Clindamycin-2-di...	13166605	40	20130624
Caelo	Clioquinol	91901279	20	F 2009 000 962
Caelo	Clioquinol	11304120	40	20111208
Caelo	Clobetasolpropio...	82805079	120	I 2009 000 284
Caelo	Clobetasolpropio...	13134705	40	zu erfassen
Caelo	Clobetasolpropio...	13269505	60	zu erfassen
Caelo	Clotrimazol	13184113	40	20130614
Caelo	Clotrimazol	13224204	40	20130815
Caelo	Clotrimazol	13224220	40	20130815
Caelo	Clotrimazol	91457249	40	I 2009 000 254
Caelo	Coffein	13233104	100	20131008
Caelo	Coffein	13233105	60	20131008
Caelo	Coffein	12317911	40	20121113

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Coffein	12317911	40	20121113
Caelo	Cromoglicinsäure. . .	13232802	20	zu erfassen
Caelo	Cromoglicinsäure. . .	11114501	40	20110518
Caelo	Cromoglicinsäure. . .	13232802	40	20130905
Caelo	Cyanocobalamin	13342803	40	zu erfassen
Caelo	Cyanocobalamin	9324114	10	F 2009 000 975
Caelo	Cyanocobalamin	9351704	40	zu erfassen
Caelo	Dequaliniumchlorid	1166204	40	AR-12-FG-007019-01
Caelo	Dequaliniumchlorid	11166203	40	AR-13-FG-000831-01
Caelo	Dequaliniumchlorid	12361908	40	1412076
Caelo	Dexamethason	13084315	60	zu erfassen
Caelo	Dexamethason	81002179	40	I 2009 000 272
Caelo	Dexamethason	13084306	40	zu erfassen
Caelo	Dexamethasonacetat	13260703	40	1412430
Caelo	Dexamethasonacetat	11093210	40	AR-12-FG-008544-01
Caelo	Dexamethasonacetat	13260706	60	zu erfassen
Caelo	Diclofenac-Natrium	80110508	40	I 2009 000 267
Caelo	Diclofenac-Natrium	13214311	60	20130826
Caelo	Diclofenac-Natrium	12214219	30	20120815
Caelo	Diltiazemhydroch. . .	13346914	40	20131028
Caelo	Diltiazemhydroch. . .	13346914	60	20131028
Caelo	Diltiazemhydroch. . .	91400279	40	I 2009 000 345
Caelo	Diphenhydraminhy. . .	12329816	60	20121119
Caelo	Diphenhydraminhy. . .	82811299	50	AR-12-FG-002704-01
Caelo	Diphenhydraminhy. . .	12329816	40	20121119
Caelo	Emulgade® 1000 NI	14055001	40	20140225
Caelo	Emulgierender Ce. . .	13233005	60	20130816
Caelo	Emulgierender Ce. . .	13233005	30	zu erfassen
Caelo	Emulgierender Ce. . .	11L22-N09	40	AR-13-FG-009007-01
Caelo	Ephedrinhydrochl. . .	12017217	30	1405607
Caelo	Ephedrinhydrochl. . .	13323305	40	20131113
Caelo	Epinephrinhydrog. . .	14007802	60	20140130
Caelo	Epinephrinhydrog. . .	12337804	30	20121128
Caelo	Epinephrinhydrog. . .	12337805	30	zu erfassen
Caelo	Epinephrinhydrog. . .	12120202	40	1405614
Caelo	Erythromycin	13175601	40	20130620
Caelo	Erythromycin	81907518	100	I 2009 000 262
Caelo	Estradiolbenzoat	92137389	20	F 2010 000 091
Caelo	Estradiol-Hemihy. . .	12268016	40	1410502
Caelo	Estradiol-Hemihy. . .	11078109	40	AR-13-FG-008661-01
Caelo	Estradiol-Hemihy. . .	13285802	60	1410504
Caelo	Estradiolvalerat	13264001	60	1410503
Caelo	Estriol	91732429	19	F 2009 000 964
Caelo	Estriol	13256001	60	20130821
Caelo	Estriol	12298706	40	20121106
Caelo	Ethacridinlactat. . .	91296299	20	F 2009 000 965
Caelo	Ethacridinlactat. . .	12149507	40	20120619
Caelo	Fructose	9302705	80	F 2009 000 981
Caelo	Gelatine, weiß	11334025	40	20111214
Caelo	Gelatine, weiß	10051107	40	AR-12-FG-002699-01
Caelo	Gentamicinsulfat	11113309	40	20110505
Caelo	Gentamicinsulfat	13205003	60	20130723
Caelo	Ginkgotrockenext. . .	12192505	40	1403672
Caelo	Glucose, wasserf. . .	12294514	40	1402475
Caelo	Glucose, wasserf. . .	14033901	40	20140214
Caelo	Glucose-Monohydrat	82246219	98	I 2009 000 291
Caelo	Glycerinmonostea. . .	14240607	60	1412120
Caelo	Glycerinmonostea. . .	12210401	80	1407214
Caelo	Glycerinmonostea. . .	12210401	40	20120726
Caelo	Glycerinmonostea. . .	14240607	60	20140815

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Glycerolmonostea...	12105705	80	20120424
Caelo	Glycerolmonostea...	14099903	60	zu erfassen
Caelo	Glycerolmonostea...	12105720	40	20120424
Caelo	Glycerolmonostea...	13232604	60	zu erfassen
Caelo	Glycerolmonostea...	13109304	40	1407633
Caelo	Glycerolmonostea...	10097203	40	20100526
Caelo	Guaifenesin	11277411	40	AR-13-FG-008660-01
Caelo	Harnstoff	82374239	40	I 2009 000 301
Caelo	Hartfett (601)	14099604	40	zu erfassen
Caelo	Hartfett (601)	11320006	40	20111123
Caelo	Hartfett (601)	13296104	30	1403144
Caelo	Hartfett, pastil...	10158804	40	20100709
Caelo	Hartfett, pastil...	12158122	30	20120627
Caelo	Hartfett, pastil...	9318225	40	AR-12-FG-008588-01
Caelo	Hartfett, pastil...	14126203	40	20140425
Caelo	Hartparaffin, Pl...	11166916	40	AR-13-FG-001125-01
Caelo	Hydrochinon	12288505	40	20121015
Caelo	Hydrochinon	72811419	20	F 2009 000 966
Caelo	Hydrochinon	14026904	60	20140122
Caelo	Hydrocortison	13341502	60	20131203
Caelo	Hydrocortison	91050209	40	I 2009 000 255
Caelo	Hydrocortison	10083801	40	20100416
Caelo	Hydrocortisonace...	82833159	40	I 2009 000 259
Caelo	Hydrocortisonace...	11263917	40	20110920
Caelo	Hydroxyethylcell...	12249204	40	20120830
Caelo	Hydroxyethylcell...	9300502	20	F 2009 000 982
Caelo	Hydroxyethylcell...	13378506	40	zu erfassen
Caelo	Hydroxyethylcell...	92634449	20	F 2009 000 983
Caelo	Hydroxyethylcell...	3936475	20	20121001
Caelo	Hydroxypropylcel...	12093107	40	1402049
Caelo	Hypromellose E4M...	13155006	40	1402056
Caelo	Hypromellose E4M...	13155006	40	20130529
Caelo	Ibuprofen	9111410	35	AR-12-FG-002701-01
Caelo	Ibuprofen	11352219	40	20120124
Caelo	Iodoform	12283206	40	20130709
Caelo	Iodoform	9357608	60	F 2010 000 148
Caelo	Kakaobutter	81070139	90	I 2009 000 296
Caelo	Kakaobutter	13292013	40	20130924
Caelo	Kaliumcitrat	83305269	61	I 2009 000 299
Caelo	Kaliumcitrat	11102206	40	AR-13-FG-005751-01
Caelo	Kaliumcitrat	13317618	60	20130926
Caelo	Kaliumcitrat	11320212	40	20111201
Caelo	Kaliumhydrogenta...	11127421	40	AR-13-FG-006332-01
Caelo	Kaliumhydrogenta...	11345805	40	20120103
Caelo	Kaliumnatriumtar...	12030207	40	20120213
Caelo	Kaliumnatriumtar...	13216605	30	1404530
Caelo	Kaliumsorbat	11214207	40	AR-13-FG-000830-01
Caelo	Kaliumsorbat	13224604	60	20130813
Caelo	Kaliumsorbat	9305602	20	F 2009 000 985
Caelo	Kaliumsorbat	90877159	90	I 2009 000 305
Caelo	Kaliumtartrat-He...	13331101	30	1403536
Caelo	Kaliumtartrat-He...	13331104	60	20131002
Caelo	Kampfer	82383109	40	I 2009 000 293
Caelo	Ketoconazol	12171007	40	1401554
Caelo	Ketoconazol	13179612	60	20130613
Caelo	Kolophonium	10147506	40	1402095
Caelo	Lactose-Monohydrat	14025601	40	20140207
Caelo	Lactose-Monohydrat	14025601	40	20140207
Caelo	Lactose-Monohydrat	14025601	40	20140207
Caelo	Lactose-Monohydrat	12139910	40	20120606

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Lactose-Monohydrat	83278189	40	I 2009 000 290
Caelo	Lidocain	13352411	60	20131115
Caelo	Lidocainhydrochl. . .	90547399	20	F 2009 000 967
Caelo	Lidocainhydrochl. . .	12135511	40	20120615
Caelo	Macrogol 1500	10037704	70	20100216
Caelo	Macrogol 1500	12324607	40	1403323
Caelo	Macrogol 4000	12361502	30	20130107
Caelo	Macrogol 4000	11172433	40	zu erfassen
Caelo	Macrogol 4000	13356616	40	20131107
Caelo	Macrogol 4000	12318019	40	1403322
Caelo	Macrogol 4000	12074116	40	1401164
Caelo	Magnesium(hydrog. . .	13389102	60	20131205
Caelo	Magnesium(hydrog. . .	11372907	40	20120105
Caelo	Magnesium(hydrog. . .	90396239	100	I 2009 000 309
Caelo	Magnesiumstearat	13095536	40	20130405
Caelo	Mannit	12305723	40	1402329
Caelo	Mannit	9204712	40	20090814
Caelo	Mannit	10100026	40	20100427
Caelo	Melatonin	12321411	40	20121107
Caelo	Melatonin	12321415	40	20121107
Caelo	Melatonin	12321404	37	20121107
Caelo	Melatonin	11267102	40	20111014
Caelo	Menthol	82621209	40	F 2009 000 306
Caelo	Menthol	13377404	60	20131212
Caelo	Methacholiniumch. . .	13260303	40	20130827
Caelo	Methyl-4-hydroxy. . .	9344712	40	AR-12-FG-009589-01
Caelo	Methyl-4-hydroxy. . .	11090034	40	20110428
Caelo	Methyl-4-hydroxy. . .	11090031	40	AR-13-FG-002515-01
Caelo	Methylcellulose	13130115	60	20130517
Caelo	Methyrosanilinu. . .	12276308	40	zu erfassen
Caelo	Metronidazol	81604189	40	I 2009 000 269
Caelo	Metronidazol	13095007	40	20130426
Caelo	Metronidazol	12110410	40	20120515
Caelo	Metronidazol	13095007	40	20130426
Caelo	Miconazolnitrat	13352802	39	1412250
Caelo	Miconazolnitrat	13185601	40	20130704
Caelo	Miconazolnitrat	10122908	40	AR-12-FG-002993-01
Caelo	Miconazolnitrat	13185601	40	20130704
Caelo	Minoxidil	14093701	40	20140428
Caelo	Minoxidil	90780349	20	F 2009 000 969
Caelo	Minoxidil	13039501	40	20130306
Caelo	Molekulardestill. . .	11160012	40	zu erfassen
Caelo	Mometasonfuroat, . . .	13304605	21	20130926
Caelo	Naphazolinhydroc. . .	12375211	40	20130108
Caelo	Naphazolinhydroc. . .	12375211	60	20130108
Caelo	Naphazolinhydroc. . .	72684419	20	F 2009 000 970
Caelo	Naphazolinnitrat	11K21-N24	39	AR-13-FG-001230-01
Caelo	Natriumacetat-Tr. . .	13411404	60	20140113
Caelo	Natriumacetat-Tr. . .	12316506	40	1402111
Caelo	Natriumbenzoat	11267016	40	20110923
Caelo	Natriumcitrat	12045026	40	20120307
Caelo	Natriumcitrat	12045008	40	zu erfassen
Caelo	Natriumcyclamat	12256803	40	1401418
Caelo	Natriumdodecylsu. . .	10229510	40	20100819
Caelo	Natriumdodecylsu. . .	13099011	40	1403108
Caelo	Natriumedetat	13142009	40	20130524
Caelo	Natriumsalicylat. . .	12158307	30	1403225
Caelo	Natriumtetraborat	13290118	60	1412042
Caelo	Neomycinsulfat	72633109	20	F 2009 000 971
Caelo	Neostigminbromid	10144105	40	20100616

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Neostigminbromid	12172304	40	1403163
Caelo	Nichtionische em. . .	13413001	30	1405257
Caelo	Nichtionische em. . .	13413001	40	20140116
Caelo	Nicotinamid	13097506	40	20130416
Caelo	Octenidindihydro. . .	13166806	40	zu erfassen
Caelo	Octenidindihydro. . .	12115202	40	20120511
Caelo	Octenidindihydro. . .	13071407	40	1407345
Caelo	Oxalsäure	11372701	40	20120112
Caelo	Oxalsäure	13353901	29	20131029
Caelo	Oxalsäure	12147007	30	1405523
Caelo	Oxalsäure	12212410	30	1403223
Caelo	Oxytetracyclinhy. . .	92773429	20	F 2010 000 090
Caelo	Oxytetracyclinhy. . .	12130001	60	zu erfassen
Caelo	Oxytetracyclinhy. . .	12328103	30	20121214
Caelo	Pankreas-Pulver	13118902	40	1402190
Caelo	Pankreas-Pulver	13395203	60	20131218
Caelo	Paraffin, mikrok. . .	11100708	40	zu erfassen
Caelo	Patentblau V, E131	11138401	40	AR-13-FG-002961-01
Caelo	Patentblau V, E131	12364206	40	zu erfassen
Caelo	Patentblau V, E131	12364206	40	20130110
Caelo	Pheniraminmaleat	12200502	40	1401559
Caelo	Phenylbutazon	102629010	40	AR-12-FG-009256-01
Caelo	Phenylbutazon	14057202	40	20140321
Caelo	Pilocarpinhydroc. . .	82770229	20	F 2009 000 972
Caelo	Pilocarpinhydroc. . .	12217319	60	zu erfassen
Caelo	Podophyllumharz . . .	12287810	30	1405242
Caelo	Poloxamer 407	12044205	40	zu erfassen
Caelo	Poloxamer 407	14196101	60	AR-14-FG-013090-01
Caelo	Povidon 25, lösl. . .	14142103	40	zu erfassen
Caelo	Povidon 25, lösl. . .	12032714	40	1402437
Caelo	Povidon-Iod	13337205	60	20131021
Caelo	Povidon-Iod	10090618	40	AR-13-FG-002960-01
Caelo	Prednicarbat, mi. . .	13372404	40	20131119
Caelo	Prednicarbat, mi. . .	13119402	40	zu erfassen
Caelo	Prednicarbat, mi. . .	13372404	40	zu erfassen
Caelo	Prednicarbat, mi. . .	13119402	40	20130517
Caelo	Prednisolon, mik. . .	12324226	39	1411271
Caelo	Prednisolon, mik. . .	13343105	60	1411232
Caelo	Prednisolon, mik. . .	12324202	40	20121113
Caelo	Prednisolonacetat	12324502	20	20121112
Caelo	Prednisolonacetat	12091814	40	20120416
Caelo	Prednisolonacetat	13262605	60	20130923
Caelo	Prednisolonacetat	91840359	20	F 2009 000 973
Caelo	Prednisolondihyd. . .	13304704	60	zu erfassen
Caelo	Prednisolondihyd. . .	13304703	40	20130904
Caelo	Prednison	12232716	60	20120829
Caelo	Prednison	72123189	41	I 2009 000 274
Caelo	Prednison	10037803	40	zu erfassen
Caelo	Progesteron, mik. . .	71498458	80	I 2009 000 287
Caelo	Promethazinhydro. . .	10334401	40	AR-12-FG-002998-01
Caelo	Propolis-Trocken. . .	13396103	40	20131212
Caelo	Propolis-Trocken. . .	13396103	40	20131212
Caelo	Propolis-Trocken. . .	11124120	40	1403460
Caelo	Propranololhydro. . .	12370712	60	20130116
Caelo	Propyl-4-hydroxy. . .	11373523	40	1402440
Caelo	Propyphenazon, g. . .	13332206	60	20131009
Caelo	Propyphenazon, g. . .	12039103	40	1402051
Caelo	Resorcin	13293108	60	zu erfassen
Caelo	Riboflavin	13305203	60	20131017
Caelo	Riboflavin	12003317	40	1405155

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Saccharin-Natrium	10170511	40	AR-12-FG-002994-01
Caelo	Saccharose	12146801	40	zu erfassen
Caelo	Saccharose	1901208731	40	AR-12-FG-010950-01
Caelo	Saccharose	13352909	40	1410501
Caelo	Salicylsäure	82732219	40	I 2009 000 300
Caelo	Selenhefe	13347911	40	zu erfassen
Caelo	Sojalecithin (In...	13279813	40	20130903
Caelo	Sojalecithin (In...	11371501	40	20120105
Caelo	Sojalecithin (In...	13030504	40	1404399
Caelo	Sorbinsäure	83451259	20	F 2009 000 958
Caelo	Sorbinsäure	12038025	40	20120315
Caelo	Sorbitanmonostea...	12274801	40	20120924
Caelo	Sorbitanmonostea...	11145401	40	AR-12-FG-011575-01
Caelo	Sorbitol	11379309	40	AR-12-FG-011794-01
Caelo	Sorbitol	91992409	78	F 2009 000 993
Caelo	Sorbitol	13278217	40	20130920
Caelo	Sprühgetrocknete...	14141901	120	zu erfassen
Caelo	Sprühgetrocknete...	11345708	40	AR-13-FG-002496-01
Caelo	Stärke (Reis-, M...	9352108	50	P143-11
Caelo	Stärke (Reis-, M...	91955439	50	AR-12-FG-002851-01
Caelo	Stärke (Reis-, M...	14023203	60	20140204
Caelo	Stärke (Reis-, M...	12360213	30	1403494
Caelo	Stärke (Reis-, M...	12068525	40	20120327
Caelo	Stearinsäure 50	12241910	40	20120831
Caelo	Stearinsäure 50	90574279	18	F 2009 000 976
Caelo	Sulfacetamid	11085910	40	1402651
Caelo	Sulfadiazin	12164101	40	1402053
Caelo	Sulfoguaiacol-Hy...	10353605	40	AR-13-FG-001235-01
Caelo	Tannin	12336016	60	20121127
Caelo	Tannin	81318508	90	I 2009 000 302
Caelo	Testosteron	13406004	40	20131219
Caelo	Testosteron	13406004	40	20131219
Caelo	Testosteronpropi...	12163607	40	zu erfassen
Caelo	Testosteronpropi...	92454369	20	F 2009 000 974
Caelo	Tetracainhydroch...	83228149	41	I 2009 000 288
Caelo	Tetracainhydroch...	12019822	40	20120228
Caelo	Tetracyclinhydro...	13201303	60	20130807
Caelo	Theophyllin	12166316	40	1402055
Caelo	Theophyllin-Ethy...	12363708	30	zu erfassen
Caelo	Theophyllin-Ethy...	13268609	40	1412133
Caelo	Theophyllin-Ethy...	12145301	40	20120628
Caelo	Thiaminchloridhy...	11371302	40	20120131
Caelo	Thiaminchloridhy...	14069502	60	20140321
Caelo	Thiaminchloridhy...	14069502	60	20140321
Caelo	Thymol	14025805	60	20140127
Caelo	Thymol	82563169	40	I 2009 000 265
Caelo	Tosylchloramid-N...	9359512	40	20091230
Caelo	Tosylchloramid-N...	13103201	40	20130424
Caelo	Tosylchloramid-N...	13361602	40	1407634
Caelo	Tragant, gepulvert	13277804	60	zu erfassen
Caelo	Tragant, gepulvert	9105901	40	20090420
Caelo	Tretinoin, mikro...	11284703	40	AR-13-FG-001228-01
Caelo	Triamcinolonacet...	12301505	40	zu erfassen
Caelo	Triamcinolonacet...	13256607	40	zu erfassen
Caelo	Triclosan	13391808	60	20131211
Caelo	Triclosan	83452249	41	I 2009 000 266
Caelo	Trometamol	14050002	40	20140220
Caelo	Trometamol	83303189	40	I 2009 000 276
Caelo	Ubidecarenon	14004504	60	20140127
Caelo	Wachs	83038199	40	I 2009 000 295

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Wachs	13335507	60	20131011
Caelo	Wachs	13378619	40	zu erfassen
Caelo	Weinsäure	12044101	40	20120224
Caelo	Weinsäure	10199711	40	AR-13-FG-002958-01
Caelo	Weinsäure	90800249	40	I 2009 000 303
Caelo	Wollwachsalkohol...	13380601	40	1412037
Caelo	Wollwachsalkohol...	11214708	40	AR-13-FG-001851-01
Caelo	Xylometazolinhyd...	91206209	40	I 2009 000 289
Caelo	Xylometazolinhyd...	13344901	60	zu erfassen
Caelo	Xylose	14218902	60	AR-14-FG-013086-01
Caelo	Xylose	13133402	40	zu erfassen
Caelo	Zinkacetat-Dihyd...	10302505	40	AR-13-FG-001886-01
Caelo	Zinkacetat-Dihyd...	11354901	40	20111222
Carotech	Tocomax 20%	A3_200003_1/5	40	zu erfassen
Denk	Calciumaspartat	N09814	40	zu erfassen
DKSH Switzerl...	Kreatin	921831	30	20130813
Dr. Behr	L-Glutathione	WE-11020045	40	AR-12-FG-007114-01
Dr. Behr	Ubidecarenon	WE-11100005	40	AR-12-FG-008250-01
Dr. Paul Lohm...	Wasserfreies Mag...	1040331	40	zu erfassen
Dr. Pfeifer	Xylitol	10BIZU130702	40	zu erfassen
Dr. Pfeifer	Xylitol	130610	40	zu erfassen
Euro OTC	Acetylsalicylsäure	1307024-01	60	20130904
Euro OTC	Acetylsalicylsäure	1011015-01	40	AR-12-FG-010255-01
Euro OTC	Acetylsalicylsäure	1407026-01	60	20140801
Euro OTC	Aescin	1011033	40	AR-13-FG-002538-01
Euro OTC	Aescin	1011033-02	40	AR-12-FG-007427-01
Euro OTC	Aescin	1310020-01	40	zu erfassen
Euro OTC	alpha-Tocopherol...	1110021-02	40	zu erfassen
Euro OTC	Ambroxolhydrochl...	11110008-01	40	1401146
Euro OTC	Ambroxolhydrochl...	1311032-01	40	20131219
Euro OTC	Amphotericin B	1305033-02	40	1403224
Euro OTC	Argininhydrochlo...	L1103042-01	40	20110325
Euro OTC	Argininhydrochlo...	L1212009-01	40	1402430
Euro OTC	Betamethasonvale...	1208014-01	40	20120928
Euro OTC	Betamethasonvale...	1406019-01	60	20140725
Euro OTC	Bifonazol	1206027-01	40	1312397
Euro OTC	Calciumcitrat-Te...	1305018-01	40	20130528
Euro OTC	Calciumgluconat	1304012-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Calciumorotat-Di...	1009035-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Calciumorotat-Di...	1401006-01	40	1412540
Euro OTC	Calciumpantothenat	1305034-01	40	20130617
Euro OTC	Carbomer 35000 /...	1311027-02	80	20131205
Euro OTC	Cellulose, mikro...	1201004-01	40	20120201
Euro OTC	Cellulose, mikro...	1211037-01	40	20121207
Euro OTC	Cellulose, mikro...	1211037-01	40	20121207
Euro OTC	Chloramphenicol	1209019-02	60	20130408
Euro OTC	Chloramphenicol	1209019-02	60	20130408
Euro OTC	Chlortetracyclin...	1108051-02	40	20111013
Euro OTC	Cholinhydrogenta...	L1208016-02	40	20120924
Euro OTC	Cholinhydrogenta...	L1208016-01	40	1402479
Euro OTC	Chromhefe 0,2%	L1303028-01	40	1403474
Euro OTC	Citrullin	1310015-01	40	20131120
Euro OTC	Citrullin	1403021-01	99	1411031
Euro OTC	Clindamycinhydro...	2908019-01	40	AR-12-FG-002697-01
Euro OTC	Clindamycinhydro...	1111058-01	80	20120516
Euro OTC	Clioquinol	1309009-02	40	20131008
Euro OTC	Clotrimazol	1306036-01	40	20130823
Euro OTC	Coffein	1211012-01	40	1412248
Euro OTC	Colecalciferol-T...	1210051-01	40	1403341
Euro OTC	Colecalciferol-T...	1304016-02	40	20130425

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Euro OTC	Cromoglicinsäure. . .	1112003-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Cysteinhydrochlo. . .	1112015-01	40	AR-13-FG-009216-01
Euro OTC	Cysteinhydrochlo. . .	1304019-01	40	20130517
Euro OTC	Cysteinhydrochlo. . .	1112015-02	40	20120510
Euro OTC	Cystin	1307052-01	40	20130918
Euro OTC	Cystin	1104017-01	40	AR-13-FG-002772-01
Euro OTC	D-(+)-Mannose	L1111005-02	40	20111130
Euro OTC	D-(+)-Mannose	L1111005-02	30	1405612
Euro OTC	Dexamethason	1209008-02	40	zu erfassen
Euro OTC	Dexamethason	1303007-01	40	1407432
Euro OTC	Dexamethasonacetat	1405024-01	60	20140620
Euro OTC	Erythromycin	1308016-02	60	1412542
Euro OTC	Estradiolbenzoat	1301006-02	40	20130201
Euro OTC	Estradiol-Hemihy. . .	1208022-01	40	20121012
Euro OTC	Ethylhydrogenfum. . .	1310029-01	100	zu erfassen
Euro OTC	Fluocinolonaceto. . .	2804013E-01	40	20121206
Euro OTC	Fluocinolonaceto. . .	2804013E-01	40	1404008
Euro OTC	Folsäure	1401005-01	40	20140131
Euro OTC	Fructose	1212015-01	40	20130111
Euro OTC	Gentamicinsulfat	1305047-01	40	20130919
Euro OTC	Gentamicinsulfat	1305047-03	60	1411076
Euro OTC	Glutaminsäure	L1211001-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Glycin	1402022-01	40	20140328
Euro OTC	Glycin	1402022-01	100	zu erfassen
Euro OTC	Guaifenesin	1212002-01	40	20121214
Euro OTC	Harnstoff	1404024-01	100	20140519
Euro OTC	Heparin-Natrium . . .	1202002-01	40	20120326
Euro OTC	Heparin-Natrium . . .	12050009-03	40	zu erfassen
Euro OTC	Histamindihydroc. . .	1111004-02	40	1403674
Euro OTC	Hyaluronsäure-Na. . .	L1302028-01	30	1403532
Euro OTC	Hyaluronsäure-Na. . .	L1302028-01	40	20130314
Euro OTC	Hydrocortison	1206018-01	40	20130727
Euro OTC	Hydrocortisonace. . .	1209003-01	40	20121108
Euro OTC	Hydroxyethylcell. . .	1110024-04	40	20120110
Euro OTC	Ibuprofen	1211011-02	40	zu erfassen
Euro OTC	Indometacin	1012009-02	40	1402050
Euro OTC	Indometacin	1205002-01	40	20120521
Euro OTC	Inositol	1011028-01	40	AR-12-FG-009055-01
Euro OTC	Inositol	1206032-01	40	20120814
Euro OTC	Kaliumacetat	1112007	40	zu erfassen
Euro OTC	Kampfer	2906016-02	40	AR-12-FG-004455-01
Euro OTC	Kampfer	1106007-02	40	20110701
Euro OTC	Kupferorotat-Dih. . .	2106001Z-01	40	20100928
Euro OTC	Kupferorotat-Dih. . .	2106001Z-01	40	20100928
Euro OTC	Levocarnitin	1106012-02	40	AR-12-FG-009574-01
Euro OTC	Levocarnitin	1210029-01	40	20121130
Euro OTC	Lidocain	1310023-01	60	20131118
Euro OTC	L-Isoleucin	L1211010-02	100	20121121
Euro OTC	L-Isoleucin	L1211010-02	60	20121121
Euro OTC	L-Leucin	1302013-01	60	20130320
Euro OTC	L-Prolin	L1210046-02	30	1403153
Euro OTC	L-Prolin	L1210046-02	40	1403153
Euro OTC	L-Threonin	1210027-01	30	1403152
Euro OTC	Lysinhydrochlorid	L1103041-01	40	AR-12-FG-007558-01
Euro OTC	Magnesium(hydrog. . .	1110026-02	40	1402474
Euro OTC	Magnesiumorotat-. . .	1109034-01	40	20111130
Euro OTC	Melatonin	1305029-02	60	1411054
Euro OTC	Menthol	1403022-02	59	20140408
Euro OTC	Methoxsalen	2909040-02	40	20091015
Euro OTC	Methoxsalen	130604101	100	20130805

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Euro OTC	Methyl-4-hydroxy...	1205025-01	40	20120601
Euro OTC	Methylcobalamin	1207019-01	40	1402501
Euro OTC	Metronidazol	1212030-02	40	20130627
Euro OTC	Natriumascorbat	5061206	40	AR-13-FG-008606-01
Euro OTC	Natriumascorbat	1406018-01	60	1411165
Euro OTC	Natriumcitrat	1205026-01	40	20120712
Euro OTC	Natriummolybdat...	L2809007V-02	40	AR-13-FG-002915-01
Euro OTC	Natriumtetraborat	2905009-02	41	AR-12-FG-002703-01
Euro OTC	Neomycinsulfat	1102043-02	40	zu erfassen
Euro OTC	Norethisteronace...	1306033-01	60	20130725
Euro OTC	Ornithinaspartat	L1107045-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Ornithinaspartat	L1304034-01	40	1402571
Euro OTC	Pheniraminmaleat	1109013-02	40	20111122
Euro OTC	Polymyxin-B-sulfat	1304033-02	60	20130612
Euro OTC	Polymyxin-B-sulfat	1202039-02	40	20121031
Euro OTC	Polymyxin-B-sulfat	1304033-01	40	20130829
Euro OTC	Polymyxin-B-sulfat	1202039-02	40	1411033
Euro OTC	Povidon-Iod	1110013-02	30	zu erfassen
Euro OTC	Prasteron	1102036-01	40	1404310
Euro OTC	Prednisolon, mik...	1212021-02	60	1411270
Euro OTC	Prednisolonacetat	1306040	40	20130812
Euro OTC	Prednisolonacetat	1209028-03	90	20140526
Euro OTC	Pregnenolon	1204040-01	40	1404311
Euro OTC	Procainhydrochlo...	1003001-01	40	AR-13-FG-009020-01
Euro OTC	Progesteron, mik...	1111053-01	40	20120119
Euro OTC	Pyridoxal-5-Phos...	1302029-01	40	20130315
Euro OTC	Pyridoxal-5-Phos...	1302029-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Salicylsäure	1110020-01	40	20120125
Euro OTC	Selenhefe	L1204012-01	40	1403461
Euro OTC	Spironolacton	1212034-01	40	20130215
Euro OTC	Spironolacton	1212034-01	40	1403151
Euro OTC	Sulfacetamid	1312012-01	60	20140117
Euro OTC	Taurin	1306024-01	50	zu erfassen
Euro OTC	Testosteron	1307001-01	40	1402309
Euro OTC	Testosteron	1106011-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Tetracain Base	1405025-01	60	AR-14-FG-012475-01
Euro OTC	Tetracyclinhydro...	1302012-01	30	1411585
Euro OTC	Tobramycinsulfat	1301011-02	60	zu erfassen
Euro OTC	Triamcinolonacet...	1303001-02	40	20130815
Euro OTC	Triamcinolonacet...	1211013-02	30	20130417
Euro OTC	Tyrosin	L1401037-01	60	20140217
Euro OTC	Ubidecarenon	1205029-01	40	20121009
Euro OTC	Valin	L1006023-01	40	AR-12-FG-007776-01
Euro OTC	Zinkgluconat	1111002-01	40	AR-12-FG-008661-01
Fagron	(R,S)-Epinephrin...	12H08-N03	40	1405536
Fagron	(R,S)-Epinephrin...	14A22-B05-291560	60	zu erfassen
Fagron	3,4-Diaminopyridin	10J14-N21	40	AR-13-FG-000195-01
Fagron	3,4-Diaminopyridin	10J14-N21	40	AR-13-FG-000195-01
Fagron	3,4-Diaminopyridin	13F05-N01	41	20130606
Fagron	5-Aminolevulinsä...	11I30-N01	40	AR-12-FG-007021-01
Fagron	5-Aminolevulinsä...	13K27-N02	40	20131125
Fagron	5-Fluorouracil	13F19-N03	40	1402308
Fagron	8-Chinolinolsulf...	12H21-N08	40	20120831
Fagron	8-Chinolinolsulf...	10F01-N15	40	AR-12-FG-009377-01
Fagron	Acetylcystein	8G23-N06	30	I 2009 000 347
Fagron	Acetylsalicylsäure	12D02-N01	40	AR-14-FG-002829-01
Fagron	Aescin	12K22-N13	40	20121127
Fagron	Alfatradiol	11G22-N11	40	AR-13-FG-00352201
Fagron	Alfatradiol	13G19-N06	40	1402683
Fagron	Allantoin	13I03-B05	40	20130927

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Fagron	Ambroxolhydrochl. . .	13I24-N02	40	20131017
Fagron	Amphotericin B	13I16-N02	40	zu erfassen
Fagron	Arginin	L11070165	40	AR-12-FG-007764-01
Fagron	Arginin	13J28-B02	40	20131114
Fagron	Ascorbinsäure	13G29-B07	40	1410500
Fagron	Bacitracin	14A21-B09-292909	60	20140218
Fagron	Bacitracin	13A-03-N11	40	1401189
Fagron	Beclometasondipr. . .	13E02B40293328	40	20140508
Fagron	Beclometasondipr. . .	13I05-N03	40	1405099
Fagron	Beclometasondipr. . .	11C01-N03	40	zu erfassen
Fagron	Benzocain	10K02-N01	40	AR-12-FG-002996-01
Fagron	Benzocain	12E04-N06	40	20120607
Fagron	Benzoessäure	9B25-N03	43	I 2009 000 348
Fagron	Benzydaminhydroc. . .	12D26-N14	40	1402328
Fagron	Betainhydrochlorid	12A03-N08	40	20120104
Fagron	Betainhydrochlorid	13H13-N02	40	1402684
Fagron	Betamethason, mi. . .	12D26-N08	40	1402096
Fagron	Betamethason, mi. . .	13H08-N06	60	1411037
Fagron	Betamethasondipr. . .	13I17-N05	40	1401377
Fagron	Betamethasondipr. . .	13I17-N05	40	20130926
Fagron	Betamethasonvale. . .	13K29-B32-288243	60	20131210
Fagron	Betamethasonvale. . .	12K07-N23	40	20121119
Fagron	Betamethasonvale. . .	13K05-B08-292651	60	20131127
Fagron	Bifonazol	12G11-N09	40	20120807
Fagron	Biotin	10I17-N08	40	AR-12-FG-008445-01
Fagron	Biotin	13K29-N02	40	20131204
Fagron	Borsäure	13I04-N06	40	20130920
Fagron	Borsäure	9L21-N08	50	AR-12-FG-002702-01
Fagron	Bromelain	11A10-N10	40	zu erfassen
Fagron	Bromelain	14F20-B03295501	40	zu erfassen
Fagron	Butylscopolamini. . .	12K01-N07	40	20121102
Fagron	Butylscopolamini. . .	12K01-N07	40	1406057
Fagron	Butylscopolamini. . .	13K22-N03	30	zu erfassen
Fagron	Calciumglyceroph. . .	13I17-N04	40	20131016
Fagron	Calciumlactat-Pe. . .	12E10-N03	40	20120704
Fagron	Calciumlactat-Pe. . .	zu erfassen	40	AR-13-FG-002444-01
Fagron	Calciumorotat-Di. . .	12L04-N07	40	20121207
Fagron	Calciumorotat-Di. . .	13J23-N05	40	20131111
Fagron	Calciumpantothenat	13H28-N11	40	20130916
Fagron	Calciumpantothenat	11J20-N01	40	AR-12-FG-008444-01
Fagron	Capsaicin, natür. . .	13D12-N01	40	1411392
Fagron	Capsaicin, natür. . .	13J07-N07	40	zu erfassen
Fagron	Captopril	12G25-N08	40	20120814
Fagron	Carmellose-Natri. . .	13D22-N02	40	1401187
Fagron	Cellulose, mikro. . .	12C23-N06	70	1403080
Fagron	Cetylstearylalko. . .	13C13-N13	40	1402265
Fagron	Cetylstearylalko. . .	12C21-N09	40	20120326
Fagron	Chinidinsulfatdi. . .	12L04-N10	40	AR-14-FG-013249-01
Fagron	Chinidinsulfatdi. . .	12J16-B03	39	1412323
Fagron	Chininhydrochlorid	12C29-N04	40	AR-14-FG-000696-01
Fagron	Chininhydrochlorid	13G10-N07	30	20130809
Fagron	Chininsulfat Dih. . .	13J23-N03	40	1404401
Fagron	Chininsulfat Dih. . .	14B27-B01	40	20140409
Fagron	Chinolingelb E104	12E24-N01	60	20120601
Fagron	Chloralhydrat	11J05-N01	40	AR-12-FG-009588-01
Fagron	Chloralhydrat	12C26-M04	40	AR-13-FG-008605-01
Fagron	Chloralhydrat	13F06-N07	40	20130626
Fagron	Chloramphenicol	11F20-N05	90	1412249
Fagron	Chloramphenicol	13A11-N02	30	20130125
Fagron	Chlorhexidindihi. . .	10B02-N06	40	AR-12-FG-002997-01

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Fagron	Chlorhexidindihi...	14A09-B03	40	20140127
Fagron	Chlorobutanol-He...	14A06-B31-290310	100	1412458
Fagron	Chlortetracyclin...	12K30-N07	40	20121210
Fagron	Chlortetracyclin...	12K30-N07	40	1405318
Fagron	Cholesterol	8L09-N01	40	AR-14-FG-000153-01
Fagron	Cholesterol	10315-N07	40	AR-12-FG-008402-01
Fagron	Cholesterol	13F10-B40	40	20131223
Fagron	Ciclopirox-Olamin	13A16-N04	40	zu erfassen
Fagron	Ciclosporin	13D26-N07	60	20130222
Fagron	Ciclosporin	13D26-N07	40	1402057
Fagron	Cinchocainhydroc...	13G24-N05	40	20130826
Fagron	Cinchocainhydroc...	12F25-N10	40	1401148
Fagron	Cinnarizin	13H01-N07	40	1402306
Fagron	Cinnarizin	11L22-N13	40	20120104
Fagron	Ciprofloxacinhyd...	12B08-N03	40	1401421
Fagron	Ciprofloxacinhyd...	14B25-B02	40	20140324
Fagron	Citronensäure, w...	12F18-N03	40	20120628
Fagron	Citronensäure, w...	13G24-N13	40	20130827
Fagron	Citronensäure-Mo...	12D26-N02	40	20120515
Fagron	Clindamycinhydro...	13G24-N09	40	1412075
Fagron	Clioquinol	13I26-N15	40	20131028
Fagron	Clonidinhydrochl...	13I25-B07	40	20131009
Fagron	Clonidinhydrochl...	12A03-N04	40	1401149
Fagron	Clotrimazol	14C04-B31	40	20140319
Fagron	Clotrimazol	14B05-B36	40	20140225
Fagron	Clotrimazol	12I21-N01	40	20120322
Fagron	Coffeincitrat	12C16-N03	40	1403477
Fagron	Colistinsulfat e...	7I18-N05	40	AR-12-FG-008034-01
Fagron	Colistinsulfat e...	14E02-B03	40	zu erfassen
Fagron	Colistinsulfat e...	13G05-N01	40	zu erfassen
Fagron	Colistinsulfat e...	13G05-N01	40	20130719
Fagron	Cromoglicinsäure...	13G24-N04	40	20130515
Fagron	Cromoglicinsäure...	12C09-N02	40	1401553
Fagron	Cyproteronacetat	12B14-N06	40	1401557
Fagron	Cyproteronacetat	11L22-N02	40	20111223
Fagron	Cyproteronacetat	13C11-N02	40	zu erfassen
Fagron	Dequaliniumchlorid	11D29-N11	80	20110519
Fagron	Dequaliniumchlorid	13I26-N10	40	20130121
Fagron	Diclofenac-Natrium	12L28-B05	40	20130123
Fagron	Diclofenac-Natrium	13E03-N02	40	20130515
Fagron	Diltiazemhydroch...	14C12-B04	40	20140417
Fagron	Diphenylcyclopro...	13I26-N12	40	zu erfassen
Fagron	Diphenylcyclopro...	12L17-N07	40	1407599
Fagron	Diphenylcyclopro...	13I26-N12	35	20130920
Fagron	Doxycyclinhyclat	12G12-N15	40	1404233
Fagron	Doxycyclinhyclat	12G12-N15	40	20120807
Fagron	Doxylaminhydroge...	14F03-B01_293498	100	1410524
Fagron	Doxylaminhydroge...	700296	40	AR-12-FG-010234-01
Fagron	Drofeninhydrochl...	10K29	40	AR-12-FG-009284-01
Fagron	Drofeninhydrochl...	13I09-N05	40	20130524
Fagron	Econazolnitrat	12H08-N02	40	1312442
Fagron	Econazolnitrat	11F09-N16	40	20110606
Fagron	Emulgade® 1000 NI	13C05-B40-289262	30	1408003
Fagron	Emulgade® 1000 NI	12H07-N06	40	20120905
Fagron	Emulgierender Ce...	13L17-B05	40	zu erfassen
Fagron	Eosin gelblich	12E25-N01	60	20120607
Fagron	Eosin gelblich	13I11-N03	40	20130925
Fagron	Eosin gelblich	13I11-N03	40	20130925
Fagron	Eosin gelblich	12A02-N09	39	1405095
Fagron	Epinephrinhydrog...	12L22-N04	40	20120106

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Fagron	Erythromycin	12E24-N04	40	20120607
Fagron	Estradiolbenzoat	14B20-B02	40	20140327
Fagron	Estradiolbenzoat	12H02-N02	40	20120817
Fagron	Estradiol-Hemi-hydrat	11H23-N02	40	zu erfassen
Fagron	Estradiolvalerat	12D18-N02	40	20120426
Fagron	Estradiolvalerat	11G18-N04	40	AR-12-FG-012141-01
Fagron	Estradiolvalerat	12D18-N02	40	20120118
Fagron	Estriol	11J13-N07	40	1412180
Fagron	Ethacridinlactat	13I24-N03	40	20130919
Fagron	Ethinylestradiol	12D19-N04	40	zu erfassen
Fagron	Ethinylestradiol	13I09-N04	40	1402058
Fagron	Ethylhydrogenfumarat	14C12-B07-292760	60	1410436
Fagron	Ethylhydrogenfumarat	13B25-N08	100	1411090
Fagron	Ethylhydrogenfumarat	13G10-N01	100	1411091
Fagron	Fampridin	13G26-N06	40	1402686
Fagron	Fampridin	14D11-B06-293750	60	20140113
Fagron	Finasterid (Form. 1)	12A04-N09	40	20120117
Fagron	Finasterid (Form. 2)	13I03-N01	40	1411272
Fagron	Folsäure	10F03-N13	40	AR-12-FG-008059-01
Fagron	Folsäure	12G17-N05	40	20120727
Fagron	Fuchsin	11A05-N08	40	AR-12-FG-002852-01
Fagron	Furosemid	13A22-N08	40	1401379
Fagron	Furosemid	11B18-N04	40	20110311
Fagron	Fusidinsäure	12G04-N01	40	1401162
Fagron	Gentamicinsulfat	12B21-N02	40	1411075
Fagron	Gentamicinsulfat	13I19-B05-286565	60	20121214
Fagron	Glucose-Monohydrat	14B04-B01	40	20140304
Fagron	Glucose-Monohydrat	11L19-N13	40	20120105
Fagron	Glutaminsäure	11I30-N02	40	20111103
Fagron	Glycerinmonostearat	11I15-N09	80	zu erfassen
Fagron	Glycerinmonostearat	12B14-N10	40	zu erfassen
Fagron	Glycerolmonostearat	8J14-M04	41	I 2009 000 349
Fagron	Glycin	13G09-N03	40	20120711
Fagron	Glycin	12G13-N04	40	1401163
Fagron	Gramicidin	13J15-N02	40	zu erfassen
Fagron	Gramicidin	11A27-N32	40	AR-12-FG-006258-01
Fagron	Gramicidin	14C07-B06-292886	40	20140418
Fagron	Griseofulvin	13D19-N03	40	1401419
Fagron	Harnstoff	12F25-N05	40	20120724
Fagron	Heparin-Natrium	12H30-N07	40	1404230
Fagron	Hydrochlorothiazid	11L01-N02	40	20111209
Fagron	Hydrochlorothiazid	11E04-N10	40	AR-12-FG-008900-01
Fagron	Hydroxyethylcellulose	13H22-N11	40	20130826
Fagron	Indigocarmin I	13K12-N01	40	zu erfassen
Fagron	Indigocarmin I	12C16-N04	40	zu erfassen
Fagron	Iodoform	12L11-B41	40	20140113
Fagron	Ipratropiumbromid	12K01-N08	40	20121025
Fagron	Ipratropiumbromid	12C15-N01	40	1403675
Fagron	Isosorbiddinitrat	12F08-N04	40	20120801
Fagron	Isosorbiddinitrat	10L09-N10	40	AR-12-FG-003632-01
Fagron	Isosorbiddinitrat	13D15-N02	39	20130410
Fagron	Ketaminhydrochlorid	11A27-N13	40	20110204
Fagron	Ketaminhydrochlorid	13H19-N01	30	zu erfassen
Fagron	Ketoconazol	12A16-N06	40	20120123
Fagron	Kupfererotat-Dihydrat	9F15-N01	30	20090728
Fagron	Levocarnitin	12H10-N07	40	20120830
Fagron	Lidocain	13H05-N05	40	1401378
Fagron	L-Isoleucin	13E02-B01	40	20130621
Fagron	L-Isoleucin	13E02_B01-286930	30	1403154
Fagron	Lithiumerotat-Monohydrat	13J04-N01	30	1405616

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Fagron	L-Leucin	13J09-N03	40	1402431
Fagron	L-Threonin	12H02-N03	40	1402580
Fagron	Lysinhydrochlorid	12B14-N08	40	zu erfassen
Fagron	Macrogol 6000 Pu. ...	12A19-N02	40	AR-13-FG-008919-01
Fagron	Magnesiumstearat	12C29-N06	70	20120418
Fagron	Magnesiumstearat	12D26-B03	40	1407310
Fagron	Mepivacainhydroc. ...	12A20-N12	40	1401555
Fagron	Methacholiniumch. ...	12F01-N04	60	1403251
Fagron	Methionin	12K01-N03	40	1402432
Fagron	Methoxsalen	11F21-N02	40	1402480
Fagron	Methylcellulose	12D02-N09	40	1402447
Fagron	Methylprednisolon	12D17-N04	40	zu erfassen
Fagron	Methylprednisolon	13G19-N05	40	1402438
Fagron	Methylrosanilinu. ...	13H28-N03	60	zu erfassen
Fagron	Methylrosanilinu. ...	12D19-N01	40	1402202
Fagron	Methylrosanilinu. ...	13G03-N11	40	zu erfassen
Fagron	Metronidazol	13D10-N02	40	20130516
Fagron	Miconazolnitrat	13D22-N14	90	20130529
Fagron	Mometasonfuroat, ...	9F22-N05	48	F 2010 000 093
Fagron	Mometasonfuroat, ...	13F17-N01	30	20130620
Fagron	Mupirocin-Calcium	12E02-N07	40	1401556
Fagron	Naloxonhydrochlo. ...	13L12-B03	40	20140113
Fagron	Naloxonhydrochlo. ...	13D22-N07	40	1402059
Fagron	Naphazolinnitrat	12L10-N03	40	20121217
Fagron	Natriumalginat	11K17-N12	40	AR-13-FG-002913-01
Fagron	Natriumbenzoat	10A08-N04	40	AR-13-FG-003105-01
Fagron	Natriumcitrat	12E04-N05	40	20120516
Fagron	Natriumedetat	13E15-N05	40	1402193
Fagron	Neomycinsulfat	11C13-N04	40	AR-13-FG-001849-01
Fagron	Nicotinamid	10L21-N09	40	AR-12-FG-009255-01
Fagron	Nicotinsäure	L10070324	40	AR-13-FG-000246-01
Fagron	Nitrofurantoin	11I07-N11	40	20110829
Fagron	Nitrofurantoin	11K-21-N23	40	20111128
Fagron	Nitrofurantoin	12C30-N03	40	1401461
Fagron	Nitrofurantoin	13B28-N07	40	zu erfassen
Fagron	Nitrofurantoin	12C30-N03	40	20120417
Fagron	Norethisteronace. ...	12L14-N03	40	1401558
Fagron	Ofloxacin	13A17-N01	30	20130123
Fagron	Ofloxacin	13A17-N01	30	1403155
Fagron	Ornithinhydrochl. ...	13A03-N05	40	1403094
Fagron	Ornithinhydrochl. ...	L11050156	40	20110519
Fagron	Oxybuprocainhydr. ...	13D16-N12	40	1402060
Fagron	Oxybutyninhydroc. ...	13H26-B03-290572	100	zu erfassen
Fagron	Oxybutyninhydroc. ...	12D24-N07	40	1402305
Fagron	Oxytetracyclinhy. ...	13D08-N11	60	20130426
Fagron	Palmitoylascorbi. ...	13C06-B40-291206	60	20140306
Fagron	Palmitoylascorbi. ...	13K04-N01	30	1403226
Fagron	Papaverinhydroch. ...	11L05-N10	40	AR-13-FG-001229-01
Fagron	Paracetamol	13G23-N03	40	1402297
Fagron	Paracetamol	13D30-N03	40	1402271
Fagron	Paracetamol	13D16-N08	40	1402296
Fagron	Pheniraminmaleat	13D24-N04	40	20130530
Fagron	Phenylephrinhydr. ...	11L22-N10	40	20120105
Fagron	Phenylephrinhydr. ...	12J19-B40-288254	30	zu erfassen
Fagron	Phenylephrinhydr. ...	11L22-N10	40	1406058
Fagron	Phenytain	13G26-N02	40	1401380
Fagron	Polymyxin-B-sulfat	13C12-N02	40	1402691
Fagron	Polymyxin-B-sulfat	13E06-N12	40	20130524
Fagron	Polymyxin-B-sulfat	13I13-N05	60	zu erfassen
Fagron	Polymyxin-B-sulfat	12G13-N05	40	1410347

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Fagron	Povidon 25, lösl. . .	12E22-N05	40	1411537
Fagron	Prasteron	13J10-B02-287175	40	1404309
Fagron	Prednicarbat, mi. . .	14A27-B02-291256	60	20140324
Fagron	Prednicarbat, mi. . .	10J04-N10	40	AR-12-FG-006257-01
Fagron	Prednicarbat, mi. . .	12D27-N04	40	20120509
Fagron	Prednisolon Hydr. . .	13D16-N11	40	zu erfassen
Fagron	Prednisolon Hydr. . .	12A20-N11	40	20120126
Fagron	Prednisolon, mik. . .	1108055-04	30	zu erfassen
Fagron	Prednisolon, mik. . .	13H07-B02-285592	60	20130909
Fagron	Prednisolonacetat	12H14-N07	40	20120829
Fagron	Prednisolondihyd. . .	11C18-N11	40	AR-12-FG-002990-01
Fagron	Prednisolondihyd. . .	14E07-B06-295251	60	20140623
Fagron	Prilocainhydroch. . .	13I02-N03	30	20130918
Fagron	Prilocainhydroch. . .	13I02-N03	30	1403257
Fagron	Procainhydrochlo. . .	8L11-N12	31	I 2009 000 346
Fagron	Progesteron, mik. . .	12A19-N04	40	AR-13-FG-009119-01
Fagron	Propranololhydro. . .	13I13-N04	40	1402307
Fagron	Pyridoxinhydroch. . .	9I16-N14	40	AR-12-FG-008409-01
Fagron	Resorcin	12G24-N04	40	1401462
Fagron	Riboflavin	13D02-N03	40	20130405
Fagron	Riboflavin	13D02-N03	40	zu erfassen
Fagron	Riboflavin	10F23-N06	40	AR-12-FG-007203-01
Fagron	Riboflavinphosph. . .	12B14-N04	40	zu erfassen
Fagron	Riboflavinphosph. . .	13I26-N06	40	1403705
Fagron	Rutosid-Trihydrat	11I20-N02	40	AR-13-FG-000836-01
Fagron	Saccharin-Natrium	12E03-N01	40	AR-13-FG-000832-01
Fagron	Salbutamolsulfat	11L21-N10	40	AR-13-FG-001850-01
Fagron	Sildenafil Citrat	13F24-N03	40	1402052
Fagron	Sildenafil Citrat	13J15-N01	40	20131030
Fagron	Sorbitanmonostea. . .	11I26-N09	40	zu erfassen
Fagron	Stärke (Reis-, M. . .	9F02-N03	92	I 2009 000 344
Fagron	Stärke (Reis-, M. . .	10015905	40	AR-12-FG-002706-01
Fagron	Tannin	13H30-B03-287645	60	20131011
Fagron	Taurin	10K15-N01	40	20101118
Fagron	Testosteron	12F13-N02	40	20120628
Fagron	Tetracain Base	12L19-N10	40	zu erfassen
Fagron	Tetracyclinhydro. . .	9C25-N10	40	I2009 000 352
Fagron	Thiaminchloridhy. . .	12D16-N02	40	1402585
Fagron	Thiomersal	11K01-N03	40	1401417
Fagron	Tobramycinsulfat	12G03-N03	40	1404541
Fagron	Tranexamsäure	14C21-B08-292225	60	20140331
Fagron	Tranexamsäure	11J11-N05	40	AR-12-FG-010245-01
Fagron	Triamcinolon, mi. . .	12A03-N09	40	1403253
Fagron	Triamcinolon, mi. . .	12A03-N09	40	20120117
Fagron	Triamcinolon, mi. . .	12K07-N13	40	zu erfassen
Fagron	Triamcinolonacet. . .	12E15-N03	50	1412051
Fagron	Triamcinolonacet. . .	13C13-N20	40	zu erfassen
Fagron	Trometamol	13E22-N05	40	20130709
Fagron	Tropicamid	12C26-N02	40	zu erfassen
Fagron	Tropicamid	12C26-N02	40	20120413
Fagron	Tryptophan	10I28-806	40	AR-13-FG-000201-01
Fagron	Tryptophan	9L28-N03	40	20091229
Fagron	Tryptophan	11G25-N02	40	20110805
Fagron	Tyrosin	13G24-N22	60	1411030
Fagron	Tyrothricin	12K14-N01	40	zu erfassen
Fagron	Uridin	11G07-N04	60	1402481
Fagron	Valin	11A19-N15	40	zu erfassen
Fagron	Vanillin	10L22-N17	40	AR-12-FG-002700-01
Fagron	Xylose	11L09-N11	40	AR-13-FG-008658-01
Falcento	D-Galactose	7223PF3	40	20130128

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Gonmisol	Lutein 20% Pulver	20120320	40	zu erfassen
Hirundo	D-Galactose	6878838-1209	40	1401136
inalc	D-Ribose	P19/28/069	20	zu erfassen
k.A	Calciumcolaminph...	14384	40	zu erfassen
k.A	Kupferorotat-Dih...	CH-565313	40	zu erfassen
Kaden Biochem...	Antioxidans Tee ...	2	40	zu erfassen
Kaden Biochem...	D-Galactose	13	40	AR-12-FG-007063-01
Kaden Biochem...	Quercetin	5	40	zu erfassen
kreatin GmbH	Kreatin	300331	50	1405615
Lycored corp.	Caromix	CMX-PL-101112	40	zu erfassen
mibe GmbH	Chinolinolsulfat...	100804	40	20100923
Molekular	Omeprazol	150908	40	1405656
MP Biomedicals	Sulfanilamide	M3567	40	1402054
New Zealand P...	Desoxycholsäure	411656	40	20110622
NZP	Desoxycholsäure	411656	40	AR-12-FG-009964-01
Pharmorgana	Calciumorotat-Di...	1000139407	40	AR-12-FG-008407-01
Pharmorgana	Glutaminsäure	1000110813	40	AR-13-FG-001126-01
Pharmorgana	Kaliumorotat-Dih...	1000070227	40	AR-12-FG-009684-01
Pharmorgana	Magnesiumorotat...	1000135398	40	AR-13-FG-003523-01
Roth	Bacitracin	194169081	60	zu erfassen
Roth	Desoxycholsäure ...	84181622	40	zu erfassen
Roth	Desoxycholsäure ...	154212633	60	zu erfassen
SAND 12 GmbH	D-Ribose	L201211720	30	zu erfassen
Sigma-Aldrich	Bromthymolblau	MKBQ5404V	40	zu erfassen
Spinnrad	Inulin	1112300433	40	zu erfassen
Spinnrad	Wachs	1012402004	40	zu erfassen
Th. Geyer	Calciumcolaminph...	260EXP1016	40	20111028
Th. Geyer	Mg-Ca-K-colaminp...	117EXP1016	40	zu erfassen
Th. Geyer	Mg-Ca-K-colaminp...	117EXP1016	40	zu erfassen
Vitatene	Betanat® 10% CWD	400101E10	40	zu erfassen
Vitaworld	D-(+)-Mannose	5449324	30	zu erfassen
Wellmune	1,25-beta-Glucan	10176-021	40	zu erfassen
zu erfassen	Bismutgallat, ba...	zu erfassen	40	AR-13-FG-000081-01
zu erfassen	Bromthymolblau	zu erfassen	40	zu erfassen
zu erfassen	Natriumpropionat	zu erfassen	40	zu erfassen
zu erfassen	Tragant, gepulvert	zu erfassen	40	zu erfassen

Anhang B: Zusätzliche Validierproben (Typ B)

In die Validierung gehen notwendigerweise auch Spektren von Substanzen ein, die nicht mit diesem Modell identifiziert werden können. Auf diese Weise wird überprüft, dass das Modell auch unbekannte Substanzen abweist. Die Spektren dieser Proben wurden durch die *HiperScan GmbH* aufgenommen. Sie werden dem *Typ B* zugeordnet. Darunter befinden sich auch die Kalibrierspektren von anderen Modellen.

Die Proben stammen aus 2783 Chargen. Daran wurden 121 238 Spektren aufgenommen. Die Spektren, die an unabhängigen Proben von Substanzen aufgenommen wurden, die mit dem Modell identifiziert werden können, sind bei den einzelnen Substanzen jeweils im Abschnitt *Typ B* aufgelistet und tauchen in dieser Liste nicht noch einmal auf.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
abcr GmbH	Amygdalin	1310927	40	zu erfassen
abcr GmbH	Amygdalin 90%	1310579	40	zu erfassen
abcr GmbH	Glycyrrhizinsäure	1222024	40	zu erfassen
Audor/Anzag	Dithranol	AP061818D	49	AR-12-FG-003000-01
Aurica	Rosmarinblätter,...	521306257	60	entfällt
Biogenerics	Dimercaptobernst...	100805	40	20100729
Bombastus	Eichenrinde, ges...	254077	40	entfällt
Bombastus	Maisgriffel, ges...	274920	40	20820705
Bombastus	Nichtionische em...	238393	50	entfällt
Bombastus	Tang, geschn.	272383	40	1406341
caelo	Clobetasolpropio...	13134705	1	entfällt
Caelo	Acetylsalicylsäure	11257102	40	20110909
Caelo	Aluminiumchlorid...	10026113	40	20100204
Caelo	Aluminiumkaliums...	12144605	40	entfällt
Caelo	Aluminiumkaliums...	10079208	40	entfällt
Caelo	Aluminiumoxid, w...	12163019	40	20120621
Caelo	Ammoniumchlorid	10176319	40	AR-13-FG-001330-01
Caelo	Ammoniumchlorid	12356101	40	20121206
Caelo	Ammoniumhydrogen...	81675468	40	20080822
Caelo	Angelikawurzel	12080404	40	1403053
Caelo	Angelikawurzel	12168701	40	zu erfassen
Caelo	Angelikawurzel	12080409	40	20120322
Caelo	Anis	13333903	40	18.10.2013
Caelo	Anis	11370301	40	20120117
Caelo	Anis	11370301	40	20120117
Caelo	Anis	9325104	80	F 2010 000 053
Caelo	Anis, gepulvert	11306203	40	20111110
Caelo	Anis, gepulvert	11306208	40	20111110
Caelo	Anis, gepulvert	11306204	40	AR-12-FG-007324-02
Caelo	Baldrianwurzel, ...	13113204	60	zu erfassen
Caelo	Baldrianwurzel, ...	12138005	40	1403809
Caelo	Baldrianwurzel, ...	12138008	40	zu erfassen
Caelo	Bärlauchkraut, g...	12380801	40	1404538
Caelo	Bärlauchkraut, g...	11182205	40	zu erfassen
Caelo	Bentonit	12237603	40	20120810
Caelo	Bibergeil, gepul...	13410403	40	20131231
Caelo	Bibergeil, gepul...	13410403	40	20131231
Caelo	Bibergeil, gepul...	9117503	50	zu erfassen
Caelo	Bibergeil, gepul...	12137409	40	1402590
Caelo	Bibergeil, gepul...	zu erfassen	40	zu erfassen
Caelo	Bismutgallat, ba...	92057409	18	F 2009 000 978
Caelo	Bittere Mandeln	13220401	40	1406296
Caelo	Bitterer Fenchel	12167102	40	20120705
Caelo	Bitterer Fenchel	11185504	80	20110706
Caelo	Bitterer Fenchel	13413702	40	1412549
Caelo	Bitterer Fenchel	12094708	30	zu erfassen

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Bitterer Fenchel	12094703	40	20120411
Caelo	Bockshornsamen, ...	11042306	40	zu erfassen
Caelo	Bockshornsamen, ...	12149605	40	20120629
Caelo	Bockshornsamen, ...	11042302	40	entfällt
Caelo	Bockshornsamen, ...	11042303	40	AR-12-FG-007209-01
Caelo	Brennnesselsamen	12131507	40	1402203
Caelo	Brennnesselsamen	11126212	40	entfällt
Caelo	Brennnesselsamen	11126211	40	zu erfassen
Caelo	Brennnesselsamen	13387110	40	1410300
Caelo	Bruchkraut, gesc...	13007505	40	1403462
Caelo	Bruchkraut, gesc...	9346401	40	zu erfassen
Caelo	Butylhydroxytoluol	11131002	40	20110519
Caelo	Calciumchlorid-D...	10103114	40	20100428
Caelo	Calciumcitrat-Te...	13391203	40	20131205
Caelo	Calciumglyceroph...	12012411	40	20120131
Caelo	Calciumglyceroph...	12012417	40	20120131
Caelo	Calciumglyceroph...	12012405	40	20120131
Caelo	Calciumglyceroph...	12012413	40	20120131
Caelo	Calciumhydrogenp...	10135201	40	20100608
Caelo	Calciumsulfat-Di...	10132401	40	20100607
Caelo	Calciumsulfat-He...	9246306	40	20090925
Caelo	Carbomer 35000 /...	14057903	100	20140228
Caelo	Cayennepfeffer, ...	10197606	40	AR-12-FG-008515-01
Caelo	Cayennepfeffer, ...	12014405	40	zu erfassen
Caelo	Cetylpalmitat 15	13295919	40	20130930
Caelo	Cetylstearylalko...	82753089	60	entfällt
Caelo	Chinarinde, gesc...	14009304	40	zu erfassen
Caelo	Chinarinde, gesc...	zu erfassen	40	entfällt
Caelo	Chinarinde, gesc...	13031007	40	20130207
Caelo	Chinarinde, gesc...	11238512	40	1403463
Caelo	Chloralhydrat	13213311	40	20130712
Caelo	Chlorocresol	1211107	20	20120502
Caelo	Cholesterol	13148703	40	20130604
Caelo	Ciclopirox-Olamin	14147402	40	20140606
Caelo	Ciclopirox-Olamin	12040906	40	20120309
Caelo	Cimicifugawurzel...	10281114	40	20101118
Caelo	Cimicifugawurzel...	13237901	40	zu erfassen
Caelo	Cimicifugawurzel...	13237903	40	12.08.2013
Caelo	Cimicifugawurzel...	10281112	40	20101118
Caelo	Clioquinol	13114413	40	20130508
Caelo	Clotrimazol	13224220	40	20130815
Caelo	Curcumawurzelsto...	13360202	40	1411363
Caelo	Curcumawurzelsto...	10162302	50	20100714
Caelo	Curcumawurzelsto...	11160403	50	20110628
Caelo	Curcumawurzelsto...	12136503	40	1405295
Caelo	Dequaliniumchlorid	12361906	60	20121228
Caelo	Dequaliniumchlorid	12077503	40	20120412
Caelo	Dequaliniumchlorid	9336412	45	20100104
Caelo	Dexamethasonacetat	10145912	40	20100705
Caelo	Di Yu	1234565	1	entfällt
Caelo	Dillfrüchte	12289901	40	1403464
Caelo	Dillfrüchte	12038301	40	zu erfassen
Caelo	Dillfrüchte	12342906	40	20121206
Caelo	Dillfrüchte	12038301	40	20120228
Caelo	Dillspitzen, ges...	13007610	40	20130208
Caelo	Dillspitzen, ges...	11295107	40	zu erfassen
Caelo	Dillspitzen, ges...	11295103	40	20111103
Caelo	Dillspitzen, ges...	13007602	40	1402204
Caelo	Dimethylfumarat	13269801	100	zu erfassen
Caelo	Diphenhydraminhy...	82811179	40	20081216

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Diptamwurzel, ge. . .	11314705	80	20111115
Caelo	Diptamwurzel, ge. . .	10189103	40	20100804
Caelo	Diptamwurzel, ge. . .	11314705	30	zu erfassen
Caelo	Dithranol	90987209	42	I 2009 000 268
Caelo	Eichenrinde, ges. . .	11351207	40	1403492
Caelo	Eichenrinde, ges. . .	10348617	40	20101221
Caelo	Eichenrinde, ges. . .	9357416	30	20100105
Caelo	Eichenrinde, ges. . .	10348603	40	20101221
Caelo	Eichenrinde, ges. . .	13360306	40	20131203
Caelo	Eisen(II)-sulfat. . .	11340509	40	1401568
Caelo	Eisen(III)-chlor. . .	12354703	40	1401391
Caelo	Eisen(III)-sulfa. . .	10354412	40	AR-13-FG-002914-01
Caelo	Emulgierender Ce. . .	10040502	40	entfällt
Caelo	Enzianwurzel, ge. . .	13410503	40	zu erfassen
Caelo	Enzianwurzel, ge. . .	12007106	40	20120117
Caelo	Enzianwurzel, ge. . .	9130203	50	20090507
Caelo	Enzianwurzel, ge. . .	12007103	50	1403630
Caelo	Ephedrinhydrochl. . .	10103408	40	20100427
Caelo	Erwachsenenlakritz	13180904	60	20130613
Caelo	Erwachsenenlakritz	11267801	35	zu erfassen
Caelo	Erythromycin	10006107	40	40197
Caelo	Estradiolbenzoat	13277607	40	20130918
Caelo	Flohsamen	10291205	80	20101119
Caelo	Flohsamen	91730289	79	F 2009 001 077
Caelo	Flohsamen	10291206	40	20101119
Caelo	Flohsamen	13305903	40	20131011
Caelo	Galgant, gepulvert	11375909	30	1403324
Caelo	Galgant, gepulvert	11375904	40	20120109
Caelo	Galgant, gepulvert	11196506	40	zu erfassen
Caelo	Galgant, geschn.	12125001	40	20120516
Caelo	Galgant, geschn.	11048908	40	20110311
Caelo	Galgant, geschn.	12330308	40	03.12.2012
Caelo	Galgant, geschn.	12330305	30	1403491
Caelo	Gelbholz, geschn.	12074803	40	1403479
Caelo	Gelbholz, geschn.	11336405	40	entfällt
Caelo	Gelbholz, geschn.	12074804	40	entfällt
Caelo	Gelbwurz, javani. . .	12185605	40	1403465
Caelo	Gelbwurz, javani. . .	zu erfassen	40	zu erfassen
Caelo	Getrocknetes Mag. . .	9377510	40	20091228
Caelo	Gewürznelken	12095805	40	20120417
Caelo	Gewürznelken	10242010	40	AR-12-FG-008490-01
Caelo	Gewürznelken, ge. . .	12355301	40	1403054
Caelo	Gewürznelken, ge. . .	12355304	40	entfällt
Caelo	Ginkgoblätter, g. . .	12151703	40	20120613
Caelo	Ginkgoblätter, g. . .	12151703	30	1403707
Caelo	Ginkgoblätter, g. . .	13340904	40	1411088
Caelo	Glucose, wasserf. . .	11017101	30	20110125
Caelo	Glucose, wasserf. . .	11017110	40	20110125
Caelo	Glycerinmonostea. . .	11079309	80	20110506
Caelo	Glycerinmonostea. . .	10080113	30	20100406
Caelo	Glycerolmonostea. . .	11272902	40	20110927
Caelo	Glycerolmonostea. . .	1127201902	40	entfällt
Caelo	Glycerolmonostea. . .	12001001	40	1403813
Caelo	Glycerolmonostea. . .	11272902	80	20110927
Caelo	Guaifenesin	11277411	40	20111011
Caelo	Guajakholz, gesc. . .	11352001	40	1406340
Caelo	Guajakholz, gesc. . .	11352012	40	20111222
Caelo	Guajakholz, gesc. . .	13343802	40	13.11.2013
Caelo	Guajakholz, gesc. . .	10143017	40	20100622
Caelo	Gui Zhi	zu erfassen	1	entfällt

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Hamamelisblätter...	10102915	40	20100517
Caelo	Hamamelisblätter...	13269902	40	1405176
Caelo	Hamamelisblätter...	10102915	40	20100517
Caelo	Hamamelisblätter...	13269904	40	24.09.2013
Caelo	Hamamelisblätter...	zu erfassen	40	entfällt
Caelo	Hartparaffin, Pl...	11166911	40	20110714
Caelo	Holunderbeeren	12267807	40	1403466
Caelo	Holunderbeeren	13367704	40	1410179
Caelo	Hydrochlorothiazid	13008505	60	20130111
Caelo	Hydrocortisonace...	13291708	60	20130926
Caelo	Ibuprofen	13105108	40	20130508
Caelo	Indische Flohsamen	11185807	40	20110727
Caelo	Indische Flohsamen	11185812	40	20110727
Caelo	Indische Flohsam...	13238005	40	16.08.2013
Caelo	Isländisches Moo...	9355507	40	20091209
Caelo	Isländisches Moo...	12187106	40	1403493
Caelo	Isländisches Moo...	13350803	40	14.11.2013
Caelo	Johannisbeeren, ...	12272801	40	1403468
Caelo	Johannisbrotkern...	13379403	40	zu erfassen
Caelo	Kaliumhydrogenca...	10052616	40	AR-12-FG-002698-01
Caelo	Kaliumhydrogenca...	10052622	50	20100317
Caelo	Kaliumhydrogenta...	11345805	30	20120103
Caelo	Kaliumhydrogenta...	11345805	40	20120103
Caelo	Kaliumhydrogenta...	11127402	30	20110519
Caelo	Kaliumhydrogenta...	11345805	40	20120103
Caelo	Kaliumhydrogenta...	11345805	40	20120103
Caelo	Kaliumhydroxid	10042008	40	20100225
Caelo	Kaliumsorbit	123454	1	entfällt
Caelo	Kaliumsorbit	123456	2	entfällt
Caelo	Kaliumsorbit	123434	1	entfällt
Caelo	Kaliumtartrat-He...	11225007	40	20110826
Caelo	Kampfer	11074503	40	20110316
Caelo	Kap-Aloe, gepulv...	12183008	40	20120802
Caelo	Kap-Aloe, gepulv...	9286307	40	20091014
Caelo	Kap-Aloe, gepulv...	11132115	30	1404400
Caelo	Kap-Aloe, gepulv...	11132115	30	20110520
Caelo	Kap-Aloe, gepulv...	11132107	40	20110520
Caelo	Kap-Aloe, geschn.	11048808	40	1404398
Caelo	Kap-Aloe, geschn.	11048808	40	20110315
Caelo	Kap-Aloe, grob g...	10237705	50	20100910
Caelo	Kardamomfrüchte...	13026104	40	1405002
Caelo	Kardamomfrüchte...	11247103	40	entfällt
Caelo	Kiefernspossen...	11164708	60	20110610
Caelo	Kiefernspossen...	13256105	40	28.08.2013
Caelo	Koriander	13299403	40	1412548
Caelo	Koriander	11088402	40	20110411
Caelo	Koriander	11088402	40	AR-12-FG-008489-01
Caelo	Koriander	12080904	40	zu erfassen
Caelo	Kornblumenblüten...	13241902	60	20130819
Caelo	Kornblumenblüten...	10291110	40	zu erfassen
Caelo	Kornblumenblüten...	10291105	40	zu erfassen
Caelo	Kümmel	13397104	60	zu erfassen
Caelo	Kümmel	9334905	70	AR-12-FG-002707-01
Caelo	Kümmel	9267816	50	20090918
Caelo	Kümmel	9267814	40	20090918
Caelo	Kümmel	9267825	30	20090918
Caelo	Kümmel	9267815	40	AR-12-FG-007975-01
Caelo	Kümmel	11003201	40	20110209
Caelo	Kümmel	11003217	40	20110209
Caelo	Kümmel	13397104	40	zu erfassen

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Kümmel, zerstoßen	12116904	40	20120503
Caelo	Kümmel, zerstoßen	12116901	40	1403469
Caelo	Kümmel, zerstoßen	13367101	40	20130503
Caelo	Kupfer(II)-sulfa. . .	8258803	40	20081114
Caelo	Kürbiskerne, ges. . .	12249002	40	1404542
Caelo	Kürbiskerne, ges. . .	12249006	40	20120917
Caelo	Lactose-Monohydrat	14025601	40	20140207
Caelo	Lactose-Monohydrat	14025601	40	20140207
Caelo	Lapachorinde, ge. . .	11154503	40	1403811
Caelo	Lapachorinde, ge. . .	12239305	40	20120831
Caelo	Lärchenschwamm	14190702	60	20140730
Caelo	Lärchenschwamm	11024502	34	20110125
Caelo	Leinsamen	12186902	60	20120705
Caelo	Leinsamen	91729389	80	F 2010 000 069
Caelo	Leinsamen	13412801	40	20140113
Caelo	Leinsamen	13296703	40	08.10.2013
Caelo	Leinsamen	12092102	60	20120402
Caelo	Löwenzahnwurzel, . . .	12363102	40	1403708
Caelo	Löwenzahnwurzel, . . .	13329708	40	1411089
Caelo	Löwenzahnwurzel, . . .	13329701	40	20131017
Caelo	Löwenzahnwurzel, . . .	10024714	50	20100312
Caelo	Löwenzahnwurzel, . . .	10024710	40	20100312
Caelo	L-Phenylalanin	14088304	60	zu erfassen
Caelo	Macrogol 4000	10059103	70	20100324
Caelo	Magnesiumchlorid. . .	11032304	50	20110224
Caelo	Magnesiumsulfat- . . .	9246402	40	20090827
Caelo	Magnesiumsulfat- . . .	11231006	40	AR-12-FG-007046-01
Caelo	Maisgriffel, ges. . .	13381501	40	03.01.2014
Caelo	Maisgriffel, ges. . .	9074201	70	F 2009 001 078
Caelo	Maisgriffel, ges. . .	10325902	40	20101217
Caelo	Maisgriffel, ges. . .	10325906	40	20101217
Caelo	Mangansulfat-Mon. . .	91547399	40	AR-13-FG-000299-01
Caelo	Manna, gepulvert	11003608	40	20110127
Caelo	Manna, gepulvert	14001401	40	20140115
Caelo	Manna, gepulvert	11308807	30	1403534
Caelo	Manna, geschn.	11308907	50	20111117
Caelo	Manna, geschn.	13127007	40	20130424
Caelo	Manna, geschn.	82063319	80	F 2010 000 064
Caelo	Melatonin	9366205	40	40186
Caelo	Melatonin	91809369	12	F 2009 000 968
Caelo	Menthol	10157605	40	20100705
Caelo	Methacholiniumch. . .	13260302	60	20130827
Caelo	Methyl-4-hydroxy. . .	10039706	40	20100315
Caelo	Methyl-4-hydroxy. . .	13268813	60	20131014
Caelo	Methylcellulose	10247609	40	20100915
Caelo	Metoclopramidhyd. . .	14193102	60	20140725
Caelo	Metronidazol	13095005	40	20130426
Caelo	Miconazolnitrat	13352802	40	20131118
Caelo	Minoxidil	14093701	40	20140428
Caelo	Mönchspfefferfrü. . .	12274003	40	zu erfassen
Caelo	Mönchspfefferfrü. . .	13193401	40	zu erfassen
Caelo	Muskatblüte, gep. . .	14256901	60	entfällt
Caelo	Muskatblüte, gep. . .	13132204	40	zu erfassen
Caelo	Muskatblüte, gep. . .	13132201	40	entfällt
Caelo	Muskatnuß, gepul. . .	10085809	50	entfällt
Caelo	Muskatnuß, gepul. . .	13097204	40	1403540
Caelo	Myrrhe	12269901	40	1403470
Caelo	Myrrhe	13108701	40	zu erfassen
Caelo	Myrrhe	11277111	60	1403081
Caelo	Myrrhe	10057904	40	zu erfassen

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Natriumbenzoat	13178619	60	20130624
Caelo	Natriumcarbonat-...	10188901	40	AR-13-FG-000310-01
Caelo	Natriumcitrat	13089335	60	20130326
Caelo	Natriumcyclamat	12105622	40	20120423
Caelo	Natriumcyclamat	9350509	60	20091126
Caelo	Natriumdihydroge...	12198506	40	20120705
Caelo	Natriumdodecylsu...	13411305	60	20140108
Caelo	Natriumhydrogenc...	90962189	40	20090403
Caelo	Natriummonohydro...	8300209	40	20090126
Caelo	Natriummonohydro...	10135302	36	20100601
Caelo	Natriumnitrat	11045910	40	20110225
Caelo	Natriumsalicylat...	10176004	40	20100716
Caelo	Natriumsulfat-De...	10044007	40	20100225
Caelo	Nicotinamid	11001809	40	20110209
Caelo	Nicotinamid	11001803	40	20110209
Caelo	Nystatin	10280622	30	20101014
Caelo	Nystatin	11069721	40	20110328
Caelo	Ölbaumblätter	12316808	60	zu erfassen
Caelo	Ölbaumblätter	11270106	40	20111013
Caelo	Oxalsäure	11098216	40	20110412
Caelo	Oxalsäure	13353905	60	20131029
Caelo	Pankreas-Pulver	10327501	40	20110131
Caelo	Papaverinhydroch...	9157221	40	20090626
Caelo	Paraffin, mikrok...	14307104	60	20141014
Caelo	Patentblau V, E131	10379902	40	20110117
Caelo	Petersilienfrüchte	11157810	40	zu erfassen
Caelo	Phenol	11163809	50	20110610
Caelo	Pilocarpinhydroc...	9234907	40	40102
Caelo	Podophyllumharz ...	9315906	50	20091027
Caelo	Poloxamer 407	12044205	40	20120224
Caelo	Poloxamer 407	12044202	40	20120224
Caelo	Povidon-Iod	10090613	40	20100413
Caelo	Prednisolon, mik...	zu erfassen	40	entfällt
Caelo	Prednisolondihyd...	13304704	60	1411052
Caelo	Progesteron, mik...	80277304	40	entfällt
Caelo	Propyl-4-hydroxy...	10113716	40	20100517
Caelo	Propyphenazon, g...	9369110	40	20100106
Caelo	Pyridoxinhydroch...	14262302	60	20141002
Caelo	Rhabarberwurzel,...	11043818	60	1403280
Caelo	Rhabarberwurzel,...	10162405	50	20100630
Caelo	Riboflavinphosph...	123423	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	122345	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	34346	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	23434	2	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	124566	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1233	2	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	10001233	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	2344	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	zu erfassen	45	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1213456	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1123	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	12345678	2	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1232	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	zu erfassen	25	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1234567	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	12345	7	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	122546	2	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1234	8	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	124567	2	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	12245	1	entfällt

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Riboflavinphosph...	12334	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1234567	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	2345	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	12344	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1234556	2	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	2334	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	123456789	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	123434	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	12344623	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	123446	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	12345676	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1235	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	12345	10	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	123456	3	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1254	1	entfällt
Caelo	Riboflavinphosph...	1234	9	entfällt
Caelo	Rosmarinblätter...	14159601	60	20140617
Caelo	Rosmarinblätter...	11193408	40	20110728
Caelo	Rosmarinblätter...	10139805	40	20100614
Caelo	Rosmarinblätter...	9144202	80	F 2010 000 051
Caelo	Roter Ton, gepul...	12093503	40	entfällt
Caelo	Salicylsäure	13344002	60	20131029
Caelo	Sandelholz, rote...	12049603	40	1403471
Caelo	Sandelholz, rote...	12049604	40	20120229
Caelo	Sauerdornbeeren	12217109	60	20120802
Caelo	Sauerdornbeeren	11058309	40	zu erfassen
Caelo	Sauerkirschensti...	12042302	40	zu erfassen
Caelo	Sauerkirschensti...	10367016	40	1402576
Caelo	Schwarze Senfsamen	12189303	40	1403472
Caelo	Schwarze Senfsamen	11124307	40	20110502
Caelo	Schwarze Senfsam...	12350204	80	1403711
Caelo	Schwarze Senfsam...	12009703	40	20120124
Caelo	Schwarze Senfsam...	12009703	40	20120124
Caelo	Schwarze Senfsam...	13358304	40	zu erfassen
Caelo	Schwarze Senfsam...	10064103	30	entfällt
Caelo	Schwarzer Pfeffer	11193906	40	20110727
Caelo	Schwarzer Pfeffer	13221114	40	05.08.2013
Caelo	Schwarzer Pfeffer	12192311	40	1403490
Caelo	Schwarzer Pfeffer	11193905	40	20110727
Caelo	Schwarzkümmelsamen	11233503	40	1403495
Caelo	Schwarzkümmelsamen	10121916	40	20100601
Caelo	Schweres, basisc...	10290208	40	20101112
Caelo	Scopolaminhydrob...	14278801	60	20141023
Caelo	Selleriewurzel, ...	10270002	40	20101006
Caelo	Senfsamen, weiß	13380501	40	03.01.2014
Caelo	Senfsamen, weiß	12361002	40	1403473
Caelo	Senfsamen, weiß	13064301	40	zu erfassen
Caelo	Senfsamen, weiß...	12349601	60	1403281
Caelo	Senfsamen, weiß...	12375705	40	20130110
Caelo	Sennesblätter, g...	12369908	40	1408079
Caelo	Sennesblätter, g...	11193307	120	zu erfassen
Caelo	Sesamsamen	12125201	40	zu erfassen
Caelo	Sesamsamen	12310205	40	1403406
Caelo	Siam-Benzoe	12321314	40	20121031
Caelo	Sojalecithin (In...	11145311	40	20110519
Caelo	Sorbinsäure	13334008	60	20131031
Caelo	Spargelwurzelsto...	10299010	40	zu erfassen
Caelo	Spargelwurzelsto...	10299012	20	zu erfassen
Caelo	Starklakritz	13262501	40	entfällt
Caelo	Sternanis, geschn.	12226301	50	zu erfassen

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Sternanis, geschn.	13041401	40	1403709
Caelo	Sulfacetamid	10145802	40	20100629
Caelo	Sulfamerazin	10218403	40	zu erfassen
Caelo	Talkum	11318312	80	1405338
Caelo	Tang, geschn.	13230805	40	zu erfassen
Caelo	Tang, geschn.	11351105	40	zu erfassen
Caelo	Theriak, gepulvert	12289307	40	1405122
Caelo	Theriak, gepulvert	11082412	40	zu erfassen
Caelo	Theriak, gepulvert	10191904	50	20100715
Caelo	Theriak, gepulvert	13407301	40	1410336
Caelo	Thiaminchloridhy...	10316406	40	20110107
Caelo	Tormentillwurzel...	13220502	40	1403049
Caelo	Tormentillwurzel...	12013103	40	1403048
Caelo	Tormentillwurzel...	10111704	50	zu erfassen
Caelo	Tormentillwurzel...	11102003	40	zu erfassen
Caelo	Tormentillwurzel...	11102003	40	zu erfassen
Caelo	Tormentillwurzel...	10290903	50	20101207
Caelo	Tormentillwurzel...	12040715	40	1403710
Caelo	Tormentillwurzel...	12040708	40	1403487
Caelo	Tosylchloramid-N...	13361606	60	20131122
Caelo	Tretinoin, mikro...	9364503	41	20091214
Caelo	Triamcinolonacet...	13379921	60	20131128
Caelo	Triamcinolonacet...	80890079	30	I 2009 000 256
Caelo	Triclosan	14121209	60	20140718
Caelo	Trockenperlen Ca...	12382203	40	entfällt
Caelo	Trockenperlen Ca...	11005804	40	entfällt
Caelo	Veilchenkraut, g...	10292002	40	zu erfassen
Caelo	Veilchenkraut, g...	13232103	40	21.08.2013
Caelo	Veilchenkraut, g...	13038703	30	1403481
Caelo	Veilchenkraut, g...	8061209	40	entfällt
Caelo	Vogelmierenkraut...	13254411	40	1412550
Caelo	Vogelmierenkraut...	13040502	40	1403482
Caelo	Vogelmierenkraut...	10359112	40	20110121
Caelo	Wachs	11285001	40	entfällt
Caelo	Wachs	10364838	40	20101223
Caelo	Walnussblätter, ...	10050402	40	20100324
Caelo	Walnussblätter, ...	11103007	40	1403091
Caelo	Walnussblätter, ...	10050403	50	20100324
Caelo	Wasserhaltiges N...	11158903	40	20110616
Caelo	Weihrauch-Granulat	10349210	40	20101216
Caelo	Weihrauch-Granulat	13112801	40	20130503
Caelo	Weihrauch-Granulat	100546	40	20100312
Caelo	Weihrauch-Granulat	10054608	40	20100312
Caelo	Weihrauch-Granulat	zu erfassen	40	entfällt
Caelo	Weihrauch-Granulat	12120005	40	1402495
Caelo	Weinsäure	13217803	60	20130807
Caelo	Weißer Pfeffer	14010703	40	22.01.2014
Caelo	Weißer Pfeffer	12294905	40	20121130
Caelo	Weißer Pfeffer	12294902	38	1403488
Caelo	Weisser Ton	11350124	40	20120102
Caelo	Zimtrinde, gepul...	12242806	40	1403083
Caelo	Zimtrinde, gepul...	12242810	40	entfällt
Caelo	Zimtrinde, geschn.	11221004	40	AR-12-FG-008664-01
Caelo	Zimtrinde, geschn.	zu erfassen	40	entfällt
Caelo	Zimtrinde, geschn.	13304414	40	20130912
Caelo	Zimtrinde, geschn.	12309902	40	zu erfassen
Caelo	Zinkacetat-Dihyd...	11354902	40	20111222
Caelo	Zinkchlorid	11345504	40	20111222
Caelo	Zinksulfat-Hepta...	11095602	40	AR-13-FG-006298-01
Caelo	Zinksulfat-Hepta...	12257802	40	20120830

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Caelo	Zitwerwurzelstoc. ...	12344601	40	1403489
Caelo	Zitwerwurzelstoc. ...	13165501	40	zu erfassen
ChinaMedica	(Bei) Sha Shen	1010501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Bei) Sha Shen	612501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Bei) Sha Shen	1010501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Chao) Jiang Can	1103581	105	beim Hersteller
ChinaMedica	(Chao) Jiang Can	901571	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Chao) Jiang Can	1103581	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Fen) Bi Xie	710506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Fen) Bi Xie	1108524	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Huai) Niu Xi	901516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Huai) Niu Xi	1106535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Huai) Niu Xi	1307554	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Huai) Niu Xi	zu erfassen	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Ku) Xing Ren	1111598	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Ku) Xing Ren	708520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Sheng) Di Huang	1010515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	(Sheng) Di Huang	704503	44	beim Hersteller
ChinaMedica	(Sheng) Di Huang	906525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ai Ye	1104515	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Ai Ye	1104515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ba Ji Tian	1302538	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Ba Ji Tian	805564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ba Ji Tian	1004504	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Bian Dou	1202627	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Bu	1103579	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Bu	1103579	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Dou Kou	1111600	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Dou Kou	901551	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Fu Zi (Zhi)	1302530	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Fu Zi (Zhi)	911519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai He	1302531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai He	507516	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai He	1101549	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Hua She She ...	1302541	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Hua She She ...	1104526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Hua She She ...	910514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Jiang Cao	912533	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Mao Gen	907508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Mao Gen	1207565	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Mao Gen	503517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Qian	1007533	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Shao	912547	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Shao	1106524	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Shao	1212519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Tou Weng	1302529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Tou Weng	912530	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Xian Pi	1109554	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Xian Pi	1007538	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Zhi	1103577	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Zhi	1103577	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Zhu	1104510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Zhu	1104510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bai Zhu	1209521	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ban Lan Gen	1101555	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ban Lan Gen	905526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ban Lan Gen	905526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ban Zhi Lian	903543	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ban Zhi Lian	1303552	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ban Zhi Lian	1005561	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Ban Zhi Lian	903543	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bei Wu Wei Zi (C...	1202645	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bian Xu	1004513	20	beim Hersteller
ChinaMedica	Bian Xu	1204536	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bian Xu	1004513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bing Lang	1207558	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bing Lang	1007540	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bing Lang	1007540	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bo He	1103508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bo He	908574	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bu Gu Zhi	904508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bu Gu Zhi (Yan Z...	904508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Bu Gu Zhi (Yan Z...	905511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Cang Er Zi (Chao)	1103580	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Cang Er Zi (Chao)	505036	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Cang Er Zi (Chao)	1103580	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Cang Zhu (Zhi)	1307553	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Cang Zhu (Zhi)	1104521	38	beim Hersteller
ChinaMedica	Cang Zhu (Zhi)	712509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chai Hu	910513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chai Hu	1109564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chan Tui	905529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chan Tui	905529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chao Ji Li	1212536	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chao Ji Li	1007541	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chao Ji Li	901564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chao Tao Ren	1202649	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chao Tao Ren	1010517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chaoi Mai Ya	708532	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chaoi Mai Ya	1004526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Che Qian Zi (Yan...	1006571	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chen Pi	908553	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chen Pi	908553	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chen Pi	1103583	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chi Shao	804511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chi Shao	1202631	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chi Xiao Dou	912538	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chi Xiao Dou	912538	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chong Wei Zi	1111601	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chong Wei Zi	805551	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Bei Mu	1002523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Bei Mu	1002523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Bei Mu	1109559	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Lian Zi	912570	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Lian Zi	1108504	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Mu Xiang	1106534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Mu Xiang	803509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Mu Xiang	910519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Niu Xi	1106522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Niu Xi	1004502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Xiong	1111603	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chuan Xiong	912550	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Chun (Bai) Pi	912535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Fu Pi	1105527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Fu Pi	507522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Fu Pi	908556	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Huang	710503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Huang	1001520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Huang	710503	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Qing Ye	1103512	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Da Zao	1108517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Zao	609517	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Da Zao	1001528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dan Dou Chi	1106518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dan Dou Chi	1106518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dan Nan Xing	1106514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dan Shen	805560	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Dan Shen	1108507	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dan Zhu Ye	1210575	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dan Zhu Ye	805517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dang Gui	1005544	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dang Gui	1111602	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dang Gui	1307551	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dang Shen	905509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dang Shen	1212534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dang Shen	808520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dang Shen	1103505	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Deng Xin Cao	907553	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Deng Xin Cao	1108528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dextrin	80601	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Fu Zi	1204534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Fu Zi	607525	69	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Gu Pi	1010509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Gu Pi	510561	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Gu Pi	1207564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Long	1103504	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Yu	1202636	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Yu	803512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Di Yu	803512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dong Gua Zi	1103503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Dong Gua Zi	1103503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Du Huo	905511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Du Huo	1011530	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Du Huo	905511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Du Zhong	1307558	36	beim Hersteller
ChinaMedica	Du Zhong	1310527	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Du Zhong	910520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Du Zhong	1108512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	E Bu Shi Cao	1005573	40	beim Hersteller
ChinaMedica	E Jiao	1202647	40	beim Hersteller
ChinaMedica	E Jiao	1004528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	E Zhu	1010505	40	beim Hersteller
ChinaMedica	E Zhu (Cu Zhi)	704513	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Fang Feng	1110591	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fang Feng	606508	60	beim Hersteller
ChinaMedica	Fang Ji	1104514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fang Ji	706506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fang Ji	1104514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fo Shou	1004522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fo Shou	606045	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Chao Zhi Qiao	1010516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Chao Zhi Qiao	1212539	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Chao Zhi Qiao	1010516	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Chao Zhi Shi	65531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Ling	1110596	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Ling	1006568	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Ling	906535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Pen Zi	1004525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Pen Zi	610531	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Ping	907534	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Fu Ping	704565	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Shen	902509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Shen	1103507	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Xiao Mai	1202629	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Xiao Mai	1002522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Xiao Mai	608521	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Zi	1005501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Zi	1103510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Fu Zi	907533	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gan Cao	1101553	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gan Cao	1205527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gan Cao (Mi Zhi)	801520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gan Jiang	909511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gan Jiang	909511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gan Jiang	1205522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gao Ben	907506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gao Ben	710508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gao Ben	1210547	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gao Liang Jiang	903623	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ge Gen	1108509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ge Gen	905513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gou Qi Zi	907522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gou Qi Zi	704612	65	beim Hersteller
ChinaMedica	Gou Qi Zi	1207560	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gou Teng	1004509	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Gou Teng	1204533	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gu Sui Bu	703523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gu Sui Bu	711514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gu Sui Bu	1207553	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Gu Ya (Chao)	1207567	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gua Lou	1104528	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Gua Lou	1003549	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gua Lou Zi	1106520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gua Lou Zi	912536	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Guang Huo Xiang	1108520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Guang Huo Xiang	906504	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gui Zhi	1004508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gui Zhi	1004508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Gui Zhi	1108526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hai Jin Sha	903512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hai Jin Sha	903512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hai Tong Pi	1108502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Huan Hua	1104512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Huan Hua	1210576	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Huan Pi	1003546	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Huan Pi	1104527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Ye	610564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Ye	1004516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Ye	1004516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Zi	910515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	He Zi	1212538	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Hei Zhi Ma	912548	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hong Hua	704588	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hong Hua	1103576	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hong Hua	908557	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hong Jing Tian	H0906921	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hong Shen	907501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hou Po (Jiang Zhi)	910521	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hou Po (Jiang Zhi)	1103513	45	beim Hersteller
ChinaMedica	Hou Po (Jiang Zhi)	910521	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Hou Po (Jiang Zhi)	H0917021	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hou Po (Jiang Zhi)	1103513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hu Zhang	903502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hua Jiao	708531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Hua Jiao	1202641	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huai Hua	1005559	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huai Hua (Chao)	510543	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Bai	908554	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Bai	1004519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Bai	1305586	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Lian	1110593	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Lian	611528	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Lian	1007536	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Qi	1103506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Qi	1103506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Qin	1001525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huang Qin	1210574	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huo Ma Ren	1303553	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huo Ma Ren	907549	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Huo Ma Ren	1109561	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ji Xue Teng	803513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ji Xue Teng	1302532	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ji Xue Teng	812552	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ji Xue Teng	1103511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiang Ban Xia	903596	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiang Ban Xia	1010504	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiang Ban Xia	1211534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiang Huang	1109563	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiang Huang	1006512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiang Huang	1006512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jie Geng	712512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jie Geng	1104509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jie Zi	1202640	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jie Zi	903559	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jie Zi	903559	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jin Qian Cao	1001502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jin Yin Hua	1310535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jin Yin Hua	1101601	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jin Ying Zi	1202632	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jing Jie	911525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jing Jie	1108527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiu Huang Jing	1103518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiu Huang Jing	607556	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jiu Huang Jing	1108518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ju Hong	802501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ju Hong	802501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ju Hua	901547	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ju Hua	1210573	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ju Hua	1011524	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jue Ming Zi	907515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jue Ming Zi	1305593	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Jue Ming Zi	1104529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ku Shen	1205526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ku Shen	905533	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ku Shen	905533	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Kun Bu	711508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Kun Bu	711508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Kun Bu	1106523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lai Fu Zi	1010512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lian Qiao	zu erfassen	70	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Lian Qiao	901544	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lian Qiao	1010510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lian Zi	1111610	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lian Zi	906505	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ling Zhi	1303556	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ling Zhi	1106516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ling Zhi	611533	60	beim Hersteller
ChinaMedica	Ling Zhi	1106516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Dan (Cao)	901518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Dan (Cao)	901518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Gu	1001535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Gu	907546	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Gu	1105530	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Gu (Duan)	1302527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Gu (Duan)	702506	68	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Yan Rou	704510	50	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Yan Rou	1202639	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Long Yan Rou	912545	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Gen	1003545	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Gen	708524	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Gen	1207552	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Jiao Jiao	912539	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Jiao Jiao	1205532	120	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Jiao Jiao	912539	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Jiao Shuang	708534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Jiao Shuang	708534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Lu Tong	1108522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Lu Tong	1108522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Lu Tong	901560	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Lu Lu Tong	607559	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Ma Bian Cao	1001517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mai Dong	1010503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mai Dong	1207569	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mai Dong	1010503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mai Dong	H1118922	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mai Dong	176/H1118922	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mai Ya (Chao)	1202634	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Man Jing Zi	903558	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Man Jing Zi	1010513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Man Jing Zi	903558	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mei Gui Hua	1004520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mi Gan Cao	801520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mi Gan Cao	1108513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mi Meng Hua	1103578	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mi Meng Hua	808545	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mo Han Lian	610548	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mo Han Lian	1101556	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mo Han Lian	1207562	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mo Han Lian	1101556	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mo Yao	1202646	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mo Yao	1305589	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mo Yao	902517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mu Dan Pi	1106511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mu Dan Pi	1311563	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mu Gua	1108531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mu Gua	704606	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Mu Hu Die	903508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Mu Tong	907509	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Nan Sha Shen	1104518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Nan Sha Shen	1303545	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Niu Bang Zi (Chao)	807542	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Niu Bang Zi (Chao)	807542	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Niu Bang Zi (Chao)	807542	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Niu Bang Zi (Chao)	1211550	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Niu Bang Zi (Chao)	807542	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Nü Zhen Zi	1110599	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Nü Zhen Zi	708528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Nü Zhen Zi	1004523	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Pao Jiang	1207556	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Pi Pa Ye	1004517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Pu Gong Ying	1112568	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Pu Gong Ying	704570	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Pu Gong Ying	1001503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Pu Huang	1307547	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Pu Huang	1001529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Pu Huang	1105531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qian Hu	706505	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Qian Hu	1101554	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qian Niu Zi	804525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qian Shi	1006514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qian Shi	1211546	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qian Shi	612537	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qiang Huo	912543	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qiang Huo	1108525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qin Jiao	1006515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qin Jiao	1006515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qin Jiao	1212535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qin Pi	1101557	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qing Dai	1207561	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qing Hao	711519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qing Hao	1004511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qing Hao	1303549	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Qing Pi	1106526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qing Pi	812520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qing Xiang Zi	1106517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qu Mai	13503543	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qu Mai	912568	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Qu Mai	510531	68	beim Hersteller
ChinaMedica	Quan Xie	1103516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Quan Xie	1103516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ren Dong Teng	909510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ren Dong Teng	909510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ren Dong Teng	1111599	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ren Shen	908577	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ren Shen	1005563	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Rou Dou Kou	1003550	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Rou Dou Kou	1003550	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Rou Dou Kou	1112565	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Rou Gui	1003547	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Rou Gui	1108529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	San Leng (Cu Zhi)	1103509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	San Leng (Cu Zhi)	1103509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	San Leng (Cu Zhi)	512551	70	beim Hersteller
ChinaMedica	San Qi	907541	40	beim Hersteller
ChinaMedica	San Qi	1010514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Bai Pi	506506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Bai Pi	912549	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Ji Sheng	609548	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Ji Sheng	808553	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Ji Sheng	1211526	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Sang Ji Sheng	1004507	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Piao Xiao	1202642	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Shen	1103514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Shen	1103514	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Shen	505536	75	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Shen	1207572	105	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Shen	1207572	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Ye	505515	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Ye	1108516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Ye	907535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sang Zhi	1104523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sha Ren	1011525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sha Ren	612534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sha Yuan Zi	1112571	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sha Yuan Zi	906506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sha Yuan Zi	906506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shan Yao	1109562	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shan Yao	611563	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shan Yao	1006508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shan Yu Rou	1001506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shan Zha	1207566	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shan Zha	1010511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	She Chuang Zi	1011563	30	beim Hersteller
ChinaMedica	She Gan	912532	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shen Qu	901575	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shen Qu	1104513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shen Qu	901575	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sheng Jiang	609591	69	beim Hersteller
ChinaMedica	Sheng Jiang	1110595	38	beim Hersteller
ChinaMedica	Sheng Jiang	905512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sheng Ma	712514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Sheng Ma	910512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shi Chang Pu	1005562	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shi Chang Pu	1005562	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shi Chang Pu	1304528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shi Gao	907540	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shi Gao	907540	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Shi Gao	1109567	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shou Wu Teng	1004510	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Shou Wu Teng	612503	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Shou Wu Teng	1109558	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shu Di (Huang)	605515	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Shu Di (Huang)	1010502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shu Di (Huang)	1209523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shu Di (Huang)	1010502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shui Bai Guo	1204537	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Shui Bai Guo	1005564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shui Niu Jiao	1001509	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shui Niu Jiao	1304581	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Shui Zhi	807502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Shui Zhi (Tang)	807502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Si Gua Luo	901556	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Si Gua Luo	806546	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Su Mu	805585	62	beim Hersteller
ChinaMedica	Su Mu	1303548	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Suan Zao Ren	1005504	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Suan Zao Ren	1111597	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Suo Yang	1205524	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Suo Yang	912531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Suo Yang	508509	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Tai Zi Shen	811508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tai Zi Shen	1105529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tan Xiang	1207507	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Dong	907502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Dong	1011531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Hua Fen	1105532	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Hua Fen	8010527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Hua Fen	810527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Ma	1005558	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Ma	608523	60	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Ma	806540	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Ma	1305551	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Nan Xing	710502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Nan Xing	1104519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Nan Xing	710502	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Zhu Huang	903592	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tian Zhu Huang	903592	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Bie Chong	812566	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Bie Chong	812566	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Bie Chong	1202643	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Fu Ling	908513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Fu Ling	908513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Fu Ling	1210543	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Fu Ling	1110592	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Si Zi	1111604	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Si Zi	903557	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Tu Si Zi	1007535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wang Bu Liu Xing	906527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wang Bu Liu Xing	906527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wei Ling Xian	911522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Gong	908547	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Gong	908547	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Jia Pi	1004527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Jia Pi	1004527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Ling Zhi	120768	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Ling Zhi	803518	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Mei	1112564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Shao She	903510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Wei Zi	805562	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Wei Zi	1005503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Yao	1108501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Yao	609510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Yao	709503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Zhu Yu (Zhi)	1003551	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Zhu Yu (Zhi)	1103515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Wu Zhu Yu (Zhi)	1003551	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xi Xian Cao	1202637	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xi Xian Cao	1211552	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xi Xian Cao	1001526	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xia Ku Cao	1104525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xia Ku Cao	611531	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xian He Cao	903536	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xian He Cao	1202628	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xian He Cao	903536	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xian Mao	1006510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xian Mao	803510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xiang Fu	1105528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xiang Fu	909513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xiao Hui Xiang	903564	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xiao Hui Xiang	1103582	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Xiao Hui Xiang	601585	50	beim Hersteller
ChinaMedica	Xiao Tong Cao	706507	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Xiao Tong Cao	1104511	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xie Bai	910505	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xin Yi	908580	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xin Yi	1106512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xu Chang Qing	1103501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xu Chang Qing	709513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xu Chang Qing	709513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xu Chang Qing	709513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xu Duan	1403536	60	beim Hersteller
ChinaMedica	Xu Duan	710504	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xu Duan	1108508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xuan Fu Hua	1202644	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xuan Fu Hua	512056	69	beim Hersteller
ChinaMedica	Xuan Fu Hua	1007534	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xuan Shen	1204535	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xuan Shen	1008554	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Xuan Shen	1008554	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yan Hu Suo	1103519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yan Hu Suo	1209529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ye Ju Hua	909512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ye Ju Hua	909512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yi Mu Cao	1205528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yi Mu Cao	1004512	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yi Yi Ren	1109555	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yi Yi Ren	1004565	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yi Yi Ren	607552	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yi Zhi Ren	1202638	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yi Zhi Ren	905528	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yin Chai Hu	804513	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yin Chai Hu	1202635	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yin Chen	1112566	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yin Chen	1004515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yin Chen	907523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yin Yang Huo	912544	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yin Yang Huo	609550	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Jin	612538	75	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Jin	1103517	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Jin	1207554	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Li Ren	907514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Li Ren	907514	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Xing Cao	1106510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Xing Cao	903505	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Zhu	1108523	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yu Zhu	1004566	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yuan Zhi	1004503	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yuan Zhi	1109557	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Yuan Zhi	808559	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zao Jiao Ci	901529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zao Jiao Ci	1104522	30	beim Hersteller
ChinaMedica	Ze Lan	905527	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ze Lan	611530	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Ze Xie	1007532	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ze Xie	805566	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Ze Xie	805566	31	beim Hersteller
ChinaMedica	Ze Xie	1110590	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhe Bei Mu	704519	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhe Bei Mu	1004501	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhe Bei Mu	1110594	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
ChinaMedica	Zhi He Shou Wu	503513	60	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi He Shou Wu	903522	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi He Shou Wu	1007537	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi He Shou Wu	1210546	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Mu	1010506	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Mu	1207570	39	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Mu	901579	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Ru Xiang	908576	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Ru Xiang	1106515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Shi	1103520	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Shi	907548	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Shi	1212540	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Zi	1205529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Zi	710516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Zi	710516	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhi Zi	1007539	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhu Ling	1010508	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhu Ling	901581	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhu Ling	1110597	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhu Ling	901581	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhu Ru	1209525	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhu Ru	1011529	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zhu Ru	507523	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Hua Di Ding	509511	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Hua Di Ding	910510	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Hua Di Ding	1204530	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Shi Ying	907574	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Su Ye	905515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Su Ye	509542	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Su Ye	905515	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Su Ye	1302533	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Su Zi (Chao)	1212537	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Su Zi (Chao)	708529	70	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Su Zi (Chao)	1004524	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Wan	1101550	40	beim Hersteller
ChinaMedica	Zi Wan	602503	40	beim Hersteller
Denk	s-Adenosylmethio...	S1S1104B	20	zu erfassen
Dermapharm AG	Chinolinolsulfat...	71101	40	entfällt
Dr. Behr	Chlorellapulver	WE11070078	40	zu erfassen
Dr. Behr	Cysteinhydrochlo...	P-07014800	40	AR-13-FG-008785-01
Dr. Behr	L-Carnitine Hydr...	1520081202	40	20100921
Dr. Behr	L-Carnitine Hydr...	WE-11030091	60	zu erfassen
Dr. Behr	L-Carnitintartrat	WE-11060069	40	1405608
Dr. Behr	L-Prolin	P-07014859	40	20121201
Dr. Behr	Lysinhydrochlorid	P-07014932	40	20100618
Dr. Behr	Rotkleextrakt 2...	WE12030050-02	40	zu erfassen
Dr. Behr	Selenhefe	P-07015253	40	entfällt
Dr. Behr	Yamswurzel-Trock...	WE14020005-05	40	zu erfassen
Dr. Behr	Yamswurzel-Trock...	WE12040018-01	40	entfällt
Dr. Paul Lohm...	Magnesium(hydrog...	1048115	40	entfällt
Dr. Pfeifer	Xylitol	zu erfassen	40	entfällt
El Compra	Chlorellapulver	WE13010018-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Acetylcystein	1208026-01	60	20121116
Euro OTC	Allantoin	1406011-01	60	20140718
Euro OTC	alpha-Tocopherol...	1305032-01	60	20130617
Euro OTC	Aluminiumchlorid...	1106017-01	40	entfällt
Euro OTC	Aluminiumchlorid...	1109025-01	40	entfällt
Euro OTC	Ammoniumchlorid	1209013-01	40	20120928
Euro OTC	Bentonit	2903008-01	31	entfällt
Euro OTC	Bifonazol	1401031-01	60	20140220

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Euro OTC	Biotin	1402028-01	60	20140404
Euro OTC	Calciumgluconat	1005044-01	40	entfällt
Euro OTC	Calciumorotat-Di...	1009035-01	40	20101019
Euro OTC	Capsaicin, natür...	118066-04	60	20140227
Euro OTC	Clindamycinhydro...	1401041-01	40	20140306
Euro OTC	Clobetasolpropio...	1211021-04	60	20121214
Euro OTC	Coffein	2910019-03	50	entfällt
Euro OTC	Colecalciferol-T...	1103005-01	40	20110309
Euro OTC	Colistinsulfat e...	1406001-01	60	20140626
Euro OTC	Curcuma-Trockene...	L1107001	40	zu erfassen
Euro OTC	Curcuma-Trockene...	L1107001	40	20110720
Euro OTC	Dexamethason	1012005-01	45	entfällt
Euro OTC	Diclofenac-Natrium	1403013-01	40	20140401
Euro OTC	Dithranol	1203025-02	40	20120830
Euro OTC	Estriol	1310002-01	40	20131021
Euro OTC	Ethacridinlactat...	1206016-02	60	20121019
Euro OTC	Ethylhydrogenfum...	1306012-01	60	20130805
Euro OTC	Ethylhydrogenfum...	1306014-01	60	20130805
Euro OTC	Finasterid (Form...	1403016-01	60	20140505
Euro OTC	Gentamicinsulfat	2911034-01	40	entfällt
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1210034-02	40	20121214
Euro OTC	Hydroxyethylcell...	1101022-02	40	20110131
Euro OTC	Indisches Weihra...	1104005-01	40	AR-12-FG-008694-01
Euro OTC	Indisches Weihra...	1104005-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Kaliumcitrat	1204016-01	40	20120516
Euro OTC	Kaliumhydrogenca...	1004019-01	70	entfällt
Euro OTC	Kampfer	1406029-01	60	20140708
Euro OTC	L-Carnitintartrat	1302017-01	40	zu erfassen
Euro OTC	Levocarnitin	1303027-02	60	20130429
Euro OTC	Lidocainhydrochl...	1403025-02	60	20140516
Euro OTC	L-Phenylalanin	1212014-03	60	20130111
Euro OTC	L-Prolin	L1210046-01	40	20121113
Euro OTC	Magnesiumhydroge...	1012021-01	40	20110117
Euro OTC	Magnesiumhydroge...	1012021	40	20110117
Euro OTC	Magnesiumhydroge...	1012021-01	40	20110117
Euro OTC	Magnesiumsulfat-...	1109023-01	40	entfällt
Euro OTC	Magnesiumtrisili...	1012032-01	40	AR-13-FG-002912-01
Euro OTC	Miconazolnitrat	1307025-02	60	20130806
Euro OTC	Minoxidil	1311038-01	59	20140123
Euro OTC	Naphazolinhydroc...	1407034-01	60	20140826
Euro OTC	Natriumtetraborat	1404025-01	60	entfällt
Euro OTC	Nicotinamid	1310025-01	60	20131121
Euro OTC	Nicotinamid	1003025-03	40	20100330
Euro OTC	Nicotinamid	1108021-01	40	20110922
Euro OTC	Nystatin	281103201	80	entfällt
Euro OTC	Ornithinhydrochl...	1307028-01	60	20130813
Euro OTC	Oxytetracyclinhy...	1306022-02	60	20130724
Euro OTC	Paracetamol	1111024-02	60	20120123
Euro OTC	Phenylbutazon	1305050-02	60	20130801
Euro OTC	Pilocarpinhydroc...	1305044-01	60	20130725
Euro OTC	Prednicarbat, mi...	1302033-02	60	20130321
Euro OTC	Prednison	1401042-02	60	20140317
Euro OTC	Pregnenolon	1312007-01	60	20140121
Euro OTC	Pregnenolon	2903030-02	40	20090401
Euro OTC	Pyridoxinhydroch...	1401044-01	60	20140221
Euro OTC	Schweres Magnesi...	1012033-01	22	AR-12-FG-008488-01
Euro OTC	Selenhefe	L1401013-01	40	20140207
Euro OTC	Sildenafil Citrat	1311010-01	60	20131209
Euro OTC	Spironolacton	1004035-01	50	entfällt
Euro OTC	Testosteronpropi...	1109024-02	60	20130724

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Euro OTC	Thiaminchloridhy...	1211008-02	60	20121122
Euro OTC	Thiaminchloridhy...	1106001-01	40	20110721
Euro OTC	Thiaminchloridhy...	1106001-01	40	20110721
Euro OTC	Thymol	1312022-02	60	20131219
Euro OTC	Tricalciumphosphat	1009031-01	50	entfällt
Euro OTC	Triclosan	1406032-01	60	20140710
Fagron	Aciclovir	13B04-B40-294559	60	20131217
Fagron	Aescin	1011033-02	40	entfällt
Fagron	Albendazol	12J25-B40-293217	60	20140430
Fagron	Alfatradiol	11B07-N05	40	20110218
Fagron	alpha-Tocopherol...	13H30-B02-287169	60	20130912
Fagron	Aluminiumkaliums...	12F25-N11	40	20120809
Fagron	Aluminiumkaliums...	10B01-N10	40	AR-12-FG-007570-01
Fagron	Arginin	11H01-N05	40	20110912
Fagron	Arginin	10H11-N05	40	20100929
Fagron	Bacitracin	14E23-B03-296243	60	20140605
Fagron	Bacitracin	9J30-N01	40	20091104
Fagron	Benzocain	10K02-N01	40	20101129
Fagron	Betamethason, mi...	11B18-N14	30	20110302
Fagron	Betamethason, mi...	11B18-N14	30	20110302
Fagron	Betamethasonvale...	zu erfassen	40	entfällt
Fagron	Bifonazol	11A13-N13	30	20110126
Fagron	Bromelain	14F20-B03295501	60	20140701
Fagron	Calciumhydroxid	10L15-N07	30	20101221
Fagron	Calciumhydroxid	13E22-N07	20	20130626
Fagron	Calciumlactat-Pe...	12I12-N06	40	20120924
Fagron	Calciumpantothenat	10I22-N05	40	20101130
Fagron	Captopril	10L09-N17	30	20101221
Fagron	Chinidinsulfatdi...	12E25-N03	40	20120601
Fagron	Chinidinsulfatdi...	11J11-N02	40	AR-12-FG-008405-01
Fagron	Chinidinsulfatdi...	12E25-N03	40	entfällt
Fagron	Chlortetracyclin...	7C27-N01	40	20070410
Fagron	Cinnarizin	11L22-N13	40	20120104
Fagron	D-Galactose	11F30-N08	40	20110713
Fagron	Doxylaminhydroge...	12E04-N04	40	AR-13-FG-000834-01
Fagron	Emulgierender Ce...	11291113	40	entfällt
Fagron	Emulgierender Ce...	12C30-N01	40	20120426
Fagron	Ergotamintartrat	13I24B10288650	60	zu erfassen
Fagron	Ergotamintartrat	13H02-N01	100	zu erfassen
Fagron	Erythromycin	14B06-B35-290872	60	20140225
Fagron	Estradiol-Hemihy...	13K22-N01	40	20131115
Fagron	Estradiolvalerat	14E26-B02-294846	60	20140616
Fagron	Gentamicinsulfat	14E08-B03-294848	60	20140616
Fagron	Glycerolmonoste...	14C12-B40-292622	60	20140404
Fagron	Histamindihydroc...	14G16-B02-299175	100	20140729
Fagron	Hydrochlorothiazid	11L01-N02	40	20111209
Fagron	Hypromellose E4M...	11A27-N27	40	20110214
Fagron	Ketoconazol	10J18-N07	40	20101203
Fagron	Lithiumorotat-Mo...	10F25-N01	40	20100810
Fagron	L-Leucin	9D27-N04	40	20090528
Fagron	Macrogol 4000	10H03-N03	15	20100920
Fagron	Macrogol 4000	10L02-N05	15	20100727
Fagron	Mepivacainhydroc...	13L04-B07-297077	60	20131223
Fagron	Methionin	11H05-N01	40	20110913
Fagron	Natriumedetat	10C10-N04	40	20100504
Fagron	Natriumhydroxid ...	12E02-N15	80	20120521
Fagron	Natriummonohydro...	11E02-N14	40	20110622
Fagron	Nicotinamid	L11060228	40	20110622
Fagron	Norethisteronace...	11C10-N03	40	20110321
Fagron	Phenytoin	12I07-N02	40	20120919

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Fagron	Povidon 25, lösl. ...	12B07-N04	40	20120216
Fagron	Povidon 25, lösl. ...	12B07-N04	40	20120216
Fagron	Povidon 25, lösl. ...	12B07-N04	40	20120216
Fagron	Prasteron	10L22-N12	40	20101227
Fagron	Prasteron	10L22-N12	40	20101227
Fagron	Prednison	13C14-B40-289148	60	20131223
Fagron	Propranololhydro. ...	10C15-N15	41	20100504
Fagron	Pyridoxinhydroch. ...	L12010105	40	20120113
Fagron	Resorcin	11A19-N09	40	20110202
Fagron	Saccharose	11B02-N12	40	20110225
Fagron	Schweres basisch. ...	11C10-N06	40	AR-13-FG-008124-01
Fagron	Silbereiweiß-Ace. ...	18000970	40	entfällt
Fagron	Testosteron	10F14-N01	40	20100628
Fagron	Tetracain Base	14A16-B04292915	40	20140205
Fagron	Tetracain Base	10H05-N08	40	20100813
Fagron	Tetracain Base	14A16-B04-292916	60	20140205
Fagron	Tetracainhydroch. ...	11A31-N15	40	20110209
Fagron	Thalidomid	14E27B04295348	100	zu erfassen
Fagron	Tretinoin, mikro. ...	11A27-N01	40	20110207
Fagron	Triamcinolonacet. ...	zu erfassen	40	entfällt
Fagron	Tropicamid	14D23-B04-293294	60	20140506
Fagron	Tyrosin	10D28-N17	40	AR-13-FG-000200-01
Fagron	Tyrothricin	12K14-N01	60	20121119
Fagron	Ubidecarenon	10H19-N10	40	20100913
Fagron	Vanillin	7F29-N07	40	20070716
Fagron	Zinkorotat-Dihyd. ...	11K16-N10	40	20111122
Galke	Brennnesselsamen	21186	40	zu erfassen
Galke	Diptamwurzel, ge. ...	17805	40	entfällt
Hebei welcome. ...	Ascorbinsäure	1107411106	40	20110711
Hepart AG	Acacia Gum	706310	40	beim Hersteller
Hepart AG	Acacia Gum	639701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Acacia Gum	639701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Acacia Gum	728201	40	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	993101	40	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	54301	59	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	954001	40	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	14000551	40	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	14001420	60	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	14001726	60	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	66601	50	beim Hersteller
Hepart AG	a-Liponsäure	954001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	19101	20	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	14000258	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	14000259	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	971701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	41401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	936401	30	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	41402	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	41401	30	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	946501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	14000258	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	14000259	40	beim Hersteller
Hepart AG	Aminomix NAC	971701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N. ...	991301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N. ...	67301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N. ...	67201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N. ...	14000965	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N. ...	14000961	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N. ...	14000962	39	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N. ...	14000964	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	Antioxidantien N...	14000966	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14000042	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	967901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	11001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14000044	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14000043	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	980001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14001847	60	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	30901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14000963	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	2401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14001849	60	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14001850	60	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14001851	60	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14001846	60	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	14001848	60	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	30903	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	30902	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	30904	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	19901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	52101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	19901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	52001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	51901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	52201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Antioxidantien N...	51902	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	19001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	28501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	683901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	694301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	42501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	948802	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	68101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	14001675	60	beim Hersteller
Hepart AG	Bioflavonoide Ko...	683901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Biotin	983601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Biotin	29603	40	beim Hersteller
Hepart AG	Biotin	983601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Biotin	29601	60	beim Hersteller
Hepart AG	Biotin	29601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	956001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001934	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	956001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	8901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001939-F2	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001939	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001938	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	55601	50	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001937	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001936	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001935	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	55101	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14001933	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	55501	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	55401	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	55301	60	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	55001	50	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	55201	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	Calcium	14000110	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14000107	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14000106	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14000109	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14000108	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	956001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	Calcium	14000111	40	beim Hersteller
Hepart AG	Catechin-Extrakt	62901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Catechin-Extrakt	62701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Catechin-Extrakt	62801	40	beim Hersteller
Hepart AG	Catechin-Extrakt	18601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Catechin-Extrakt	681501	50	beim Hersteller
Hepart AG	Catechin-Extrakt	681501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Catechin-Extrakt	638201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Chaga	675601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Chaga	14001688	60	beim Hersteller
Hepart AG	Chaga	975601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Chaga	46701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Chaga	14000951	40	beim Hersteller
Hepart AG	Chrom	977201	55	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	130521-300	40	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	926101	30	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	14001546	60	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	992501	30	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	15601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	966601	50	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	943001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	992501	50	beim Hersteller
Hepart AG	Coenzym Q10	14000666	40	beim Hersteller
Hepart AG	Curcumin und Pip...	929601	30	beim Hersteller
Hepart AG	Curcumin und Pip...	2201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Curcumin und Pip...	13901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Curcumin und Pip...	14001017	40	beim Hersteller
Hepart AG	Curcumin und Pip...	2201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	928101	50	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	998701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	998701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	603206	40	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	14000285	60	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	40901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	603206	30	beim Hersteller
Hepart AG	Eisen	40901	60	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	56901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	977701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	14000639	40	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	52301	60	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	14000639	40	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	52301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	14000638	40	beim Hersteller
Hepart AG	Folsäure	977701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Garcinia Cambogia	956701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Garcinia Cambogia	956701	90	beim Hersteller
Hepart AG	Garcinia Cambogia	56601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Garcinia Cambogia	14001687	60	beim Hersteller
Hepart AG	Garcinia Cambogia	7401	90	beim Hersteller
Hepart AG	Garcinia Cambogia	56601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Ginkgo	67901	80	beim Hersteller
Hepart AG	Ginkgo	67901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Ginseng	38802	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	Ginseng	18502	40	beim Hersteller
Hepart AG	Ginseng	18502	40	beim Hersteller
Hepart AG	Ginseng	630706	40	beim Hersteller
Hepart AG	Ginseng	701602	40	beim Hersteller
Hepart AG	Ginseng	701602	50	beim Hersteller
Hepart AG	Ginseng	67801	40	beim Hersteller
Hepart AG	Ginseng	662503	50	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	25002	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	34001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	34001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	38001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	75401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	954901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	38001	60	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat	978401	50	beim Hersteller
Hepart AG	Glucosaminsulfat. . .	909015	40	20100730
Hepart AG	Glutathion	74901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glutathion	40201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glutathion	19703	30	beim Hersteller
Hepart AG	Glutathion	955501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glutathion	918901	30	beim Hersteller
Hepart AG	Glutathion	955501	50	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	14001730	60	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	14001731	60	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	28101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	61801	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	965401	51	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	71501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	75501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Glycin	993401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	699304	50	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	703603	50	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	130513-GG2	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	48501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	48502	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	48001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	48401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	701401	50	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	130514-GG5	48	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	130514-GG3	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	130514-GG4	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	130506-GG1	40	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	970001	30	beim Hersteller
Hepart AG	Guar-Granulat	48402	40	beim Hersteller
Hepart AG	Inositol Hexanic. . .	979201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Inositol Hexanic. . .	652206	40	beim Hersteller
Hepart AG	Inositol Hexanic. . .	22901	40	20120116
Hepart AG	Inositol Hexanic. . .	14000920	40	beim Hersteller
Hepart AG	Inositol Hexanic. . .	46001	50	beim Hersteller
Hepart AG	Isoflavone	988301	50	beim Hersteller
Hepart AG	Isoflavone	955701	50	beim Hersteller
Hepart AG	Isoflavone	591907	30	beim Hersteller
Hepart AG	Isoflavone	38801	40	beim Hersteller
Hepart AG	Isoflavone	56701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Isoflavone	988301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kalium	944201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Kalium	130328001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kalium	28901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kalium	28901	39	beim Hersteller
Hepart AG	Kalium	39302	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	Kalium	69201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Kalium	931901	30	beim Hersteller
Hepart AG	Kalium	944201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kreatin	25003	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kreatin	25004	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kreatin	965201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kupfer	46401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kupfer	933901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Kupfer	7901	20	beim Hersteller
Hepart AG	Kupfer	130415	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kupfer	7901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kupfer	46401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Kupfer	933901	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-5-HTP	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-5-HTP	968801	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-5-HTP	999801	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	950601	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	14000564	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	66501	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	928302	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	44301	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	999001	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	999001	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Arginin	27802	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	965901	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	938501	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	965901	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	938501	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	8501	90	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	965901	43	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	130605302	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	26010	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	26001	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnitin	130605300	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnosin	74801	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnosin	45901	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnosin	979202	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Carnosin	zu erfassen	20	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	928301	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	26901	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	61501	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	26904	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	26903	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	955001	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Glutamin	994001	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Isoleucin	968701	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Isoleucin	14001772	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Isoleucin	27701	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Isoleucin	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Isoleucin	942901	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Isoleucin	66301	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Leucin	994101	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Leucin	74301	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Leucin	965101	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Leucin	965101	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	28801	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	14000944	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	28801	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	L-Lysin	65401	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	28801	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	941501	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	17302	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	65401	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Lysin	955002	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Ornithin	1202	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Ornithin	646703	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Ornithin	979301	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Phenylalanin	964401	55	beim Hersteller
Hepart AG	L-Phenylalanin	zu erfassen	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Phenylalanin	1201	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Phenylalanin	19707	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Phenylalanin	74401	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Prolin	zu erfassen	30	beim Hersteller
Hepart AG	L-Prolin	25707	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Prolin	596805	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Prolin	695301	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Prolin	66401	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Prolin	707801	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Threonin	638802	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Threonin	14901	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Threonin	14001718	60	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tryptophan	27901	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tryptophan	950001	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tryptophan	978501	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tryptophan	74501	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tyrosin	979102	50	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tyrosin	74601	100	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tyrosin	zu erfassen	20	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tyrosin	29502	40	beim Hersteller
Hepart AG	L-Tyrosin	29502	40	beim Hersteller
Hepart AG	Lycopen	999101	50	beim Hersteller
Hepart AG	Lycopen	999101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Lycopen	53501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Lycopen	927601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Lycopen	4501	50	beim Hersteller
Hepart AG	Lycopen	927601	50	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	14001889	60	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	14001891	60	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	14001894	60	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	69601	60	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	14001893	60	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	14001895	60	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	973501	50	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	973501	30	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	43501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	70001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	43601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	941701	50	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	69801	40	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	69701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Magnesium	69901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Melatonin	69101	60	beim Hersteller
Hepart AG	Melatonin	69101	60	beim Hersteller
Hepart AG	Methylsulfonylme. . .	979401	50	beim Hersteller
Hepart AG	Methylsulfonylme. . .	964001	50	beim Hersteller
Hepart AG	Methylsulfonylme. . .	14000921	40	beim Hersteller
Hepart AG	Methylsulfonylme. . .	56201	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	Methylsulfonylme...	zu erfassen	30	beim Hersteller
Hepart AG	Na-Chondroitinsu...	31801	40	beim Hersteller
Hepart AG	Na-Chondroitinsu...	964101	50	beim Hersteller
Hepart AG	Na-Chondroitinsu...	zu erfassen	30	beim Hersteller
Hepart AG	Na-Chondroitinsu...	1801	50	beim Hersteller
Hepart AG	Na-Chondroitinsu...	31801	40	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	18401	40	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	70401	40	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	672201	30	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	643901	40	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	130208-77	40	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	68301	40	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	16201	50	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	672201	50	beim Hersteller
Hepart AG	OPC Grape Seed	70401	60	beim Hersteller
Hepart AG	Rhodiola	70501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Salusdog Basis	34401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Salusdog Gelenke	910003.0000	40	beim Hersteller
Hepart AG	Salusdog Haut + ...	35401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Salusdog Immun M...	35301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	933301	30	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	10201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	601901	30	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	10201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	65601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	65501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	65701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Selen	10201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Selenhefe	9001	50	beim Hersteller
Hepart AG	Selenhefe	997601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Selenhefe	9001	30	beim Hersteller
Hepart AG	Silymarin	67701	60	beim Hersteller
Hepart AG	Silymarin	950401	30	beim Hersteller
Hepart AG	Silymarin	950401	50	beim Hersteller
Hepart AG	Silymarin	29901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Silymarin	915601	30	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	11701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	919701	30	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	956901	30	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	72801	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	72901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	72701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente JK	956901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	14000721	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	31301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	14000720	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	14000722	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	14000720	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	42301	55	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	42301	55	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	14000721	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	14000722	40	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	12401	50	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	937201	30	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	937201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Spurenelemente SE	929202	40	beim Hersteller
Hepart AG	Taurin	17301	50	beim Hersteller
Hepart AG	Taurin	14001767	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	Taurin	960201	30	beim Hersteller
Hepart AG	Taurin	960201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Taurin	600402	30	beim Hersteller
Hepart AG	Taurin	28001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Valin	961101	50	beim Hersteller
Hepart AG	Valin	936701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Valin	14001947	60	beim Hersteller
Hepart AG	Valin	25012	40	beim Hersteller
Hepart AG	Valin	916201	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	75001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	977301	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	14001113	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	977301	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	75001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	53301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	30501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B1	14001112	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B12	966201	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B12	944101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B12	944101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B12	26401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B12	25017	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B12	966201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B6	960401	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B6	938001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin B6	960401	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	960901	29	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	14001797	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	14001794	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	14001788	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	14001780	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	946901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	13202	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	44501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	25020	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	13201	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	44502	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	960901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	946901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	44602	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	74201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	74101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	73901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	74001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin C	74201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin D3	940201	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin D3	959601	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin D3	8101	25	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin D3	8101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin D3	959601	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	71501	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	71501	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	17701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	71501	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	14001815	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	71501	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	71601	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	71701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	961301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	17901	50	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Hepart AG	Vitamin E NAT	14001821	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	919301	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	65001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	961301	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	945901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	961301	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin E NAT	14001822	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamin K2-Ca-Mn. . .	69001	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	77001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	966901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	25101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	14001590	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	9901	30	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	923902	35	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	77201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	49201	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	23401	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	77101	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	14001589	60	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	9901	50	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	25301	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	966901	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	zu erfassen	40	beim Hersteller
Hepart AG	Vitamine Komplex	14001591	60	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	14001803	60	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	991001	50	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	949701	40	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	991001	40	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	41501	40	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	14001753	60	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	949701	50	beim Hersteller
Hepart AG	Zink	949701	30	beim Hersteller
HerbaSinica	(Bai) Jiang Can	120701G120	60	beim Hersteller
HerbaSinica	(Bai) Jiang Can	130901G120	40	beim Hersteller
HerbaSinica	(Bai) Jiang Can	120701G120	60	beim Hersteller
HerbaSinica	(Bei) Sha Shen	130501G179	80	beim Hersteller
HerbaSinica	(Bei) Sha Shen	110801G179	40	beim Hersteller
HerbaSinica	(Huai) Niu Xi	130501G039	40	beim Hersteller
HerbaSinica	(Sheng) Di Huang	130101G034	120	beim Hersteller
HerbaSinica	(Sheng) Di Huang	111001G034	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ba Ji Tian	110301G144	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Bian Dou	120701G066	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Bian Dou	120701G066	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Bu	60701E160	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Dou Kou	120301G220	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai He	120501G068	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Mao Gen	120701G063	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Mao Gen	120701G063	50	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Qian	120401G226	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Shao	130501G029	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Tou Weng	120301G210	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Xian Pi	120701G058	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Xian Pi	120701G058	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Xian Pi	120701G058	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Zhi	141001G001	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Zhi	120701G001	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Zhi	120701G001	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Zhu	110301G005	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Zhu	130301G005	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Zhu	120301G005	50	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
HerbaSinica	Bai Zhu	131001G005	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Bai Zi Ren	110701G047	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ban Lan Gen	110301G140	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ban Xia	130101G078	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ban Xia	110301G078	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ban Zhi Lian	120901G088	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bian Xu	120301G357	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bing Lang	120301G115	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Bo He	110301G026	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Bo He	130901G026	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Bu Gu Zhi	61101E154	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Bu Gu Zhi	110501G154	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Cang Er Zi	130501G164	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Cang Zhu	120701G006	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Cang Zhu	120701G006	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chai Hu	120901G007	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Che Qian Zi	130101G190	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chen Pi	130101G045	100	beim Hersteller
HerbaSinica	Chen Pi	131001G045	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Chen Pi	111101G045	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Chi Shao	130101G026	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chi Xiao Dou	120701G148	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chi Xiao Dou	120701G148	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Bei Mu	90601E255	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Lian Zi	120601G161	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Lian Zi	120601G161	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Mu Tong	120701G075	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Mu Tong	120701G075	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Mu Tong	120701G075	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Niu Xi	110701G174	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Chuan Xiong	130101G022	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Da Huang	110801G084	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Da Huang	141001G084	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Da Huang	141001G084	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Da Qing Ye	120301G213	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Da Zao	131001G065	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Da Zao	120301G065	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Dan Dou Chi	120301G240	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Dan Shen	130501G035	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Dan Shen	130501G035	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Dan Shen	110301G035	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Dan Zhu Ye	130501G184	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Dan Zhu Ye	110301G184	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Dang Gui	111001G003	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Dang Gui	110101E003	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Dang Gui	120701G003	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Dang Gui Wei	120401G514	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Dang Shen	130601G051	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Dang Shen	120301G051	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Di Fu Zi	110301G181	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Di Gu Pi	120401G141	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Di Long	130901G149	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Di Yu	120301G488	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Dong Gua Zi	110501G046	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Du Huo	120601G002	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Du Huo	120601G002	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Du Huo	111201G002	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Du Zhong	110601G060	80	beim Hersteller
HerbaSinica	E Zhu	120301G094	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Fa Ban Xia	120301G097	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
HerbaSinica	Fang Feng	120301G021	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Fu Ling	130501G032	70	beim Hersteller
HerbaSinica	Fu Ling	120301G032	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Fu Xiao Mai	130701G242	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Fu Zi	61201E111	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Gan Cao	130601G020	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Gan Jiang	120701G038	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Gao Ben	130901G232	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ge Gen	120201G083	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Ge Gen	130601G083	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Gou Qi Zi	120701G072	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Gou Qi Zi	120701G072	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Gou Teng	120701G037	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Gou Teng	120701G037	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Gua Lou	120701G198	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Gua Lou	120701G198	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Gua Lou Pi	90601E199	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Guang Huo Xiang	130101G150	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Gui Zhi	130901G012	50	beim Hersteller
HerbaSinica	Gui Zhi	110301G012	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Hai Zao	120401G193	60	beim Hersteller
HerbaSinica	He Huan Pi	120701G113	60	beim Hersteller
HerbaSinica	He Huan Pi	120701G113	60	beim Hersteller
HerbaSinica	He Shou Wu	130501G031	80	beim Hersteller
HerbaSinica	He Shou Wu	111101G031	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Hong Hua	110301G008	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Hong Shen	110401G019	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Hou Po	120701G023	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Hou Po	120701G023	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Huai Hua	120701G091	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Huai Hua	120701G091	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Huang Bai	140101G030	30	beim Hersteller
HerbaSinica	Huang Lian	110501G053	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Huang Qi	120901G004	70	beim Hersteller
HerbaSinica	Huang Qi	131001G004	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Huang Qin	120301G089	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Huang Qin	91001E089	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Huang Qin	130501G089	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Ji Li	91001E162	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ji Xue Teng	120401G196	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Jiang Huang	110701G014	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Jie Geng	120701G079	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Jie Geng	120701G079	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Jie Geng	120701G079	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Jin Qian Cao	110101E186	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Jin Yin Hua	120701G070	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Jin Yin Hua	120701G070	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Jing Jie	120701G085	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Jing Jie	120701G085	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Ju Hua	100701E009	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Jue Ming Zi	110301G122	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ku Shen	110301G092	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Kun Bu	120301G182	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Lai Fu Zi	120301G211	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Lian Zi	120701G207	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Lian Zi	120701G207	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Ling Zhi	111101G228	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Long Dan	130901G062	30	beim Hersteller
HerbaSinica	Long Yan Rou	110301G234	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Long Yan Rou	130701G234	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
HerbaSinica	Lu Gen	130901G189	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Lu Lu Tong	120701G233	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Lu Lu Tong	120701G233	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Lu Lu Tong	110301G233	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Lu Lu Tong	120701G233	50	beim Hersteller
HerbaSinica	Mai Dong	130501G027	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Mai Ya	120701G095	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Mai Ya	120701G095	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Maltodextrin	zu erfassen	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Man Jing Zi	120301G202	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Mo Han Lian	130101G175	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Mu Dan Pi	121201G074	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Mu Gua	110701G123	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Mu Hu Die	120301G487	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Mu Xiang	130101G170	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Nan Sha Shen	120301G112	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Niu Bang Zi	110301G114	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Nü Zhen Zi	101101E183	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Pi Pa Ye	120301G176	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Pu Gong Ying	111001G036	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Pu Huang	120301G243	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Pu Huang	130501G243	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Qian Hu	60701E064	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Qiang Huo	130101G076	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Qin Jiao	110601G136	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Qing Ban Xia	140801G078	60	Hersteller
HerbaSinica	Qing Hao	120201G221	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Qu Mai	120401G227	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Ren Dong Teng	120401G235	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Ren Shen	120701G096	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Ren Shen	110401G096	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Ren Shen	120701G096	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Rou Gui	110601G011	40	beim Hersteller
HerbaSinica	San Leng	120301G158	60	beim Hersteller
HerbaSinica	San Qi	130901G146	40	beim Hersteller
HerbaSinica	San Qi	111201G146	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Sang Bai Pi	110601G073	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Sang Ji Sheng	130101G197	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Sang Shen	120401G215	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Sang Ye	110301G025	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Sang Zhi	110601G188	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Sha Ren	120701G203	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Sha Ren	120701G203	70	beim Hersteller
HerbaSinica	Sha Yuan (Ji) Zi	120301G222	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Shan Yao	120301G016	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Shan Yao	110501G016	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Shan Yu Rou	130401G054	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Shan Zha	110501G055	40	beim Hersteller
HerbaSinica	She Chuang Zi	120301G224	60	beim Hersteller
HerbaSinica	She Gan	120401G424	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Shen Qu	111101G142	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Shen Qu	130901G142	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Sheng Ma	110301G010	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Shi Chang Pu	110601G166	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Shi Hu	80601E128	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Shou Wu Teng	120301G081	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Shu Di (Huang)	130101G033	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Shu Di (Huang)	111001G033	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Suan Zao Ren	130601G082	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Suan Zao Ren	110301G082	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
HerbaSinica	Suo Yang	120401G349	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tai Zi Shen	130901G192	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Tai Zi Shen	120401G192	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tao Ren	120701G077	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tao Ren	120701G077	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tao Ren	110301G077	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Tao Ren	111101G077	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Tao Ren	141001G077	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tao Ren	130801G077	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Tao Ren	130101G077	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tian Dong	120701G044	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tian Dong	120701G044	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tian Hua Fen	120301G163	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Tian Ma	130801G135	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Tu Fu Ling	110301G195	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Tu Si Zi	130601G057	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Tu Si Zi	110301G057	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Wang Bu Liu Xing	120301G244	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Wei Ling Xian	120701G126	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Wei Ling Xian	120701G126	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Wu Wei Zi	120301G086	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Wu Yao	120701G069	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Wu Yao	120701G069	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Wu Zhu Yu	120301G134	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Xi Xian Cao	130901G090	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Xi Xian Cao	110301G090	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Xia Ku Cao	110501G048	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Xian Mao	120401G225	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Xiang Fu	110501G015	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Xiao Hui Xiang	120301G324	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Xin Yi	130901G024	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Xu Duan	130501G129	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Xuan Fu Hua	110301G139	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Xuan Shen	120701G087	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Xuan Shen	120701G087	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Xuan Shen	120701G087	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yan Hu Suo	130101G127	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yan Hu Suo	110301G127	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Yi Mu Cao	100701E067	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Yi Yi Ren	110301G052	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Yi Zhi Ren	120701G041	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yi Zhi Ren	120701G041	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yin Chen	110101E169	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yin Yang Huo	130101G131	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Yu Jin	110501G056	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Yu Li Ren	120401G153	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yu Xing Cao	120701G138	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yu Xing Cao	120701G138	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yu Zhu	120701G080	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yu Zhu	120701G080	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Yuan Zhi	130401G151	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Ze Xie	130501G040	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhe Bei Mu	120601G018	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhe Bei Mu	120601G018	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhe Bei Mu	110501G018	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Gan Cao	120301G411	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi He Shou Wu	120401G245	80	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Mu	130601G042	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Mu	110301G042	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Qiao	140501G049	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
HerbaSinica	Zhi Qiao	120301G049	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Shi	130901G050	40	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Tian Nan Xing	120301G116	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Zi	120701G061	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Zi	120701G061	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhi Zi	120701G061	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhu Ling	120301G191	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zhu Ru	120201G171	60	beim Hersteller
HerbaSinica	Zi Hua Di Ding	120301G364	60	beim Hersteller
inalc	D-Galactose	372PF1	30	20110307
k.A	Dimercaptobornst...	121115	40	1407637
k.A	Noscapinhydrochl...	12D04-B04-284297	40	entfällt
Kaden Biochem...	Rosenwurz-Trocke...	zu erfassen	40	20090928
Kaden Biochem...	Rosenwurz-Trocke...	zu erfassen	40	zu erfassen
Klenk	Ammi-visnaga-Frü...	7120A120112	40	20120118
Klenk	Angelikawurzel	6085B120614	60	zu erfassen
Klenk	Angelikawurzel	6085B120614	40	20120621
Klenk	Anis	2700A110701	40	20110824
Klenk	Bittere Mandeln	40A111117	40	20111207
Klenk	Bitterer Fenchel	2880N120418	30	zu erfassen
Klenk	Bitterer Fenchel	2880N120418	40	1412547
Klenk	Bockshornsamen, ...	7264B130205	40	1408080
Klenk	Brennnesselsamen	7470A111117	35	zu erfassen
Klenk	Brennnesselsamen	7470A110418	40	entfällt
Klenk	Ceylon-Zimt, ech...	614B120504	40	1403047
Klenk	Ceylon-Zimt, ech...	614B120504	40	20120511
Klenk	Curcumawurzelsto...	6741A110202	40	AR-12-FG-008355-01
Klenk	Dillfrüchte	zu erfassen	40	entfällt
Klenk	Dillfrüchte	2680A110808	40	20110812
Klenk	Gewürznelken	1260A110608	40	20120913
Klenk	Holunderbeeren	3010A120202	40	zu erfassen
Klenk	Holunderblätter, ...	2321B130221	60	20130226
Klenk	Indische Flohsamen	7560A120330	35	1403467
Klenk	Ingwerwurzelstoc...	6554B100409	40	AR-12-FG-008593-01
Klenk	Kirschenstiele, ...	5591A100913	40	1402575
Klenk	Kümmel	2770A110601	40	zu erfassen
Klenk	Kümmel	2770A110601	40	20110914
Klenk	Kümmel	2770A110601	40	zu erfassen
Klenk	Labkraut, klette...	4731B110809	40	20110930
Klenk	Lärchenschwamm	1061A120312	40	zu erfassen
Klenk	Leinsamen	7308A100705	30	20101021
Klenk	Lorbeerblätter, ...	2124A110329	40	1411032
Klenk	Lorbeerblätter, ...	2124A110329	60	20140310
Klenk	Lorbeerblätter, ...	2124A110329	40	20110405
Klenk	Löwenzahnwurzel, ...	6621A100510	40	20100812
Klenk	Maisgriffel, ges...	5581A111206	38	20111214
Klenk	Mönchspfefferfrü...	7110N090701	40	zu erfassen
Klenk	Muskatblüte, gep...	5214A090716	50	zu erfassen
Klenk	Myrrhe	3355B120628	40	zu erfassen
Klenk	Ölbaumblätter	211A080311	40	AR-12-FG-008663-01
Klenk	Pappelknospen, z...	3266B101208	39	20101209
Klenk	Pappelknospen, z...	3266B130826	40	1410178
Klenk	Petersilienfrüchte	7370A130909	40	1407600
Klenk	Petersilienfrüchte	7370A091120	40	20120910
Klenk	Rosmarinblätter, ...	2261A131118	60	20140725
Klenk	Sauerdornbeeren	2720N111109	40	1405127
Klenk	Schwarze Senfsamen	7430A120813	40	zu erfassen
Klenk	Schwarze Senfsam...	7434A120712	40	zu erfassen
Klenk	Schwarzkümmelsamen	7330A110204	40	20110214
Klenk	Selleriefrüchte	7140A130625	40	1405177

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
Klenk	Selleriefrüchte	7140A111013	40	20111021
Klenk	Selleriefrüchte	7140A131122	60	20131204
Klenk	Selleriewurzel, ...	6091A110110	40	1410177
Klenk	Selleriewurzel, ...	6091N081016	40	20100308
Klenk	Senfsamen, weiß,...	7254A110823	40	20110912
Klenk	Senfsamen, weiß,...	7254A110823	40	1403282
Klenk	Sennesblätter, g...	2334B090306	50	zu erfassen
Klenk	Sennesblätter, g...	2334B110207	40	zu erfassen
Klenk	Spargelwurzelsto...	6151B110304	40	1403480
Klenk	Süßer Fenchel	2870A130304	40	1405154
Klenk	Süßer Fenchel	2870A110412	40	20110421
Klenk	Tormentillwurzel...	6914B120112	40	20120118
Klenk	Wacholderbeeren,...	2894B130320	40	1411362
Klenk	Wacholderbeeren,...	2894B100531	40	zu erfassen
Klenk	Zitwerwurzelstoc...	6944B080904	50	zu erfassen
Kräuter Schulte	Angelikawurzel	46957	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Angelikawurzel	53855	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Anis	51600	40	entfällt
Kräuter Schulte	Kümmel	53193	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Lauchzwiebeln, c...	50126	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Lauchzwiebeln, c...	10445	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Nanaminze, geschn.	44201	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Ochsenkniewurzel...	42168	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Pu Erh Tee (Rote...	52029	40	zu erfassen
Kräuter Schulte	Schwarzkümmelsamen	50371	40	entfällt
Kräuter Schulte	Senfsamen, weiß	52071	40	1408078
Merck	Cäsiumcarbonat	K36017440634	40	entfällt
Pharmorgana	Zinkorotat-Dihyd...	1000127154	40	20091008
Phytochem	D-Ribose	zu erfassen	60	entfällt
Phytochem	D-Ribose	zu erfassen	40	entfällt
PhytoComm	(Bai) Dou Kou	G016H0508021	100	beim Hersteller
PhytoComm	(Bai) Dou Kou	H0508821	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Bai) Ji Li	H0858021	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Bai) Jiang Can	G269H0513222	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Bai) Jiang Can	H0513021	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Bai) Jiang Can	G269H0513121	60	beim Hersteller
PhytoComm	(Bai) Jiang Can	G269H0513321	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708125	120	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708122	61	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	H0708021	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708322	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708024	30	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	A0708703	40	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708421	60	beim Hersteller
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708024	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ai Ye	G033H0613022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ai Ye	G033H0613421	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ai Ye	G033H0613021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Bian Dou	H0510921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Bian Dou	G093H0510221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Guo	G114H0509321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Guo	G114H0509022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Bai He	G139H0607321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai He	H0607021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai He	G139H0607221	20	beim Hersteller
PhytoComm	Bai He	H0607921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Hua She She ...	G173H1153222	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Hua She She ...	H1153923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Jie Zi	H0518921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Mao Gen	G125H0512221	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Bai Mao Gen	H0512021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Mao Gen	G125H0512221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Shao Yao	H0502021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Tou Weng	G207H0511221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Xian Pi	H0515921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Xian Pi	G090H0515121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Zi Ren	H0947822	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Zi Ren	G052F110320	60	beim Hersteller
PhytoComm	Bai Zi Ren	G052F110315	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Lan Gen	G128H0816224	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Lan Gen	G128H0816221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Lan Gen	G128H0816022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Lan Gen	H0816922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Xia	G191H0526023	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Xia	G191H0526121	50	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Xia	H0526021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Xia	G191H0526322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Xia	H0526021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Zhi Lian	H0528021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Zhi Lian	H0528721	59	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Zhi Lian	G224H0528221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ban Zhi Lian	G224H0528022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bie Jia	G507H2401321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Bie Jia	G507H2401121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Cang Er Zi	G251H1401421	40	beim Hersteller
PhytoComm	Cang Er Zi	G251H1401322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Cang Er Zi	H1401021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Cang Er Zi	G251H1401123	60	beim Hersteller
PhytoComm	Cao Guo	E251050	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ce Bai Ye	G050H0975021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ce Bai Ye	G050H0975321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chai Hu	H1055922	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chai Hu	G055H1055123	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chai Hu	H1055022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chai Hu	H1055022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chai Hu	G055H1055322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chai Hu	H1055923	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chan Tui	G067H1817121	30	beim Hersteller
PhytoComm	Chan Tui	G067H1817322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chan Tui	421802602	30	beim Hersteller
PhytoComm	Chang Shan	G286E091105	30	beim Hersteller
PhytoComm	Che Qian Zi	410704805	40	beim Hersteller
PhytoComm	Che Qian Zi	G192H0723322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Che Qian Zi	G192H0723121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Che Qian Zi	G192H0723321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chong Wei Zi	G317BP021046	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Bei Mu	G107F110721	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Bei Mu	410717402	70	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Bei Mu	G107F110721	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Bei Mu	H0711921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Chang Pu	403639	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Lian Zi	G157H0306121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Lian Zi	G157H0306221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Mu Tong	H0310021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Mu Tong	G009H0310121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Mu Tong	G009H0310321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Mu Tong	FA0426602	50	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Niu Xi	H0431923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Niu Xi	G318H0431321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Xin Lian	G321F-B0963121	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Chuan Xin Lian	G321FB0963321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Xin Lian	H0963921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Xiong	H0305021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Xiong	G136H0305221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Xiong	H0305021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Xiong	G136H0305121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Chuan Xiong	G136H0305221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Cong Bai	G012BP021314	30	beim Hersteller
PhytoComm	Da Fu Pi	G293H0321221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Da Fu Pi	G293H0321122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Da Fu Pi	G293H0321021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Da Huang	H0320021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Da Huang	G212H0320023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Da Huang	G212H0320322	30	beim Hersteller
PhytoComm	Da Huang	G212H0320023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Da Huang	G212H0320023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Da Huang	G212H0320321	41	beim Hersteller
PhytoComm	Dan Dou Chi	G232H1106321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dan Zhu Ye	H1105921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Gui	G022H1306121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Gui	G022H1306022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Gui	H1306021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Gui	H1306021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Gui	G022H1306023	90	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Gui	G022H1306022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Gui Wei	G312H1307221	60	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Shen	G077H2001222	20	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Shen	H2001021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Dang Shen	H2001021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Deng Xin Cao	G306F100617	60	beim Hersteller
PhytoComm	Deng Xin Cao	F100707	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Fu Zi	G131H0605021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Di Fu Zi	H0605921	30	beim Hersteller
PhytoComm	Di Fu Zi	G131H0605122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Di Gu Pi	G149H0601122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Gu Pi	H0601821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Gu Pi	G149H0601122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Long	G148H0603321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Long	H0603021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Long	G148H0603022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Long	H0603922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Di Yu	410602601	60	beim Hersteller
PhytoComm	Di Yu	G215H0604322	30	beim Hersteller
PhytoComm	Di Yu	G215H0604121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ding Xiang	G058H0210021	58	beim Hersteller
PhytoComm	Ding Xiang	G058H0210021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ding Xiang	H0210921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ding Xiang	B0210601	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Chong Xia Cao	G320FB3052323	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Chong Xia Cao	G320F090802	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Chong Xia Cao	G320F090802	30	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Gua Zi	G049H0551021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Gua Zi	G049H0551221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Gua Zi	G049H0551221	80	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Gua Zi	H0551922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Kui Zi	G001BP030505	30	beim Hersteller
PhytoComm	Dong Kui Zi	G001H0834321	40	beim Hersteller
PhytoComm	E Bu Shi Cao	G061H1801022	40	beim Hersteller
PhytoComm	E Jiao	H0861921	40	beim Hersteller
PhytoComm	E Jiao	G036H0861022	30	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	E Jiao	G036H0861221	40	beim Hersteller
PhytoComm	E Jiao	G036H0861121	60	beim Hersteller
PhytoComm	E Zhu	411119401	40	beim Hersteller
PhytoComm	E Zhu	H1110021	40	beim Hersteller
PhytoComm	E Zhu	G083H1110222	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fan Xie Ye	G227H1223021	80	beim Hersteller
PhytoComm	Fan Xie Ye	G227H1223321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fang Feng	H0728921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fang Feng	H0728922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fang Feng	G217H0728221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fang Feng	G217H0728923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fang Ji	G236H0727123	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fang Ji	G236H0727321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fang Ji	H0727821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Pen Zi	G213H1813122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Pen Zi	G213H1813122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Pen Zi	G213H1813322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Pen Zi	H1813821	70	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Pen Zi	H1813021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Ping	G133E171061	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Shen	G201H1021321	41	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Shen	H1021923	60	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Shen	H1021923	60	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Xiao Mai	H1078021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Xiao Mai	G244H1078121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Zi	G005H0801122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Zi	G005H0801122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Zi	G005H0801122	59	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Zi	G005H0801122	100	beim Hersteller
PhytoComm	Fu Zi	G005H0801322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Gan Cao	G119H0521323	40	beim Hersteller
PhytoComm	Gan Cao	G119H0521121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Gan Cao	H0521923	60	beim Hersteller
PhytoComm	Gan Cao	H0521922	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ge Gen	G206H1301221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ge Gen	G206H1301323	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ge Gen	H1301021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ge Gen	FA1301902	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ge Hua	G303H1302121	90	beim Hersteller
PhytoComm	Ge Hua	G303H1302822	40	beim Hersteller
PhytoComm	Geng Mi	G329B1320001	30	beim Hersteller
PhytoComm	Gu Sui Bu	G094H1011023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Gu Sui Bu	G094H1011221	46	beim Hersteller
PhytoComm	Gu Sui Bu	H1011922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Gu Ya	G177H1513021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Gu Ya	H1513921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Gua Lou Ren	G243H1095123	60	beim Hersteller
PhytoComm	Gua Lou Ren	H1095925	31	beim Hersteller
PhytoComm	Gui Ban Jiao	H2205021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Gui Ban Jiao	G326H2205121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Gui Zhi	H1001923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Gui Zhi	G070H1001221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Gui Zhi	G070H1001422	60	beim Hersteller
PhytoComm	Gui Zhi	G070H1001322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hai Jin Sha	G521BP021024	30	beim Hersteller
PhytoComm	Hai Piao Xiao	G305BP041026	30	beim Hersteller
PhytoComm	Hai Tong Pi	F100709	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hai Tong Pi	G100H1076221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hai Zao	G218F110710	60	beim Hersteller
PhytoComm	Han Lian Cao	G095H0770121	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Han Lian Cao	H0770022	60	beim Hersteller
PhytoComm	Han Lian Cao	G095H0770321	40	beim Hersteller
PhytoComm	He Huan Hua	F100326	30	beim Hersteller
PhytoComm	He Shou Wu	H0718021	40	beim Hersteller
PhytoComm	He Shou Wu	G198H0718222	40	beim Hersteller
PhytoComm	He Tao Ren	G316BP040927	30	beim Hersteller
PhytoComm	He Ye	G170H1170322	40	beim Hersteller
PhytoComm	He Zi	G291H1239021	40	beim Hersteller
PhytoComm	He Zi	G291H1239221	40	beim Hersteller
PhytoComm	He Zi	G291H1239021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Hei Di Yu	410602A601	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hei Pu Huang	G246BP021406P	30	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Hua	G057H0901221	20	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Hua	G057H0901221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Hua	H0901923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Hua	G057H0901322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Hua	G057H0901121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Jing Tian	G237H0906221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Jing Tian	H0906921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Jing Tian	H0906021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Jing Tian	G237H0906123	60	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Jing Tian	G237H0906321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Jing Tian	G237H0906221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hong Teng	G526BP020940	30	beim Hersteller
PhytoComm	Hu Lu Ba	E180929	40	beim Hersteller
PhytoComm	Hu Po	G0041722461	30	beim Hersteller
PhytoComm	Hua Jiao	G533H0307822	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Jing	G196H1206321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Jing	G196H1206121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Jing	H1206821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Lian	G079H1205321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Lian	G079FA1205703	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Lian	G079H1205021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Lian	F41205702	110	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Lian	H1205021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qi	G040H1202222	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qi	H1202923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qi	H1202021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qi	H1202021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qi	G040H1202321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qin	A1204705	60	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qin	G225H1204322	35	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qin	A1204705	60	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qin	G225H1204022	20	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qin	G225H1204121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Huang Qin	G225H1204221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huo Ma Ren	G141H0449121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Huo Ma Ren	411110901	40	beim Hersteller
PhytoComm	Huo Ma Ren	G141H0449321	60	beim Hersteller
PhytoComm	Huo Xiang	H2005921	30	beim Hersteller
PhytoComm	Huo Xiang	H2005021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ji Gu Cao	G300H2104021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ji Nei Jin	H2102021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ji Nei Jin	G259H2102023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ji Nei Jin	G259H2102321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ji Nei Jin	A2102701	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ji Xue Teng	H2101923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jiang Huang	G085H1716321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jiang Huang	H1716021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jiang Huang	G085H1716022	30	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Jiang Huang	G085H1716022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jiang Huang	G085H1716122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Jiao Gu Lan	G065H1276922	30	beim Hersteller
PhytoComm	Jiao Gu Lan	G065H1276121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Jiao Gu Lan	G065F-B1276321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jiao Gu Lan	G065H1276922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jie Cao	H2111921	30	beim Hersteller
PhytoComm	Jie Cao	G256H2111021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jin Qian Cao	G151H0847922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jin Yin Hua	G145H0845021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Jin Yin Hua	G145H0845022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Jin Yin Hua	G145H0845021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jin Yin Hua	G145H0845321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jin Ying Zi	G023H0846221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jing Jie	G221H1038221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jing Jie	G221H1038121	110	beim Hersteller
PhytoComm	Jing Jie Tan	G527BP021047P	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ju Hua	G064H1231221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ju Hua	G064H1231921	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ju Hua	G064H1231021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ju Hua	421208601	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ju Hua	G064H1231921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jue Ming Zi	G059H1098121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jue Ming Zi	G059H1097321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jue Ming Zi	G059H1097221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jue Ming Zi	G059H1097023	40	beim Hersteller
PhytoComm	Jue Ming Zi	G059H1097023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ku Shen	G233H0908121	100	beim Hersteller
PhytoComm	Ku Shen	FA0908901	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ku Shen	G233H0908321	30	beim Hersteller
PhytoComm	Kuan Dong Hua	G276H1219121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Kuan Dong Hua	G276H1219201	40	beim Hersteller
PhytoComm	Kuan Dong Hua	H1219921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Kun Bu	410921501	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lai Fu Zi	G209H1220022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Lai Fu Zi	H1220922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lai Fu Zi	G209H1220321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lai Fu Zi	G209H1220221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Qiao	G105H1132221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Qiao	G105H1132321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Qiao	G105H1132122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Qiao	G105H1132122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Qiao	H1132022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Qiao	H1132021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Zi	411502701	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Zi	G171F110525	60	beim Hersteller
PhytoComm	Lian Zi	G171H1501421	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ling Zhi	G109F-B2405221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ling Zhi	FA2405901	40	beim Hersteller
PhytoComm	Long Gu	G025H1706122	55	beim Hersteller
PhytoComm	Long Gu	G025H1706122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Long Yan Rou	G144H1708922	30	beim Hersteller
PhytoComm	Long Yan Rou	G144H1708221	20	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Gen	F100708	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Gen	G189H2014221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Hui	E322003	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Jiao	G323H1158321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Jiao	G323H1158022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Jiao	G323H1158022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Jiao	G323H1158121	60	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Lu Jiao Shuang	FB1419901	30	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Shuang	411228601	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Shuang	FB1419901	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Shuang	G062H1419421	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Shuang	G062H1419321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Shuang	G062FB1419001	30	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Jiao Shuang	G062H1419221	30	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Lu Tong	G142H1336022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Lu Tong	G142H1336022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Lu Tong	G142H1336122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Lu Tong	G142H1336321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Lu Tong	411313502	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Lu Tong	H1336821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Lu Rong	G296BP031136	30	beim Hersteller
PhytoComm	Luo Han Guo	G143434351	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Bian Cao	G248H1085221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Bian Cao	G248BP012103	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Chi Xian	G255F110310	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Huang	A1101603	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Huang	G097H1101223	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Huang Gen	H1102021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Huang Gen	G278H1102121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ma Huang Gen	G278H1102121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mai Ya	G123H1119321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mai Ya	G123H1119122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Mai Ya	H1119922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Man Jing Zi	G205H1505122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Man Jing Zi	H1505021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Man Jing Zi	G250H1505121	80	beim Hersteller
PhytoComm	Man Jing Zi	G250H1505122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Huan Jun	G510H0418422	60	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Huan Jun	G510H110164	60	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Huan Jun	G510H0418221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Huan Jun	G510F101227	60	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Meng Hua	G054H1088321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Meng Hua	H1088821	30	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Meng Hua	G054BP021404	20	beim Hersteller
PhytoComm	Mi Meng Hua	G054H1088821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mu Hu Die	410918802	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mu Zei	A0427701	30	beim Hersteller
PhytoComm	Mu Zei	G265H0427121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mu Zei	H0427822	40	beim Hersteller
PhytoComm	Mu Zei	G265H0427823	40	beim Hersteller
PhytoComm	Niu Bang Zi	H0433021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Niu Bang Zi	G026H0433321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Niu Bang Zi	G026H0433222	20	beim Hersteller
PhytoComm	Pang Da Hai	G529H0960023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Pang Da Hai	G529H0960023	60	beim Hersteller
PhytoComm	Pei Lan	424540	40	beim Hersteller
PhytoComm	Pei Lan	424540	100	beim Hersteller
PhytoComm	Pei Lan	G374BP010802	30	beim Hersteller
PhytoComm	Pi Pa Ye	G099H0832221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Pi Pa Ye	H0832922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Pu Gong Ying	G239H1315321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Pu Gong Ying	H1315923	30	beim Hersteller
PhytoComm	Pu Gong Ying	H1315821	70	beim Hersteller
PhytoComm	Qian Hu	G185H0926322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Qian Hu	G185H0926121	50	beim Hersteller
PhytoComm	Qian Shi	H0836921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Qian Shi	410712801	30	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Qian Shi	G102H0836121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Qiang Huo	H0840922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Qiang Huo	G172H0840321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Qing Xiang Zi	404460	30	beim Hersteller
PhytoComm	Qing Xiang Zi	G060BP020836	40	beim Hersteller
PhytoComm	Qu Mai	FA1821801	30	beim Hersteller
PhytoComm	Qu Mai	G089BP021802	30	beim Hersteller
PhytoComm	Quan Xie	410619601	40	beim Hersteller
PhytoComm	Quan Xie	G222F110314	30	beim Hersteller
PhytoComm	Ren Dong Teng	G297H0751222	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ren Dong Teng	H0751922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ren Dong Teng	H0751021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ren Shen	G115H0562421	40	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Cong Rong	G072H1460121	20	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Cong Rong	G072H1460921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Cong Rong	H1460921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Cong Rong	G072H1460321	44	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Cong Rong	G072H1460921	30	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Dou Kou	G168BP020616	30	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Gui	H0617923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Gui	G069H0617121	20	beim Hersteller
PhytoComm	Rou Gui	H0617022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ru Xiang	H0820923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ru Xiang	G174H0820123	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ru Xiang	420810603	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ru Xiang	H0820821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ru Xiang	G174H0820321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ruan Zi Cao	BP031117	40	beim Hersteller
PhytoComm	San Leng	G270H0311221	40	beim Hersteller
PhytoComm	San Leng	H0311922	40	beim Hersteller
PhytoComm	San Leng	G270H0311121	60	beim Hersteller
PhytoComm	San Qi	G203H0312021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Bai Pi	G161H1042322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Bai Pi	421011502	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Bai Pi	G161H1042922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Bai Pi	G161H1042121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Bai Pi	H1042922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Shen	G163H1047121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Shen	G163H1047221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Shen	H1047921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Ye	G162H1043121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Ye	H1043021	53	beim Hersteller
PhytoComm	Sang Ye	421013801	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sha Ren	H0939022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sha Ren	420906805	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sha Shen (Bei)	H0754021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sha Yuan (Ji) Zi	G039F110318	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shan Dou Gen	G234H0332121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Shan Dou Gen	G234H0332321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shan Dou Gen	G234H0332021	31	beim Hersteller
PhytoComm	Shan Yao	H0330021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shan Zha	G082H0331022	60	beim Hersteller
PhytoComm	Shan Zha	H0331922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shan Zha	G082H0331324	40	beim Hersteller
PhytoComm	She Chuang Zi	G076H1154021	30	beim Hersteller
PhytoComm	She Chuang Zi	G076H1154122	90	beim Hersteller
PhytoComm	She Gan	G048H1034221	20	beim Hersteller
PhytoComm	She Gan	G048H1034021	40	beim Hersteller
PhytoComm	She Gan	G048H1034021	30	beim Hersteller
PhytoComm	She Gan	G048H1034122	50	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Shen Qu	G156H0935121	90	beim Hersteller
PhytoComm	Shen Qu	H0935922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shen Qu	H0935021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shen Qu	G156H0935421	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shen Qu	G156H0935023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Jiang	G253H0534321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Jiang	G253H0534221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Jiang	H0534022	60	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Jiang	H0534921	60	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Ma	G068H0437121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Ma	H0437922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Ma	G068H0437121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Sheng Ma	G068H0437021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Gao	G120H0541223	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Gao	G120H0541024	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Gao	410505404	60	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Gao	G120H0541024	30	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Gao	G120H0541024	30	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Gao	410505404	70	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Gao	H0541921	60	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Jun Zi	G208H0869321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Wei	H0543821	70	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Wei	H0543021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Shi Wei	G298H0543221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Si Gua Luo	BP041209	40	beim Hersteller
PhytoComm	Suan Zao Ren	H1418021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Suan Zao Ren	G254H1418121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Suo Yang	G260H1831121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Suo Yang	H1439021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Suo Yang	G260H1439022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Suo Yang	G260H1831321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Suo Yang	G260H1831121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tai Zi Shen	G204H0446221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tai Zi Shen	H0446921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tai Zi Shen	G204H0446421	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tao Ren	G184H1007023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Tao Ren	G184H1007122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Tao Ren	G184H1007223	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tao Ren	G184H1007321	30	beim Hersteller
PhytoComm	Tian Nan Xing	G028H0420922	30	beim Hersteller
PhytoComm	Tian Nan Xing	G028H0420922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tian Nan Xing	H0420821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tian Zhu Huang	G045433460	24	beim Hersteller
PhytoComm	Ting Li Zi	G135H1340121	80	beim Hersteller
PhytoComm	Ting Li Zi	411312402	39	beim Hersteller
PhytoComm	Ting Li Zi	H1340022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Tong Cao	G531H1141021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Tong Cao	H1141021	35	beim Hersteller
PhytoComm	Tu Fu Ling	G231H0325121	100	beim Hersteller
PhytoComm	Tu Fu Ling	G231H0325121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tu Fu Ling	G231H0325321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Tu Fu Ling	FA0325701	30	beim Hersteller
PhytoComm	Tu Fu Ling	H0325922	20	beim Hersteller
PhytoComm	Tu Si Zi	H1243022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Tu Si Zi	H1243923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wang Bu Liu Xing	H0456721	70	beim Hersteller
PhytoComm	Wang Bu Liu Xing	H0456021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wang Bu Liu Xing	G281H0456221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wang Bu Liu Xing	G281H0456322	39	beim Hersteller
PhytoComm	Wei Ling Xian	G075H0943223	20	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Wei Ling Xian	420905402	60	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Gong	G311H1411021	110	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Gong	G311H1411321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Jia Pi	H0402821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Jia Pi	G002H0402321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Jia Pi	H0402021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Ling Zhi	H0403922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Mei	G167H1026121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Mei	G167H1026221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Mei	H1026021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Mei	G167H1026321	31	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Tian	G532E151029	25	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Wei Zi	G220H0401122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Wei Zi	H0401021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Wei Zi	FA0401801	60	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Yao	H1025921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Yao	H1025021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Yao	G140H1025221	20	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Zhu Yu	H0766921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Zhu Yu	G103H0766321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Zhu Yu	G103H0766022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Zhu Yu	G103H0766021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Zhu Yu	G103H0766022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Zhu Yu	G103H0766322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Wu Zhu Yu	G103H0766021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xi Xin	A1123702	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xi Yang Shen	G324H0647021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064022	39	beim Hersteller
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064421	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xia Ku Cao	H1064922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Xian He Cao	G008H0547121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Xian He Cao	G008H0547321	39	beim Hersteller
PhytoComm	Xian Mao	G304H0549021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Xian Mao	G304H0549021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Xian Mao	G304H0549021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xian Mao	G304H0549321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xiao Hui Xiang	G104H0339321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xiao Hui Xiang	H0339021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xie Bai	G504H1830421	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xie Bai	G504H1830321	50	beim Hersteller
PhytoComm	Xie Bai	G504BP041705	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xie Bai	G504H1830121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Xuan Fu Hua	H1168921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xuan Fu Hua	G126H1168121	20	beim Hersteller
PhytoComm	Xue Jie	G322H0631221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Xue Jie	G322H0631921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yan Hu Suo	G081F1000301	30	beim Hersteller
PhytoComm	Yan Hu Suo	G081H0805221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ye Jiao Teng	H0885922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ye Jiao Teng	H0885021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ye Ju Hua	FA1187801	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ye Ju Hua	G514H1187021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ye Ju Hua	G514H1187021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ye Ju Hua	G514H1187021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Mu Cao	G134H1050321	30	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Mu Cao	H1050022	40	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Yi Mu Cao	G134H1050024	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Mu Cao	G134H1050023	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Mu Cao	G134H1050023	30	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Yi Ren	G078H1701323	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Yi Ren	G078H1701222	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Yi Ren	H1701021	32	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Yi Ren	H1701923	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Zhi Ren	G015H1051321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Zhi Ren	G015H1051022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Zhi Ren	G014H1051221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Zhi Ren	G015H1051022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Yi Zhi Ren	H1051922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yin Chai Hu	G368H1444221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yin Chen Hao	G034H1030022	60	beim Hersteller
PhytoComm	Yin Chen Hao	H1030021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yin Chen Hao	G034H1030121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yin Qiao San	G646EG613003	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yin Xing Ye	G518H1445021	30	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Jin	H2201021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Jin	G084H2201322	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Jin	G084H2201221	20	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Jin	422901803	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Li Ren	H0967922	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Xing Cao	G124H1149122	60	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Xing Cao	G124H1149222	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Zhu	G195H0517121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Zhu	H0517022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Zhu	G195H0517321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Zhu	H0517022	20	beim Hersteller
PhytoComm	Yu Zhu	H0517722	31	beim Hersteller
PhytoComm	Yuan Zhi	G194H1406222	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yuan Zhi	421401802	40	beim Hersteller
PhytoComm	Yuan Zhi	H1406924	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zao Jiao	G116H0713822	100	beim Hersteller
PhytoComm	Zao Jiao	G116H0713821	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ze Lan	G268H1606021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ze Lan	G268H1606021	60	beim Hersteller
PhytoComm	Ze Lan	G268H1606022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Ze Lan	G268H1606022	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Shi	G044H0922021	25	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Shi	G044H0922321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Shi	G044H0922221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Shi	H0922921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Shi	G044H0922121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Zi	G110H1137022	28	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Zi	G110H1137121	60	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Zi	G110H1137022	30	beim Hersteller
PhytoComm	Zhi Zi	G110H1137321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhu Ru	G047H0625321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhu Ru	G047H0625121	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhu Ru	410608502	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhu Ru	G047H0625122	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zhu Ru	G047H0625122	20	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Hua Di Ding	G249H1216121	50	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Hua Di Ding	G249H1216321	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Hua Di Ding	H1216021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Hua Di Ding	411125601	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Su Zi	H1213921	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Wan	G038H1215022	25	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Wan	G038H1215022	30	beim Hersteller

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren	Zertifikat
PhytoComm	Zi Wan	G038H1215221	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Wan	H1215021	40	beim Hersteller
PhytoComm	Zi Wan	G038H1215022	40	beim Hersteller
r	Kaliumcitrat	zu erfassen	1	entfällt
Rietzschel	Riboflavinphosph...	123456	6	entfällt
Roth	Brillant Blau R ...	314217301	60	zu erfassen
Roth	Desoxycholsäure ...	351172090	40	20120112
Roth	Trypanblau (C.I. ...	204209355	60	zu erfassen
Safic-Alcan	Preiselbeer-Troc. ...	17320/01	40	AR-12-FG-008822-01
Sigma-Aldrich	Bromelain	BCBM1589V	40	entfällt
softline	Maltodextrin	940PLV-643	40	20090929
Spinnrad	Emulsan II SP	111300063	40	zu erfassen
Spinnrad	Hyaluronsäure	51240342	40	1402304
Spinnrad	Inulin	2013481819	30	20131203
Spinnrad	Inulin	413300431	40	AR-14-FG-012296-01
VMP Chemiekon...	D-(+)-Glucosamin...	144212943	40	zu erfassen
zu erfassen	Carmellose-Natri...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Cetylpalmitat 15	zu erfassen	17	entfällt
zu erfassen	Clobetasolpropio...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Coffeincitrat	zu erfassen	30	entfällt
zu erfassen	Griseofulvin	9B13-N08	40	entfällt
zu erfassen	Histamindihydroc...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Hydroxyethylcell...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Kakaobutter	zu erfassen	50	entfällt
zu erfassen	Kakaobutter	zu erfassen	50	entfällt
zu erfassen	Kaliummonohydrog...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Lidocain	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Magnesiumsulfat-...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Naloxonhydrochlo...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Natriumacetat-Tr...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Natriumbutytrat	zu erfassen	30	entfällt
zu erfassen	Natriumthiosulfat	zu erfassen	40	AR-13-FG-01882-01
zu erfassen	Oxybuprocainhydr...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Polymyxin-B-sulfat	zu erfassen	35	entfällt
zu erfassen	Tretinoin, mikro...	zu erfassen	40	entfällt
zu erfassen	Tropicamid	zu erfassen	40	AR-13-FG-008659-01
zu erfassen	Weisser Ton	zu erfassen	50	entfällt

Anhang C: Zusätzliche Validierproben (Typ C)

In die Validierung mit Spektren aus dem Feld gehen die Spektren von Substanzen ein, die nicht mit diesem Modell identifiziert werden können. Auf diese Weise wird überprüft, dass das Modell auch unbekannte Substanzen abweist. Die Spektren dieser Proben wurden durch *Apo-Ident*-Kunden aufgenommen. Sie gehören zum Typ C. Die durch den Kunden gemachten Angaben zu Hersteller und Chargen-Nummer übernimmt die *HiperScan GmbH* weitgehend ungeprüft.

Die Proben stammen aus 7272 Chargen. Daran wurden 16 114 Spektren aufgenommen. Die Validierspektren von unabhängigen Proben aus dem Feld, die von Substanzen stammen, die mit dem Modell identifiziert werden können, sind bei den einzelnen Substanzen jeweils im Abschnitt *Typ C* aufgelistet und tauchen in dieser Liste nicht noch einmal auf.

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
A.H. 03.06.13 ek: 6,50EUR	Progesteron, mikronisiert	1304014-01	1
A.H. 14.06.13 ek: 3,97EUR	Hydrochinon	12288505	6
ADH, 11.10.2013	Chloramphenicol	13A11-N02	7
agron/Krieger	Betamethasonvalerat	12B2B-N01	1
AHC 01.07.13 EK 48,05	Betamethasonvalerat	12K07-N23	3
AHC 04.07.13 EK38,50	Erythromycin	12156207	4
AHC 06.02.13 EK 3,27	Tricalciumphosphat	1206002-01	3
AHC 12.08.13 EK9,31	Sulfacetamid	11085912	1
AHC 14.08.13 EK40,14	Minoxidil	1210056-02	23
AHD	Anis	13037809	5
AHD	Chloramphenicol	12248507	7
AHD	Clindamycinhydrochlorid	130402X5	1
AHD	Hydrochinon	13105405	3
AHD	Lysinhydrochlorid	L1304015-01	1
AHD, 02,12,13	Hydrocortison	12104309	2
AHD, 02,12,13	Triclosan	12359112	2
AHD, 08.11.13	Prednisolonacetat	12324506	7
AHD, 11.09.2013	Erythromycin	12152210	1
AHD, 24.05.2013	Clobetasolpropionat	12342307	2
AHD, 24.09.2013	Captopril	12339608	1
AHD, 24.09.2013	Dequaliniumchlorid	12077508	2
AHD, 26.08.13	Diltiazemhydrochlorid	13A02-N05	5
AHD, 30.10.2013	Kampfer	747564	1
Alfred Galke	Kümmel	20069	1
Alliance	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	13025401	3
Alliance	Bismutgallat, basisches	12172402	2
Alliance	Clobetasolpropionat	12342305	1
Alliance	Diltiazemhydrochlorid	12133009	4
Alliance	Diltiazemhydrochlorid	12133008	2
Alliance	Metronidazol	12339502	15
Alliance	Mönchspfefferfrüchte	12274010	9
Alliance	Natriumhydrogencarbonat, gep...	12324704	3
Alliance	Wachs	280A130115	6
Alliance Health	Erythromycin	120503502	3
Alliance Health 08.03.2...	Lidocainhydrochlorid	1010024-01	1
Alliance Health 27.05.2...	Estradiol-Hemihydrat	9A09-N26	1
Alliance Healthc. 15.05...	Minoxidil	1203035-03	14
Alliance healthcare	Natriummonohydrogenphosphat...	12L05-N04	1
Alliance Healthcare	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	13025404	1
Alliance Healthcare	Cetylpalmitat 15	13131905	2
Alliance Healthcare	Diltiazemhydrochlorid	12I12-N02	2
Alliance Healthcare	Estradiolbenzoat	1301006-01	1
Alliance Healthcare	Natriumedetat	12181714	3
Alliance Healthcare	Oxytetracyclinhydrochlorid	1205222-01	1
Alliance Healthcare	Polymyxin-B-sulfat	1202039-02	3
Alliance Healthcare	Progesteron, mikronisiert	1206024-02	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Alliance Healthcare	Spironolacton	12049129	1
Alliance Healthcare	Spironolacton	12049119	1
Alliance Healthcare/Hed. . .	Furosemid	12/13-N06	1
Alliance Healthcare/Hed. . .	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	1309020-02	1
aloe	Kap-Aloe, geschn.	12338201	1
Amos Vital	Ascorbinsäure	L1120454	1
Amos Vital	Ascorbinsäure	L1230216	2
AmsVital GmbH	Ascorbinsäure	L1220572	1
Anzag	Allantoin	10318315	1
Anzag	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. . .	1218441	1
Anzag	Bärlauchkraut, geschn.	11182207	2
Anzag	Betamethasonvalerat	11K18N09	1
Anzag	Bismutgallat, basisches	12e16-n03	1
Anzag	Chloralhydrat	12C26M04	1
Anzag	Chlorhexidindiacetat	70558377	1
Anzag	Citronensäure, wasserfreie	10049713	1
Anzag	Citronensäure, wasserfreie	10049712	1
Anzag	Dexamethason	1233305	1
Anzag	Dithranol	120302502	2
Anzag	Emulgierender Cetylstearylal. . .	12G02-N04	2
Anzag	Ethacridinlactat-Monohydrat	111201	4
Anzag	Glycerolmonostearat 60	12180502	1
Anzag	Hydrocortison	11260305	2
Anzag	Indische Flohsamen	11185818	1
Anzag	Kakaobutter	12342004	1
Anzag	Leinsamen	12137105	1
Anzag	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	111201301	1
Anzag	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	120802501	1
Anzag	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1304003-01	1
Anzag	Maisgriffel, geschn.	10325905	2
Anzag	Maisgriffel, geschn.	274920	1
Anzag	Mannit	111000902	1
Anzag	Miconazolnitrat	12243801	2
Anzag	Mometasonfuroat, mikronisiert	12J29N03	1
Anzag	Neomycinsulfat	12H20-N04	1
Anzag	Nystatin	2902041-02	1
Anzag	Polymyxin-B-sulfat	11K28-N07	1
Anzag	Prednisolonacetat	13A07N07	1
Anzag	Procainhydrochlorid	60998058	1
Anzag	Salicylsäure	12036208	1
Anzag	Triamcinolonacetonid	APB0544/112020T	1
Anzag	Trichloressigsäure	12135204	2
Anzag	Trometamol	12113512	9
Anzag	Xylometazolinhydrochlorid	12027911	1
Anzag 01.02.2013	Hydrocortisonacetat	1112031-02	8
Anzag 01.02.2013	Prednisolonacetat	12091813	1
Anzag 04.02.13 ek: 3,95EUR	Ammoniumhydrogencarbonat	12022308	1
Anzag 07.02.13 ek: 40,14EUR	Minoxidil	120303503	3
Anzag 09.01.2013	Hydrocortison	12104307	11
Anzag 12.03.2013	Chloramphenicol	1209019-01	11
Anzag 122.04.13 ek: 3,76EUR	Butylhydroxytoluol	12280206	4
Anzag 13.02.13 ek: 4,20EUR	Getrocknetes Magnesiumsulfat	11265910	1
anzag 13.09.13	Resorcin	12K30N30	1
Anzag 14.11.12 ek:40,14	Minoxidil	120303501	3
Anzag 14.12.12 ek:10,01	Hydrocortison	1202032-01	3
Anzag 15.10.12	Anis	11101213	4
Anzag 15.11.2012	Chloramphenicol	11370705	5
Anzag 16.10.12 ek:2,05EUR	Mönchspfefferfrüchte	12016909	2
Anzag 17.04.13 ek: 9,65EUR	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen. . .	104A120621	3
Anzag 18.04.13 ek: 8.89EUR	Triclosan	12L06N01	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Anzag 19.09.2012	Senfsamen, weiß, gepulvert	11114409	2
Anzag 21.02.2013	Testosteronpropionat	AP12E04-N01TP	2
Anzag 22.02.2013	Hydrochinon	12288503	2
Anzag 22.03.13 ek: 5,69EUR	Kap-Aloe, gepulvert	12232102	1
Anzag 23.11.12 ek:26,49	Erythromycin	1205035-01	7
Anzag 24.10.12	Betamethasonvalerat	12003405	9
Anzag 24.10.12	Butylhydroxytoluol	12207004	1
Anzag 29.04.13 ek: 4,55EUR	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12138518	3
Anzag 29.11.12 ek:7,51	Lactose-Monohydrat	12139914	4
Anzag ek: 15,60 20.07.2. . .	Isländisches Moos, geschn.	11101605	2
Anzag ek: 2,59EUR 19.09.12	Kümmel	11003216	3
Anzag ek: 7,28EUR	Iodoform	12070102	1
Anzag ek:10.01EUR 18.07.12	Hydrocortison	1107005-03	7
Anzag ek:7.89EUR	Dequaliniumchlorid	11166204	3
Anzag ek:8.77EUR 30.08.12	Manna, geschn.	11308904	3
Anzag/	Dithranol	APDT3652011	1
Anzag/	Methyl-4-hydroxybenzoat	201111251	1
Anzag/	Rosmarinblätter, geschn.	268132	1
Anzag/	Triclosan	5846205	3
Anzag/ Hedinger	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	206027	2
Anzag/Gehe Balance	Ascorbinsäure	L1210232	1
Anzag: 07.09.12 ek:4.01	Chlortetracyclinhydrochlorid	12C16-N01	1
Apomix / AHD	Testosteronpropionat	40/14	1
Apomix/Noweda	Bismutgallat, basisches	13D19-N02	8
Apotheke in Steinkuhl	Trometamol	120104/11	1
Audor Pharma	Alfatradiol	XP103DAA	1
Audor Pharma	Alfatradiol	ap9374311a	1
Audor Pharma	Alfatradiol	AP9374-3/11A	1
Audor Pharma	Alfatradiol	AP9374-2/10A	1
Audor Pharma	Alfatradiol	APXP103DAA	1
Audor Pharma	Dithranol	APDT/375/2012D	8
Audor Pharma	Dithranol	DT/365/2011D	1
Audor Pharma	Dithranol	APDT/351/2010D	1
Audor Pharma	Dithranol	APDT3752012D	2
Audor Pharma	Dithranol	APDT/365/2011	3
Audor Pharma	Dithranol	DT/375/2012D	3
Audor Pharma	Methoxsalen	AP1011024-01M	1
Audor Pharma	Minoxidil	AP010/12M	6
Audor Pharma	Minoxidil	AP020/11M	5
Audor Pharma	Minoxidil	AP23601ML	1
Audor Pharma	Minoxidil	AP001/11M	1
Audor Pharma	Naphazolininnitrat	12I21-N05	1
Audor Pharma	Nystatin	AP11G07-N12N	1
Audor Pharma	Nystatin	11C07-N05N	1
Audor Pharma	Nystatin	AP11K11-N04N	1
Audor Pharma	Prasteron	10050051/1P	1
Audor Pharma	Prasteron	AP11040002P	3
Audor Pharma	Pregnenolon	AP1109007-01P	1
Audor Pharma	Pregnenolon	AP10L10-M01P	1
Audor Pharma	Progesteron, mikronisiert	APC01-120708P	3
Audor Pharma	Progesteron, mikronisiert	APC01-120613P	1
Audor Pharma	Progesteron, mikronisiert	C01-120708P	1
Audor Pharma	Testosteronpropionat	AP1109024-03TP	1
Audor Pharma	Testosteronpropionat	AP12E04N01TP	2
Audor Pharma	Testosteronpropionat	AP-12J10-N08Tp	1
Audor Pharma	Uridin	AP721060040/5U	2
Azelis	Citronensäure-Monohydrat	TH4120517	1
Bahnhof-Apotheke	Anis	7-120913	1
Bahnhof-Apotheke	Eichenrinde, geschn.	17-121106	1
Bahnhof-Apotheke	Flohsamen	3-121005	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Bahnhof-Apotheke	Kümmel	18-120709	1
Bahnhof-Apotheke	Maisgriffel, geschn.	20-121018	1
Bahnhof-Apotheke	Rosmarinblätter, geschn.	7-120915	1
Bahnhof-Apotheke Kempten	Lactose-Monohydrat	120808	1
Bahnhofapotheker	Lactose-Monohydrat	140401	1
BASF Grenzach/Noweda	Triclosan	5900346	1
BASF, Noweda	Povidon-Iod	1110013-02	2
Bayer-Schering	Estradiolbenzoat	1007037-03	1
Berco	Maltodextrin	10s945-3	1
BfB	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12L10-N07	5
Bionorica	Palmitoylascorbinsäure	74736	1
Bionorica	Palmitoylascorbinsäure	74962	1
Bionorica /Phönix	Miconazolnitrat	12C13B03-279593	1
Bionorica/Noweda	Palmitoylascorbinsäure	77773	2
Bios	Lu Hui	424263	3
Bios	Rou Cong Rong	434550	1
Bombastus	Acetylsalicylsäure	1212005-01	3
Bombastus	Anis	268180	1
Bombastus	Bittere Mandeln	275001	2
Bombastus	Bittere Mandeln	267467	2
Bombastus	Dillspitzen, geschn.	50836505	1
Bombastus	Eichenrinde, geschn.	274392	2
Bombastus	Eichenrinde, geschn.	272704	1
Bombastus	Emulgierender Cetylstearylal. . .	265360	1
Bombastus	Emulgierender Cetylstearylal. . .	278418	1
Bombastus	Folsäure	1613052301	1
Bombastus	Gelbwurz, javanisch, geschn.	282221	1
Bombastus	Hartfett, pastilliert	277212	3
Bombastus	Hartfett, pastilliert	60084402	1
Bombastus	Hartfett, pastilliert	273759	1
Bombastus	Hydrocortisonacetat	2712M01718	1
Bombastus	Koriander	263733	1
Bombastus	Kornblumenblüten ohne Kelch	275759	1
Bombastus	Kümmel	275849	1
Bombastus	Kümmel	270278	1
Bombastus	Kümmel	272730	1
Bombastus	Kümmel	277491	1
Bombastus	Lactose-Monohydrat	275225/0	1
Bombastus	Lactose-Monohydrat	275194/0	1
Bombastus	Lactose-Monohydrat	272680/0	1
Bombastus	Lactose-Monohydrat	274926	1
Bombastus	Leinsamen	269500	1
Bombastus	Leinsamen	282734	3
Bombastus	Leinsamen	278457	6
Bombastus	Leinsamen	274032	1
Bombastus	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	277424	1
Bombastus	Maisgriffel, geschn.	271033	1
Bombastus	Methyl-4-hydroxybenzoat	1212011-01	5
Bombastus	Natriummonohydrogenphosphat- . . .	11H04-N06	1
Bombastus	Nichtionische emulgierende A. . .	267575	2
Bombastus	Nichtionische emulgierende A. . .	274059	1
Bombastus	Norethisteronacetat	13J08-N04	1
Bombastus	Rosmarinblätter, geschn.	281843	1
Bombastus	Rosmarinblätter, geschn.	277128	1
Bombastus	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen. . .	12214303	2
Bombastus	Wachs	267702	2
Bombastus	Wachs	270682	3
cae	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363104	3
Caelo	5-Aminolevulinsäurehydrochlo. . .	13017402	1
Caelo	5-Aminolevulinsäurehydrochlo. . .	12093205	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	5-Aminolevulinsäurehydrochlo...	11355616	1
Caelo	5-Aminolevulinsäurehydrochlo...	13K27-N02	1
Caelo	Acetylcystein	10230708	1
Caelo	Acetylcystein	10230713	1
Caelo	Acetylcystein	12299002	1
Caelo	Acetylsalicylsäure	11239703	1
Caelo	Acetylsalicylsäure	12212236	2
Caelo	Acetylsalicylsäure	13324109	1
Caelo	Acetylsalicylsäure	12212223	2
Caelo	Alfatradiol	11061004	1
Caelo	Alfatradiol	10319904	1
Caelo	Alfatradiol	11061001	1
Caelo	Alfatradiol	12164201	4
Caelo	Alfatradiol	13130806	1
Caelo	Alfatradiol	12H29N05	1
Caelo	Alfatradiol	13130805	4
Caelo	Alfatradiol	12164207	6
Caelo	Alfatradiol	13201605	1
Caelo	Alfatradiol	13130808	1
Caelo	Alfatradiol	10319909	1
Caelo	Alfatradiol	11161805	5
Caelo	Alfatradiol	11161807	3
Caelo	Allantoin	10318305	1
Caelo	Allantoin	10064015	1
Caelo	Allantoin	10064012	1
Caelo	Allantoin	12251509	1
Caelo	Allantoin	12374403	6
Caelo	Allantoin	11247510	4
Caelo	Allantoin	12374415	1
Caelo	Allantoin	11247504	3
Caelo	Allantoin	11247511	1
Caelo	Allantoin	81542358	3
Caelo	Allantoin	12bo9-no8	1
Caelo	Allantoin	20140612-15	1
Caelo	Allantoin	12374404	2
Caelo	Allantoin	1113E-01087	1
Caelo	Allantoin	12251501	7
Caelo	Allantoin	10318304	1
Caelo	Allantoin	10318313	2
Caelo	Allantoin	2713431	1
Caelo	Allantoin	1225101	1
Caelo	Allantoin	10064008	1
Caelo	Allantoin	12251502	2
Caelo	Allantoin	12251505	8
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12323710	3
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1204026-01	19
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12047514	5
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12047508	4
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	3113E-01095	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1233702	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	10251307	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11229907	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114902	2
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114908	5
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114904	2
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12323711	7
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12323717	3
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12323702	9
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11229917	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	10251314	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11229913	2
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114920	5
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11229906	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114906	5
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12127-N01	4
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11229905	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114918	11
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11229914	2
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12047512	1
Caelo	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12047505	4
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	11218611	2
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12022406	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	504311092	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	11017211	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12184408	2
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12184406	2
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	13025404	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	11254805	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	1218411	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12184401	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12022406	3
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12144605	2
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12184407	2
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12184411	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12184402	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12184407	3
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	12 24-M03	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	13098702	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	11G01-N04	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	510211092	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	2713Q1092	1
Caelo	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. .	13025401	2
Caelo	Ammoniumchlorid	12240302	2
Caelo	Ammoniumchlorid	10176319	2
Caelo	Ammoniumchlorid	12356101	3
Caelo	Ammoniumchlorid	10176309	1
Caelo	Ammoniumhydrogencarbonat	11145612	2
Caelo	Ammoniumhydrogencarbonat	13104601	1
Caelo	Anis	13037806	1
Caelo	Anis	13037807	1
Caelo	Anis	11370304	6
Caelo	Anis	11370301	6
Caelo	Anis	13333902	3
Caelo	Anis	111101213	1
Caelo	Anis	11101215	3
Caelo	Anis	13037901	1
Caelo	Anis	10247202	1
Caelo	Anis	133333902	1
Caelo	Anis	13333901	2
Caelo	Anis	13333907	1
Caelo	Anis	zu erfassen	1
Caelo	Anis	13037808	6
Caelo	Anis	13037802	8
Caelo	Anis	13037804	2
Caelo	Anis	11370308	5
Caelo	Anis	11101214	4
Caelo	Anis	13037801	1
Caelo	Anis	13333903	2
Caelo	Anis	11101202	1
Caelo	Anis	13037808-3560412014	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Anis	10247203	2
Caelo	Anis	1137033	1
Caelo	Anis	1307809	1
Caelo	Anis	411081/1	1
Caelo	Anis	12226402	5
Caelo	Ascorbinsäure	12350003	1
Caelo	Ascorbinsäure	12350005	1
Caelo	Ascorbinsäure	11208606	1
Caelo	Atropinsulfat	12244206	1
Caelo	Bai Guo	g114h0509022	1
Caelo	Bärlauchkraut, geschn.	12380801	1
Caelo	Bärlauchkraut, geschn.	12380802	2
Caelo	Bärlauchkraut, geschn.	11182204	1
Caelo	Bentonit	1307016-01	1
Caelo	Bentonit	1311014-01	1
Caelo	Benzocain	12115008	2
Caelo	Benzocain	11127506	1
Caelo	Benzocain	91062169	1
Caelo	Benzocain	10072603	1
Caelo	Benzocain	12115007	2
Caelo	Benzocain	13213502	3
Caelo	Benzocain	12341904	5
Caelo	Benzocain	1012ben	1
Caelo	Benzocain	13213509	1
Caelo	Benzocain	12341906	1
Caelo	Benzocain	11305206	1
Caelo	Benzocain	11127508	2
Caelo	Benzocain	12115011	1
Caelo	Benzoessäure	13074605	2
Caelo	Benzoessäure	13074610	2
Caelo	Benzoessäure	90179109	1
Caelo	Benzoessäure	10156104	1
Caelo	Betamethason, mikronisiert	120104/13	1
Caelo	Betamethasonvalerat	10296705	1
Caelo	Betamethasonvalerat	12003407	1
Caelo	Betamethasonvalerat	13D03-N07	30
Caelo	Betamethasonvalerat	11131914	4
Caelo	Betamethasonvalerat	1203403	1
Caelo	Betamethasonvalerat	12229810	3
Caelo	Betamethasonvalerat	13225505	1
Caelo	Betamethasonvalerat	12229812	8
Caelo	Betamethasonvalerat	12229808	9
Caelo	Betamethasonvalerat	12003409	4
Caelo	Betamethasonvalerat	3110025	1
Caelo	Betamethasonvalerat	12229811	4
Caelo	Betamethasonvalerat	12229809	2
Caelo	Betamethasonvalerat	13091204	2
Caelo	Betamethasonvalerat	12003411	3
Caelo	Betamethasonvalerat	13225503	1
Caelo	Betamethasonvalerat	13091206	3
Caelo	Betamethasonvalerat	120801401	2
Caelo	Betamethasonvalerat	10296701	1
Caelo	Betamethasonvalerat	13091210	3
Caelo	Betamethasonvalerat	3110031	1
Caelo	Betamethasonvalerat	12003406	3
Caelo	Betamethasonvalerat	13091212	2
Caelo	Betamethasonvalerat	13091203	7
Caelo	Betamethasonvalerat	11131917	4
Caelo	Betamethasonvalerat	12003403	8
Caelo	Betamethasonvalerat	11131906	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Betamethasonvalerat	12003410	2
Caelo	Betamethasonvalerat	12229802	3
Caelo	Betamethasonvalerat	12229806	4
Caelo	Betamethasonvalerat	13091205	3
Caelo	Betamethasonvalerat	2x12229813	1
Caelo	Betamethasonvalerat	12229804	2
Caelo	Betamethasonvalerat	13091207	4
Caelo	Betamethasonvalerat	12229805	9
Caelo	Betamethasonvalerat	12003404	2
Caelo	Bibergeil, gepulvert	o810I-01236	1
Caelo	Biotin	12A23-N03	1
Caelo	Bismutgallat, basisches	92057409	1
Caelo	Bismutgallat, basisches	12172409	3
Caelo	Bismutgallat, basisches	10D23-N05	1
Caelo	Bismutgallat, basisches	5208I-01185	1
Caelo	Bismutgallat, basisches	8129768	1
Caelo	Bismutgallat, basisches	12166901	2
Caelo	Bismutgallat, basisches	12c13-no3	1
Caelo	Bismutgallat, basisches	12172401	2
Caelo	Bismutgallat, basisches	81297468	2
Caelo	Bitterer Fenchel	12094711	1
Caelo	Bitterer Fenchel	1209474	1
Caelo	Bitterer Fenchel	nachprüfung	1
Caelo	Bitterer Fenchel	12094710	1
Caelo	Bitterer Fenchel	12035102	2
Caelo	Bitterer Fenchel	13200401	4
Caelo	Bitterer Fenchel	1320041	1
Caelo	Bitterer Fenchel	1302081	1
Caelo	Bitterer Fenchel	13200402	1
Caelo	Bitterer Fenchel	12167102	2
Caelo	Bitterer Fenchel	13020802	4
Caelo	Bockshornsamen, gepulvert	7264a110201	2
Caelo	Bockshornsamen, gepulvert	12149607	1
Caelo	Borsäure	10227913	1
Caelo	Borsäure	12238901	1
Caelo	Borsäure	1234	1
Caelo	Borsäure	12260507	1
Caelo	Borsäure	9324036	1
Caelo	Brennnesselsamen	12131505	1
Caelo	Brennnesselsamen	12131507	1
Caelo	Brennnesselsamen	13010612	2
Caelo	Bruchkraut, geschn.	11104505	1
Caelo	Bruchkraut, geschn.	11104507	6
Caelo	Bruchkraut, geschn.	13007507	5
Caelo	Budesonid, mikronisiert	1305004-01	2
Caelo	Budesonid, mikronisiert	21100M1	1
Caelo	Budesonid, mikronisiert	11351706	2
Caelo	Budesonid, mikronisiert	11351707	3
Caelo	Budesonid, mikronisiert	11351703	1
Caelo	Budesonid, mikronisiert	12295103	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	12158201	3
Caelo	Butylhydroxytoluol	1220705	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	12158204	3
Caelo	Butylhydroxytoluol	2113U02851	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	12280201	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	12382304	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	12382309	3
Caelo	Butylhydroxytoluol	12280203	4
Caelo	Butylhydroxytoluol	12382307	2
Caelo	Butylhydroxytoluol	122080206	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Butylhydroxytoluol	12207005	2
Caelo	Butylhydroxytoluol	13354604	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	20161112-1	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	11131006	1
Caelo	Butylhydroxytoluol	12382302	4
Caelo	Calciumascorbat	12097406	1
Caelo	Calciumascorbat	13105608	1
Caelo	Calciumascorbat	11159915	1
Caelo	Calciumchlorid-Dihydrat	12341409	1
Caelo	Calciumchlorid-Dihydrat	8237314	1
Caelo	Calciumchlorid-Dihydrat	12B09-N11	1
Caelo	Calciumchlorid-Dihydrat	12238401	2
Caelo	Calciumchlorid-Dihydrat	12341401	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11349320	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11349318	4
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	nachprüfung	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310411	2
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310401	3
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	2114M1209	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11349325	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	13391203	2
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1168813	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11168803	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1168806	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	50/6	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11349315	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310418	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310406	2
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	13391205	2
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11168806	4
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310403	2
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310407	2
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310402	2
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310413	3
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	12310417	3
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	133912042x	1
Caelo	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11349313	1
Caelo	Calciumgluconat	1235813	1
Caelo	Calciumgluconat	12335813	1
Caelo	Calciumgluconat	11121607	1
Caelo	Calciumgluconat	12335810	1
Caelo	Calciumglycerophosphat	12012413	1
Caelo	Calciumglycerophosphat	13007912	1
Caelo	Calciumglycerophosphat	12012406	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	12212816	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	12212813	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	12212822	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	12212812	2
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	10135222	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	12212804	6
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	12212806	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	10135216	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	13170701	2
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	13170704	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	10135228	1
Caelo	Calciumhydrogenphosphat, gep. . .	10135201	1
Caelo	Calciumlactat-Pentahydrat	13080804	2
Caelo	Calciumlactat-Pentahydrat	13080805	2
Caelo	Calciumlactat-Pentahydrat	11369610	1
Caelo	Calciumlactat-Pentahydrat	11369614	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Calciumlactat-Pentahydrat	11369618	1
Caelo	Calciumlactat-Pentahydrat	13080802	2
Caelo	Calciumpantothenat	12340819	1
Caelo	Calciumpantothenat	1013Q-03022	1
Caelo	Calciumpantothenat	12236622	1
Caelo	Calciumpantothenat	12340808	2
Caelo	Calciumsulfat-Dihydrat, gepu. . .	10132403	1
Caelo	Calciumsulfat-Dihydrat, gepu. . .	11164005	1
Caelo	Calciumsulfat-Dihydrat, gepu. . .	12257703	4
Caelo	Calciumsulfat-Dihydrat, gepu. . .	12257701	1
Caelo	Calciumsulfat-Dihydrat, gepu. . .	12316301	1
Caelo	Calciumsulfat-Hemihydrat	9246322	2
Caelo	Captopril	12339605	3
Caelo	Captopril	12F29-N04	1
Caelo	Captopril	14196906	1
Caelo	Captopril	12339619	1
Caelo	Captopril	14196903	1
Caelo	Captopril	12339611	2
Caelo	Captopril	12339607	2
Caelo	Captopril	12339606	1
Caelo	Captopril	12339610	1
Caelo	Captopril	12339604	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13194507	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274922	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13186203	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	2913M1232	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274907	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13194505	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274910	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274908	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11013605	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274914	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11351605	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	14016208	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13186201	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13194501	3
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11351604	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11351618	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13186207	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13194507	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274907	5
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11013613	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274912	3
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274908	3
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11013605	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13194503	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11351623	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11307511	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13186205	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13186207	2
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	13194503	1
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	12274916	7
Caelo	Carbomer 35000 / 50000	11351618	1
Caelo	Carmellose-Natrium (400/450/...	13104810	1
Caelo	Carmellose-Natrium (400/450/...	11124212	1
Caelo	Carmellose-Natrium (400/450/...	13299302	1
Caelo	Cayennepfeffer, gepulvert (G...	13205106	1
Caelo	Cetylpalmitat 15	12018208	7
Caelo	Cetylpalmitat 15	12228818	4
Caelo	Cetylpalmitat 15	12018215	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Cetylpalmitat 15	12018204	3
Caelo	Cetylpalmitat 15	14060705	1
Caelo	Cetylpalmitat 15	1313190	1
Caelo	Cetylpalmitat 15	13295910	3
Caelo	Cetylpalmitat 15	11042019	2
Caelo	Cetylpalmitat 15	12331916	6
Caelo	Cetylpalmitat 15	13295919	4
Caelo	Cetylpalmitat 15	13131906	6
Caelo	Cetylpalmitat 15	13131911	2
Caelo	Cetylpalmitat 15	13131914	3
Caelo	Cetylpalmitat 15	12D19-No2	1
Caelo	Cetylpalmitat 15	122228801/Int212191	1
Caelo	Cetylpalmitat 15	12018204/Int212191	1
Caelo	Cetylstearylalkohol	11302101	3
Caelo	Cetylstearylalkohol	11K17-No2	1
Caelo	Cetylstearylalkohol	13144105	1
Caelo	Cetylstearylalkohol	12065709	1
Caelo	Cetylstearylalkohol	13018305	4
Caelo	Cetylstearylalkohol	13018306	1
Caelo	Cetylstearylalkohol	12065705	1
Caelo	Cetylstearylalkohol	12025301	2
Caelo	Chinarinde, geschn.	11238512	1
Caelo	Chinarinde, geschn.	10381906	1
Caelo	Chinolingelb E104	12042010	1
Caelo	Chinolingelb E104	11089601	1
Caelo	Chinolingelb E104	12042002	2
Caelo	Chinolingelb E104	12042004	1
Caelo	Chinolingelb E104	713E-03146	1
Caelo	Chinolingelb E104	11089610	1
Caelo	Chinolingelb E104	11089608	1
Caelo	Chinolingelb E104	20301211-6	1
Caelo	Chinolingelb E104	13109102	2
Caelo	Chinolingelb E104	12042007	4
Caelo	Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat	10281601	1
Caelo	Chloralhydrat	13002425	1
Caelo	Chloralhydrat	12017512	2
Caelo	Chloralhydrat	14038301	2
Caelo	Chloralhydrat	12017503	1
Caelo	Chloramphenicol	13A31-B02-286708	3
Caelo	Chloramphenicol	12248525	1
Caelo	Chloramphenicol	10341703	1
Caelo	Chloramphenicol	11370707	1
Caelo	Chloramphenicol	12248509	6
Caelo	Chloramphenicol	12248524	4
Caelo	Chloramphenicol	12248501	11
Caelo	Chloramphenicol	11370716	3
Caelo	Chloramphenicol	13080907	1
Caelo	Chloramphenicol	70777297	1
Caelo	Chloramphenicol	11370702	4
Caelo	Chloramphenicol	11370703	5
Caelo	Chloramphenicol	10341717	1
Caelo	Chloramphenicol	12248520	1
Caelo	Chloramphenicol	9323807	1
Caelo	Chloramphenicol	11370717	2
Caelo	Chloramphenicol	10341711	1
Caelo	Chloramphenicol	12248505	4
Caelo	Chloramphenicol	1137714	1
Caelo	Chloramphenicol	1137070	1
Caelo	Chloramphenicol	11370713	2
Caelo	Chloramphenicol	3125204	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Chloramphenicol	10341707	1
Caelo	Chloramphenicol	11370712	3
Caelo	Chloramphenicol	13080903	1
Caelo	Chloramphenicol	4712Q-01259	1
Caelo	Chloramphenicol	DY00911233	1
Caelo	Chloramphenicol	11370714	2
Caelo	Chloramphenicol	12248506	6
Caelo	Chloramphenicol	11370706	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	10154424	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142709	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	11204408	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142705	2
Caelo	Chlorhexidindiacetat	9113903	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142725	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12177503	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	10154412	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	1091139389	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	10154429	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	11204406	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142720	9
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142727	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	9113904	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142702	2
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12177502	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142704	4
Caelo	Chlorhexidindiacetat	1602211263	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12177505	8
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12142715	1
Caelo	Chlorhexidindiacetat	12177510	7
Caelo	Chlorocresol	12111013	2
Caelo	Chlorocresol	10145239	3
Caelo	Chlorocresol	12111017	2
Caelo	Cholesterol	11242103	1
Caelo	Cholesterol	13056903	1
Caelo	Ciclopirox-Olamin	14147402	1
Caelo	Cimicifugawurzelstock, geschn.	13237901	2
Caelo	Cimicifugawurzelstock, geschn.	10281118	1
Caelo	Cimicifugawurzelstock, geschn.	13142101	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050618	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156827	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175414	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11159801	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175402	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	1011047-03	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050622	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156823	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043120	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156803	5
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11159816	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13243210	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050614	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043123	9
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11126911	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175410	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050611	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13243208	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13243219	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12F06-M06	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12175718	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050606	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12175711	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13G24-N13	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12175716	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	113802013	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043119	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050604	14
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12B01No1	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050623	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050623-3376319052	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175403	9
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11380204	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11159821	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	CH:003/0913	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11066805	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	9158408	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043101	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156830	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050617	7
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175405	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050613	11
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156818	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11K07-N01	6
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043124	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	zu erfassen	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	1305601	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11380217	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13243214	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12175709	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043113	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11C24-N02	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043111	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	121568704	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13243224	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11126901	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050610	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	713I-01024	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	9199105	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12175708	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11380215	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156822	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175411	3
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11025514	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050621	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	20151112-1	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	20060912-3	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11066806	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043109	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050607	7
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043112	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156804	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050601	6
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11380206	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11159817	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156824	4
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175404	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13157404	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12156811	6
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175406	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11126904	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13243221	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11159824	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043114	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	10182417	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13050624	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	11380205	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	13175409	1
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	12043118	2
Caelo	Citronensäure, wasserfreie	10109202	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069113	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069125	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069110	3
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069124	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	1215911	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	1215907	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069105	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	12125938	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069126	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	11041413	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069104	6
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069106	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	11208133	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069133	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069128	3
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	12125907	7
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	11208132	4
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069129	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	13069111	3
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	12125904	1
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	14038401	2
Caelo	Citronensäure-Monohydrat	11208130	1
Caelo	Clindamycinhydrochlorid	1401041-01	1
Caelo	Clindamycinhydrochlorid	1111058-03	1
Caelo	Clioquinol	11304113	3
Caelo	Clioquinol	11304120	10
Caelo	Clioquinol	130114-02	1
Caelo	Clioquinol	11304117	8
Caelo	Clioquinol	13114406	1
Caelo	Clioquinol	10341608	1
Caelo	Clioquinol	4613E2562	1
Caelo	Clioquinol	13114404	2
Caelo	Clioquinol	5213A2562	1
Caelo	Clioquinol	13114413	2
Caelo	Clioquinol	3713A2562	1
Caelo	Clioquinol	11B11-N19	1
Caelo	Clioquinol	3513I-02562	1
Caelo	Clioquinol	11304124	4
Caelo	Clioquinol	13114415	2
Caelo	Clioquinol	1214I02562	1
Caelo	Clioquinol	1130312	1
Caelo	Clioquinol	11304105	3
Caelo	Clioquinol	11304103	2
Caelo	Clioquinol	13114410	1
Caelo	Clioquinol	13F12-N20	2
Caelo	Clioquinol	11304116	2
Caelo	Clioquinol	11304111	3
Caelo	Clioquinol	10341605	4
Caelo	Clioquinol	11304107	6
Caelo	Clioquinol	11304102	9
Caelo	Clioquinol	13114408	1
Caelo	Clobetasolpropionat	13134701	4

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Clobetasolpropionat	13134705	2
Caelo	Clobetasolpropionat	3012Q02835	1
Caelo	Clobetasolpropionat	11300704	1
Caelo	Clobetasolpropionat	13134702	4
Caelo	Clobetasolpropionat	20121012-4	1
Caelo	Clobetasolpropionat	12342306	7
Caelo	Clobetasolpropionat	11300703	2
Caelo	Clobetasolpropionat	12107604	1
Caelo	Clobetasolpropionat	12107608	2
Caelo	Clobetasolpropionat	12342312	1
Caelo	Clobetasolpropionat	11101315	2
Caelo	Clobetasolpropionat	12342309	12
Caelo	Clobetasolpropionat	11300707	2
Caelo	Clobetasolpropionat	12107609	5
Caelo	Clobetasolpropionat	12107601	2
Caelo	Clobetasolpropionat	1004212835	1
Caelo	Clobetasolpropionat	12107607	6
Caelo	Clobetasolpropionat	13134703	2
Caelo	Clobetasolpropionat	12342310	4
Caelo	Clobetasolpropionat	13134704	2
Caelo	Clobetasolpropionat	12342308	1
Caelo	Clobetasolpropionat	12342303	2
Caelo	Clobetasolpropionat	12107602	1
Caelo	Clobetasolpropionat	13k08b30287730	1
Caelo	Clotrimazol	12159902	8
Caelo	Clotrimazol	13224217	2
Caelo	Clotrimazol	12159916	4
Caelo	Clotrimazol	13224211	3
Caelo	Clotrimazol	10247332	3
Caelo	Clotrimazol	131841111	1
Caelo	Clotrimazol	1882321	1
Caelo	Clotrimazol	12320813	2
Caelo	Clotrimazol	13224210	6
Caelo	Clotrimazol	12320805	2
Caelo	Clotrimazol	1230809	1
Caelo	Clotrimazol	12320809	3
Caelo	Clotrimazol	13224216	1
Caelo	Clotrimazol	13224214	2
Caelo	Clotrimazol	13224212	2
Caelo	Clotrimazol	12320807	3
Caelo	Clotrimazol	12159904	3
Caelo	Clotrimazol	13224218	1
Caelo	Clotrimazol	13224225	1
Caelo	Clotrimazol	13184111	4
Caelo	Clotrimazol	20130207	1
Caelo	Clotrimazol	11/22-N10	1
Caelo	Clotrimazol	1105014-02	2
Caelo	Clotrimazol	415050-2-P	1
Caelo	Clotrimazol	412091-2-P	1
Caelo	Clotrimazol	13224201	7
Caelo	Clotrimazol	12159913	7
Caelo	Clotrimazol	13184103	10
Caelo	Clotrimazol	12320815	2
Caelo	Clotrimazol	13184113	1
Caelo	Clotrimazol	1259913	1
Caelo	Clotrimazol	12320814	4
Caelo	Clotrimazol	12320808	6
Caelo	Clotrimazol	12320806	6
Caelo	Clotrimazol	11305505	1
Caelo	Clotrimazol	11-K21-N19	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Clotrimazol	11305513	7
Caelo	Clotrimazol	13224204	2
Caelo	Clotrimazol	13184105	9
Caelo	Clotrimazol	11305507	2
Caelo	Clotrimazol	11305506	2
Caelo	Clotrimazol	13224220	1
Caelo	Coffein	12317904	1
Caelo	Coffein	11076807	1
Caelo	Coffein	zu erfassen	2
Caelo	Coffein	12093418	1
Caelo	Coffein	12093410	1
Caelo	Coffein	12317906	1
Caelo	Coffein	12317909	1
Caelo	Curcumawurzelstock, geschn.	12136505	1
Caelo	Curcumawurzelstock, geschn.	12136501	1
Caelo	Curcumawurzelstock, geschn.	12136506	1
Caelo	Curcumawurzelstock, geschn.	12136503	1
Caelo	Curcumawurzelstock, geschn.	12136504	2
Caelo	Curcumawurzelstock, geschn.	11160405	1
Caelo	Cyanocobalamin	9324113	1
Caelo	Cyanocobalamin	9336904	1
Caelo	Cyanocobalamin	9336907	1
Caelo	Cyanocobalamin	9373503	2
Caelo	Dequaliniumchlorid	11166209	1
Caelo	Dequaliniumchlorid	12077510	3
Caelo	Dequaliniumchlorid	Ch. B. : 311020-6P	1
Caelo	Dequaliniumchlorid	11166203	1
Caelo	Dexamethason	13084306	2
Caelo	Dexamethason	12033301	1
Caelo	Dexamethason	12033315	1
Caelo	Dexamethason	12165804	2
Caelo	Dexamethason	130854306	1
Caelo	Dexamethason	13084310	3
Caelo	Dexamethason	13084308	1
Caelo	Dexamethason	10369917	1
Caelo	Dexamethason	10369920	6
Caelo	Dexamethason	12033307	3
Caelo	Dexamethason	13084305	3
Caelo	Dexamethason	13084304	2
Caelo	Dexamethason	13084309	1
Caelo	Dexamethason	DM-MIC10005K	1
Caelo	Dexamethason	72134487	1
Caelo	Dexamethason	13084313	1
Caelo	Dexamethason	12033312	1
Caelo	Dexamethason	10369919	1
Caelo	Dexamethason	90939399	1
Caelo	Dexamethason	12033318	3
Caelo	Dexamethason	12033305	2
Caelo	Dexamethason	13084314	1
Caelo	Dexamethasonacetat	3913Q-01326	1
Caelo	Dexamethasonacetat	4113I-01326	1
Caelo	Dexamethasonacetat	12021801	1
Caelo	Dexamethasonacetat	11093215	1
Caelo	Dexamethasonacetat	12021811	1
Caelo	Dexamethasonacetat	13100406	1
Caelo	Dexamethasonacetat	13100408	1
Caelo	Dexamethasonacetat	13100403	2
Caelo	Dexamethasonacetat	13100404	2
Caelo	Dexamethasonacetat	12021814	1
Caelo	Diclofenac-Natrium	13214309	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Diclofenac-Natrium	12214205	1
Caelo	Diclofenac-Natrium	12214206	1
Caelo	Diclofenac-Natrium	10335805	1
Caelo	Diclofenac-Natrium	13214304	1
Caelo	Dillfrüchte	12342906	1
Caelo	Dillfrüchte	12342908	2
Caelo	Dillfrüchte	12342903	1
Caelo	Dillfrüchte	12289901	1
Caelo	Dillfrüchte	12342909	3
Caelo	Dillfrüchte	12342904	6
Caelo	Dillfrüchte	12038302	2
Caelo	Dillspitzen, geschn.	13007605	1
Caelo	Dillspitzen, geschn.	13007601	1
Caelo	Dillspitzen, geschn.	11295109	1
Caelo	Dillspitzen, geschn.	13007602	1
Caelo	Dillspitzen, geschn.	13007608	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	12133010	14
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	1319604	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13G16-No5	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13346914	2
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	1396103	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11134103	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13346908	3
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13196104	6
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11134117	7
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13346903	3
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	12133032	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	12133006	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13196105	9
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13196103	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	20160812-1	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	12176804	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	1334609	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	DIL/M-19911	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11134119	2
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	12177101	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	1233011	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13346901	4
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	10212404	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	12133023	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11134101	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	3313U-03562	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11134121	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13j24-b04-286571	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11L20-N06	2
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13346904	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	10212413	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	2310213562	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	2704213562	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11134113	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	11134115	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	12133011	1
Caelo	Diltiazemhydrochlorid	13J24-B04-289432	3
Caelo	Diphenhydraminhydrochlorid	12007721	2
Caelo	Diphenhydraminhydrochlorid	10122030	3
Caelo	Diphenhydraminhydrochlorid	12007715	1
Caelo	Diphenhydraminhydrochlorid	12007702	1
Caelo	Diptamwurzel, geschn.	11314702	1
Caelo	Dithranol	12014504	2
Caelo	Dithranol	12236811	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Dithranol	APDT/365/2011D	2
Caelo	Dithranol	11064501	1
Caelo	Dithranol	13120503	1
Caelo	Dithranol	12375305	1
Caelo	Dithranol	12375302	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351207-3384310110	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	13360303	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	12221104	2
Caelo	Eichenrinde, geschn.	41109-4-P	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348609	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348605	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351209	9
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351203	2
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351208	3
Caelo	Eichenrinde, geschn.	13360302	4
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348613	2
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351206	7
Caelo	Eichenrinde, geschn.	12221105	2
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351210	3
Caelo	Eichenrinde, geschn.	12221101	6
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348617	5
Caelo	Eichenrinde, geschn.	nachprüfung	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348612	2
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348615	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351205	3
Caelo	Eichenrinde, geschn.	12221102	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348616	5
Caelo	Eichenrinde, geschn.	10348606	1
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351207	9
Caelo	Eichenrinde, geschn.	11351201	2
Caelo	Eisen(III)-sulfat-hydrat	10354412	1
Caelo	Eisen(III)-sulfat-hydrat	1512210007	1
Caelo	Eisen(III)-sulfat-hydrat	12175906	1
Caelo	Emulgade® 1000 NI	12032002	1
Caelo	Emulgade® 1000 NI	13092401	1
Caelo	Emulgade® 1000 NI	11001603Nachprüfung	1
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	13233005	1
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	12331402	4
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	13144104	2
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	13233001	1
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	11009204	1
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	12331407	1
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	13144105	2
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	12134203	1
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	11291104	1
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	12065709	4
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	12229402	2
Caelo	Emulgierender Cetylstearylal. . .	12231402	1
Caelo	Enzianwurzel, gepulvert	12007106	1
Caelo	Eosin gelblich	13I11-N03	1
Caelo	Ephedrinhydrochlorid	EphedrinHCL2	1
Caelo	Ephedrinhydrochlorid	13323302	1
Caelo	Ephedrinhydrochlorid	12017223	2
Caelo	Ephedrinhydrochlorid	12017209	1
Caelo	Ephedrinhydrochlorid	11126414	1
Caelo	Ephedrinhydrochlorid	12017217	1
Caelo	Ephedrinhydrochlorid	EphedrinHCL1	1
Caelo	Epinephrinhydrogentartrat	12120202	1
Caelo	Epinephrinhydrogentartrat	12337801	1
Caelo	Epinephrinhydrogentartrat	10237109	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Epinephrinhydrogentartrat	12337805	1
Caelo	Epinephrinhydrogentartrat	123337805	1
Caelo	Erythromycin	13175506-3559412014	1
Caelo	Erythromycin	11195411	1
Caelo	Erythromycin	12152208	2
Caelo	Erythromycin	13175603	5
Caelo	Erythromycin	131756017	1
Caelo	Erythromycin	12152206	7
Caelo	Erythromycin	12152109	11
Caelo	Erythromycin	13175504-3413310132	1
Caelo	Erythromycin	10217105	1
Caelo	Erythromycin	11195412	2
Caelo	Erythromycin	11195406	1
Caelo	Erythromycin	1195306	1
Caelo	Erythromycin	13175801	1
Caelo	Erythromycin	13189001	3
Caelo	Erythromycin	13178756tzgklhj	1
Caelo	Erythromycin	1308016-01	8
Caelo	Erythromycin	20270912-3	1
Caelo	Erythromycin	11195407	3
Caelo	Erythromycin	13175607	2
Caelo	Erythromycin	13189002	7
Caelo	Erythromycin	13A02-N06	10
Caelo	Erythromycin	12152205	7
Caelo	Erythromycin	1021703	1
Caelo	Erythromycin	13189007	1
Caelo	Erythromycin	13175502	3
Caelo	Erythromycin	11195404	2
Caelo	Erythromycin	12152105	7
Caelo	Erythromycin	12156208	3
Caelo	Erythromycin	10217501	1
Caelo	Erythromycin	12156202	2
Caelo	Erythromycin	120503601	1
Caelo	Erythromycin	11195408	1
Caelo	Erythromycin	13175505	3
Caelo	Erythromycin	12156201	2
Caelo	Erythromycin	3110195	1
Caelo	Erythromycin	13189006	1
Caelo	Erythromycin	12152202	3
Caelo	Erythromycin	13175804	1
Caelo	Erythromycin	13175501	3
Caelo	Erythromycin	12156206	1
Caelo	Erythromycin	12152203	1
Caelo	Erythromycin	12152102	3
Caelo	Erythromycin	13175504	4
Caelo	Erythromycin	10217412	1
Caelo	Erythromycin	11195402	3
Caelo	Erythromycin	11195405	3
Caelo	Erythromycin	12152103	4
Caelo	Erythromycin	12152104	3
Caelo	Erythromycin	11195302	3
Caelo	Erythromycin	12152101	2
Caelo	Erythromycin	13175506	1
Caelo	Erythromycin	13175802	4
Caelo	Erythromycin	13175803	3
Caelo	Erythromycin	10217102	1
Caelo	Erythromycin	12152201	7
Caelo	Erythromycin	11j06-n05	2
Caelo	Erythromycin	12156204	3
Caelo	Erythromycin	zu erfassen	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Erythromycin	12152108	5
Caelo	Erythromycin	13175601	3
Caelo	Erythromycin	13175604	2
Caelo	Erythromycin	12156203	2
Caelo	Estradiolbenzoat	13277602	4
Caelo	Estradiolbenzoat	13277605	1
Caelo	Estradiolbenzoat	12255904	11
Caelo	Estradiolbenzoat	10124921	3
Caelo	Estradiolbenzoat	10124909	3
Caelo	Estradiolbenzoat	12255903	3
Caelo	Estradiolbenzoat	13276401	3
Caelo	Estradiolbenzoat	11L23-N01	2
Caelo	Estradiolbenzoat	2021211-1	1
Caelo	Estradiolbenzoat	10124913	2
Caelo	Estradiolbenzoat	10124919	1
Caelo	Estradiolbenzoat	10124915	2
Caelo	Estradiolbenzoat	12255905	6
Caelo	Estradiolbenzoat	10124918	2
Caelo	Estradiol-Hemihydrat	12268012	2
Caelo	Estradiol-Hemihydrat	12172003	1
Caelo	Estradiol-Hemihydrat	12268003	2
Caelo	Estradiol-Hemihydrat	13285801	1
Caelo	Estradiol-Hemihydrat	11078104	1
Caelo	Estradiolvalerat	12G05-N09	3
Caelo	Estradiolvalerat	test	1
Caelo	Estriol	12298704	4
Caelo	Estriol	13256004	2
Caelo	Estriol	11254410	1
Caelo	Estriol	12298706	1
Caelo	Estriol	14077901	1
Caelo	Estriol	12298702	2
Caelo	Estriol	12032504	2
Caelo	Estriol	20040711-9	1
Caelo	Estriol	11254402	2
Caelo	Estriol	12032503	4
Caelo	Estriol	12032507	2
Caelo	Estriol	11254412	2
Caelo	Estriol	10053206	1
Caelo	Estriol	11254408	1
Caelo	Ethacridinlactat-Monohydrat	12149507	3
Caelo	Ethacridinlactat-Monohydrat	10288702	1
Caelo	Ethacridinlactat-Monohydrat	12149514	1
Caelo	Ethacridinlactat-Monohydrat	12268407	1
Caelo	Flohsamen	13234309	1
Caelo	Flohsamen	12185508	1
Caelo	Flohsamen	12185503	3
Caelo	Flohsamen	12276510	1
Caelo	Flohsamen	12185509	3
Caelo	Flohsamen	13234310	1
Caelo	Flohsamen	9336709	1
Caelo	Flohsamen	11185811	4
Caelo	Flohsamen	11185803	1
Caelo	Flohsamen	10291205	1
Caelo	Flohsamen	10291207	4
Caelo	Flohsamen	12185502	1
Caelo	Flohsamen	7380a120911	1
Caelo	Flohsamen	12140301	2
Caelo	Flohsamen	12185504	6
Caelo	Fructose	12132317	1
Caelo	Fructose	13098922	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Fructose	11258628	1
Caelo	Fructose	1114A03394	1
Caelo	Fructose	13098914	1
Caelo	Fructose	12132309	2
Caelo	Fructose	12132310	1
Caelo	Fructose	12132314	3
Caelo	Fructose	13098906	4
Caelo	Fructose	13098909	1
Caelo	Fructose	3313U-03394	1
Caelo	Fructose	13098918	1
Caelo	Fructose	10381011	1
Caelo	Fructose	12132325	2
Caelo	Fructose	Fructose1	1
Caelo	Fructose	12132305	4
Caelo	Fructose	11258627	3
Caelo	Fructose	Fructose2	1
Caelo	Fructose	11258614	1
Caelo	Fructose	13098917	1
Caelo	Fructose	10381013	1
Caelo	Fructose	13098902	2
Caelo	Fructose	121e29-n08	1
Caelo	Fructose	12132322	3
Caelo	Fructose	13098915	1
Caelo	Fructose	12132313	1
Caelo	Fructose	12132320	1
Caelo	Fructose	1309213394	1
Caelo	Fructose	11I07-N06	1
Caelo	Galgant, geschn.	1215004	1
Caelo	Galgant, geschn.	12330306	2
Caelo	Galgant, geschn.	12330303	1
Caelo	Galgant, geschn.	12330305	1
Caelo	Galgant, geschn.	12125004	3
Caelo	Gelatine, weiß	11334025	1
Caelo	Gelatine, weiß	12354507	3
Caelo	Gelatine, weiß	11334020	1
Caelo	Gelatine, weiß	11314516	1
Caelo	Gelatine, weiß	11019322	1
Caelo	Gelatine, weiß	12354401	1
Caelo	Gelatine, weiß	11019319	1
Caelo	Gelbwurz, javanisch, geschn.	11182903	1
Caelo	Gelbwurz, javanisch, geschn.	12319206	1
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	11265902	1
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	11265908	1
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	M-220413-2	1
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	10213213	2
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	12157202	1
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	12157208	1
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	12157207	1
Caelo	Getrocknetes Magnesiumsulfat	11265903	1
Caelo	Gewürznelken	2010i-01450	1
Caelo	Gewürznelken	5398872	1
Caelo	Gewürznelken	11233305	1
Caelo	Gewürznelken	12095807	2
Caelo	Gewürznelken	12266505	1
Caelo	Gewürznelken	12095806	1
Caelo	Gewürznelken	12095802	1
Caelo	Ginkgoblätter, geschn.	nachprüfung	1
Caelo	Ginkgoblätter, geschn.	13340901	1
Caelo	Ginkgoblätter, geschn.	12121703	1
Caelo	Ginkgoblätter, geschn.	12151709	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Ginkgoblätter, geschn.	12151703	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	11017108	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	1914I03393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	47131-03393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	1614U3393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	14033907	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12294517	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	Glucose1	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	Glucose2	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	106213393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	13329501	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	12294509-3425311150	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	14033906	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	2013Q-03393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	11358818	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	11358823	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12141717	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12141705	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12294505	3
Caelo	Glucose, wasserfrei	12294510	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	12294519	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12294509	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	5013I3393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	13178704	3
Caelo	Glucose, wasserfrei	13178716	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	2513M03393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	13178718	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	1603213393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12141701	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12294514	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	13178702	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	11358825	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	14033902	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	13329504	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12141718	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12141706	4
Caelo	Glucose, wasserfrei	3513I-03393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	214U-03393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	208223393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	13329512	4
Caelo	Glucose, wasserfrei	13178711	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	13178715	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	4313Q3393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	712213393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	1114A03393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	1001313393	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	12141715	1
Caelo	Glucose, wasserfrei	402313393	2
Caelo	Glucose, wasserfrei	11358813	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284202	6
Caelo	Glucose-Monohydrat	1108061-01	6
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284204	2
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157002	9
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157008	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284231	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157019	3
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157026	2
Caelo	Glucose-Monohydrat	14102411	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	14102412	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284219	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284229	2
Caelo	Glucose-Monohydrat	11L19-N13	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284222	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284206	6
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157007	2
Caelo	Glucose-Monohydrat	11082020	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	nachprüfung	2
Caelo	Glucose-Monohydrat	1131416	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157022	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	11314519	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	11314528	6
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157005	9
Caelo	Glucose-Monohydrat	12284230	3
Caelo	Glucose-Monohydrat	11314516	6
Caelo	Glucose-Monohydrat	11314526	1
Caelo	Glucose-Monohydrat	13157011	5
Caelo	Glycerinmonostearat, selbste...	11079308	1
Caelo	Glycerinmonostearat, selbste...	13109405	2
Caelo	Glycerolmonostearat 40-55%	13221308	1
Caelo	Glycerolmonostearat 40-55%	13221303	2
Caelo	Glycerolmonostearat 40-55%	131156602	1
Caelo	Glycerolmonostearat 40-55%	13156601	3
Caelo	Glycerolmonostearat 60	13109304	3
Caelo	Glycerolmonostearat 60	1301821	1
Caelo	Glycerolmonostearat 60	13018201	3
Caelo	Griseofulvin	100910	1
Caelo	Guaifenesin	1212002-01	1
Caelo	Guajakholz, geschn.	10143014	1
Caelo	Guajakholz, geschn.	11352001	1
Caelo	Guajakholz, geschn.	nachprüfung	1
Caelo	Guajakholz, geschn.	11352008	1
Caelo	Guajakholz, geschn.	4011M-01778	1
Caelo	Guajakholz, geschn.	11352012	1
Caelo	Hamamelisblätter, geschn.	12164805	2
Caelo	Hamamelisblätter, geschn.	13269902	2
Caelo	Hamamelisblätter, geschn.	10102915	1
Caelo	Hamamelisblätter, geschn.	12165805	1
Caelo	Hamamelisblätter, geschn.	12164804	2
Caelo	Harnstoff	11150714	2
Caelo	Harnstoff	13064214	6
Caelo	Harnstoff	12111823	11
Caelo	Harnstoff	2109212544	1
Caelo	Harnstoff	13064236	1
Caelo	Harnstoff	12111820	9
Caelo	Harnstoff	13064228	1
Caelo	Harnstoff	13064203	10
Caelo	Harnstoff	1211809	1
Caelo	Harnstoff	10169722	1
Caelo	Harnstoff	12111806	4
Caelo	Harnstoff	10169731	1
Caelo	Harnstoff	1113A-025	1
Caelo	Harnstoff	12111801	6
Caelo	Harnstoff	11150731	2
Caelo	Harnstoff	11150721	2
Caelo	Harnstoff	11150722	2
Caelo	Harnstoff	10116	1
Caelo	Harnstoff	13064215	11
Caelo	Harnstoff	1306422	1
Caelo	Harnstoff	1211804	1
Caelo	Harnstoff	12111826	5

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Harnstoff	12111810	12
Caelo	Harnstoff	11120725	1
Caelo	Harnstoff	13064223	6
Caelo	Harnstoff	13064207	11
Caelo	Harnstoff	13064206	14
Caelo	Harnstoff	12111808	10
Caelo	Harnstoff	4013Q2544	1
Caelo	Harnstoff	13064201	3
Caelo	Harnstoff	13064213	2
Caelo	Harnstoff	13064221	4
Caelo	Harnstoff	1211808	1
Caelo	Harnstoff	82374179	1
Caelo	Harnstoff	13064230	1
Caelo	Harnstoff	13064226	3
Caelo	Harnstoff	2324534	1
Caelo	Harnstoff	12111809	10
Caelo	Harnstoff	13064217	1
Caelo	Harnstoff	1211802	1
Caelo	Harnstoff	11150701	2
Caelo	Harnstoff	11150702	3
Caelo	Harnstoff	13064224	2
Caelo	Harnstoff	nachprüfung	1
Caelo	Harnstoff	13064212	17
Caelo	Harnstoff	11150713	1
Caelo	Harnstoff	13064232	3
Caelo	Harnstoff	1317B02-287602	1
Caelo	Harnstoff	zu erfassen	2
Caelo	Harnstoff	107063	1
Caelo	Harnstoff	12111802	7
Caelo	Harnstoff	12111804	8
Caelo	Harnstoff	12111828	16
Caelo	Harnstoff	20130912-4	1
Caelo	Harnstoff	11150738	2
Caelo	Harnstoff	12111834	1
Caelo	Harnstoff	12L10-N08	3
Caelo	Harnstoff	1211820	1
Caelo	Harnstoff	314Q2544	1
Caelo	Harnstoff	10169726	2
Caelo	Harnstoff	13064202	10
Caelo	Harnstoff	11150736	6
Caelo	Hartfett, pastilliert	11109623	3
Caelo	Hartfett, pastilliert	10356001	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	11109616	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243411	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	11285001	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	12158115	6
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243403	5
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243414	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243301	3
Caelo	Hartfett, pastilliert	10158813	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	12158114	2
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243416	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	14126203	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243409	2
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243418	3
Caelo	Hartfett, pastilliert	14126202	2
Caelo	Hartfett, pastilliert	11345917	2
Caelo	Hartfett, pastilliert	1135917	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	12158109	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	11345918	8

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243412	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	12158122	3
Caelo	Hartfett, pastilliert	11345909	3
Caelo	Hartfett, pastilliert	13243420	1
Caelo	Hartfett, pastilliert	11345905	2
Caelo	Hartfett, pastilliert	12158104	5
Caelo	Hartfett, pastilliert	14126205	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	11363206	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	11363205	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	13109224	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	12252211	4
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	11166911	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	12252221	2
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	13109203	3
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	11363220	3
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	1136206	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	13109213	2
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	13109214	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	10194101	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	10194106	1
Caelo	Hartparaffin, Plätzchen	12252205	1
Caelo	Histamindihydrochlorid	130500601	1
Caelo	Holunderbeeren	12267801	1
Caelo	Huang Qi	g040h1202222	1
Caelo	Hydrochinon	72265417	1
Caelo	Hydrochinon	11163907	2
Caelo	Hydrochinon	14026902	1
Caelo	Hydrochinon	13105408	1
Caelo	Hydrochinon	12288502	1
Caelo	Hydrochinon	13105402	5
Caelo	Hydrochinon	12156706	1
Caelo	Hydrochinon	1228503	1
Caelo	Hydrochinon	20200712-3	1
Caelo	Hydrochinon	11163912	4
Caelo	Hydrochinon	11163912/Int312052	1
Caelo	Hydrochinon	12156705	3
Caelo	Hydrochinon	10145101	1
Caelo	Hydrochlorothiazid	13008504	1
Caelo	Hydrochlorothiazid	11101n02	1
Caelo	Hydrochlorothiazid	13008509	1
Caelo	Hydrochlorothiazid	CQ1108	1
Caelo	Hydrocortison	11273704	1
Caelo	Hydrocortison	13069509	1
Caelo	Hydrocortison	11260307	1
Caelo	Hydrocortison	3912Q-01719	1
Caelo	Hydrocortison	13069502	3
Caelo	Hydrocortison	113I-01719	1
Caelo	Hydrocortison	13155604	1
Caelo	Hydrocortison	12104306	10
Caelo	Hydrocortison	13155605	1
Caelo	Hydrocortison	11L09-N06	1
Caelo	Hydrocortison	12119303	4
Caelo	Hydrocortison	1306906	1
Caelo	Hydrocortison	12167010-3437311151	1
Caelo	Hydrocortison	12k08-n01	1
Caelo	Hydrocortison	12104308	6
Caelo	Hydrocortison	10340502	2
Caelo	Hydrocortison	13069501	7
Caelo	Hydrocortison	13069507	4
Caelo	Hydrocortison	13341502	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Hydrocortison	13341501	1
Caelo	Hydrocortison	12104301	1
Caelo	Hydrocortison	12167007	8
Caelo	Hydrocortison	2013U-01719	1
Caelo	Hydrocortison	2402211719	1
Caelo	Hydrocortison	9360908	1
Caelo	Hydrocortison	11260309	4
Caelo	Hydrocortison	9271205	1
Caelo	Hydrocortison	11260308	4
Caelo	Hydrocortison	13069506	3
Caelo	Hydrocortison	13155614	1
Caelo	Hydrocortison	13155603	1
Caelo	Hydrocortison	13341511	1
Caelo	Hydrocortison	13341504	1
Caelo	Hydrocortison	1216707	1
Caelo	Hydrocortison	13069505	1
Caelo	Hydrocortison	13155602	4
Caelo	Hydrocortison	12104304	10
Caelo	Hydrocortison	10282208	1
Caelo	Hydrocortison	11098413	1
Caelo	Hydrocortison	12167010	5
Caelo	Hydrocortison	13155601	2
Caelo	Hydrocortison	11260304	1
Caelo	Hydrocortison	12104305	3
Caelo	Hydrocortison	13069510	2
Caelo	Hydrocortison	133341502	1
Caelo	Hydrocortison	12119304	2
Caelo	Hydrocortison	11260302	1
Caelo	Hydrocortison	13341510	1
Caelo	Hydrocortison	12167001	7
Caelo	Hydrocortison	11273703	1
Caelo	Hydrocortison	11260303	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330106	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	13155304	4
Caelo	Hydrocortisonacetat	12008405	3
Caelo	Hydrocortisonacetat	13G09-N08	3
Caelo	Hydrocortisonacetat	1315503	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330114	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	3110491	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	11263916	3
Caelo	Hydrocortisonacetat	2612M01718	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330102	5
Caelo	Hydrocortisonacetat	13155306	5
Caelo	Hydrocortisonacetat	14043907	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12182405	18
Caelo	Hydrocortisonacetat	14043903	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	12008404	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	13291701	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330111-3507411061	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	1209003-01	3
Caelo	Hydrocortisonacetat	1406211718	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	11263911	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330113	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330107	8
Caelo	Hydrocortisonacetat	11263915	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	13291705	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	13155308	3
Caelo	Hydrocortisonacetat	11263914	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330116	4
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330110	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Hydrocortisonacetat	13291709	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330105	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	11263907	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	13155302	6
Caelo	Hydrocortisonacetat	1213M-01718	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	13155307	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	20220911-3	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330108	5
Caelo	Hydrocortisonacetat	1391704	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	10301913	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	10083911	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	11263913	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	12008403	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330104	11
Caelo	Hydrocortisonacetat	11098611	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	11263917	3
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330111	7
Caelo	Hydrocortisonacetat	11098615	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	13291704	2
Caelo	Hydrocortisonacetat	12330112	7
Caelo	Hydrocortisonacetat	12182404	16
Caelo	Hydrocortisonacetat	1233016	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12182402	4
Caelo	Hydrocortisonacetat	14043906	1
Caelo	Hydrocortisonacetat	12008402	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	4512I-03301	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13153501	7
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1113E-03301	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	11186202	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	213I-03301	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	11266305	6
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13153506	5
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	5012I-03301	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12249202	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	122492014	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12369711	4
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13378507	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	10019408	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12249205	4
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12249216	7
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13153502	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	11266316	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12369713	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13378508	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12369717	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13153505	4
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12156901	3
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12156908	3
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13378502	4
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1337808	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12369704	7
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	11186221	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1304008-02	7
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13153511	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12249204	3
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13378515	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (300 m...	12156915	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	12274710	2
Caelo	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	11304619	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	11304601	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	11304614	1
Caelo	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	13182702	4
Caelo	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	11304620	4
Caelo	Hypromellose E4M Prem	13d03-n03	1
Caelo	Hypromellose E4M Prem	12215504	2
Caelo	Hypromellose E4M Prem	12098702	1
Caelo	Hypromellose E4M Prem	13155004	2
Caelo	Hypromellose E4M Prem	13155005	1
Caelo	Indische Flohsamen	12252706	1
Caelo	Indische Flohsamen	413E-03369	1
Caelo	Indische Flohsamen	12276511	1
Caelo	Indische Flohsamen	1227506	1
Caelo	Indische Flohsamen	12252709	1
Caelo	Indische Flohsamen	11185811	2
Caelo	Iodoform	12283201/311152	1
Caelo	Iodoform	12070402	1
Caelo	Iodoform	12070606	1
Caelo	Iodoform	12070602	2
Caelo	Iodoform	12070605	1
Caelo	Iodoform	12150907	3
Caelo	Iodoform	12070608	1
Caelo	Iodoform	12150905	2
Caelo	Iodoform	12283304	1
Caelo	Iodoform	12283307	1
Caelo	Iodoform	12070601	4
Caelo	Iodoform	12283206	1
Caelo	Iodoform	12283201	1
Caelo	Iodoform	12150908	3
Caelo	Iodoform	10120202	1
Caelo	Iodoform	12150910	1
Caelo	Iodoform	12283202	2
Caelo	Iodoform	12070502	2
Caelo	Iodoform	12150902	3
Caelo	Iodoform	12070303	1
Caelo	Iodoform	12150903	2
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	nachprüfung	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	11053916	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187107	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187103	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187101	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	11101607	7
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	13350803	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187106	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187104	5
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	11101502	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187102	8
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	2811e-01774	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187109	2
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12198102	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	11101604	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187108	3
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	11101606	2
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	1287102	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	12187002	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	4912E-01774	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	1218702	1
Caelo	Isländisches Moos, geschn.	11053911	1
Caelo	Isosorbiddinitrat 40%	13D15-N02	8
Caelo	Johannisbeeren, schwarze	12272804	3
Caelo	Kakaobutter	11034718	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Kakaobutter	11079607	2
Caelo	Kakaobutter	71326048	2
Caelo	Kakaobutter	13140406	3
Caelo	Kakaobutter	12342003	7
Caelo	Kakaobutter	12270202	24
Caelo	Kakaobutter	13027226	3
Caelo	Kakaobutter	12270210	1
Caelo	Kakaobutter	12270201	2
Caelo	Kakaobutter	12040810	1
Caelo	Kakaobutter	13027202	4
Caelo	Kakaobutter	13140401	1
Caelo	Kakaobutter	13292001	1
Caelo	Kakaobutter	12040807	1
Caelo	Kakaobutter	11079612	1
Caelo	Kakaobutter	12040802	1
Caelo	Kakaobutter	13140405	2
Caelo	Kakaobutter	12270209	1
Caelo	Kakaobutter	13140407	18
Caelo	Kakaobutter	11117820	1
Caelo	Kakaobutter	13027224	3
Caelo	Kakaobutter	13292007	7
Caelo	Kakaobutter	12270203	4
Caelo	Kakaobutter	13027227	2
Caelo	Kakaobutter	13292006	1
Caelo	Kakaobutter	12270212	10
Caelo	Kakaobutter	13140404	20
Caelo	Kakaobutter	13027204	4
Caelo	Kakaobutter	11117816	2
Caelo	Kakaobutter	13292012	2
Caelo	Kakaobutter	13292013	4
Caelo	Kakaobutter	13292015	1
Caelo	Kakaobutter	13027221	6
Caelo	Kakaobutter	11117806	1
Caelo	Kakaobutter	12270205	5
Caelo	Kakaobutter	12270206	10
Caelo	Kaliumcitrat	13135908	1
Caelo	Kaliumcitrat	13135904	1
Caelo	Kaliumcitrat	12135302	1
Caelo	Kaliumcitrat	13135907	1
Caelo	Kaliumcitrat	12299202	1
Caelo	Kaliumcitrat	10067413	1
Caelo	Kaliumcitrat	13317613	1
Caelo	Kaliumcitrat	zu erfassen	12
Caelo	Kaliumcitrat	12299207	5
Caelo	Kaliumcitrat	12135301	2
Caelo	Kaliumcitrat	11320202	1
Caelo	Kaliumcitrat	2114M1737	1
Caelo	Kaliumcitrat	13317603	2
Caelo	Kaliumcitrat	411025-1-P	1
Caelo	Kaliumcitrat	71730367	1
Caelo	Kaliumcitrat	13317602	1
Caelo	Kaliumcitrat	12299201	2
Caelo	Kaliumcitrat	13135902	1
Caelo	Kaliumcitrat	12135309	2
Caelo	Kaliumcitrat	12135311	1
Caelo	Kaliumcitrat	13080604	1
Caelo	Kaliumcitrat	11320212	1
Caelo	Kaliumcitrat	12135303	1
Caelo	Kaliumcitrat	11102201	1
Caelo	Kaliumcitrat	11320203	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Kaliumcitrat	13080602	3
Caelo	Kaliumcitrat	9259107	1
Caelo	Kaliumcitrat	11320213	2
Caelo	Kaliumcitrat	3112M01737	1
Caelo	Kaliumcitrat	1234	4
Caelo	Kaliumcitrat	70913Kaci	1
Caelo	Kaliumcitrat	1215309	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	IntCh: 217002	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	13390303	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	10052629	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12230703	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	13141926	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12141924	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12239705	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	11105804	2
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12239701	4
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	700544	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	20080410-3	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12141919	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12239703	5
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12141915	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	10052610	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	11105818	2
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12141920	1
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	12141910	7
Caelo	Kaliumhydrogencarbonat	11105811	3
Caelo	Kaliumhydrogentartrat	13030006	1
Caelo	Kaliumhydrogentartrat	13133114	1
Caelo	Kaliumhydrogentartrat	11345805	1
Caelo	Kaliumhydrogentartrat	13030002	1
Caelo	Kaliumhydrogentartrat	11127417	1
Caelo	Kaliumhydrogentartrat	11345807	1
Caelo	Kaliumhydroxid	11165705	1
Caelo	Kaliumhydroxid	13275207	1
Caelo	Kaliumhydroxid	12057906	1
Caelo	Kaliumhydroxid	11165708	2
Caelo	Kaliumhydroxid	12382601	2
Caelo	Kaliumhydroxid	12382603	2
Caelo	Kaliumhydroxid	12057908	2
Caelo	Kaliumsorbit	1221107	1
Caelo	Kaliumsorbit	11261304	2
Caelo	Kaliumsorbit	11214207	1
Caelo	Kaliumsorbit	12211121	4
Caelo	Kaliumsorbit	91623299	2
Caelo	Kaliumsorbit	12211123	1
Caelo	Kaliumsorbit	13065204	8
Caelo	Kaliumsorbit	12211108	1
Caelo	Kaliumsorbit	12211102	4
Caelo	Kaliumsorbit	13065217	6
Caelo	Kaliumsorbit	1221101	1
Caelo	Kaliumsorbit	10012210	2
Caelo	Kaliumsorbit	10199505	1
Caelo	Kaliumsorbit	20021112-2	1
Caelo	Kaliumsorbit	12059908	1
Caelo	Kaliumsorbit	12059909	4
Caelo	Kaliumsorbit	13065211	1
Caelo	Kaliumsorbit	12059905	3
Caelo	Kaliumsorbit	13065205	9
Caelo	Kaliumsorbit	12211101	7
Caelo	Kaliumsorbit	12059914	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Kaliumsorbat	13065216	5
Caelo	Kampfer	13108106	2
Caelo	Kampfer	12243701	1
Caelo	Kampfer	11286909	2
Caelo	Kampfer	12228206	1
Caelo	Kampfer	11074509	1
Caelo	Kampfer	444A100826	1
Caelo	Kampfer	12054141	4
Caelo	Kampfer	11032025	1
Caelo	Kampfer	13205511	1
Caelo	Kampfer	11032023	1
Caelo	Kampfer	12054142	3
Caelo	Kampfer	120564113	1
Caelo	Kampfer	12054149	4
Caelo	Kampfer	12344905	4
Caelo	Kampfer	12054107	5
Caelo	Kampfer	13205502	1
Caelo	Kampfer	11286910	1
Caelo	Kampfer	13108110	1
Caelo	Kampfer	12054105	1
Caelo	Kampfer	13205501	2
Caelo	Kampfer	12054151	2
Caelo	Kampfer	12054124	2
Caelo	Kampfer	12054143	1
Caelo	Kampfer	12228205	1
Caelo	Kampfer	11032035	4
Caelo	Kampfer	12054114	1
Caelo	Kampfer	2811Q-01221	1
Caelo	Kampfer	11286905	4
Caelo	Kap-Aloe, gepulvert	12183001	2
Caelo	Kap-Aloe, gepulvert	12183005	1
Caelo	Kap-Aloe, gepulvert	11132116	2
Caelo	Kap-Aloe, gepulvert	12183007	1
Caelo	Kap-Aloe, gepulvert	12183009	3
Caelo	Kap-Aloe, gepulvert	12183013	2
Caelo	Kap-Aloe, gepulvert	11132115	1
Caelo	Kap-Aloe, geschn.	505125	1
Caelo	Kap-Aloe, geschn.	12338203	2
Caelo	Kap-Aloe, geschn.	12232102	2
Caelo	Kap-Aloe, geschn.	12338206	2
Caelo	Kap-Aloe, grob gepulvert	11132116	1
Caelo	Ketoconazol	13179606	2
Caelo	Ketoconazol	12300407	2
Caelo	Ketoconazol	12171007	1
Caelo	Ketoconazol	12171008	1
Caelo	Ketoconazol	11070022	2
Caelo	Ketoconazol	13179610	1
Caelo	Koriander	13010306	1
Caelo	Koriander	12080905	1
Caelo	Koriander	13010304	1
Caelo	Koriander	9285707	1
Caelo	Koriander	12080906	1
Caelo	Koriander	12080901	2
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	11059209	2
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	510e-01456	1
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	12060202	2
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	12060203	4
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	12232501	1
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	12060205	2
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	11059211	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Kornblumenblüten ohne Kelch	11059206	3
Caelo	Kümmel	12226611	1
Caelo	Kümmel	13397105	1
Caelo	Kümmel	12226503	4
Caelo	Kümmel	13306002	2
Caelo	Kümmel	1226608	1
Caelo	Kümmel	12228601	1
Caelo	Kümmel	610E-01537	1
Caelo	Kümmel	811E-01537	1
Caelo	Kümmel	2103311537	1
Caelo	Kümmel	11003213	2
Caelo	Kümmel	11003217	6
Caelo	Kümmel	9267815	1
Caelo	Kümmel	12226504	1
Caelo	Kümmel	12226603	7
Caelo	Kümmel	413M	1
Caelo	Kümmel	11003207	1
Caelo	Kümmel	12226604	4
Caelo	Kümmel	12226605	1
Caelo	Kümmel	12226501	6
Caelo	Kümmel	13041901	1
Caelo	Kümmel	9267824	2
Caelo	Kümmel	12226612	4
Caelo	Kümmel	11378309	1
Caelo	Kümmel	12226606	1
Caelo	Kümmel	12226608	1
Caelo	Kümmel	1222608	1
Caelo	Kümmel	12343403	1
Caelo	Kupfer(II)-sulfat-Pentahydra. ...	3411M-01317	1
Caelo	Kupfer(II)-sulfat-Pentahydra. ...	12157107	1
Caelo	Kürbiskerne, geschält	140736306	1
Caelo	Kürbiskerne, geschält	12249011	2
Caelo	Kürbiskerne, geschält	14073603	1
Caelo	Kürbiskerne, geschält	12249001	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	11219208	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104909-3453311172	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	11219216	4
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104910	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	12139915	4
Caelo	Lactose-Monohydrat	12021502	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	12336816	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	11014714	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	12336804	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	13299108	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	12336803	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104912	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	160913PJK01	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104909-3422310182	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	13299101	5
Caelo	Lactose-Monohydrat	13299107	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	12336815	12
Caelo	Lactose-Monohydrat	13299106	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	13299112	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104908	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104901	6
Caelo	Lactose-Monohydrat	12336801	6
Caelo	Lactose-Monohydrat	12139901	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	12021518	4
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104902	6
Caelo	Lactose-Monohydrat	10195107	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Lactose-Monohydrat	12336820	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	11079002	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	13104909	3
Caelo	Lactose-Monohydrat	12139908	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	11219217	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	14025608	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	2901312210	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	14025601	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	1301C005	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	12139920	2
Caelo	Lactose-Monohydrat	4313Q2210	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	12139912	1
Caelo	Lactose-Monohydrat	12021507	3
Caelo	Lapachorinde, geschn.	12239305	8
Caelo	Lapachorinde, geschn.	2x11154506	1
Caelo	Lapachorinde, geschn.	12239303	2
Caelo	Leinsamen	12321606	1
Caelo	Leinsamen	4713U02240	1
Caelo	Leinsamen	12382006	2
Caelo	Leinsamen	12092104	1
Caelo	Leinsamen	12321604	2
Caelo	Leinsamen	11199003	1
Caelo	Leinsamen	11365507	3
Caelo	Leinsamen	13296702	1
Caelo	Leinsamen	12321601	2
Caelo	Leinsamen	13262702	1
Caelo	Leinsamen	12092102	2
Caelo	Lidocain	12163803	3
Caelo	Lidocain	9205919	1
Caelo	Lidocain	12163802	1
Caelo	Lidocain	12294405	3
Caelo	Lidocain	12163811	2
Caelo	Lidocain	12163804	2
Caelo	Lidocain	12163813	1
Caelo	Lidocain	12294412	4
Caelo	Lidocain	12294411	1
Caelo	Lidocainhydrochlorid	13118812	2
Caelo	Lidocainhydrochlorid	12176102	2
Caelo	Lidocainhydrochlorid	13118808	3
Caelo	Lidocainhydrochlorid	72702128	1
Caelo	Lidocainhydrochlorid	11302902	2
Caelo	Lidocainhydrochlorid	13118807	2
Caelo	Lidocainhydrochlorid	113002905	1
Caelo	Lidocainhydrochlorid	12135508	3
Caelo	Lidocainhydrochlorid	12135503	4
Caelo	Lidocainhydrochlorid	12176109	2
Caelo	Lidocainhydrochlorid	1403025-02	1
Caelo	Lidocainhydrochlorid	13118803	3
Caelo	Lidocainhydrochlorid	13343002	2
Caelo	Lidocainhydrochlorid	12176103	6
Caelo	Lidocainhydrochlorid	12176101	4
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	11003309	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363103	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	11003308	2
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	6621A-120606	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363108	2
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	11003312	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363110	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	11003313	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363106	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	11003307	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363105	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	10024710	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	13329702	3
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	11003306	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363109	4
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	1225101	1
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	11003311	2
Caelo	Löwenzahnwurzel, geschn.	12363102	2
Caelo	Macrogol 1500	12109409	2
Caelo	Macrogol 1500	10105901	1
Caelo	Macrogol 1500	11056504	1
Caelo	Macrogol 1500	10105905	1
Caelo	Macrogol 1500	13140901	1
Caelo	Macrogol 1500	13140906	1
Caelo	Macrogol 1500	13140902	1
Caelo	Macrogol 4000	13356611	2
Caelo	Macrogol 4000	13136010	1
Caelo	Macrogol 4000	11172308	1
Caelo	Macrogol 4000	11172319	1
Caelo	Macrogol 4000	12149115	1
Caelo	Macrogol 4000	12361513	1
Caelo	Macrogol 4000	IntCh217002	1
Caelo	Macrogol 4000	12074114	2
Caelo	Macrogol 4000	12361518	2
Caelo	Macrogol 4000	12074109	2
Caelo	Macrogol 4000	12149113	1
Caelo	Macrogol 4000	12074116	2
Caelo	Macrogol 4000	1316003	1
Caelo	Macrogol 4000	12074102	1
Caelo	Macrogol 4000	13356601	1
Caelo	Macrogol 4000	11I05-N11	1
Caelo	Macrogol 4000	13356609	1
Caelo	Macrogol 4000	13356617	3
Caelo	Macrogol 4000	13136011	2
Caelo	Macrogol 4000	13356602	2
Caelo	Macrogol 4000	12361506	4
Caelo	Macrogol 4000	13136001	3
Caelo	Macrogol 4000	13136016	1
Caelo	Macrogol 4000	1172404	1
Caelo	Macrogol 4000	13136009	2
Caelo	Macrogol 4000	11172303	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	1137291	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12368011	7
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13233913	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12238003	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	11372902	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	1137199	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13233901	3
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12238004	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	121033-01	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13233911	2
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13233906	8
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13389106	2
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12238002	6
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12175804	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	411052-2-P	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13389103	7
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12368002	2
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	133233907	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	11193104	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	11193115	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12368014	3
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12175807	3
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12368005	2
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13233904	3
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12175802	6
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12238012	3
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	11044103	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12368004	4
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	13194601	3
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12175810	1
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	12368003	8
Caelo	Magnesium(hydrogen)citrat	11372901	4
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354606	3
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354613	4
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354615	4
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	11345623	2
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	4013E-01828	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	13194707	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354612	4
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354609	6
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	13194702	2
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	9L15-N01	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	11345609	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12141807	2
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354604	2
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	13194706	2
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	13194721	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	13194713-3490312103	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354618	2
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12354605	4
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	13194701	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	11345624	1
Caelo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12141808	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12336916	3
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12119906/2	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	11369525	3
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	11369509	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12138515	2
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12336942	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	13183702	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	90744129	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12336915	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	11369529	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12336926	3
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1218521	2
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12138522	2
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12138521	5
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12336914	4
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	11231006	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	10371111	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1213E-01835	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12138516	6
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	10104201	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	11231025	2
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	113695625	1
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	204035	4
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	13183709	2
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	11231005	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	11369526	7
Caelo	Maisgriffel, geschn.	13277201	1
Caelo	Maisgriffel, geschn.	10325904	1
Caelo	Maisgriffel, geschn.	10325902	2
Caelo	Maisgriffel, geschn.	10325906	5
Caelo	Maisgriffel, geschn.	10325907	3
Caelo	Maisgriffel, geschn.	11280405	3
Caelo	Maisgriffel, geschn.	11280404	2
Caelo	Manna, gepulvert	11308802	1
Caelo	Manna, gepulvert	11003611	1
Caelo	Manna, geschn.	11308907	5
Caelo	Manna, geschn.	1308913	1
Caelo	Manna, geschn.	11308901	1
Caelo	Manna, geschn.	11308911	3
Caelo	Manna, geschn.	13127003	6
Caelo	Mannit	13189203	5
Caelo	Mannit	11219114	3
Caelo	Mannit	12305725	11
Caelo	Mannit	12305740	1
Caelo	Mannit	13189208	2
Caelo	Mannit	13189207	3
Caelo	Mannit	9204719	2
Caelo	Mannit	10293140	1
Caelo	Mannit	11219121	1
Caelo	Mannit	11003611	1
Caelo	Mannit	12105403	2
Caelo	Mannit	11219122	1
Caelo	Mannit	10100026	2
Caelo	Mannit	11219101	4
Caelo	Mannit	11308807	2
Caelo	Mannit	12305709	12
Caelo	Mannit	13189215	3
Caelo	Mannit	12305725-3444311112	1
Caelo	Mannit	12105438	3
Caelo	Mannit	12105433	5
Caelo	Mannit	20151012-2	1
Caelo	Mannit	12305724	2
Caelo	Mannit	13189203-3566412081	1
Caelo	Mannit	12105420	5
Caelo	Mannit	12305710	12
Caelo	Mannit	13189201	4
Caelo	Melatonin	12321415	3
Caelo	Melatonin	11267109	1
Caelo	Melatonin	13167301	2
Caelo	Melatonin	12321404	3
Caelo	Melatonin	13167310	1
Caelo	Melatonin	11267114	1
Caelo	Melatonin	12321421	2
Caelo	Melatonin	11267120	3
Caelo	Melatonin	120009	1
Caelo	Melatonin	12321416	4
Caelo	Melatonin	11267108	1
Caelo	Melatonin	11267121	4
Caelo	Melatonin	12321406	6
Caelo	Melatonin	12321422	4
Caelo	Melatonin	12321411	1
Caelo	Melatonin	2313M03554	1
Caelo	Menthol	10157615	1
Caelo	Menthol	12020408	1
Caelo	Menthol	72173258	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Menthol	11202907	1
Caelo	Menthol	13159104	2
Caelo	Menthol	12246205	7
Caelo	Menthol	1111020-01	1
Caelo	Menthol	11202910	4
Caelo	Menthol	12020403	5
Caelo	Menthol	12246211	3
Caelo	Menthol	11202912	2
Caelo	Menthol	1704211855	1
Caelo	Menthol	314Q01855	1
Caelo	Menthol	12020410	1
Caelo	Menthol	130501001	1
Caelo	Menthol	IntCh311052	1
Caelo	Menthol	11202901	1
Caelo	Menthol	13103901	10
Caelo	Menthol	12020402	4
Caelo	Menthol	20200712-2	1
Caelo	Methoxsalen	11376413	1
Caelo	Methoxsalen	13c13-n06	1
Caelo	Methoxsalen	11376401	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	11090030	4
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	413051/1	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	111003301	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	13268804	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	12251624	4
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	110900029	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	12251611	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	713Q-01930	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	12251619	2
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	13268809	2
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	12251605	3
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	10039706	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	11090031	4
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	13268802	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	11345120	5
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	12042202	1
Caelo	Methyl-4-hydroxybenzoat	1108211930	1
Caelo	Methylcellulose	13130115	1
Caelo	Methylcellulose	12044907	2
Caelo	Methylcellulose	12044903	2
Caelo	Methylcellulose	12044918	1
Caelo	Methylcellulose	13130104	1
Caelo	Methylcellulose	12044931	2
Caelo	Methylcellulose	12044917	1
Caelo	Methylcellulose	11127314	1
Caelo	Methylcellulose	12L05-N03	1
Caelo	Methylcellulose	13130102	1
Caelo	Methylcellulose	11127303	1
Caelo	Methylcellulose	12044927	4
Caelo	Methylcellulose	10247604	1
Caelo	Methylcellulose	12044922	2
Caelo	Methylrosanilinumchlorid	9238106	1
Caelo	Methylrosanilinumchlorid	9238107	1
Caelo	Methylrosanilinumchlorid	9238109	1
Caelo	Methylrosanilinumchlorid	8088701	1
Caelo	Metronidazol	102311870	1
Caelo	Metronidazol	607211870	1
Caelo	Metronidazol	12110403	1
Caelo	Metronidazol	121104085	1
Caelo	Metronidazol	12110105	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Metronidazol	10112907	1
Caelo	Metronidazol	12110421	6
Caelo	Metronidazol	12339507	5
Caelo	Metronidazol	12110410	3
Caelo	Metronidazol	11h11-n03	1
Caelo	Metronidazol	13095001	6
Caelo	Metronidazol	614U1870	1
Caelo	Metronidazol	11319809	1
Caelo	Metronidazol	12339511	9
Caelo	Metronidazol	9175609	1
Caelo	Metronidazol	11319823	5
Caelo	Metronidazol	12110414	2
Caelo	Metronidazol	12110412	7
Caelo	Metronidazol	1211413	1
Caelo	Metronidazol	10368310	1
Caelo	Metronidazol	11319810	2
Caelo	Metronidazol	13B06-N023	1
Caelo	Metronidazol	2813E1870	1
Caelo	Metronidazol	11319806	1
Caelo	Metronidazol	11319812	1
Caelo	Metronidazol	12339	1
Caelo	Metronidazol	12110411	4
Caelo	Metronidazol	1112028-02	8
Caelo	Metronidazol	12339520	3
Caelo	Metronidazol	12339504	8
Caelo	Metronidazol	12339510	7
Caelo	Metronidazol	2013U-01870	1
Caelo	Metronidazol	12110422	12
Caelo	Metronidazol	13095007	1
Caelo	Metronidazol	12339503	4
Caelo	Metronidazol	12339509	3
Caelo	Metronidazol	13095003	4
Caelo	Metronidazol	12110423	2
Caelo	Metronidazol	1239503	1
Caelo	Metronidazol	11319825	5
Caelo	Metronidazol	13095005	5
Caelo	Metronidazol	12339521	1
Caelo	Metronidazol	10368319	1
Caelo	Metronidazol	12110121	1
Caelo	Metronidazol	MTZ/2050401	1
Caelo	Metronidazol	12110413	5
Caelo	Metronidazol	10368320	1
Caelo	Metronidazol	13095013	3
Caelo	Metronidazol	20140612-12	1
Caelo	Metronidazol	13095004	1
Caelo	Metronidazol	11319816	2
Caelo	Metronidazol	11319818	7
Caelo	Metronidazol	12339519	6
Caelo	Metronidazol	11319807	1
Caelo	Miconazolnitrat	9177904	1
Caelo	Miconazolnitrat	11324909	1
Caelo	Miconazolnitrat	11104114	2
Caelo	Miconazolnitrat	12243803	6
Caelo	Miconazolnitrat	13185603	9
Caelo	Miconazolnitrat	411092-2-P	1
Caelo	Miconazolnitrat	12243805	4
Caelo	Miconazolnitrat	13352802	1
Caelo	Miconazolnitrat	12374301	2
Caelo	Miconazolnitrat	13185611	5
Caelo	Miconazolnitrat	13185609	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Miconazolnitrat	13185601	7
Caelo	Miconazolnitrat	12374308	4
Caelo	Miconazolnitrat	12243806	2
Caelo	Miconazolnitrat	12374307	11
Caelo	Miconazolnitrat	11324913	1
Caelo	Miconazolnitrat	13185610	5
Caelo	Miconazolnitrat	11104108	1
Caelo	Miconazolnitrat	11324905	1
Caelo	Miconazolnitrat	12243808	10
Caelo	Miconazolnitrat	12243802	3
Caelo	Minoxidil	13039501	7
Caelo	Minoxidil	1309501	1
Caelo	Minoxidil	13179503	4
Caelo	Minoxidil	11302005	1
Caelo	Minoxidil	20151112-5	1
Caelo	Minoxidil	12023907	5
Caelo	Minoxidil	3013M-02844	1
Caelo	Minoxidil	11302003	3
Caelo	Minoxidil	12273710	1
Caelo	Minoxidil	13179501	2
Caelo	Minoxidil	1311038-01	8
Caelo	Minoxidil	11e17-n07	1
Caelo	Minoxidil	12273704	5
Caelo	Minoxidil	12273703	2
Caelo	Minoxidil	13179501-3467312121	1
Caelo	Minoxidil	12023908	2
Caelo	Minoxidil	13179502	1
Caelo	Minoxidil	12023902	2
Caelo	Minoxidil	12023901	1
Caelo	Minoxidil	13039503	4
Caelo	Molekulardestilliertes Glyce...	11160012	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12351202	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12035605	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12035607	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12E02-N11	5
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12351210	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	NT1568M	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12351205	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12035601	2
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	1304011-01	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	zu erfassen	2
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	13304604	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12351215	1
Caelo	Mometasonfuroat, mikronisiert	12351203	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12016908	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12016905	2
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	nachprüfung	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12016904	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	13193404	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12274007	3
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	3413A-03015	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	13193406	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	13193401	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12274014	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	1513546	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	11026318	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12274009	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12016902	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12274003	5
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12274012	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12274013	2
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12016903	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12016907	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	13193403	1
Caelo	Mönchspfefferfrüchte	12274001	1
Caelo	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	12102305	2
Caelo	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	12102306	1
Caelo	Myrrhe	11277111	1
Caelo	Myrrhe	12244406	1
Caelo	Myrrhe	11277105	1
Caelo	Myrrhe	Nachprüfung	1
Caelo	Myrrhe	11276811	2
Caelo	Myrrhe	12269901	2
Caelo	Myrrhe	11276806	2
Caelo	Myrrhe	13108701	3
Caelo	Myrrhe	10057916	1
Caelo	Myrrhe	12244411	1
Caelo	Myrrhe	12269904	2
Caelo	Naphazolinhydrochlorid	2275310	1
Caelo	Naphazolinhydrochlorid	11081112	1
Caelo	Naphazolinhydrochlorid	9285103	3
Caelo	Naphazolinhydrochlorid	1206037	1
Caelo	Naphazolinhydrochlorid	12176203	1
Caelo	Naphazolinhydrochlorid	11081107	1
Caelo	Natriumacetat-Trihydrat	12027228	1
Caelo	Natriumacetat-Trihydrat	12027211	1
Caelo	Natriumacetat-Trihydrat	10353017	1
Caelo	Natriumacetat-Trihydrat	12027217	1
Caelo	Natriumacetat-Trihydrat	13411404	1
Caelo	Natriumacetat-Trihydrat	12316506	1
Caelo	Natriumacetat-Trihydrat	12027203	1
Caelo	Natriumascorbat	L1210026-01	1
Caelo	Natriumcarbonat-Decahydrat	13036902	2
Caelo	Natriumcarbonat-Decahydrat	11254708	1
Caelo	Natriumcarbonat-Decahydrat	12239810	2
Caelo	Natriumcarbonat-Decahydrat	13036909	1
Caelo	Natriumcyclamat	10380915	2
Caelo	Natriumcyclamat	11204205	1
Caelo	Natriumcyclamat	12256803	1
Caelo	Natriumcyclamat	12105622	1
Caelo	Natriumdihydrogenphosphat-Di. ...	12198510	1
Caelo	Natriumdihydrogenphosphat-Di. ...	12198506	1
Caelo	Natriumdihydrogenphosphat-Di. ...	12198517	2
Caelo	Natriumdihydrogenphosphat-Di. ...	13D08-N25	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	12153003	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	13014606	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	12153004	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	11220208	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	13014604	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	12153010	2
Caelo	Natriumdodecylsulfat	13099011	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	12153019	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	13099008	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	13411305	1
Caelo	Natriumdodecylsulfat	13099006	2
Caelo	Natriumedetat	13/23-N03-3472312131	1
Caelo	Natriumedetat	12181706	1
Caelo	Natriumedetat	12181703	2
Caelo	Natriumedetat	13142015	1
Caelo	Natriumedetat	11074703	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Natriumedetat	92159379	1
Caelo	Natriumedetat	12254507	2
Caelo	Natriumedetat	13142014	1
Caelo	Natriumedetat	11074611	1
Caelo	Natriumedetat	13142004	3
Caelo	Natriumedetat	2913M1925	1
Caelo	Natriumedetat	13142009	1
Caelo	Natriumedetat	13142008	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12356303	3
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	6522101	5
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12132219	8
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	11304809	2
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12132203	4
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13186721	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13390505	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12324725	2
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	1219204	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12324702	3
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12109205	6
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13060103	8
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	1203030-1	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	11304802	2
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13186711	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13060120	3
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13186704	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13186706	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	1234702	2
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13186705	3
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12132213	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12324703	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12109204	3
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13060104	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12109202	1
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12356401	3
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	12132204	7
Caelo	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	11304813	2
Caelo	Natriumhydroxid Plätzchen	12368105	2
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12345001	5
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	71199028	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	9302617	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12345013	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12345016	2
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	83002059	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12256606	3
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12256602	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12345025	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	11169309	3
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12345007	4
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	9302613	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	11169303	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	11169301	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	11169315	2
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12109001	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12109106	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12109101	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12109002	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	12109003	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	10135304	1
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	13028001	2
Caelo	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	13028003	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	12157001	2
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	11012210	2
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	12256902	1
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	12157005	15
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	12157006	11
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	12157013	4
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	11294504	1
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	12257901	11
Caelo	Natriumsulfat-Decahydrat	12157012	16
Caelo	Natriumthiosulfat	80426288	1
Caelo	Neomycinsulfat	1102043-03	4
Caelo	Neomycinsulfat	9105316	1
Caelo	Neomycinsulfat	10157505	4
Caelo	Neomycinsulfat	12H23-N04	4
Caelo	Neomycinsulfat	12175401	3
Caelo	Neomycinsulfat	12276410	2
Caelo	Neomycinsulfat	12276405	1
Caelo	Neostigminbromid	12172301	1
Caelo	Neostigminbromid	12172304	1
Caelo	Nicotinamid	12268302	1
Caelo	Nystatin	12017009	1
Caelo	Nystatin	12158008	4
Caelo	Nystatin	12158019	1
Caelo	Nystatin	12158020	1
Caelo	Nystatin	12158021	4
Caelo	Nystatin	13173401	4
Caelo	Nystatin	12158004	3
Caelo	Nystatin	11069706	2
Caelo	Nystatin	12158004	1
Caelo	Nystatin	1/0913	1
Caelo	Nystatin	11069716	1
Caelo	Nystatin	11069731	1
Caelo	Nystatin	12017004	5
Caelo	Nystatin	12017015	1
Caelo	Nystatin	12158006	4
Caelo	Nystatin	12017003	1
Caelo	Nystatin	12017010	1
Caelo	Nystatin	12138021	2
Caelo	Oxalsäure	13353907	1
Caelo	Oxalsäure	12212406	1
Caelo	Oxalsäure	12147010	1
Caelo	Oxalsäure	12212411	1
Caelo	Oxalsäure	12212407	1
Caelo	Oxytetracyclinhydrochlorid	2-28230A	1
Caelo	Oxytetracyclinhydrochlorid	12328107	1
Caelo	Oxytetracyclinhydrochlorid	11336510	1
Caelo	Oxytetracyclinhydrochlorid	12G10-N04	6
Caelo	Oxytetracyclinhydrochlorid	12130001	1
Caelo	Papaverinhydrochlorid	91964419	1
Caelo	Paraffin, mikrokristallin	13274303	1
Caelo	Patentblau V, E131	11305303	2
Caelo	Patentblau V, E131	12364204	1
Caelo	Patentblau V, E131	11305302	1
Caelo	Patentblau V, E131	12364202	1
Caelo	Patentblau V, E131	CH: 002/0913	1
Caelo	Pheniraminmaleat	9276210	1
Caelo	Phenol	11163801	1
Caelo	Phenol	13296902	1
Caelo	Phenol	11163809	1
Caelo	Phenol	12223005	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Phenol	12223022	1
Caelo	Phenol	12223001	1
Caelo	Phenylbutazon	10262901	1
Caelo	Pilocarpinhydrochlorid	12217302	1
Caelo	Pilocarpinhydrochlorid	1116190	1
Caelo	Podophyllumharz (aus Podophy...	11085803	1
Caelo	Podophyllumharz (aus Podophy...	11085807	3
Caelo	Poloxamer 407	12286806	1
Caelo	Poloxamer 407	12286801	2
Caelo	Povidon 25, löslich	12376301	1
Caelo	Povidon 25, löslich	13323407	1
Caelo	Povidon-Iod	12153106	1
Caelo	Povidon-Iod	12153119	2
Caelo	Povidon-Iod	12153116	1
Caelo	Povidon-Iod	11168607	1
Caelo	Povidon-Iod	12153110	2
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	12383304	2
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	1213608	1
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	12123607	2
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	12123610	1
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	13F11-N02	1
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	13372403	1
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	12383301	1
Caelo	Prednicarbat, mikronisiert	11L23-N07	6
Caelo	Prednisolonacetat	1234506	1
Caelo	Prednisolonacetat	12091814	5
Caelo	Prednisolonacetat	12091815	2
Caelo	Prednisolonacetat	11158002	1
Caelo	Prednisolonacetat	1234502	1
Caelo	Prednisolonacetat	12324502	7
Caelo	Prednisolonacetat	11158007	1
Caelo	Prednisolonacetat	12091807	8
Caelo	Prednisolonacetat	11080403	1
Caelo	Prednisolonacetat	13262601	9
Caelo	Prednisolonacetat	13262606	1
Caelo	Prednisolonacetat	12324505	9
Caelo	Prednisolonacetat	12324508	3
Caelo	Prednisolonacetat	13262605	4
Caelo	Prednisolonacetat	4313A-02106	1
Caelo	Prednisolonacetat	12091802	7
Caelo	Prednisolonacetat	12091806	3
Caelo	Prednisolonacetat	12324509	1
Caelo	Prednisolonacetat	13262602	3
Caelo	Prednisolonacetat	12091808	1
Caelo	Prednisolonacetat	12091804	5
Caelo	Prednisolonacetat	12324504	9
Caelo	Prednisolonacetat	13A07-N07	5
Caelo	Prednisolonacetat	11158003	1
Caelo	Prednison	12232705	1
Caelo	Prednison	204312107	1
Caelo	Prednison	2114Q2107	1
Caelo	Prednison	10037817	2
Caelo	Prednison	12177604	1
Caelo	Procainhydrochlorid	10159721	2
Caelo	Procainhydrochlorid	12177801	4
Caelo	Procainhydrochlorid	11370216	2
Caelo	Procainhydrochlorid	13I09-N08	1
Caelo	Progesteron, mikronisiert	130404002	1
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195920	10
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195926	17

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195928	5
Caelo	Progesteron, mikronisiert	9195408	1
Caelo	Progesteron, mikronisiert	13155902	8
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195905	1
Caelo	Progesteron, mikronisiert	13G11-N02	8
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195912	1
Caelo	Progesteron, mikronisiert	11177219	2
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195907	7
Caelo	Progesteron, mikronisiert	13155921	1
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195913	3
Caelo	Progesteron, mikronisiert	11177221	2
Caelo	Progesteron, mikronisiert	11177207	2
Caelo	Progesteron, mikronisiert	9195429	2
Caelo	Progesteron, mikronisiert	12195906	1
Caelo	Propranololhydrochlorid	11F21-N11	2
Caelo	Propranololhydrochlorid	12370710	1
Caelo	Propranololhydrochlorid	12D27-N14	5
Caelo	Propranololhydrochlorid	12370703	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	82792159	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11102609	2
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11373505	5
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11373504	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	13100215	3
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11373512	5
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11102624	3
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11373524	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11102610	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	1108211931	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11373523	2
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	113735223	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	713Q-01931	1
Caelo	Propyl-4-hydroxybenzoat	11373518	2
Caelo	Propyphenazon, gepulvert	12039103	1
Caelo	Pyridoxinhydrochlorid	12214104	1
Caelo	Pyridoxinhydrochlorid	12214110	4
Caelo	Resorcin	10218809	1
Caelo	Resorcin	11309610	1
Caelo	Resorcin	5052	1
Caelo	Resorcin	206370-0003	1
Caelo	Resorcin	11309602	1
Caelo	Resorcin	12255614	1
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	13193109	1
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	11043825	1
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	11043819	2
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	11043816	1
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	11043816	2
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	11043826	1
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	13193104	2
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	11043822	1
Caelo	Rhabarberwurzel, gepulvert	13193106	2
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193406	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11192408	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193405	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	10139811	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	13128801	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	13128805	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193402	2
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193405	3
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193404	2
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193403	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193408	4
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	11193407	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	14082902	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	13128806	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	13128802	1
Caelo	Rosmarinblätter, geschn.	IntCh: 313060	1
Caelo	Saccharin-Natrium	82885059	1
Caelo	Saccharin-Natrium	12C08-N08	1
Caelo	Saccharin-Natrium	11172805	2
Caelo	Saccharin-Natrium	11025605	1
Caelo	Saccharin-Natrium	12362607	1
Caelo	Saccharin-Natrium	10170504	1
Caelo	Saccharin-Natrium	13205414	1
Caelo	Saccharin-Natrium	11172814	1
Caelo	Saccharose	13352902	2
Caelo	Saccharose	13063907	1
Caelo	Saccharose	12107806	1
Caelo	Saccharose	11246313	1
Caelo	Saccharose	13352901	2
Caelo	Saccharose	12241817	2
Caelo	Saccharose	11246307	1
Caelo	Saccharose	13031405	2
Caelo	Saccharose	12241804	3
Caelo	Saccharose	12280309	1
Caelo	Saccharose	11246306	1
Caelo	Saccharose	12107805	1
Caelo	Saccharose	14197302	1
Caelo	Saccharose	13031406	1
Caelo	Saccharose	13352909	1
Caelo	Saccharose	13031410	2
Caelo	Saccharose	13031417	1
Caelo	Saccharose	12241816	1
Caelo	Saccharose	zu erfassen	2
Caelo	Saccharose	13031414	1
Caelo	Saccharose	13031409	1
Caelo	Salicylsäure	11311923	3
Caelo	Salicylsäure	7466	1
Caelo	Salicylsäure	zu erfassen	2
Caelo	Salicylsäure	1738980	1
Caelo	Salicylsäure	12134721	1
Caelo	Salicylsäure	1334403	1
Caelo	Salicylsäure	11197117	1
Caelo	Salicylsäure	12134711	6
Caelo	Salicylsäure	11311922	9
Caelo	Salicylsäure	1234709	1
Caelo	Salicylsäure	3601413011-12374211	1
Caelo	Salicylsäure	12134717	6
Caelo	Salicylsäure	11311904	5
Caelo	Salicylsäure	10355916	2
Caelo	Salicylsäure	12134710	2
Caelo	Salicylsäure	4010Q-01045	1
Caelo	Salicylsäure	1714Q1045	1
Caelo	Salicylsäure	12134720	3
Caelo	Salicylsäure	12036225	1
Caelo	Salicylsäure	12036211	2
Caelo	Salicylsäure	12036223	8
Caelo	Salicylsäure	12374205	6
Caelo	Salicylsäure	13B14-No1	1
Caelo	Salicylsäure	12104709	1
Caelo	Salicylsäure	12374207-3454311172	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Salicylsäure	12134712	3
Caelo	Salicylsäure	Salicylsäure2	1
Caelo	Salicylsäure	12374207	3
Caelo	Salicylsäure	12134709	20
Caelo	Salicylsäure	SSgemösert1	1
Caelo	Salicylsäure	12134707	6
Caelo	Salicylsäure	SSgemösert2	1
Caelo	Salicylsäure	12374210	3
Caelo	Salicylsäure	Salicylsäurere	1
Caelo	Salicylsäure	14076207	1
Caelo	Salicylsäure	12134719	1
Caelo	Salicylsäure	12036216	3
Caelo	Salicylsäure	1234	1
Caelo	Salicylsäure	11311906	3
Caelo	Salicylsäure	11311916	2
Caelo	Salicylsäure	3111J01045	1
Caelo	Salicylsäure	12134713	1
Caelo	Salicylsäure	10291804	2
Caelo	Salicylsäure	12323401	1
Caelo	Salicylsäure	11197103	1
Caelo	Salicylsäure	12036202	4
Caelo	Salicylsäure	11311902	2
Caelo	Salicylsäure	11197106	1
Caelo	Salicylsäure	10291808	1
Caelo	Salicylsäure	10355911	1
Caelo	Salicylsäure	1131922	1
Caelo	Salicylsäure	12036209	3
Caelo	Salicylsäure	20151112-4	1
Caelo	Salicylsäure	20270312-2	1
Caelo	Salicylsäure	12036215	3
Caelo	Salicylsäure	12036217	1
Caelo	Salicylsäure	13344003	3
Caelo	Salicylsäure	12036226	7
Caelo	Salicylsäure	9220716	1
Caelo	Salicylsäure	12134714	5
Caelo	Salicylsäure	11311910	1
Caelo	Salicylsäure	82732109	1
Caelo	Salicylsäure	1913Q-01045	1
Caelo	Salicylsäure	123134712	1
Caelo	Salicylsäure	11311917	6
Caelo	Salicylsäure	12134715	2
Caelo	Salicylsäure	10291803	1
Caelo	Salicylsäure	11197123	7
Caelo	Salicylsäure	12134702	7
Caelo	Sandelholz, rotes, geschn. (...)	13106901	1
Caelo	Sandelholz, rotes, geschn. (...)	12049608	2
Caelo	Sandelholz, rotes, geschn. (...)	12049607	2
Caelo	Sauerdornbeeren	12217103	3
Caelo	Sauerdornbeeren	12217106	1
Caelo	Sauerdornbeeren	12217111	1
Caelo	Sauerdornbeeren	11058320	1
Caelo	Sauerdornbeeren	12217113	1
Caelo	Sauerdornbeeren	12217107	1
Caelo	Sauerdornbeeren	1221707	1
Caelo	Sauerdornbeeren	12217109	2
Caelo	Sauerkirschenstiele, geschn.	10367014	1
Caelo	Sauerkirschenstiele, geschn.	12042307	1
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	13097701	6
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12009702	1
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350210	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350209	1
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	13358302	3
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	13097702	2
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350202	5
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350207	5
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	13097705	3
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	13358304	4
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	11276701	2
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	13097706	1
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350205	2
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350202-3369319012	1
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	13097704	4
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12208601	3
Caelo	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350211	2
Caelo	Schwarzer Pfeffer	13221110	1
Caelo	Schwarzer Pfeffer	12192309	1
Caelo	Schwarzer Pfeffer	11193911	1
Caelo	Schwarzer Pfeffer	12192305	1
Caelo	Schwarzer Pfeffer	12192306	1
Caelo	Schwarzer Pfeffer	12192304	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	11233507	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	12358902	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	12358901	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	11233503	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	12358904	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	10121916	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	11233502	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	10121915	1
Caelo	Schwarzkümmelsamen	12358903	2
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	11052817	1
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	10F09-N13	1
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	11052809	1
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	12146903	2
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	4513M-01186	1
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	11052812	2
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	10013213	1
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	12146913	1
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	12146911	2
Caelo	Schweres basisches Bismutnit...	11052805	1
Caelo	Schweres, basisches Magnesium...	13123504	2
Caelo	Schweres, basisches Magnesium...	12135401	1
Caelo	Selenhefe	12165708	1
Caelo	Selleriewurzel, geschn.	10270009	1
Caelo	Selleriewurzel, geschn.	12319107	1
Caelo	Selleriewurzel, geschn.	10270012	1
Caelo	Selleriewurzel, geschn.	12319108	1
Caelo	Selleriewurzel, geschn.	12319105	2
Caelo	Senfsamen, weiß, gepulvert	12375704	1
Caelo	Senfsamen, weiß, gepulvert	12375701	1
Caelo	Senfsamen, weiß, gepulvert	12375706	2
Caelo	Senfsamen, weiß, gepulvert	12375702	1
Caelo	Sennesblätter, gepulvert	11193307	1
Caelo	Sojalecithin (Instantform)	12139001	2
Caelo	Sojalecithin (Instantform)	11371504	1
Caelo	Sojalecithin (Instantform)	12139011	1
Caelo	Sojalecithin (Instantform)	12139012	1
Caelo	Sojalecithin (Instantform)	Nachprüfung	1
Caelo	Sojalecithin (Instantform)	11145311	1
Caelo	Sojalecithin (Instantform)	11371502	1
Caelo	Sorbinsäure	11203807	5

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Sorbinsäure	12330618	7
Caelo	Sorbinsäure	10305213	2
Caelo	Sorbinsäure	5012E-01048	1
Caelo	Sorbinsäure	13334003	1
Caelo	Sorbinsäure	11203806	3
Caelo	Sorbinsäure	12038003	1
Caelo	Sorbinsäure	12330608	5
Caelo	Sorbinsäure	12038025	1
Caelo	Sorbinsäure	10305208	1
Caelo	Sorbinsäure	105505	1
Caelo	Sorbitanmonostearat	12h23-n05	1
Caelo	Sorbitanmonostearat	12274813	1
Caelo	Sorbitanmonostearat	13B19-N01	3
Caelo	Sorbitanmonostearat	12274801	2
Caelo	Sorbitanmonostearat	11145411	1
Caelo	Sorbitanmonostearat	13209419	1
Caelo	Sorbitanmonostearat	12274807	1
Caelo	Sorbitanmonostearat	12085011	1
Caelo	Sorbitol	11379332	1
Caelo	Sorbitol	12249108	2
Caelo	Sorbitol	11379320	1
Caelo	Sorbitol	12L07-N12	1
Caelo	Sorbitol	12249124	1
Caelo	Sorbitol	13335304	1
Caelo	Sorbitol	12249139	1
Caelo	Sorbitol	12249140	1
Caelo	Sorbitol	12249110	4
Caelo	Sorbitol	10383323	1
Caelo	Sorbitol	11379337	1
Caelo	Sorbitol	13335307	1
Caelo	Sorbitol	11379321	1
Caelo	Sorbitol	11379336	2
Caelo	Sorbitol	12249109	1
Caelo	Sorbitol	11379322	1
Caelo	Sorbitol	13278206	1
Caelo	Spargelwurzelstock, geschn.	13193302	1
Caelo	Spargelwurzelstock, geschn.	13071002	1
Caelo	Spironolacton	11G28-N03	1
Caelo	Spironolacton	10159914	1
Caelo	Spironolacton	12049105	2
Caelo	Spironolacton	11042607	1
Caelo	Spironolacton	12049130	2
Caelo	Spironolacton	13124309	2
Caelo	Spironolacton	12049123	2
Caelo	Spironolacton	12049118	3
Caelo	Spironolacton	2013U-03249	1
Caelo	Spironolacton	11042602	1
Caelo	Spironolacton	12049110	2
Caelo	Spironolacton	12049109	2
Caelo	Spironolacton	13124303	3
Caelo	Sprühgetrocknetes Arabisches...	12372302	1
Caelo	Sprühgetrocknetes Arabisches...	11345715	1
Caelo	Sprühgetrocknetes Arabisches...	12138612	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	13154904	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	12214303	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	12238719	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	11179307	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	13154904	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	11350907	2
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	10061146	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	11146011	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	14025710	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	12238705	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	13305108	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	13005908	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	12238714	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	10177507	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	12238715	3
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	13005905	2
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	12238704	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	11186027	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	11186026	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	10177515	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	1179307	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	12166007	1
Caelo	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...	11179315	1
Caelo	Stearinsäure 50	12241911	1
Caelo	Stearinsäure 50	11103706	1
Caelo	Stearinsäure 50	11308514	2
Caelo	Stearinsäure 50	12241914	1
Caelo	Stearinsäure 50	12241915	1
Caelo	Sulfacetamid	11085914	2
Caelo	Sulfacetamid	11085911	3
Caelo	Sulfadiazin	11194204	1
Caelo	Talkum	12267401	2
Caelo	Talkum	11318301	1
Caelo	Talkum	11318324	3
Caelo	Talkum	11318312	2
Caelo	Talkum	13146308	2
Caelo	Talkum	13146312	4
Caelo	Talkum	11318323	1
Caelo	Talkum	13146302	4
Caelo	Talkum	11318335	2
Caelo	Talkum	9218303	1
Caelo	Talkum	12267424	3
Caelo	Talkum	12267412	4
Caelo	Talkum	11318311	3
Caelo	Talkum	13146307	2
Caelo	Tannin	10315107	3
Caelo	Tannin	10019007	2
Caelo	Tannin	12171106	6
Caelo	Tannin	12336005	1
Caelo	Tannin	12171103	1
Caelo	Tannin	12336009	5
Caelo	Tannin	12336014	2
Caelo	Tannin	12301515	1
Caelo	Tannin	12171101	7
Caelo	Tannin	12336013	1
Caelo	Tannin	12336007	2
Caelo	Tannin	nachprüfung	1
Caelo	Tannin	12336016	1
Caelo	Tannin	12336001	9
Caelo	Tannin	11302307	5
Caelo	Tannin	9128601	1
Caelo	Tannin	441311052	1
Caelo	Testosteron	13406004	1
Caelo	Testosteron	APL00034466T	1
Caelo	Testosteron	13134804	1
Caelo	Testosteron	13134806	4
Caelo	Testosteron	12176301	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Testosteronpropionat	1108212376	1
Caelo	Testosteronpropionat	2013U-02376	1
Caelo	Testosteronpropionat	12163610	2
Caelo	Testosteronpropionat	12060102	3
Caelo	Testosteronpropionat	12163605	1
Caelo	Testosteronpropionat	10235809	1
Caelo	Testosteronpropionat	10235821	1
Caelo	Testosteronpropionat	106212376	1
Caelo	Testosteronpropionat	612212376	1
Caelo	Testosteronpropionat	614E2376	1
Caelo	Testosteronpropionat	12163616	1
Caelo	Testosteronpropionat	12163607	1
Caelo	Testosteronpropionat	903312376	1
Caelo	Testosteronpropionat	1263607	1
Caelo	Testosteronpropionat	12163612	1
Caelo	Tetracain Base	14A16-B04-292916	1
Caelo	Tetracainhydrochlorid	13K25-B04-290276	1
Caelo	Tetracainhydrochlorid	6093549	1
Caelo	Tetracainhydrochlorid	nachprüfung	1
Caelo	Tetracainhydrochlorid	12019802	3
Caelo	Tetracainhydrochlorid	10118225	3
Caelo	Tetracainhydrochlorid	13155706	4
Caelo	Tetracainhydrochlorid	4827030	2
Caelo	Tetracainhydrochlorid	9070003	1
Caelo	Tetracainhydrochlorid	10118211	1
Caelo	Tetracainhydrochlorid	12019810	4
Caelo	Tetracainhydrochlorid	12019822	4
Caelo	Tetracyclinhydrochlorid	12138106	1
Caelo	Tetracyclinhydrochlorid	12353609	1
Caelo	Tetracyclinhydrochlorid	12353602	1
Caelo	Tetracyclinhydrochlorid	12138104	1
Caelo	Tetracyclinhydrochlorid	12353616	1
Caelo	Tetracyclinhydrochlorid	1204039	2
Caelo	Tetracyclinhydrochlorid	12353603	4
Caelo	Theophyllin	12166311	1
Caelo	Theophyllin	12166305	3
Caelo	Theophyllin	12166312	1
Caelo	Theriak, gepulvert	12289306	1
Caelo	Theriak, gepulvert	12289303	1
Caelo	Theriak, gepulvert	13407303	1
Caelo	Theriak, gepulvert	12289305	2
Caelo	Theriak, gepulvert	12289307	8
Caelo	Theriak, gepulvert	11082408	1
Caelo	Theriak, gepulvert	11082409	1
Caelo	Theriak, gepulvert	12189401	1
Caelo	Theriak, gepulvert	12289301	4
Caelo	Theriak, gepulvert	412091-2P	1
Caelo	Theriak, gepulvert	11082413	1
Caelo	Theriak, gepulvert	12189404	1
Caelo	Thiaminchloridhydrochlorid	11371319	2
Caelo	Thiaminchloridhydrochlorid	11371313	1
Caelo	Thiomersal	10296413	1
Caelo	Thymol	13288802	1
Caelo	Thymol	11358616	2
Caelo	Thymol	11178716	1
Caelo	Thymol	11358607	2
Caelo	Thymol	11358610	2
Caelo	Tormentillwurzelstock, gepul. . .	13220502	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12040701	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	11102010	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	521305-420	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12040717	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	2512A-02188	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12216801	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12216802	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	14008002	2
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12216805	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	14008001	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	411082-2-P	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	4753268	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12040709	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12040702	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	11102011	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12216806	1
Caelo	Tormentillwurzelstock, geschn.	12040715	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	12323606	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	12323605	2
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	13103207	3
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	13103210	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	13103206	3
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	11210803	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	13103202	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	12323608	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	13103201	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	12323601	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	11116708	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	12277005	2
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	11116709	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	12323609	2
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	12323607	1
Caelo	Tosylchloramid-Natrium	1310206	1
Caelo	Tragant, gepulvert	12108801	1
Caelo	Tragant, gepulvert	13095208	2
Caelo	Tragant, gepulvert	13204701	2
Caelo	Tragant, gepulvert	12285405	1
Caelo	Tragant, gepulvert	13204705	1
Caelo	Tragant, gepulvert	12285403	1
Caelo	Tragant, gepulvert	13204703	2
Caelo	Tragant, gepulvert	13204702	1
Caelo	Tragant, gepulvert	12285402	1
Caelo	Tragant, gepulvert	12108806	2
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12320201	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	412051/4	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	11225504	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12320205	2
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12320204	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	711212563	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	14093503	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	14040504	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12320301	2
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12102902	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	13278102	2
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12320207	2
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	5012I-02563	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12320209	3
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12367103	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	11225506	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	13308004	2
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	13195002	8
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12102904	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	11225511	2
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	12320203	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	14093502	1
Caelo	Tretinoin, mikronisiert	1304028-02	4
Caelo	Triamcinolon, mikronisiert	12146612	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301508	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301515	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267720	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	1210-n09	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	1217307	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124805	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	12173701	7
Caelo	Triamcinolonacetonid	9364429	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301503	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	13256608	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	120904002	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124809	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301510	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124804	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	10220311	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267704	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267710	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13379913	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124805	3
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301501	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124801	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267707	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	10220340	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267705	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	1514Q2516	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267714	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301515	6
Caelo	Triamcinolonacetonid	13256607	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	1802212516	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	1601312516	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	12173707	4
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124804	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267711	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	1201506	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	2513M02516	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124807	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13E15-N03	10
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301507	5
Caelo	Triamcinolonacetonid	12173710	3
Caelo	Triamcinolonacetonid	4613E2516	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124807	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301509	4
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301518	4
Caelo	Triamcinolonacetonid	11267721	5
Caelo	Triamcinolonacetonid	12173705	4
Caelo	Triamcinolonacetonid	9364422	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	10220341	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124806	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	12301504	2
Caelo	Triamcinolonacetonid	13124801	3
Caelo	Triamcinolonacetonid	13379903	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	1107212516	1
Caelo	Triamcinolonacetonid	10220342	1
Caelo	Trichloressigsäure	12135203	1
Caelo	Trichloressigsäure	12135210	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Trichloressigsäure	13056212	1
Caelo	Trichloressigsäure	13056203	2
Caelo	Trichloressigsäure	13056209	1
Caelo	Triclosan	nachprüfung	1
Caelo	Triclosan	11238003	2
Caelo	Triclosan	10290812	1
Caelo	Triclosan	12359107	1
Caelo	Triclosan	12145906	5
Caelo	Triclosan	12003202	1
Caelo	Triclosan	11d20-n10	2
Caelo	Triclosan	11076715	1
Caelo	Triclosan	1214510	1
Caelo	Triclosan	12359105	6
Caelo	Triclosan	13391807	1
Caelo	Triclosan	12145907	5
Caelo	Triclosan	12145909	5
Caelo	Triclosan	13391804	2
Caelo	Triclosan	12359109	2
Caelo	Triclosan	12359114	1
Caelo	Triclosan	12145901	2
Caelo	Triclosan	11238002	1
Caelo	Triclosan	13391802	1
Caelo	Triclosan	Ch:002/0913	1
Caelo	Triclosan	12359108	7
Caelo	Triclosan	1125204	1
Caelo	Triclosan	12145902	1
Caelo	Triclosan	12003201	4
Caelo	Triclosan	11238011	2
Caelo	Triclosan	12003210	3
Caelo	Triclosan	5012E-03402	1
Caelo	Triclosan	13247805	1
Caelo	Triclosan	13247905	3
Caelo	Triclosan	12L06-N01/0005900346	1
Caelo	Triclosan	12145917	1
Caelo	Triclosan	12145908	6
Caelo	Triclosan	12359111	5
Caelo	Triclosan	14052103	1
Caelo	Triclosan	12359106	9
Caelo	Triclosan	14052102	1
Caelo	Triclosan	11238014	1
Caelo	Triclosan	12003205	9
Caelo	Triclosan	12359110	2
Caelo	Triclosan	13247904	3
Caelo	Trockenperlen Caelo orange	11005811	1
Caelo	Trockenperlen Caelo orange	11005813	1
Caelo	Trometamol	13095911	7
Caelo	Trometamol	13339107	1
Caelo	Trometamol	11160711	1
Caelo	Trometamol	314Q2519	1
Caelo	Trometamol	1001312519	1
Caelo	Trometamol	12113506	4
Caelo	Trometamol	11376006	4
Caelo	Trometamol	13339108	2
Caelo	Trometamol	12113511	1
Caelo	Trometamol	1339103	1
Caelo	Trometamol	13095912	6
Caelo	Trometamol	13095902	10
Caelo	Trometamol	213E-02519	1
Caelo	Trometamol	13095901	7
Caelo	Trometamol	13095910	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Trometamol	13339103	2
Caelo	Trometamol	12113510	1
Caelo	Trometamol	nachprüfung	1
Caelo	Trometamol	11160707	2
Caelo	Trometamol	13095905	1
Caelo	Trometamol	11160714	3
Caelo	Trometamol	12113515	4
Caelo	Tryptophan	131046	1
Caelo	Vanillin	12079424	1
Caelo	Vanillin	12079417	1
Caelo	Vanillin	12079412	3
Caelo	Vanillin	12h09-n06	1
Caelo	Vanillin	112901	1
Caelo	Vanillin	90961269	1
Caelo	Veilchenkraut, geschn.	11124007-3284310662	1
Caelo	Veilchenkraut, geschn.	13038703	1
Caelo	Veilchenkraut, geschn.	13038701	4
Caelo	Veilchenkraut, geschn.	10291007	1
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13040502	2
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13254404	1
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13040501	1
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13040503	1
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13254401	1
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13040502-3283310662	1
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13040504	1
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	10359117	2
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	13254403	2
Caelo	Vogelmierenkraut, geschn.	211e-01686	1
Caelo	Wachs	12257012	3
Caelo	Wachs	12124814	2
Caelo	Wachs	12124817	1
Caelo	Wachs	12367915	6
Caelo	Wachs	10364810	1
Caelo	Wachs	13378603	1
Caelo	Wachs	10145019	1
Caelo	Wachs	13031222	2
Caelo	Wachs	12257002	2
Caelo	Wachs	11308311	1
Caelo	Wachs	4910A-01239	1
Caelo	Wachs	10364814	1
Caelo	Wachs	12124806	1
Caelo	Wachs	13335502	6
Caelo	Wachs	13031231	2
Caelo	Wachs	12367910	8
Caelo	Wachs	12124805	6
Caelo	Wachs	13031220	2
Caelo	Wachs	12257009	6
Caelo	Wachs	12257004	2
Caelo	Wachs	13031239	4
Caelo	Wachs	12330116	1
Caelo	Wachs	13335507	1
Caelo	Wachs	12257022	1
Caelo	Wachs	12124807	1
Caelo	Wachs	12124812	3
Caelo	Wachs	12367901	13
Caelo	Wachs	11285015	1
Caelo	Wachs	13335503	2
Caelo	Wachs	12367916	3
Caelo	Wachs	12367912	3
Caelo	Wachs	11285008	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Wachs	110124	1
Caelo	Wachs	12367916-3429311150	1
Caelo	Wachs	12124816	1
Caelo	Wachs	12367911	2
Caelo	Wachs	10364829	1
Caelo	Wachs	11285014	2
Caelo	Wachs	13335508	1
Caelo	Wachs	13031201	3
Caelo	Wachs	11285001	1
Caelo	Wachs	12124810	4
Caelo	Walnussblätter, geschn.	11103010	3
Caelo	Walnussblätter, geschn.	4713U01499	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	11103003	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	10050413	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	nachprüfung	2
Caelo	Walnussblätter, geschn.	12124603	9
Caelo	Walnussblätter, geschn.	11103008	3
Caelo	Walnussblätter, geschn.	12124601	3
Caelo	Walnussblätter, geschn.	12124605	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	11103005	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	1214603	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	11103009	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	12124603-341930192	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	11103002	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	414Q1499	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	1414Q01499	1
Caelo	Walnussblätter, geschn.	12124602	3
Caelo	Walnussblätter, geschn.	11103001	2
Caelo	Wasserhaltiges Natriumperborat	13050805	1
Caelo	Weihrauch-Granulat	12120008	2
Caelo	Weihrauch-Granulat	1210005	1
Caelo	Weihrauch-Granulat	13112801	4
Caelo	Weihrauch-Granulat	12120006	3
Caelo	Weihrauch-Granulat	13112803-3494411030	1
Caelo	Weihrauch-Granulat	13112803	1
Caelo	Weihrauch-Granulat	12120012-3421310191	1
Caelo	Weihrauch-Granulat	10349210	1
Caelo	Weihrauch-Granulat	1210001	1
Caelo	Weihrauch-Granulat	12120005	2
Caelo	Weinsäure	12044112	1
Caelo	Weinsäure	12286911	1
Caelo	Weinsäure	10180713	2
Caelo	Weinsäure	10180714	1
Caelo	Weinsäure	12286903	2
Caelo	Weinsäure	10b25-n05	1
Caelo	Weinsäure	10180708	1
Caelo	Weinsäure	1204102	1
Caelo	Weinsäure	9494239	1
Caelo	Weinsäure	13116308	3
Caelo	Weinsäure	12044102	2
Caelo	Weinsäure	12286906	1
Caelo	Weinsäure	13116306	1
Caelo	Weinsäure	12240402	1
Caelo	Weinsäure	11169406	1
Caelo	Weinsäure	10199706	1
Caelo	Weinsäure	zu erfassen	1
Caelo	Weinsäure	12H02-n07	1
Caelo	Weisser Ton	11350107	2
Caelo	Weisser Ton	11350124	2
Caelo	Weisser Ton	13041835	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caelo	Weisser Ton	13041835	2
Caelo	Weisser Ton	13041803	1
Caelo	Weisser Ton	13041803	1
Caelo	Weisser Ton	11041623	1
Caelo	Weisser Ton	11350107	1
Caelo	Weisser Ton	11350106	2
Caelo	Weisser Ton	11350125	4
Caelo	Weisser Ton	11350115	1
Caelo	Wollwachsalkohole (pestizida. . .	12340505	1
Caelo	Wollwachsalkohole (pestizida. . .	13083912	1
Caelo	Wollwachsalkohole (pestizida. . .	13083906	1
Caelo	Xylitol	13230305	1
Caelo	Xylitol	12039003	1
Caelo	Xylitol	13230302	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	13171202	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	10118805	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	10118821	2
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	12287213	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	12287204	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	1207906	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	12287201	2
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	12287212	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	12287210	6
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	12027906	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	9278404	1
Caelo	Xylometazolinhydrochlorid	9276404	1
Caelo	Xylose	12120101	1
Caelo	Xylose	12120102	3
Caelo	Xylose	13133414	1
Caelo	Xylose	13133404	2
Caelo	Zimtrinde, geschn.	11357909	2
Caelo	Zimtrinde, geschn.	13304402	2
Caelo	Zimtrinde, geschn.	12309902	3
Caelo	Zimtrinde, geschn.	13304415	1
Caelo	Zimtrinde, geschn.	11357912	2
Caelo	Zimtrinde, geschn.	13304401	2
Caelo	Zimtrinde, geschn.	13231603	1
Caelo	Zinkacetat-Dihydrat	12316403	2
Caelo	Zinkacetat-Dihydrat	71359347	1
Caelo	Zinksulfat-Heptahydrat, kris. . .	12257802	1
Caelo	Zinksulfat-Heptahydrat, kris. . .	81554199	1
Caelo	Zinksulfat-Heptahydrat, kris. . .	12257816	1
Caelo	Zinksulfat-Heptahydrat, kris. . .	12257809	3
Caelo	Zinksulfat-Heptahydrat, kris. . .	11095621	1
Caelo	Zinksulfat-Heptahydrat, kris. . .	12257818	1
Caelo	Zinksulfat-Heptahydrat, kris. . .	CH:001/0913	1
Caelo	Zitwerwurzelstock, gepulvert	12007504	1
Caelo	Zitwerwurzelstock, gepulvert	12344605	1
Caelo	Zitwerwurzelstock, gepulvert	13165501	1
Caelo	Zitwerwurzelstock, gepulvert	13165504	2
Caesar & Loretz	Weisser Ton	13041801	2
Caesar & Loretz GmbH	Cetylpalmitat 15	10068402	2
Caesar & Loretz GmbH 40. . .	Betamethasonvalerat	10296715	1
Caesar & Loretz GmbH D-. . .	Hydroxyethylcellulose (9000 . . .	12274702	1
Caesar & Loretz GmbH D-. . .	Kaliumhydroxid	12057902	2
Caesar & Loretz GmbH D-. . .	Pyridoxinhydrochlorid	11197009	5
Caesar & Loretz GmbH D-. . .	Vanillin	10066830	2
Caesar & Loretz GmbH, 4. . .	Betamethasonvalerat	10296707	1
Caesar & Loretz GmbH, 4. . .	Betamethasonvalerat	13091211	1
Caesar & Loretz GmbH, 4. . .	Bitterer Fenchel	12094705	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Cyanocobalamin	9324102	2
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Dexamethason	10369922	1
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Ephedrinhydrochlorid	11126411	1
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Erythromycin	10217208	1
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Iodoform	12070501	3
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Miconazolniträt	11324904	1
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Mometasonfuroat, mikronisiert	11H10-N04	1
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Natriumhydrogencarbonat, gep. ...	13060102	1
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Pyridoxinhydrochlorid	12214119	2
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Pyridoxinhydrochlorid	12214102	5
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Pyridoxinhydrochlorid	12214115	7
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Selenhefe	11318111	1
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Sojalecithin (Instantform)	12139013	2
Caesar & Loretz GmbH, 4...	Vanillin	12079401	1
Caesar & Loretz/ Noweda	Citronensäure, wasserfreie	12156812	7
Caesar & Loretz/ Noweda	Schweres basisches Bismutnit. ...	12145701	1
Caesar & Loretz/ Noweda	Weinsäure	12044103	4
Caesar & Loretz GmbH	Citronensäure-Monohydrat	12125937	4
Caesar & Loretz GmbH	Emulgierender Cetylstearylal. ...	12065703	1
Caesar & Loretz GmbH	Natriummonohydrogenphosphat-...	12345004	5
Caesar § Lorenz GmbH	Estriol	12298712	1
Caesar § Lorenz GmbH	Thymol	13288806	1
Caesar&Loretz GmbH D-40. ...	Hartfett, pastilliert	11109617	1
Caesar/Noweda	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. ...	12184411	1
Caesar/Noweda	Cetylpalmitat 15	12124811	1
Caesar/Noweda	Cetylpalmitat 15	12228801	1
Caesar/Noweda	Cetylstearylalkohol	2911E-01077	1
Caesar/Noweda	Emulgierender Cetylstearylal. ...	11343405	1
Caesar/Noweda	Emulgierender Cetylstearylal. ...	12065707	1
Caesar/Noweda	Flohsamen	12276501	3
Caesar/Noweda	Flohsamen	11185817	3
Caesar/Noweda	Harnstoff	13064208	1
Caesar/Noweda	Koriander	2010M-01539	1
Caesar/Noweda	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350208	4
Caesar/Noweda	Wachs	12124811	2
Cealo	Calciumhydrogenphosphat, gep. ...	12212811	1
Cealo	Indische Flohsamen	12276502	4
Cealo	Magnesium(hydrogen)citrat	13233907	3
Cealo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	11354615	1
Cealo	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	112354615	1
Cealo / Noweda	Kakaobutter	13292011	2
Ceasar & Loretz GmbH	Chlorhexidindiacetat	80104278	1
Cfm Oskar Tropitzsch	Ubidecarenon	5300001	1
chiena medica	Dang Gui	1005544	1
chiena medica	Hai Tong Pi	1108502	11
chiena medica	Shan Yao	1006508	4
chiena medica	Xiang Fu	1105528	8
chiena medica	Yi Yi Ren	1004565	2
chiena medica	Ze Lan	905527	4
chiena medica	Zhi He Shou Wu	903522	1
China medica	(Fen) Bi Xie	1108524	5
China medica	(Huai) Niu Xi	1106517	1
China medica	(Huai) Niu Xi	110535	1
China medica	Bai Shao	1106524	23
China medica	Bai Zhi	1103577	3
China medica	Bai Zhu	1104510	6
China medica	Chao Ji Li	1212536	4
China medica	Chao Ji Li	1007541	2
China medica	Chaoi Mai Ya	1004526	2
China medica	Da Zao	1001528	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
China medica	Dan Shen	1108507	4
China medica	Dang Gui	1111602	6
China medica	Dang Shen	1103505	2
China medica	Fang Feng	1110591	2
China medica	Fu Chao Zhi Qiao	1010516	3
China medica	Fu Ling	1110596	8
China medica	Fu Xiao Mai	1202629	4
China medica	Gou Qi Zi	907522	2
China medica	Gou Qi Zi	1207560	6
China medica	He Huan Hua	1104512	3
China medica	He Huan Pi	1003546	1
China medica	Ji Xue Teng	1103511	2
China medica	Jiang Ban Xia	1010504	2
China medica	Lu Lu Tong	1108522	2
China medica	Mai Dong	1010503	1
China medica	Man Jing Zi	1010513	2
China medica	Man Jing Zi	903558	2
China medica	Mu Gua	1108531	4
China medica	Niu Bang Zi (Chao)	807542	2
China medica	Pu Gong Ying	1112568	1
China medica	Qing Xiang Zi	1106517	3
China medica	Sha Yuan Zi	906506	2
China medica	Shan Yao	1109562	10
China medica	Shan Yu Rou	1001506	1
China medica	Shen Qu	1104513	2
China medica	Shu Di (Huang)	1010502	1
China medica	Tian Zhu Huang	903592	3
China medica	Tu Si Zi	1007535	1
China medica	Wei Ling Xian	911522	1
China medica	Xu Duan	1108508	5
China medica	Yi Yi Ren	1109555	7
China medica	Ze Xie	1007532	1
China medica	Ze Xie	1110590	6
China medica	Ze Xie	1006515	1
China Medica	(Chao) Jiang Can	1103581	1
China Medica	(Fen) Bi Xie	6323311105-1108524	1
China Medica	(Fen) Bi Xie	1108524-6193317002	1
China Medica	(Huai) Niu Xi	6241318091-1106535	1
China Medica	(Huai) Niu Xi	1106535	6
China Medica	(Sheng) Di Huang	644731-1302537	1
China Medica	(Sheng) Di Huang	1010515	1
China Medica	Bai Jiang Cao	912533	1
China Medica	Bai Zhi	6400311204-1103577	1
China Medica	Bai Zhu	644931-1209521	1
China Medica	Bai Zhu	1209521	11
China Medica	Ban Lan Gen	905526	1
China Medica	Cang Zhu (Zhi)	6308311014-1104521	1
China Medica	Chan Tui	6420312142-1006516	1
China Medica	Chao Ji Li	1110599	1
China Medica	Chun (Bai) Pi	912535	1
China Medica	Da Huang	1001520-6192317002	1
China Medica	Dan Shen	6396311204-1108507	1
China Medica	Dan Zhu Ye	1210575	1
China Medica	Dang Gui	6360311115-102016	1
China Medica	Dang Gui	1307551	12
China Medica	Di Long	6425312142-1103504	1
China Medica	Fang Ji	1104514	1
China Medica	Fang Ji	1104514-6141316027	1
China Medica	Fang Ji	6399311204-1104514	1
China Medica	Fo Shou	1004522	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
China Medica	Fu Chao Zhi Qiao	645331-10105161	1
China Medica	Fu Chao Zhi Shi	1103520-6257318003	1
China Medica	Fu Ling	6507410372-1110596	1
China Medica	Fu Ling	1110596-613131602	1
China Medica	Fu Ling	1110596-613831602	1
China Medica	Fu Shen	1103507	1
China Medica	Fu Zi	1103510	7
China Medica	Fu Zi	6369311119-1103510	1
China Medica	Gan Jiang	6502410372-1205522	1
China Medica	Gan Jiang	6312311014-0909511	1
China Medica	Gao Ben	1210547	1
China Medica	Gu Sui Bu	1207553	1
China Medica	Gu Sui Bu	711514	1
China Medica	Gu Ya (Chao)	6315311014-1207567	1
China Medica	Gu Ya (Chao)	1207567-6254318072	1
China Medica	Gu Ya (Chao)	6371311119-1207567	1
China Medica	Gua Lou	1104528	8
China Medica	Gui Zhi	6404311204-1108526	1
China Medica	Gui Zhi	644631-1108526	1
China Medica	Hai Jin Sha	1305533	1
China Medica	He Huan Hua	1104512-6159317050	1
China Medica	He Ye	1104516-6166317050	1
China Medica	He Ye	1104516-6240318091	1
China Medica	Hong Hua	6329311105-1103576	1
China Medica	Hua Jiao	1202641	1
China Medica	Huo Ma Ren	1109561	1
China Medica	Huo Ma Ren	645431-1303553	1
China Medica	Huo Ma Ren	6272319042-1109561	1
China Medica	Ji Xue Teng	1302532	2
China Medica	Jiu Huang Jing	6419312142-1108518	1
China Medica	Jue Ming Zi	1104529	1
China Medica	Lian Qiao	6416312142-1010510	1
China Medica	Lian Qiao	1010510	1
China Medica	Lian Qiao	1010510-6161317050	1
China Medica	Lian Zi	1111610-6239318091	1
China Medica	Ling Zhi	1106513	1
China Medica	Lu Jiao Jiao	912539-6140316027	1
China Medica	Lu Jiao Jiao	912539	1
China Medica	Lu Jiao Jiao	6401311204-0912539	1
China Medica	Mai Dong	6366311119-1207569	2
China Medica	Mai Dong	644531-1207569	1
China Medica	Mo Han Lian	6271319042-1101556	1
China Medica	Mu Tong	907509	1
China Medica	Nü Zhen Zi	708528	1
China Medica	Pao Jiang	1207556	2
China Medica	Pu Huang	6372311119-1105531	1
China Medica	Pu Huang	1105531-6165317050	1
China Medica	Quan Xie	434262	1
China Medica	Ren Dong Teng	909510	1
China Medica	San Qi	907541-6163317050	1
China Medica	San Qi	907541	2
China Medica	Sang Ji Sheng	1211526	4
China Medica	Sang Ji Sheng	6421312142-1004507	1
China Medica	Sang Ye	1108516	1
China Medica	Sheng Jiang	6364311119-0905512	1
China Medica	Sheng Jiang	905512-6256318003	1
China Medica	Shi Gao	6361311115-1109567	1
China Medica	Shi Gao	6489410312-1109567	1
China Medica	Shui Niu Jiao	1001509	2
China Medica	Tian Dong	1011531-6160317050	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
China Medica	Tian Dong	1011531-6258318003	1
China Medica	Tian Dong	6365311119-1011531	1
China Medica	Tian Ma	1005558	1
China Medica	Tian Ma	6313311014-1005558	1
China Medica	Tian Ma	6424312142-1305551	1
China Medica	Tian Nan Xing	710502	1
China Medica	Tu Bie Chong	812566	1
China Medica	Tu Fu Ling	1110592	1
China Medica	Tu Si Zi	1111604	1
China Medica	Tu Si Zi	903557	1
China Medica	Wang Bu Liu Xing	906527	1
China Medica	Wu Ling Zhi	1207568	2
China Medica	Wu Mei	1112564	1
China Medica	Wu Zhu Yu (Zhi)	1003551	1
China Medica	Xian He Cao	903536	1
China Medica	Xian Mao	1006510	1
China Medica	Xin Yi	1106512	3
China Medica	Xu Chang Qing	1103501	2
China Medica	Yin Chen	6307311014-1004515	1
China Medica	Yu Jin	6327311105-1103517	1
China Medica	Zao Jiao Ci	6306311014-1104522	1
China Medica	Ze Xie	1110590-6255318072	1
China Medica	Zhe Bei Mu	6368311119-1110594	1
China Medica	Zhi He Shou Wu	181013	1
China Medica	Zhi He Shou Wu	1007537	1
China Medica	Zhi Mu	6402311204-1010506	1
China Medica	Zhi Ru Xiang	1106515	2
China Medica	Zhu Ling	6328311105-1110597	1
China Medica	Zhu Ling	1110597	2
China Medica	Zhu Ling	1010508	1
China Medica	Zi Shi Ying	907574	1
China Medica	Zi Su Zi (Chao)	1004524-6194317002	1
China Medica GmbH	Bian Xu	1204536	1
China Medica GmbH	Bian Xu	1111604	1
China Medica GmbH	He Huan Pi	1104527	1
China Medica GmbH	Shi Gao	1109567	1
Chinamedica	(Sheng) Di Huang	1302537	1
Chinamedica	Ban Zhi Lian	1303552	1
Chinamedica	Bei Wu Wei Zi (Cu Zhi)	1202645	1
Chinamedica	Bing Lang	1207558	1
Chinamedica	Cang Er Zi (Chao)	1103580	1
Chinamedica	Chuan Bei Mu	1109559	1
Chinamedica	Da Huang	1001520	2
Chinamedica	Da Huang	1307571	2
Chinamedica	Deng Xin Cao	1108528	1
Chinamedica	Di Gu Pi	1207564	1
Chinamedica	Di Long	1103504	1
Chinamedica	Du Huo	1011530	1
Chinamedica	Fu Zi	1005501	1
Chinamedica	Gan Cao (Mi Zhi)	1108513	1
Chinamedica	Gua Lou Zi	1106520	1
Chinamedica	Hou Po (Jiang Zhi)	1103513	2
Chinamedica	Huang Lian	1110593	3
Chinamedica	Jiang Huang	1109563	5
Chinamedica	Ku Shen	1205526	1
Chinamedica	Ling Zhi	1303556	1
Chinamedica	Ling Zhi	1106516	1
Chinamedica	Mai Dong	1207569	1
Chinamedica	Mai Ya (Chao)	1202634	1
Chinamedica	Qu Mai	1303543	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Chinamedica	San Leng (Cu Zhi)	1103509	1
Chinamedica	Sang Shen	1103514	2
Chinamedica	Sha Ren	1011525	1
Chinamedica	Sheng Ma	910512	1
Chinamedica	Tai Zi Shen	1105529	1
Chinamedica	Tian Dong	1011531	1
Chinamedica	Xia Ku Cao	1104525	1
Chinamedica	Yu Jin	1207554	5
Chinamedica	Zhi Mu	1207570	2
Chinamedica	Zhi Zi	1205529	1
ChinaMedica	Ai Ye	1104515	2
ChinaMedica	Ban Zhi Lian	903543	1
ChinaMedica	Bian Xu	1004513	1
ChinaMedica	Bing Lang	1007540	1
ChinaMedica	Bu Gu Zhi (Yan Zhi)	904508	1
ChinaMedica	Chuan Bei Mu	1002523	1
ChinaMedica	Chuan Mu Xiang	803509	1
ChinaMedica	Dan Dou Chi	1106518	1
ChinaMedica	Dang Shen	1212534	8
ChinaMedica	Di Fu Zi	1204534	1
ChinaMedica	Fu Ping	704565	1
ChinaMedica	Fu Shen	902509	1
ChinaMedica	Fu Xiao Mai	1002522	1
ChinaMedica	Gan Jiang	909511	1
ChinaMedica	Gan Jiang	1205522	4
ChinaMedica	Gu Sui Bu	703523	1
ChinaMedica	Gui Zhi	1108526	13
ChinaMedica	Hei Zhi Ma	912548	2
ChinaMedica	Hong Hua	704588	1
ChinaMedica	Hou Po (Jiang Zhi)	910521	1
ChinaMedica	Huang Qin	1210574	10
ChinaMedica	Huo Ma Ren	1303553	2
ChinaMedica	Jiang Huang	1006512	1
ChinaMedica	Jie Zi	903559	1
ChinaMedica	Lian Zi	1111610	2
ChinaMedica	Long Dan (Cao)	901518	1
ChinaMedica	Long Gu	1105530	2
ChinaMedica	Lu Gen	708524	1
ChinaMedica	Mei Gui Hua	1004520	2
ChinaMedica	Quan Xie	1103516	2
ChinaMedica	Ren Dong Teng	1111599	1
ChinaMedica	Sheng Jiang	1110595	5
ChinaMedica	Shi Chang Pu	1005562	1
ChinaMedica	Shi Chang Pu	1304528	1
ChinaMedica	Shi Gao	907540	1
ChinaMedica	Shou Wu Teng	1109558	3
ChinaMedica	Shu Di (Huang)	1209523	1
ChinaMedica	Shui Bai Guo	1005564	3
ChinaMedica	Tian Ma	1305551	2
ChinaMedica	Tu Bie Chong	1202643	2
ChinaMedica	Tu Fu Ling	908513	1
ChinaMedica	Wu Gong	908547	1
ChinaMedica	Xiang Fu	909513	1
ChinaMedica	Xin Yi	908580	1
ChinaMedica	Xu Chang Qing	709513	1
ChinaMedica	Ye Ju Hua	909512	1
ChinaMedica	Yin Chen	1112566	2
ChinaMedica	Yin Chen	1004515	1
ChinaMedica	Yin Yang Huo	912544	1
ChinaMedica	Yu Li Ren	907514	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
ChinaMedica	Zao Jiao Ci	901529	1
ChinaMedica	Zao Jiao Ci	1104522	1
ChinaMedica	Zhi Zi	710516	1
ChinaMedica	Zhu Ling	901581	1
China-Medica	Bai Qian	1007533	1
China-Medica	Bai Tou Weng	912530	1
China-Medica	Chong Wei Zi	805551	1
China-Medica	Dan Nan Xing	1106514	1
China-Medica	Gao Liang Jiang	903623	1
China-Medica	Gu Ya (Chao)	1207567	2
China-Medica	Hai Jin Sha	903512	3
China-Medica	He Ye	1104516	1
China-Medica	Kun Bu	711508	2
China-Medica	Lu Gen	1003545	2
China-Medica	Mo Yao	902517	1
China-Medica	Qian Hu	1101554	1
China-Medica	Qing Pi	812520	1
China-Medica	Qing Pi	1106526	2
China-Medica	Rou Dou Kou	1003550	2
China-Medica	Shan Yao	1202636	1
China-Medica	Su Mu	805585	2
China-Medica	Suo Yang	912531	1
China-Medica	Tian Ma	806540	1
China-Medica	Tian Nan Xing	1104519	1
China-Medica	Wu Ling Zhi	803518	1
China-Medica	Wu Shao She	903510	1
China-Medica	Yuan Zhi	808559	1
China-Medica	Zi Su Zi (Chao)	1004524	3
Denk	Pyridoxal-5-Phosphat	C041402802	1
Dermapharm	Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat	120905	12
Dermapharm	Ethacridinlactat-Monohydrat	130201	1
Dermapharm	Ethacridinlactat-Monohydrat	100201	2
Dextro	Glucose-Monohydrat	L0222	1
Dextro Energy	Glucose-Monohydrat	13171	1
Dextro Energy GmbH/Krie...	Glucose-Monohydrat	L309212:34	1
Dextro/Krieger/15.05.13	Glucose-Monohydrat	13092	1
Dorfmeister	Progesteron, mikronisiert	140301-01	1
Dr. Behr	Dimercaptobernsteinsäure	WE14020002	1
Dr. Paul Lohmann	Magnesium(hydrogen)citrat	1077866	2
Dr. Paul Lohmann	Magnesium(hydrogen)citrat	1078434	1
Dr. Paul Lohmann	Magnesium(hydrogen)citrat	1079474	1
DSM Nutritional Prod./ ...	Nicotinamid	1106044-01	3
Ebert	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1203030-02	5
Eigenherstellung	Glucose-Monohydrat	30912HML01	1
Eigenherstellung	Glucose-Monohydrat	110912HML01	1
Eigenherstellung	Glucose-Monohydrat	120912HML02	1
Eigenherstellung	Glucose-Monohydrat	180213HJK01	1
Eigenherstellung	Glucose-Monohydrat	110913HJK02	1
Eigenherstellung	Lactose-Monohydrat	70113HML01	1
Eigenherstellung	Lactose-Monohydrat	110913HJK01	1
Eigenherstellung	Lactose-Monohydrat	40113HJK01	1
Eigenherstellung	Methyl-4-hydroxybenzoat	100912PML01	1
El Comprá Import	Taurin	1202125	2
Elementar	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11602007228939	1
Erfurter Ölmühle	Leinsamen	zu erfassen	1
Erika apotheke	Kaliumcitrat	12135306	2
EuRho	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	d024a	1
EuRho	Biotin	111039-01	1
EuRho	Dithranol	1203025-01	1
EuRho	Glucose-Monohydrat	1108061-02	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
EuRho	Hydrocortisonacetat	1107004-03	4
EuRho	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1110024-03	20
EuRho	Lidocainhydrochlorid	1108017-01	1
EuRho	Mannit	1104028-03	3
EuRho	Methoxsalen	1104010-01	2
EuRho	Metronidazol	110903002	2
EuRho	Metronidazol	1109030-02	2
EuRho	Minoxidil	1105030-02	1
EuRho	Minoxidil	1108039-02	2
EuRho	Natriumsulfat-Decahydrat	1108035-02	3
EuRho	Oxytetracyclinhydrochlorid	1205028-01	5
EuRho	Progesteron, mikronisiert	1304040-02	5
EuRho	Testosteron	1106011-03	2
EuRho	Tetracainhydrochlorid	2906009V-04	1
EuRho	Tetracainhydrochlorid	1110010-01	6
EuRho	Triclosan	1107030-01	5
EuRho/Anzag	Nystatin	1107036-01	2
EuRho/Jenne	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1202017-01	1
Eurho/Phoenix	Naphazolinhydrochlorid	4413I-01885	1
EuRho/Phoenix	Lidocainhydrochlorid	1108017-02	6
euro	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	12022404	2
euro	Natriumhydrogencarbonat, gep...	110902901	1
Euro	Chlortetracyclinhydrochlorid	1108051-02	4
Euro / Jenne	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1401029-01	1
Euro OTC	Acetylsalicylsäure	1011015-01	1
Euro OTC	Acetylsalicylsäure	1307024-01	2
Euro OTC	Acetylsalicylsäure	20030611-1	1
Euro OTC	Acetylsalicylsäure	1107007-01	2
Euro OTC	Aescin	1310020-01	1
Euro OTC	Alfatradiol	121696	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	120402601	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1103007-01	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1210014-02	13
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	121001402	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	2111Q-01095	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	121001401	2
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1204026-02	8
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1213M-01095	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1109025-01	4
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1210014-01	13
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1106017-02	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1106017-01	2
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1210014-02-336331909	1
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1307011-01	8
Euro OTC	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1210012-01	1
Euro OTC	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	1108049-01	2
Euro OTC	Ammoniumchlorid	1203029-01	3
Euro OTC	Ammoniumchlorid	1212017-01	2
Euro OTC	Arginin	L1102030-01	1
Euro OTC	Arginin	L1206006-01	1
Euro OTC	Argininhydrochlorid	L1212009-01	2
Euro OTC	Argininhydrochlorid	1306023-01	1
Euro OTC	Ascorbinsäure	L1202011-02	1
Euro OTC	Beclometasondipropionat, was...	1203022-01	1
Euro OTC	Betainhydrochlorid	1202008-01	1
Euro OTC	Betainhydrochlorid	1305027-01	2
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1311039-01	2
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1108045-02	3
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1108045-03	7
Euro OTC	Betamethasonvalerat	110804-02	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1208014-04	3
Euro OTC	Betamethasonvalerat	3313U-01181	1
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1108045-01	2
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1208014-01	12
Euro OTC	Betamethasonvalerat	120812-02	1
Euro OTC	Betamethasonvalerat	120801402	2
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1208014-02	9
Euro OTC	Betamethasonvalerat	1208014-03	3
Euro OTC	Betamethasonvalerat	2014Q1181	1
Euro OTC	Betamethasonvalerat	2507211181	1
Euro OTC	Bifonazol	1206027-01	2
Euro OTC	Bifonazol	1206027-02	1
Euro OTC	Biotin	1111039-03	1
Euro OTC	Biotin	1111039-02	1
Euro OTC	Biotin	1301026-01	3
Euro OTC	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1040896	1
Euro OTC	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1207006-01	5
Euro OTC	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1305018-02	1
Euro OTC	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1107012-01	1
Euro OTC	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1058904	1
Euro OTC	Calciumgluconat	1304012-01	2
Euro OTC	Calciumgluconat	1105027-01	2
Euro OTC	Calciumgluconat	20270912-1	1
Euro OTC	Calciumgluconat	1105027-02	2
Euro OTC	Calciumgluconat	513-Q1211	1
Euro OTC	Calciumorotat-Dihydrat	1401006-01	1
Euro OTC	Calciumorotat-Dihydrat	1203037-01	2
Euro OTC	Calciumpantothenat	1209022-01	2
Euro OTC	Calciumpantothenat	1305034-01	2
Euro OTC	Calciumpantothenat	1312027-01	3
Euro OTC	Calciumpantothenat	1111025-01	3
Euro OTC	Calciumpantothenat	1209022-02pzn	1
Euro OTC	Calciumpantothenat	1209022-02	1
Euro OTC	Carbomer 35000 / 50000	101217279	1
Euro OTC	Carbomer 35000 / 50000	1210037-01	6
Euro OTC	Carbomer 35000 / 50000	1202020-01	2
Euro OTC	Cellulose, mikrokristallin	1211037-01	1
Euro OTC	Cellulose, mikrokristallin	1201004-02	1
Euro OTC	Cellulose, mikrokristallin	121103701	1
Euro OTC	Cetylpalmitat 15	12228808	5
Euro OTC	Cetylstearylalkohol	20270912-2	1
Euro OTC	Cetylstearylalkohol	1204015-01	1
Euro OTC	Cetylstearylalkohol	130503501	1
Euro OTC	Cetylstearylalkohol	1107035-01	1
Euro OTC	Cetylstearylalkohol	1212019-01	1
Euro OTC	Cetylstearylalkohol	1305035-01	1
Euro OTC	Chloramphenicol	1509211259	1
Euro OTC	Chloramphenicol	1209010-02	1
Euro OTC	Chloramphenicol	1302034-01	1
Euro OTC	Chloramphenicol	1302024-02	4
Euro OTC	Chloramphenicol	314Q1259	1
Euro OTC	Chloramphenicol	1308017-02	2
Euro OTC	Chloramphenicol	120901902	2
Euro OTC	Chloramphenicol	1308017-01	5
Euro OTC	Chloramphenicol	1012013-01	2
Euro OTC	Chloramphenicol	1203012-01	3
Euro OTC	Chloramphenicol	1209019-02	6
Euro OTC	Chloramphenicol	1203012-02	8
Euro OTC	Chloramphenicol	1203012-12	1
Euro OTC	Chloramphenicol	1107002-01	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Chlorhexidindiacetat	10154430	1
Euro OTC	Chlortetracyclinhydrochlorid	5113I01155	1
Euro OTC	Chlortetracyclinhydrochlorid	110805102	1
Euro OTC	Chlortetracyclinhydrochlorid	1108051-01	9
Euro OTC	Cholinhydrogentartrat	1309023-01	2
Euro OTC	Citronensäure, wasserfreie	L1202001-01	3
Euro OTC	Clindamycinhydrochlorid	1111058-01	7
Euro OTC	Clindamycinhydrochlorid	1111058-02	1
Euro OTC	Clindamycinhydrochlorid	111158-01	1
Euro OTC	Clioquinol	1301014-02	2
Euro OTC	Clioquinol	2507212562	1
Euro OTC	Clioquinol	1301014-0Z	1
Euro OTC	Clioquinol	1301014-01	3
Euro OTC	Clioquinol	1201034-01	7
Euro OTC	Clioquinol	1102022-01	2
Euro OTC	Clioquinol	1309009-01	2
Euro OTC	Clioquinol	121034-02	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1105044-04	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	12110-01	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	2111I-02835	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1108044-01	6
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1211021-01	15
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1108044-02	11
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1108044-04	12
Euro OTC	Clobetasolpropionat	CL0-BL2322/1012	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	121K021-01	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	121102101	2
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1108044-03	12
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1211021-04	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	2405212835	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1108044	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	121102-01	1
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1211021-02	11
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1211021-03	7
Euro OTC	Clobetasolpropionat	1204037-01	1
Euro OTC	Clotrimazol	700135	1
Euro OTC	Clotrimazol	1108053-01	4
Euro OTC	Clotrimazol	1105014-01	1
Euro OTC	Clotrimazol	121003901	1
Euro OTC	Clotrimazol	1108053-02	4
Euro OTC	Clotrimazol	1203040-02	9
Euro OTC	Clotrimazol	110501402	1
Euro OTC	Clotrimazol	1306036-01	19
Euro OTC	Clotrimazol	1210039-01	26
Euro OTC	Clotrimazol	1314Q1276	1
Euro OTC	Clotrimazol	1209211276	1
Euro OTC	Clotrimazol	2313M01276	1
Euro OTC	Clotrimazol	1309034-02	1
Euro OTC	Clotrimazol	1203040-01	3
Euro OTC	Clotrimazol	1203040	1
Euro OTC	Clotrimazol	110805301	1
Euro OTC	Coffein	188921AX20	1
Euro OTC	Coffein	1211012-02	1
Euro OTC	Coffein	1109017-01	1
Euro OTC	Colecalciferol-Trockenkonzent.	1012025-01	1
Euro OTC	Colecalciferol-Trockenkonzent.	1210051-01	1
Euro OTC	Cysteinhydrochlorid-Monohydrat	1206015-01	1
Euro OTC	Cystin	1204090	1
Euro OTC	Cystin	1207013-01	2
Euro OTC	Dequaliniumchlorid	1210008-01	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Dequaliniumchlorid	1010022-01	1
Euro OTC	Dequaliniumchlorid	1210008-03	1
Euro OTC	Dequaliniumchlorid	1103045-01	1
Euro OTC	Dequaliniumchlorid	1110002-01	2
Euro OTC	Dequaliniumchlorid	1405012-01	1
Euro OTC	Dequaliniumchlorid	1210008-02	1
Euro OTC	Dexamethason	1203032-01	3
Euro OTC	Dexamethason	1303007-01	1
Euro OTC	Dexamethason	1209008-01	4
Euro OTC	Dexamethason	1111055-01	5
Euro OTC	Dexamethason	DZ11005K	1
Euro OTC	Dexamethason	1111055-02	2
Euro OTC	Dexamethason	12030320	1
Euro OTC	Dexamethason	111105501	1
Euro OTC	Dexamethason	5213A1327	1
Euro OTC	Dexamethason	2803211327	1
Euro OTC	Dexamethason	1512211327	1
Euro OTC	Dexamethason	110700601	1
Euro OTC	Dexamethason	1209008-02	8
Euro OTC	Diclofenac-Natrium	1111040-01	1
Euro OTC	Diclofenac-Natrium	1206026	1
Euro OTC	Diclofenac-Natrium	1206026-02	4
Euro OTC	Diclofenac-Natrium	1206026-01	3
Euro OTC	Dithranol	1008011-02	2
Euro OTC	Dithranol	56/11072013	1
Euro OTC	Dithranol	1008011-01	1
Euro OTC	Dithranol	20280812-1	1
Euro OTC	Emulgierender Cetylstearylal. . .	1305035-01	2
Euro OTC	Emulgierender Cetylstearylal. . .	1003050-01	1
Euro OTC	Erythromycin	1013u-01362	1
Euro OTC	Erythromycin	1205035-02	10
Euro OTC	Erythromycin	3613A1362	1
Euro OTC	Erythromycin	130801601	1
Euro OTC	Erythromycin	EBS/1205-M-041	1
Euro OTC	Erythromycin	120503602	1
Euro OTC	Erythromycin	12A02-N06	1
Euro OTC	Erythromycin	1205036-01	5
Euro OTC	Estradiolbenzoat	121019-01	1
Euro OTC	Estradiolbenzoat	1301006-02	1
Euro OTC	Estradiolbenzoat	1201019-01	5
Euro OTC	Estradiolbenzoat	1201019-02	10
Euro OTC	Estriol	1310002-01	1
Euro OTC	Ethacridinlactat-Monohydrat	2905007V-03	1
Euro OTC	Ethacridinlactat-Monohydrat	1206016-02	1
Euro OTC	Folsäure	1401005-01	1
Euro OTC	Folsäure	1307041-01	1
Euro OTC	Fructose	1307022-01	2
Euro OTC	Fructose	1205022-01	1
Euro OTC	Fructose	1401004-01	1
Euro OTC	Fructose	1212015-01	5
Euro OTC	Fructose	1209010-01	2
Euro OTC	Fructose	121201-01pzn	1
Euro OTC	Fructose	1201017-01	1
Euro OTC	Gelatine, weiß	1106021-01	2
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	2023012-1	1
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1204044-02	7
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1305030-01	3
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	130503001	1
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1210034-02	6
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1305030-02	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1401019-01	2
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1210034-01	13
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1601312209	1
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1406212209	1
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1114U2209	1
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	2013U-02209	1
Euro OTC	Glucose-Monohydrat	1305030-02	2
Euro OTC	Harnstoff	121200701	1
Euro OTC	Harnstoff	72/14	1
Euro OTC	Harnstoff	1212007-01	3
Euro OTC	Heparin-Natrium (mind. 180I...	1202002-01	1
Euro OTC	Histamindihydrochlorid	111004-02	1
Euro OTC	Histamindihydrochlorid	1111004-01	3
Euro OTC	Histamindihydrochlorid	1111004-02	2
Euro OTC	Hydrocortison	pzn4914731	1
Euro OTC	Hydrocortison	1112030-01	9
Euro OTC	Hydrocortison	120403701	2
Euro OTC	Hydrocortison	1107005-01	2
Euro OTC	Hydrocortison	1107005-02	4
Euro OTC	Hydrocortison	1206018-01	4
Euro OTC	Hydrocortison	1204037-01	14
Euro OTC	Hydrocortisonacetat	1112031-01	11
Euro OTC	Hydrocortisonacetat	1107004-02	1
Euro OTC	Hydrocortisonacetat	1205034-01	22
Euro OTC	Hydrocortisonacetat	120503401	1
Euro OTC	Hydrocortisonacetat	HCAZ11004K	2
Euro OTC	Hydrocortisonacetat	911I-01718	1
Euro OTC	Hydrocortisonacetat	12090003-01	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1309020-03	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1309020-01	6
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	111024-02	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1110024-02	5
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1110024-01	4
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	nachprüfung	2
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	13040008-02	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1110024-04	13
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1406212528	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1110024-04-336431909	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	110505401	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (300 m...	1304008-01	14
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	1304008-02	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	314Q3301	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	1110024-01	1
Euro OTC	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	2402212528	1
Euro OTC	Ibuprofen	1211011-01	1
Euro OTC	Indisches Weihrauch-Trockene...	1112016-01	1
Euro OTC	Indometacin	1205002-01	1
Euro OTC	Inositol	1304009-01	1
Euro OTC	Isosorbiddinitrat 40%	PN: 1370-240409	1
Euro OTC	Kaliumcitrat	1306032-01	1
Euro OTC	Kaliumcitrat	1209005-01	1
Euro OTC	Kaliumcitrat	1211006-01	2
Euro OTC	Kaliumcitrat	1311036-01	7
Euro OTC	Kaliumcitrat	1204016-01	6
Euro OTC	Kaliumhydrogencarbonat	70913Kahyca	1
Euro OTC	Kaliumhydrogencarbonat	4413I1728	1
Euro OTC	Kaliumhydrogencarbonat	2712008-01	1
Euro OTC	Kaliumhydrogencarbonat	1208010-01	2
Euro OTC	Kaliumhydroxid	12057905	2
Euro OTC	Kaliumsorbat	111103802	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Kaliumsorbit	1111038-01	1
Euro OTC	Kaliumsorbit	1111038-02	1
Euro OTC	Kampfer	1202021-01	6
Euro OTC	Kampfer	1101029-02	1
Euro OTC	Kampfer	1210030-01	1
Euro OTC	Kampfer	1210030-02	3
Euro OTC	Kampfer	1202021	1
Euro OTC	Kampfer	1303013-01	4
Euro OTC	Kampfer	1210030-01	7
Euro OTC	Kampfer	1303013-02	10
Euro OTC	Kampfer	113Q-01221	1
Euro OTC	Kampfer	1101029-02/Ch241011	1
Euro OTC	Kampfer	1106007-02	1
Euro OTC	Lactose-Monohydrat	110602202	1
Euro OTC	Lactose-Monohydrat	1301028-02	3
Euro OTC	Lactose-Monohydrat	1112020-01	3
Euro OTC	Lactose-Monohydrat	1301028-01	5
Euro OTC	Lactose-Monohydrat	1112020-02	7
Euro OTC	Lactose-Monohydrat	L1237A4172	1
Euro OTC	Lactose-Monohydrat	1401003-01	2
Euro OTC	Levocarnitin	1303027	1
Euro OTC	Lidocain	12163801	5
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1403025-01	3
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	120203501	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1103034-01	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1202035-1	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	2213U01775	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	20131010-4	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	2810029-01	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1202035/02	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1202035-01	21
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1202035-02	17
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	120203502	4
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1202035	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	LIb-20-11-001	1
Euro OTC	Lidocainhydrochlorid	1202034-01	2
Euro OTC	L-Leucin	1312032-01	1
Euro OTC	L-Prolin	L1210046-03	1
Euro OTC	Macrogol 1500	1103017-02	1
Euro OTC	Macrogol 1500	1304023-01	2
Euro OTC	Macrogol 4000	1202040-02	2
Euro OTC	Macrogol 4000	1010023-02	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1010003-01	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1306034-02	2
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	130603402	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1211033-01	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1202034-01	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1311003-01	2
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	2114M1829	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1211033-02	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1306034-01	1
Euro OTC	Magnesium(hydrogen)citrat	1208006-01	2
Euro OTC	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1108024-01	1
Euro OTC	Magnesiumorotat-Dihydrat	1305011-01	1
Euro OTC	Magnesiumorotat-Dihydrat	1209029-01	2
Euro OTC	Magnesiumorotat-Dihydrat	1305011-02	1
Euro OTC	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1206019-01	1
Euro OTC	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	130300801	2
Euro OTC	Mannit	130504301	1
Euro OTC	Mannit	1205016-02	8

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Mannit	121103401	1
Euro OTC	Mannit	1205016-01	11
Euro OTC	Mannit	1205016	1
Euro OTC	Mannit	17/14	1
Euro OTC	Mannit	1310004-01	2
Euro OTC	Mannit	1305043-01	6
Euro OTC	Mannit	1110009-01	5
Euro OTC	Mannit	1211034-01	9
Euro OTC	Mannit	1305043-02	5
Euro OTC	Mannit	1310004-02	1
Euro OTC	Mannit	1404034-02	1
Euro OTC	Mannit	E671Z	1
Euro OTC	Mannit	1110009-02	3
Euro OTC	Melatonin	1204003-02	9
Euro OTC	Melatonin	1305029-01	4
Euro OTC	Menthol	120403602	2
Euro OTC	Menthol	1204036-01	10
Euro OTC	Menthol	1204036-02	1
Euro OTC	Menthol	1204036-1	1
Euro OTC	Menthol	1310J-01855	1
Euro OTC	Menthol	1210017-01	4
Euro OTC	Menthol	721123	1
Euro OTC	Menthol	696773	1
Euro OTC	Menthol	1210017-02	5
Euro OTC	Menthol	120403601	1
Euro OTC	Menthol	1111020-02	1
Euro OTC	Menthol	12020411	6
Euro OTC	Menthol	1305010-02	1
Euro OTC	Menthol	290601901	1
Euro OTC	Menthol	1305010-01	5
Euro OTC	Methoxsalen	1203009-01	1
Euro OTC	Methoxsalen	120901501	1
Euro OTC	Methyl-4-hydroxybenzoat	120502501	1
Euro OTC	Metronidazol	F120017	1
Euro OTC	Metronidazol	1212001-01	6
Euro OTC	Metronidazol	20111025	1
Euro OTC	Metronidazol	1112028-01	5
Euro OTC	Metronidazol	1212030-01	4
Euro OTC	Metronidazol	1101017-3	1
Euro OTC	Metronidazol	1101017-03	1
Euro OTC	Metronidazol	1212001-02	6
Euro OTC	Metronidazol	1109016-01	2
Euro OTC	Metronidazol	1109030-03	3
Euro OTC	Metronidazol	12F15-N04	1
Euro OTC	Metronidazol	1307002-01	1
Euro OTC	Metronidazol	1109030-01	5
Euro OTC	Metronidazol	121001-02	1
Euro OTC	Metronidazol	1307042-01	1
Euro OTC	Metronidazol	1212030-02	3
Euro OTC	Minoxidil	1304029-02	7
Euro OTC	Minoxidil	120303502	1
Euro OTC	Minoxidil	1108039-01	1
Euro OTC	Minoxidil	1304029-01	12
Euro OTC	Minoxidil	130402901	1
Euro OTC	Minoxidil	1112024-03	5
Euro OTC	Minoxidil	10/13	1
Euro OTC	Minoxidil	1112024-02	6
Euro OTC	Minoxidil	13001	1
Euro OTC	Minoxidil	1203035-01	15
Euro OTC	Minoxidil	12100560	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Minoxidil	1203035-0	1
Euro OTC	Minoxidil	1112024-01	2
Euro OTC	Minoxidil	104029-02	1
Euro OTC	Minoxidil	1102010-02	1
Euro OTC	Minoxidil	2002312844	1
Euro OTC	Minoxidil	12100056-01	1
Euro OTC	Naphazolinhydrochlorid	1206037-02	1
Euro OTC	Naphazolinhydrochlorid	113031-01	1
Euro OTC	Natriumascorbat	1210026-01	1
Euro OTC	Natriumdihydrogenphosphat-Di...	1209004-01	2
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1208008-01	6
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1304017-02	1
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1304017-01	1
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1203030-01	1
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1104013-01	1
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1109029-01	3
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	120303001	1
Euro OTC	Natriumhydrogencarbonat, gep...	1012011-01	2
Euro OTC	Natriumsulfat-Decahydrat	121000502	2
Euro OTC	Natriumsulfat-Decahydrat	1108035-01	1
Euro OTC	Natriumtetraborat	1302034-01	1
Euro OTC	Neomycinsulfat	1102043	2
Euro OTC	Neomycinsulfat	1303033-01	5
Euro OTC	Neomycinsulfat	1303033-02	2
Euro OTC	Neomycinsulfat	1102043-02	10
Euro OTC	Nichtionische emulgierende A...	278281	2
Euro OTC	Nicotinamid	1108021-01	1
Euro OTC	Nystatin	1107046-01	6
Euro OTC	Nystatin	C129440	1
Euro OTC	Nystatin	111105701	1
Euro OTC	Nystatin	1111057-01	5
Euro OTC	Nystatin	1307053-01	3
Euro OTC	Nystatin	1207009-02	2
Euro OTC	Nystatin	4014991	1
Euro OTC	Nystatin	1212024-02	6
Euro OTC	Nystatin	121024-01	1
Euro OTC	Nystatin	121202401	1
Euro OTC	Nystatin	110704601	1
Euro OTC	Nystatin	C129531	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	513E-02865	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	700116	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	120502801	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	1111061-61	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	12050-28	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	1011045-01	3
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	120502802	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	1306022-01	5
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	1306022-02	1
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	1205028-02	8
Euro OTC	Oxytetracyclinhydrochlorid	1111061-01	6
Euro OTC	Pilocarpinhydrochlorid	1305044-01	1
Euro OTC	Pilocarpinhydrochlorid	2909041V-02	1
Euro OTC	Pilocarpinhydrochlorid	1202031-01	1
Euro OTC	Povidon-Iod	110013-02	1
Euro OTC	Povidon-Iod	1005049-02	1
Euro OTC	Povidon-Iod	111001302	1
Euro OTC	Prasteron	XPC0263	1
Euro OTC	Prasteron	1306021-01	1
Euro OTC	Prasteron	1203010-01	1
Euro OTC	Prednisolon, mikronisiert	121021-01	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Prednisolonacetat	1209028-02	10
Euro OTC	Prednisolonacetat	1306040-1	1
Euro OTC	Prednisolonacetat	PAC-BLT003/0812	1
Euro OTC	Prednisolonacetat	200540	1
Euro OTC	Prednisolonacetat	514U2106	1
Euro OTC	Prednisolonacetat	1306040-01	6
Euro OTC	Prednisolonacetat	711212106	1
Euro OTC	Prednisolonacetat	1108043-01	3
Euro OTC	Prednisolonacetat	2413Q02106	1
Euro OTC	Prednisolonacetat	1108043-02	11
Euro OTC	Prednisolonacetat	1306040-02	3
Euro OTC	Prednisolonacetat	2902212106	1
Euro OTC	Prednisolonacetat	2507212106	1
Euro OTC	Pregnenolon	1312007-01	1
Euro OTC	Procainhydrochlorid	1104012-03	3
Euro OTC	Procainhydrochlorid	1104012-05	1
Euro OTC	Procainhydrochlorid	1003001-01	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	1211004-01	5
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	11110523-01	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	1304040-01	2
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	130404001	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	1111053-01	11
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	1206024-01	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	12111004-01	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	C01-130301(M)	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	co1-111218(M)	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	1308015-01	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	1401002-01	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	c01-111218	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	c01-130301	1
Euro OTC	Progesteron, mikronisiert	1308015-01	1
Euro OTC	Pyridoxinhydrochlorid	1110001-01	1
Euro OTC	Pyridoxinhydrochlorid	1206022-02	1
Euro OTC	Resorcin	11/13-N02	2
Euro OTC	Resorcin	12g24-n04	1
Euro OTC	Riboflavin	L1210048-01	1
Euro OTC	Riboflavin	L1305039-01	1
Euro OTC	Saccharose	12241808	4
Euro OTC	Salicylsäure	1206007-01	10
Euro OTC	Salicylsäure	1303020-01	8
Euro OTC	Salicylsäure	115465478596	1
Euro OTC	Salicylsäure	1106014-01	3
Euro OTC	Salicylsäure	1110020-01	2
Euro OTC	Schweres Magnesiumoxid	1205012-01	1
Euro OTC	Schweres Magnesiumoxid	1012033-01	1
Euro OTC	Schweres, basisches Magnesium...	1211005-01	4
Euro OTC	Schweres, basisches Magnesium...	1205013-02	1
Euro OTC	Sildenafil Citrat	1311010-01	1
Euro OTC	Sorbitol	1301019-01	2
Euro OTC	Spironolacton	1101013-01	2
Euro OTC	Spironolacton	3513E-03249	1
Euro OTC	Sulfacetamid	1112032-02	1
Euro OTC	Sulfacetamid	1112032-01	1
Euro OTC	Talkum	1305022-01	4
Euro OTC	Talkum	1210052-01	2
Euro OTC	Testosteron	1404002-01	1
Euro OTC	Testosteron	1207005-02	1
Euro OTC	Testosteron	1307001-01	3
Euro OTC	Testosteron	1106011-01	2
Euro OTC	Testosteronpropionat	1103010-01	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Testosteronpropionat	970116/1	1
Euro OTC	Testosteronpropionat	1109024-01	1
Euro OTC	Tetracain Base	1312034-01	1
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	1110010-02	5
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	20160812-2	1
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	111001002	1
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	1207001-01	19
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	1405026-01	2
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	1310006-01	9
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	1207001-02	9
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	11110010-02	1
Euro OTC	Tetracainhydrochlorid	1303012-01	11
Euro OTC	Tetracyclinhydrochlorid	1110029-01	4
Euro OTC	Tetracyclinhydrochlorid	1302012-02	4
Euro OTC	Tetracyclinhydrochlorid	100518-62	1
Euro OTC	Tetracyclinhydrochlorid	12040390	1
Euro OTC	Tetracyclinhydrochlorid	1302012-01	3
Euro OTC	Tetracyclinhydrochlorid	1204039-02	10
Euro OTC	Tetracyclinhydrochlorid	120403902	1
Euro OTC	Thiaminchloridhydrochlorid	1211008-01	1
Euro OTC	Thymol	1202028-01	1
Euro OTC	Thymol	20151012-1	1
Euro OTC	Tragant, gepulvert	12285401	1
Euro OTC	Tretinoin, mikronisiert	1008021-02	2
Euro OTC	Tretinoin, mikronisiert	1304028-01	3
Euro OTC	Tretinoin, mikronisiert	10429AX21	1
Euro OTC	Tretinoin, mikronisiert	13041028-01	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1303001-01	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1110004-01	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1307043-01	5
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1307043-01	2
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1303001-01	2
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1206008-01	4
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	13030001-01	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1211013-02	13
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1209040-01	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1303001-02	6
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	111005-01	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1110005-01	4
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1307043-02	4
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1013I-02516	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1211013-01	11
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	12G6008-01	1
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	1209040-02	5
Euro OTC	Triamcinolonacetonid	20130912-5	1
Euro OTC	Tricalciumphosphat	1304025-01	1
Euro OTC	Triclosan	1211025-01	6
Euro OTC	Triclosan	120203-02	1
Euro OTC	Triclosan	1202018-02	2
Euro OTC	Triclosan	1401038-01	2
Euro OTC	Triclosan	1303011-01	4
Euro OTC	Triclosan	1206034-01	3
Euro OTC	Triclosan	1206034-02	2
Euro OTC	Triclosan	1006024-01	1
Euro OTC	Triclosan	1307050-01	3
Euro OTC	Trometamol	1203005-02	1
Euro OTC	Tryptophan	1307004-01	1
Euro OTC	Tryptophan	1307004-01	1
Euro OTC	Tyrosin	L1210050-01	1
Euro OTC	Tyrosin	L1401037	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Euro OTC	Valin	L1309029-02	1
Euro OTC	Wachs	1201012-01	1
Euro OTC	Weinsäure	12044101	3
Euro OTC	Zinkgluconat	1312010-01	1
Euro OTC	Zinksulfat-Heptahydrat, kris...	1309011_0	1
Euro OTC	Zinksulfat-Heptahydrat, kris...	1201031-02	1
Euro OTC	Zinksulfat-Heptahydrat, kris...	1201031-01	1
Euro OTC	Zinksulfat-Heptahydrat, kris...	1105002-01	1
EUro/AHD	Calciumchlorid-Dihydrat	1205014-02	2
EUro/AHD	Coffein	121012-01	1
Euro/Sanacorp	Carbomer 35000 / 50000	1305007-01	1
euroct/gehe	Erythromycin	1308016-02	2
euroct/gehe	Prednisolon, mikronisiert	1212021-01	1
euroct/gehe	Triamcinolonacetonid	1403009-02	1
euroct/gehe	Triamcinolonacetonid	1403009	1
euroct/gehe	Tryptophan	1212010-01	5
euroho/gehe	Clobetasolpropionat	110804404	1
euroho/gehe	Estradiolbenzoat	1007037-02	1
euroho/gehe	Natriumhydrogencarbonat, gep...	123030-02	1
Europharm	Menthol	130501-01	1
Europharm/Otto	Diclofenac-Natrium	135796	1
Europharm/Otto	Lactose-Monohydrat	1106022-01	1
Europharm/Otto	Triamcinolonacetonid	B0544/111040	2
europharma	Dexamethasonacetat	1110007-01	2
Fa	Clobetasolpropionat	11/29-N07	2
Fagron	3,4-Diaminopyridin	13F07-N07	1
Fagron	3,4-Diaminopyridin	11/14-N03	1
Fagron	3,4-Diaminopyridin	11K07-N02	1
Fagron	5-Aminolevulinsäurehydrochlo...	13H13-N07	1
Fagron	5-Aminolevulinsäurehydrochlo...	13C19-N05	3
Fagron	5-Aminolevulinsäurehydrochlo...	11I30-N01	1
Fagron	5-Aminolevulinsäurehydrochlo...	7447	1
Fagron	5-Aminolevulinsäurehydrochlo...	13J29-N03	1
Fagron	8-Chinolinolsulfat Monohydra...	11L19-N14	1
Fagron	8-Chinolinolsulfat Monohydra...	11L08-N07	1
Fagron	8-Chinolinolsulfat Monohydra...	13A04-N05	1
Fagron	8-Chinolinolsulfat Monohydra...	10F01-N15	1
Fagron	Acetylcystein	13A22N07	1
Fagron	Alfatradiol	13G19-N06	1
Fagron	Alfatradiol	XP101UT	1
Fagron	Alfatradiol	12L19-N08	4
Fagron	Alfatradiol	11G22-N11	1
Fagron	Alfatradiol	11B07-N05	1
Fagron	Alfatradiol	12L19-No8	1
Fagron	Alfatradiol	12H29-N05	1
Fagron	Alfatradiol	11K25-N01	3
Fagron	Alfatradiol	13G19-N06	3
Fagron	Allantoin	12B09-N09	1
Fagron	Allantoin	12C30-N04	1
Fagron	Allantoin	13G16-N07	1
Fagron	Allantoin	13I03-B05-289430	1
Fagron	Allantoin	K93403115	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	2405211095	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	13D22.-N09	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12i27-N01	2
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	zu erfassen	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	2913U1095	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	105282-0002	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	8547287	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	13D22N09	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	C181A	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11123-N06	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11 23-N06	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12/27/N01	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12/27-N01	4
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	5213A1095	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	13G03-N02	14
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	13d22no9	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12I27-N01	7
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12c07n01	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	13D22-N09	18
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	105282-0001	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1910211095	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12g05-n10	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12I-27-N01	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1207211095	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12G05-N10	23
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	1901211095	1
Fagron	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	2013U-01095	1
Fagron	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	13D29-N04	1
Fagron	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	A1-063-AL	1
Fagron	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	13D08-N01	2
Fagron	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	12I24-M03	1
Fagron	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	12/24-M02	1
Fagron	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	A1-063-A1	1
Fagron	Ambroxolhydrochlorid	12K12-N02	1
Fagron	Arginin	12C21-N04	2
Fagron	Arginin	13F14-N02	2
Fagron	Argininhydrochlorid	13j28-b03-287768	1
Fagron	Argininhydrochlorid	12G25-N13	1
Fagron	Argininhydrochlorid	13J28-B03	1
Fagron	Argininhydrochlorid	13J28-B032x	1
Fagron	Argininhydrochlorid	13j28-B03-287768	1
Fagron	Ascorbinsäure	12/25-N04	1
Fagron	Bacitracin	700193-0001	1
Fagron	Bacitracin	12G12-N17	1
Fagron	Bacitracin	11E23-N10	1
Fagron	Beclometasondipropionat, was...	12G04-N11	2
Fagron	Benzocain	BZ-08/11-12	1
Fagron	Benzocain	BZ-27/1112	1
Fagron	Benzocain	12H10-N06	3
Fagron	Benzocain	12E04-N06	5
Fagron	Benzocain	11K08-B40	1
Fagron	Benzydaminhydrochlorid	12K07-N16	1
Fagron	Benzydaminhydrochlorid	12C20-N02	1
Fagron	Benzydaminhydrochlorid	13H19_N06	1
Fagron	Benzydaminhydrochlorid	12j10-n03	1
Fagron	Betainhydrochlorid	12C20-N09	1
Fagron	Betamethason, mikronisiert	9J26-N08	1
Fagron	Betamethason, mikronisiert	11/14-N02	2
Fagron	Betamethason, mikronisiert	9K25-N13	1
Fagron	Betamethason, mikronisiert	12D26N08	1
Fagron	Betamethason-17-valerat 1:10...	12G02-N02	4
Fagron	Betamethason-17-valerat 1:10...	12A05-N08	1
Fagron	Betamethason-17-valerat 1:10...	12J19-N06	1
Fagron	Betamethason-17-valerat 1:10...	12C19-N07	2
Fagron	Betamethason-17-valerat 1:10...	12G02-N15	2
Fagron	Betamethason-17-valerat 1:10...	12L19-N06	1
Fagron	Betamethasonvalerat	NS2072M	2
Fagron	Betamethasonvalerat	13K29-B32-28824	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Betamethasonvalerat	NS0706M	1
Fagron	Betamethasonvalerat	13K29-B32-288250	1
Fagron	Betamethasonvalerat	11E18-N03	1
Fagron	Betamethasonvalerat	NR1545M	1
Fagron	Betamethasonvalerat	612211181	1
Fagron	Betamethasonvalerat	2B28-N01	1
Fagron	Betamethasonvalerat	12L11-N01	6
Fagron	Betamethasonvalerat	20101012-1	1
Fagron	Betamethasonvalerat	13K29-B32-288247	1
Fagron	Betamethasonvalerat	13d03-n07	3
Fagron	Betamethasonvalerat	13G19-N01	20
Fagron	Betamethasonvalerat	11k18-n09	1
Fagron	Betamethasonvalerat	NP1351M	1
Fagron	Bifonazol	12E29-N03	1
Fagron	Biotin	20110634	1
Fagron	Biotin	13K29-N02	3
Fagron	Biotin	14d04-b07-292963	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	2012000059	4
Fagron	Bismutgallat, basisches	10H31-N01	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	11F15-N03	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	13E21-N03	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	12E16-N03	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	2010002685	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	12C13-N03	4
Fagron	Bismutgallat, basisches	411092-3-P	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	2012006724	1
Fagron	Bismutgallat, basisches	12K26-N01	2
Fagron	Budesonid, mikronisiert	13H22-N03	1
Fagron	Budesonid, mikronisiert	12J29-N05	1
Fagron	Budesonid, mikronisiert	13A07-N09	1
Fagron	Budesonid, mikronisiert	12G23-N01	2
Fagron	Butylhydroxytoluol	11308701	1
Fagron	Calciumcitrat-Tetrahydrat	413031/2	1
Fagron	Calciumcitrat-Tetrahydrat	13d16-n06	1
Fagron	Calciumcitrat-Tetrahydrat	13D16-N06	1
Fagron	Calciumgluconat	12/13-N04	1
Fagron	Calciumgluconat	12D17-N01	1
Fagron	Calciumglycerophosphat	12I18-N06	3
Fagron	Calciumglycerophosphat	13A18-N02	1
Fagron	Calciumglycerophosphat	1216000005	1
Fagron	Calciumglycerophosphat	12/18-N06	2
Fagron	Calciumhydroxid	12J18-N01	1
Fagron	Calciumhydroxid	12G04-N22	1
Fagron	Calciumpantothenat	1111110405	1
Fagron	Captopril	12K16-N04	1
Fagron	Captopril	12K-16N04	1
Fagron	Captopril	12G25-N08	11
Fagron	Captopril	14B26-B01-291557	1
Fagron	Captopril	12J09-N09	1
Fagron	Cellulose, mikrokristallin	13A03-N01	1
Fagron	Cetylpalmitat 15	12C27-N07	2
Fagron	Cetylpalmitat 15	12D19-N02	1
Fagron	Cetylpalmitat 15	12D19-N02	1
Fagron	Cetylstearylalkohol	12L19-N03	1
Fagron	Cetylstearylalkohol	9652865	1
Fagron	Cetylstearylalkohol	12J17-N05	1
Fagron	Cetylstearylalkohol	12G02-N04	3
Fagron	Cetylstearylalkohol	10F17-N02	1
Fagron	Cetylstearylalkohol	12E30-N13	1
Fagron	Cetylstearylalkohol	12K22-N03	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Cetylstearylalkohol	13C13-N13	1
Fagron	Cetylstearylalkohol	7886542	1
Fagron	Chininhydrochlorid	10N129B	1
Fagron	Chinolingelb E104	100427	1
Fagron	Chinolingelb E104	12B08-N08	1
Fagron	Chinolingelb E104	12E24-N05	1
Fagron	Chinolingelb E104	11K08-N01	1
Fagron	Chinolingelb E104	9878	1
Fagron	Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat	10F01-N15	1
Fagron	Chloralhydrat	11J05-N01	1
Fagron	Chloralhydrat	12C26-M05	1
Fagron	Chloralhydrat	12H06_N08	1
Fagron	Chloralhydrat	11D13-N07	1
Fagron	Chloramphenicol	1G02N01	1
Fagron	Chloramphenicol	12B13-N06	6
Fagron	Chloramphenicol	1202500003	1
Fagron	Chloramphenicol	13A11N02	1
Fagron	Chloramphenicol	13A31-B02	3
Fagron	Chloramphenicol	12G02-N01	12
Fagron	Chloramphenicol	11/14-N03	2
Fagron	Chloramphenicol	12A11-N02	1
Fagron	Chloramphenicol	12L11-N06	8
Fagron	Chlorhexidindiacetat	11L28N02	1
Fagron	Chlorhexidindiacetat	1-8991-1-01-01	1
Fagron	Chlorhexidindiacetat	12E14-N11	1
Fagron	Chlorhexidindiacetat	13E03-B06-287926	1
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	12h28-n09	1
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	12K30-N07	5
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	13/11-N07	3
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	13K26-N06	1
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	12k30-N07	1
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	12H28-N09	5
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	FC13030134	1
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	12C16-N01	3
Fagron	Chlortetracyclinhydrochlorid	12H28N09	1
Fagron	Cholesterol	13G10-N11	1
Fagron	Cholesterol	12I13-N02	1
Fagron	Cholesterol	10B15-N07	1
Fagron	Cholesterol	2013U-01270	1
Fagron	Cholesterol	13F10-B40-289016	1
Fagron	Cinchocainhydrochlorid	12F25-N10	1
Fagron	Cinnarizin	13H01-N07	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13B04-N01	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	1714Q1024	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13F12-N08	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13A04-N040019/4900	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	214U-01024	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	1601311024	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	11B11-N16	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	12B01-N01	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	1913A-01024	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	11K11-N02	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13F12-N01	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13K18-B34	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13K18-B34-291521	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13D29N02	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	11C24-N02	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	4810E-01024	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13K18-B34-291520	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	12B01-No1	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	12B01-N01	17
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13A04-N04	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	1155609	9
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	1137408	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13A04-No4	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	10G21-N05	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13A-04-N04	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13K18-B34-288372	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13804-N02	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13G04-N05	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	700309-0003	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	12A20-N03	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	11K07N01	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13K18-B34-291071	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13G24-N24	5
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	11C24-N03	4
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	12801-N01	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	10G21-N05	1
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	1151608	2
Fagron	Citronensäure, wasserfreie	13K18-B34-291519	1
Fagron	Citronensäure-Monohydrat	12D26-N02	1
Fagron	Citronensäure-Monohydrat	11K01-N05	1
Fagron	Clindamycinhydrochlorid	12F19-N07	2
Fagron	Clindamycinhydrochlorid	7BS64T1J0023	1
Fagron	Clindamycinhydrochlorid	12H30-N04	1
Fagron	Clindamycinhydrochlorid	13A22-N01	3
Fagron	Clindamycinhydrochlorid	13G24-N09	3
Fagron	Clindamycinhydrochlorid	12C19N06	1
Fagron	Clioquinol	13A29-N07	5
Fagron	Clioquinol	2014Q2562	1
Fagron	Clioquinol	13A29-N07-3398310111	1
Fagron	Clioquinol	11K21-N18	3
Fagron	Clioquinol	13/26-N15	1
Fagron	Clioquinol	12F20-N05	4
Fagron	Clioquinol	2514U2562	1
Fagron	Clioquinol	13D15-N01	6
Fagron	Clioquinol	10341601	2
Fagron	Clioquinol	12L04-N08	7
Fagron	Clioquinol	13I26-N15	1
Fagron	Clioquinol	13DS15-N01	1
Fagron	Clioquinol	13F12-N200463480	1
Fagron	Clioquinol	11K21N18	1
Fagron	Clobetasol-17-propionat 1:10...	12K08-N02	2
Fagron	Clobetasol-17-propionat 1:10...	12L19-N06	1
Fagron	Clobetasol-17-propionat 1:10...	12/19-No1	1
Fagron	Clobetasol-17-propionat 1:10...	12I19-N01	1
Fagron	Clobetasol-17-propionat 1:10...	12/19-N01003637	1
Fagron	Clobetasolpropionat	12E08-n04	1
Fagron	Clobetasolpropionat	11D26-N04	1
Fagron	Clobetasolpropionat	NS0486M	2
Fagron	Clobetasolpropionat	13A02-N04	1
Fagron	Clobetasolpropionat	NS0292-M	1
Fagron	Clobetasolpropionat	3713M-02835	1
Fagron	Clobetasolpropionat	13A02-N04	11
Fagron	Clobetasolpropionat	12e08-n04	1
Fagron	Clobetasolpropionat	12E08N04	2
Fagron	Clobetasolpropionat	11H10-N02	2
Fagron	Clobetasolpropionat	12J25-N01	4
Fagron	Clobetasolpropionat	13G23N01	1
Fagron	Clobetasolpropionat	12e08n04	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Clobetasolpropionat	13A-N04	1
Fagron	Clobetasolpropionat	11h10-n02	2
Fagron	Clobetasolpropionat	NT0421M	1
Fagron	Clobetasolpropionat	13G23-N01	11
Fagron	Clobetasolpropionat	11L12-N05	4
Fagron	Clobetasolpropionat	13G23-N01	1
Fagron	Clotrimazol	20151112-3	1
Fagron	Clotrimazol	12b27-n05	1
Fagron	Clotrimazol	12E02N12	1
Fagron	Clotrimazol	12A05-N10	4
Fagron	Clotrimazol	20110113	1
Fagron	Clotrimazol	12/21-N04	4
Fagron	Clotrimazol	14B05-B36-291165	1
Fagron	Clotrimazol	12I21-N01	6
Fagron	Clotrimazol	11L12-N10	4
Fagron	Clotrimazol	12B27-N05	2
Fagron	Clotrimazol	13C25-N10	7
Fagron	Clotrimazol	20120603	3
Fagron	Clotrimazol	12a05-n10	1
Fagron	Clotrimazol	11G15-N10	1
Fagron	Clotrimazol	12I21-N04	6
Fagron	Clotrimazol	12K15-N01	1
Fagron	Clotrimazol	11E17-N10	3
Fagron	Clotrimazol	12/21-N01	2
Fagron	Clotrimazol	12I21N04	1
Fagron	Clotrimazol	4812E-01276 (NP)	1
Fagron	Clotrimazol	14B05-B36	2
Fagron	Clotrimazol	12F02-N12	1
Fagron	Clotrimazol	11k21-n19	1
Fagron	Clotrimazol	20111018	6
Fagron	Clotrimazol	12 21-N01	1
Fagron	Clotrimazol	12121-N04	1
Fagron	Clotrimazol	C22H17CIN2	1
Fagron	Coffeincitrat	12J05-N06	3
Fagron	Coffeincitrat	13B08-N02	1
Fagron	Coffeincitrat	13D30-No2	1
Fagron	Coffeincitrat	12J05-N06	1
Fagron	Coffeincitrat	11/12-N13	1
Fagron	Coffeincitrat	10H02-N02	2
Fagron	Coffeincitrat	13D30-N02	3
Fagron	Coffeincitrat	2002311282	1
Fagron	Coffeincitrat	2813E1282	1
Fagron	Coffeincitrat	3513I-01282	1
Fagron	Coffeincitrat	4213U01282	1
Fagron	Coffeincitrat	5013U01282	1
Fagron	Coffeincitrat	204311282	1
Fagron	Cyanocobalamin	10K02-N05	3
Fagron	Cyanocobalamin	10K02-N05	1
Fagron	Cyproteronacetat	11L22-N02	1
Fagron	Cyproteronacetat	B0392/110020	2
Fagron	Cyproteronacetat	12D02-N13	1
Fagron	Cyproteronacetat	13/09-N03	1
Fagron	Cyproteronacetat	12F25-N09	2
Fagron	Cystin	12D26-B04-285823	2
Fagron	Dequaliniumchlorid	13D26-N06	1
Fagron	Dequaliniumchlorid	12G05-N07	2
Fagron	Dequaliniumchlorid	13A23-N02	2
Fagron	Dequaliniumchlorid	12D05-N09	1
Fagron	Dexamethason	12B06-N12	1
Fagron	Dexamethason	13G08-N13	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Dexamethason	DZ11005K12B06-N12	1
Fagron	Dexamethason	12D26-N09	1
Fagron	Dexamethason	11L08-N01	1
Fagron	Dexamethason	1203032-02	3
Fagron	Dexamethason	13D12-N09	1
Fagron	Dexamethason	12H21-N11	2
Fagron	Dexamethason 1:10 Verreibung...	12L19-N06	1
Fagron	Dexamethason 1:10 Verreibung...	12K06-N09	1
Fagron	Dexamethason 1:10 Verreibung...	12C20-N03	4
Fagron	Diclofenac-Natrium	12G02-N07	1
Fagron	Diclofenac-Natrium	13E03-N02	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13G16-N005	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	3713M-03562	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13F13-N05	6
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	12F19-N10	6
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	11J28-N05	2
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	11I012-N08	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	12/12-N02	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	10808-N01	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	612213562	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13J24B04286569	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	12K07-N02	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13a02-n05	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	12F19-N100102/574	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	11/01-N08	3
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13A02N05	2
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13J24-B04-286571	2
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13J24-B04	1
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	12d05-n07	2
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	13G16-N05	15
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	9J14-N17	2
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	11I01-N08	2
Fagron	Diltiazemhydrochlorid	10D28-N23	1
Fagron	Dithranol	13A30-N01	3
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	12G10-N03	4
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	11G20-N10	1
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	12K21-N01	2
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	13E29-N03	3
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	11K17-N04	3
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	12E04-N04	4
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	13A04-N02	6
Fagron	Doxylaminhydrogensuccinat	12E29-N03	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	12G02N04	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	8256792	2
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	13L17-B05-289806	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	9652865	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	13L17-B05-289805	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	12L19-N03	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	12602-N04	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	11L22-N09	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	20260712-2	1
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	12J29-N04	2
Fagron	Emulgierender Cetylstearylal...	13F07-N05	4
Fagron	Ephedrinhydrochlorid	12017220	1
Fagron	Epinephrinhydrogentartrat	12G11-No70076/130	1
Fagron	Erythromycin	13D30-N01	23
Fagron	Erythromycin	13A02-N060571/680	1
Fagron	Erythromycin	11D13-N09	1
Fagron	Erythromycin	11J06-N05	3
Fagron	Erythromycin	11/06-N05	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Erythromycin	13H22-N07	1
Fagron	Erythromycin	11J06-No5	1
Fagron	Erythromycin	13F12-N21	16
Fagron	Erythromycin	EBS/1201-008	2
Fagron	Erythromycin	12J30-N01	1
Fagron	Erythromycin	12e24-n04	2
Fagron	Erythromycin	510211362	1
Fagron	Erythromycin	13D30-N010278/730	1
Fagron	Erythromycin	EB048G12	1
Fagron	Erythromycin	14B06-B35-290873	1
Fagron	Erythromycin	14B06-B35-290875	1
Fagron	Erythromycin	14B06-B35	1
Fagron	Erythromycin	13D30-N010336/730	1
Fagron	Erythromycin	12J30N01	1
Fagron	Erythromycin	13d30-N01	1
Fagron	Erythromycin	13175503	3
Fagron	Erythromycin	14B06-B35-290872	1
Fagron	Erythromycin	13D30N01	1
Fagron	Estradiolbenzoat	12H02-N052	1
Fagron	Estradiolbenzoat	13C15-B07-288645	1
Fagron	Estradiolbenzoat	2x12L14-N02	1
Fagron	Estradiolbenzoat	13I11-N01	1
Fagron	Estradiolbenzoat	13C15-B07-288646	1
Fagron	Estradiolbenzoat	12h02-n02	1
Fagron	Estradiolbenzoat	81403700	2
Fagron	Estradiolbenzoat	12H02-N02	4
Fagron	Estradiolbenzoat	81403680	1
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	12L29-N07	1
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	9J27-N05	1
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	12F29-N03	6
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	12L19-N07	4
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	11H23-N02	1
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	12F29-N03	1
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	13K22-N01	4
Fagron	Estradiol-Hemihydrat	13E07-N02	1
Fagron	Estradiolvalerat	82201620	1
Fagron	Estradiolvalerat	11K04-N04	1
Fagron	Estradiolvalerat	13A07-N11	3
Fagron	Estradiolvalerat	12K05-N02	2
Fagron	Estradiolvalerat	12A20-N10	4
Fagron	Estradiolvalerat	13G09-N05	2
Fagron	Estradiolvalerat	12D18-N02	2
Fagron	Estradiolvalerat	11J13-No9	1
Fagron	Estradiolvalerat	11G18-N04	1
Fagron	Estradiolvalerat	13a07-n11	1
Fagron	Estradiolvalerat	12G05N09	1
Fagron	Estradiolvalerat	11k04-n04	1
Fagron	Estradiolvalerat	13g09-n05	1
Fagron	Estriol	13H28-N01	2
Fagron	Estriol	12H06-N02	5
Fagron	Estriol	13C15-N04	2
Fagron	Estriol	11J13-N07	2
Fagron	Estriol	12F08-N06	1
Fagron	Estriol	12A26-N02	2
Fagron	Estriol	13D19-N02	1
Fagron	Estriol	12K07-N15	2
Fagron	Ethacridinlactat-Monohydrat	12J24-N04	1
Fagron	Ethacridinlactat-Monohydrat	12G02-N13	7
Fagron	Ethacridinlactat-Monohydrat	201205001	1
Fagron	Ethacridinlactat-Monohydrat	11/07-N05	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Ethacridinlactat-Monohydrat	2405210013	1
Fagron	Ethinylestradiol	13I09-N04	1
Fagron	Ethinylestradiol	12D19-N04	1
Fagron	Fampridin	13C07-B02-289395	1
Fagron	Flohsamen	3610U-02243	1
Fagron	Folsäure	13g16-n02	1
Fagron	Folsäure	13G16-N02	2
Fagron	Fructose	13J18-B06-286899	1
Fagron	Fructose	12A26-N04	2
Fagron	Fructose	K43298821	3
Fagron	Fructose	13A28-N01	9
Fagron	Fructose	508Q-03394	1
Fagron	Fructose	13j18B06286896	1
Fagron	Fructose	12H01-N03	2
Fagron	Fructose	13E27-N07	1
Fagron	Fructose	12E29-N08	8
Fagron	Fructose	1312A-03394	1
Fagron	Fructose	13C25-N03	3
Fagron	Fructose	13J18-B06	1
Fagron	Fuchsin	13H23-M04	1
Fagron	Fuchsin	12A03-N06	1
Fagron	Fuchsin	12F28-N02	1
Fagron	Fuchsin	13A30-N05	1
Fagron	Fuchsin	12G18-N01	1
Fagron	Furosemid	12A18-N03	1
Fagron	Furosemid	12I13-No6	1
Fagron	Furosemid	11K21-N26	1
Fagron	Furosemid	13A22-N08	2
Fagron	Fusidinsäure	12G04-No1	1
Fagron	Fusidinsäure	13L13-B01-289513	1
Fagron	Glucose, wasserfrei	14142303	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	12G30-N01	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	3413E-02209	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	13A25-n01	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	14B04-B01-291137	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	4213Q-02209	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	14B28-B02-291353	2
Fagron	Glucose-Monohydrat	270313PML01	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	13B01-N03	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	13A_N01	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	13C25N09	2
Fagron	Glucose-Monohydrat	13A25-N01	15
Fagron	Glucose-Monohydrat	E368B	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	14B04-B01	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	13A25-N01	2
Fagron	Glucose-Monohydrat	E144C	2
Fagron	Glucose-Monohydrat	13H06-N08	10
Fagron	Glucose-Monohydrat	14B28-B02-291354	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	zu erfassen	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	13C25-N09	4
Fagron	Glucose-Monohydrat	13A25-No1	1
Fagron	Glucose-Monohydrat	8G31-N09	1
Fagron	Glycerolmonostearat 40-55%	12A27-N11	1
Fagron	Gramicidin	11F-24-N03	1
Fagron	Gramicidin	B3200202	1
Fagron	Gramicidin	12I07-N03	1
Fagron	Gramicidin	12K22-N12	1
Fagron	Griseofulvin	12F18-N04	1
Fagron	Griseofulvin	10F03-N12	1
Fagron	Harnstoff	11C25-N01	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Harnstoff	13J17-B02-287604	1
Fagron	Harnstoff	11H01-N08	2
Fagron	Harnstoff	13D03-N01	8
Fagron	Harnstoff	12I04-N06	1
Fagron	Harnstoff	13/17-B02-287602	2
Fagron	Harnstoff	1211822	1
Fagron	Harnstoff	235/12I04-N06	1
Fagron	Harnstoff	11F24-N16	1
Fagron	Harnstoff	3613M-02544	1
Fagron	Harnstoff	13J17-B02	1
Fagron	Harnstoff	11D-13-M04	1
Fagron	Harnstoff	12F25-N05	3
Fagron	Harnstoff	12C20-N05	2
Fagron	Harnstoff	13J17-B02-287602	2
Fagron	Harnstoff	13L20B03289708	1
Fagron	Harnstoff	13E21-N05	2
Fagron	Hartfett, pastilliert	12I04-N11	1
Fagron	Hartfett, pastilliert	12K01-N12	2
Fagron	Hartfett, pastilliert	12G04-N18	1
Fagron	Hartfett, pastilliert	13D10-N06	1
Fagron	Heparin-Natrium (mind. 180I...	12H30-N07	2
Fagron	Heparin-Natrium (mind. 180I...	13G03-N13	1
Fagron	Histamindihydrochlorid	12K06-N08	5
Fagron	Histamindihydrochlorid	12E29-N09	2
Fagron	Histamindihydrochlorid	11E25-N07	2
Fagron	Histamindihydrochlorid	12D02-N16	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	11Lo1-No2	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	11L01-No2	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	11G12-N12	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	2002311234	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	11L01-N02	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	12A03-B40-286110	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	12A03-B40	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	12L14-N11	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	12A03-B40-286111	1
Fagron	Hydrochlorothiazid	13C25-N08	2
Fagron	Hydrocortison	13H08-B01-28571	1
Fagron	Hydrocortison	12I25-N01	3
Fagron	Hydrocortison	12/25-N01	1
Fagron	Hydrocortison	11/19-N03	1
Fagron	Hydrocortison	11K18-N01	1
Fagron	Hydrocortison	13K22-B01	1
Fagron	Hydrocortison	13H08-B01-285472	4
Fagron	Hydrocortison	13H08B01285473	1
Fagron	Hydrocortison	11D07-N02	1
Fagron	Hydrocortison	11L09-N09	1
Fagron	Hydrocortison	12G19-N01	6
Fagron	Hydrocortison	13K22-B01-288284	1
Fagron	Hydrocortison	11k18n01	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	13155311	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	12A13-N02	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	13E31-No2	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	12008411	3
Fagron	Hydrocortisonacetat	13A03-N04	5
Fagron	Hydrocortisonacetat	13E31-N02	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	3613A-01718	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	11/01-N05	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	12K15-N04	6
Fagron	Hydrocortisonacetat	1112031	1
Fagron	Hydrocortisonacetat	13B25-N04	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	12C27-N01	1
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	12A09-N06	1
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	12345	1
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	13D26-N11	5
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	J0696	2
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	13A18-N01	4
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	13H22-N11	9
Fagron	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	11I02-N02	1
Fagron	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	12C02-N06	1
Fagron	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	11I02-N02	1
Fagron	Hydroxyethylcellulose (9000 ...	13d26-n16	1
Fagron	Hypromellose E4M Prem	12A30-N02	2
Fagron	Hypromellose E4M Prem	1J31012N11	2
Fagron	Hypromellose E4M Prem	ZH19012N12	4
Fagron	Hypromellose E4M Prem	13h09-m04	1
Fagron	Hypromellose E4M Prem	10G09-N03	1
Fagron	Hypromellose E4M Prem	13D03-N03	3
Fagron	Hypromellose E4M Prem	13H09-N04	1
Fagron	Hypromellose E4M Prem	1A01012N11	1
Fagron	Hypromellose E4M Prem	20110612-2	1
Fagron	Hypromellose E4M Prem	13H09-N04	1
Fagron	Hypromellose E4M Prem	12E02-N03	3
Fagron	Ibuprofen	1012039-02	1
Fagron	Indigocarmin I	11F09-N06	1
Fagron	Indigocarmin I	5093143	1
Fagron	Inositol	L13090200	1
Fagron	Iodoform	12L11-B41-290055	1
Fagron	Iodoform	12E30-N01	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	12F08N04	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	391311-03516	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	13I26-N18	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	13A07-N13	3
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	10D29-N10	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	10029-N10	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	11D12-N01	4
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	P11008	2
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	13d15-n02	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	2114M3516	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	13F27-N04	4
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	13D15-No2	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	13A07-0003	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	2405210009	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	9E05-N05	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	12C08-N05	5
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	1309210009	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	12F08-N04	8
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	3413U03516	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	X12010	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	11J17-N05	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	11/17-N05	1
Fagron	Isosorbiddinitrat 40%	2413Q03516	1
Fagron	Kaliumhydrogencarbonat	12141911	1
Fagron	Kaliumhydrogencarbonat	120801001	1
Fagron	Kaliumhydrogencarbonat	12K27-N06	1
Fagron	Kaliumhydrogencarbonat	10G22-N10	1
Fagron	Kaliumhydrogencarbonat	11/26-N14	1
Fagron	Kampfer	11H30-N15	2
Fagron	Kampfer	12B14-N09	1
Fagron	Kampfer	12G02-N09	2
Fagron	Kampfer	12D23-N03	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Kampfer	690442	1
Fagron	Kampfer	11K23-N04	1
Fagron	Ketoconazol	12I17-N02	1
Fagron	Ketoconazol	13J23-N04	1
Fagron	Ketoconazol	12I17-N02	1
Fagron	Kupfer(II)-sulfat-Pentahydra. . .	13A25-N06	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	1301C005-278129	2
Fagron	Lactose-Monohydrat	1303C001	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	1303C003	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	13E23-B01	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	1301C007-278131	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	12C26-N05	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	11C29-N06	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	12G27-N02	5
Fagron	Lactose-Monohydrat	1301C006-278128	5
Fagron	Lactose-Monohydrat	1301C006	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	11H04-N04	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	1303C001-280388	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	13088R	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	13I23-B03-287414	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	13096R	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	12/23-B02-287554	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	1303C002-280398	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	13E23-B01-283334	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	13/23-B02-287554	1
Fagron	Lactose-Monohydrat	1303C003-280390	1
Fagron	L-Glutathione	11E02-N08	1
Fagron	Lidocain	11C09-N07	1
Fagron	Lidocain	312/1	1
Fagron	Lidocain	6J23-No2	1
Fagron	Lidocain	12/21-N06	1
Fagron	Lidocain	12I12-N06	1
Fagron	Lidocain	13J30-b02-287639	1
Fagron	Lidocain	13B27-N04	2
Fagron	Lidocain	214U-03584	1
Fagron	Lidocain	12E30-N10	1
Fagron	Lidocain	12C08-N11	1
Fagron	Lidocain	12H16-n05	1
Fagron	Lidocain	12c8-n11	1
Fagron	Lidocain	13H05-N050171/245	1
Fagron	Lidocain	11D28-N12	1
Fagron	Lidocain	12h16_n05	1
Fagron	Lidocain	13H05-N050115/280	1
Fagron	Lidocain	11K17-N03	3
Fagron	Lidocain	13B27N04	1
Fagron	Lidocainhydrochlorid	12E14-N04	1
Fagron	Lidocainhydrochlorid	14B12-B03-292214	1
Fagron	Lidocainhydrochlorid	13F07-N06	3
Fagron	Lidocainhydrochlorid	9B3M1L2Fo118	1
Fagron	Lidocainhydrochlorid	12H09-N08	2
Fagron	Lidocainhydrochlorid	12C05-N02	2
Fagron	Lidocainhydrochlorid	13L18-B11-286903	1
Fagron	Lidocainhydrochlorid	11H18-N01	2
Fagron	Lidocainhydrochlorid	8F26-N07	1
Fagron	Lithiumorotat-Monohydrat	13J04-N01	1
Fagron	Lysinhydrochlorid	2167210405	1
Fagron	Macrogol 4000	13B20-N01	2
Fagron	Macrogol 4000	12L10-N06	1
Fagron	Macrogol 4000	12I20-N03	1
Fagron	Macrogol 4000	12F29-N01	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Macrogol 4000	12F29-N01	1
Fagron	Macrogol 4000	13G19-N08	1
Fagron	Macrogol 4000	13B20N01	1
Fagron	Macrogol 4000	12A12-N07	1
Fagron	Macrogol 4000	12C29-N15	1
Fagron	Macrogol 4000	13F12-N09	1
Fagron	Macrogol 4000	14A03-B01-289602	3
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	13B22-N03	1
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	12H28-N03	1
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	12H28-N11	4
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	12G10-N01	1
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	10D28-N22	1
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	12A30-N30	1
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	12A30-N03	2
Fagron	Magnesium(hydrogen)citrat	13K11-B02-288161	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1301C009-277802	2
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	11K17-N01	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12B16-N01	4
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12D11-N01	5
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1304C004	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1301C10	3
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12H21-N02	6
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12D11-N01	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	12H21-No2	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	M1555	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1301c009-277802	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	11K17-N10	2
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1304c004-281210	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	M1625	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1304C004-281210	1
Fagron	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	M1430	1
Fagron	Magnesiumorotat-Dihydrat	1000060461	1
Fagron	Magnesiumorotat-Dihydrat	13H06-N07	1
Fagron	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12G24-N02	1
Fagron	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	26251	1
Fagron	Mannit	170980-0002	1
Fagron	Mannit	E717A	1
Fagron	Mannit	12K28-N01	1
Fagron	Mannit	12J26-N15	1
Fagron	Mannit	12E24-N08	1
Fagron	Mannit	11L19-N15	1
Fagron	Mannit	1302c005	1
Fagron	Melatonin	13D12-N10	1
Fagron	Melatonin	12G19-N03	1
Fagron	Melatonin	13e22-n12	1
Fagron	Melatonin	13H21-N065x	1
Fagron	Melatonin	12K13-N02	1
Fagron	Melatonin	13D12N10	1
Fagron	Melatonin	13H21-N06	1
Fagron	Menthol	12C05-N03	1
Fagron	Menthol	12I19-N10	1
Fagron	Menthol	12D23-N06	4
Fagron	Menthol	13016-N09	1
Fagron	Menthol	4611I-01855 (NP)	1
Fagron	Menthol	13D16-N09	4
Fagron	Menthol	12G20-N02	3
Fagron	Menthol	13G09-N09	1
Fagron	Menthol	13G09-N090204/520	1
Fagron	Menthol	1219-N10	1
Fagron	Menthol	750137	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Menthol	12/19-N10	2
Fagron	Menthol	12F01-N14	1
Fagron	Menthol	13D16-N090631/1300	1
Fagron	Mepivacainhydrochlorid	12F20-N07	1
Fagron	Methacholiniumchlorid	13/13-N03	2
Fagron	Methacholiniumchlorid	13G10-N05	2
Fagron	Methacholiniumchlorid	135000B	1
Fagron	Methionin	12G27-N01	1
Fagron	Methionin	12K01-N03	1
Fagron	Methionin	13G09-N02	1
Fagron	Methionin	12D27-N06	1
Fagron	Methoxsalen	12E02-N05	1
Fagron	Methoxsalen	MS01/13-14	1
Fagron	Methoxsalen	2111A-03262	1
Fagron	Methoxsalen	Ch. 006/0913	1
Fagron	Methoxsalen	13A10N06	1
Fagron	Methoxsalen	11F21-N02	1
Fagron	Methyl-4-hydroxybenzoat	13B25-N03	2
Fagron	Methyl-4-hydroxybenzoat	13E27-N09	1
Fagron	Methyl-4-hydroxybenzoat	20111125-1	1
Fagron	Methyl-4-hydroxybenzoat	12D18N01	1
Fagron	Methyl-4-hydroxybenzoat	12H02-N08	2
Fagron	Methyl-4-hydroxybenzoat	12D18-N01	1
Fagron	Methylcellulose	13E02-B03-290531	1
Fagron	Metronidazol	11C21-N01	1
Fagron	Metronidazol	12L-N11	1
Fagron	Metronidazol	12D30-N03	3
Fagron	Metronidazol	11H11-n03	1
Fagron	Metronidazol	12L17N11	1
Fagron	Metronidazol	12L17_N16	1
Fagron	Metronidazol	20130906F	2
Fagron	Metronidazol	20121121	1
Fagron	Metronidazol	13D08-N22	4
Fagron	Metronidazol	13B06-N03	5
Fagron	Metronidazol	13j21-n07	1
Fagron	Metronidazol	13/21-N07	1
Fagron	Metronidazol	13D08N22	1
Fagron	Metronidazol	12G04-N15	13
Fagron	Metronidazol	13J21-N07	6
Fagron	Metronidazol	12F15-N04	7
Fagron	Metronidazol	13B06N03	1
Fagron	Metronidazol	3212E01870	1
Fagron	Metronidazol	12D30-N02	1
Fagron	Metronidazol	11F15-N07	1
Fagron	Metronidazol	12g04-n15	1
Fagron	Metronidazol	13D10-N02	2
Fagron	Metronidazol	12L17-n11	1
Fagron	Metronidazol	13I10-N03	1
Fagron	Metronidazol	12L17-N16	3
Fagron	Metronidazol	12L17-N11	11
Fagron	Miconazolnitrat	13H28-N06	1
Fagron	Miconazolnitrat	13A14-B09	1
Fagron	Miconazolnitrat	13A14-B09-287486	1
Fagron	Miconazolnitrat	13091R	1
Fagron	Miconazolnitrat	14B18-B02-291233	2
Fagron	Miconazolnitrat	13E13-N08	1
Fagron	Miconazolnitrat	13A14B09287487	1
Fagron	Miconazolnitrat	2900/08/12	1
Fagron	Miconazolnitrat	13H28-N06	8
Fagron	Miconazolnitrat	12/21-M03	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Miconazolnitrat	12H10-N02	3
Fagron	Miconazolnitrat	13A14B09283005	1
Fagron	Miconazolnitrat	14B18-B02-291232	1
Fagron	Miconazolnitrat	13D22-N14	7
Fagron	Miconazolnitrat	13d22-n14	1
Fagron	Miconazolnitrat	12h10-n02	1
Fagron	Minoxidil	612212844	1
Fagron	Minoxidil	12A25-N04	2
Fagron	Minoxidil	12C29-N050087/240	1
Fagron	Minoxidil	12H07-N030265/432	1
Fagron	Minoxidil	13E13-N10	8
Fagron	Minoxidil	12H07-N03	12
Fagron	Minoxidil	13I23-N07	4
Fagron	Minoxidil	13E13N10	1
Fagron	Minoxidil	13K04-B05-290380	1
Fagron	Minoxidil	10J14-N19	1
Fagron	Minoxidil	13H07-N03	1
Fagron	Minoxidil	12H07-N03	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13H13-N04	6
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	12H09-N02	9
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	11H10-N01	2
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	14C07B05291268	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13F17-N01	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	14C07-B05-291268	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13J23-N02	13
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	14E20-B04-291269	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13H13-N04	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	11F08-N03	2
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	12/29-No3	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	11h10-n04	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	12e02-n11	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13F27-N02	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13F17-N01	2
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	12J29-N01	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13f17-n01	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13F27-N02	5
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	1814E3640	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13D08-N06	14
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	12J29-N03	6
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	12B22-N01	3
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	11C02-N03	2
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	NS0420M	2
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	12B22-N04	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13F7-N01	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	13D08N06	1
Fagron	Mometasonfuroat, mikronisiert	2114M3640	1
Fagron	Na-Chondroitinsulfat	1821031801	1
Fagron	Naloxonhydrochlorid	12G19-N02	2
Fagron	Naloxonhydrochlorid	12-00071	2
Fagron	Naloxonhydrochlorid	12G19-N02	1
Fagron	Naloxonhydrochlorid	13D22-N07	2
Fagron	Naloxonhydrochlorid	13L12-B03-289511	1
Fagron	Naloxonhydrochlorid	11/23-N01	1
Fagron	Naloxonhydrochlorid	13H09-N08	1
Fagron	Naphazolinhydrochlorid	11J13-N08	1
Fagron	Naphazolinhydrochlorid	11I05-N02	1
Fagron	Naphazolinhydrochlorid	13C11N07	1
Fagron	Naphazolinhydrochlorid	13C11-N07	2
Fagron	Naphazolinhydrochlorid	13A07-N06	1
Fagron	Naphazolinhydrochlorid	12K29-N01o256/310	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Natriumascorbat	L1308005-01	1
Fagron	Natriumdihydrogenphosphat-Di...	12L05-N05	1
Fagron	Natriumedetat	813Q-01925	1
Fagron	Natriumedetat	12E16-N04	2
Fagron	Natriumedetat	601HA062	1
Fagron	Natriumedetat	13E15-B10-289034	1
Fagron	Natriumedetat	13E15-N05	1
Fagron	Natriumedetat	13E15-No5	1
Fagron	Natriumedetat	11L13-N02	1
Fagron	Natriumedetat	12G25-N12	4
Fagron	Natriumedetat	13E15-N05	6
Fagron	Natriumedetat	13G15-N03	1
Fagron	Natriumedetat	12E12-N04	1
Fagron	Natriumedetat	13/23-N03	2
Fagron	Natriumedetat	13I23-N03	2
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	11I12-N16	5
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	RBA1661100	1
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	RBA0021100	1
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	12D11-N02	1
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	12B06-N01	2
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	11/12-N16	2
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	11K25-N05	3
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	4413I01892	1
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	12G11-N03	4
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	11e31-n04	1
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	12D11-N02	11
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	RBA3651200	1
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	13B18-N03	2
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	12D11N02	2
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	13G11-N03	2
Fagron	Natriumhydrogencarbonat, gep...	RBA3421100	1
Fagron	Natriumhydroxid Plätzchen	12E02-N15	1
Fagron	Natriumhydroxid Plätzchen	13k22-no5	1
Fagron	Natriumhydroxid Plätzchen	13F06-N02	2
Fagron	Natriummonohydrogenphosphat-...	12H21-N03	1
Fagron	Natriummonohydrogenphosphat-...	11K07-N10	1
Fagron	Natriummonohydrogenphosphat-...	13D24-N12	2
Fagron	Natriummonohydrogenphosphat-...	613I-01914	1
Fagron	Natriummonohydrogenphosphat-...	B44888A	1
Fagron	Natriumsalicylat, gepulvert	102091210	1
Fagron	Natriumsulfat-Decahydrat	2134	1
Fagron	Natriumsulfat-Decahydrat	11H01-N06	1
Fagron	Natriumsulfat-Decahydrat	12H31-N04	2
Fagron	Natriumsulfat-Decahydrat	1464	1
Fagron	Natriumsulfat-Decahydrat	12E30-N09	1
Fagron	Natriumtetraborat	12H09-N03	1
Fagron	Natriumthiosulfat	3313U-01922	1
Fagron	Neomycinsulfat	13G09-N07	3
Fagron	Neomycinsulfat	13D10-N05	4
Fagron	Neomycinsulfat	11/19-N14	4
Fagron	Neomycinsulfat	10121-N01	1
Fagron	Neomycinsulfat	12C13-N04	3
Fagron	Neomycinsulfat	12I19-N14	1
Fagron	Nicotinamid	L14020084	1
Fagron	Nitrofurantoin	71/14	1
Fagron	Nitrofurantoin	13A08-N01	1
Fagron	Nitrofurantoin	12C30-N03	1
Fagron	Norethisteronacetat	11H22-N03	1
Fagron	Nystatin	11K11-N04	1
Fagron	Nystatin	12C29-N09	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Nystatin	4014376	1
Fagron	Nystatin	11K11-No4	1
Fagron	Oxybuprocainhydrochlorid	4612M-03639	1
Fagron	Oxybuprocainhydrochlorid	12L19N01	1
Fagron	Oxybuprocainhydrochlorid	13C01-N01	4
Fagron	Oxybuprocainhydrochlorid	3613N-07321	1
Fagron	Oxybuprocainhydrochlorid	13h13-n05	2
Fagron	Oxytetracyclinhydrochlorid	13D08-N11	2
Fagron	Oxytetracyclinhydrochlorid	12A26-N05	4
Fagron	Oxytetracyclinhydrochlorid	C22H25CIN209	1
Fagron	Pheniraminmaleat	12L04-N05	2
Fagron	Pheniraminmaleat	12I06-N02	1
Fagron	Phenylephrinhydrochlorid	12A03-N09	1
Fagron	Phenylephrinhydrochlorid	13A03-N09	1
Fagron	Phenylephrinhydrochlorid	12G19-N04	1
Fagron	Phenylephrinhydrochlorid	12g19-n04	1
Fagron	Phenylephrinhydrochlorid	12C08-N17	1
Fagron	Phenylephrinhydrochlorid	13D09-N02	1
Fagron	Phenytoin	12I07-N02	1
Fagron	Phenytoin	13G26-N02	1
Fagron	Poloxamer 407	12K23-N03	1
Fagron	Polymyxin-B-sulfat	12G25-N06	1
Fagron	Polymyxin-B-sulfat	13H28-B02-87953	1
Fagron	Polymyxin-B-sulfat	12D05-N01	1
Fagron	Prasteron	7013260004	1
Fagron	Prasteron	12K30-N06	2
Fagron	Prasteron	13J10-B02	1
Fagron	Prasteron	12C26-N09	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13c25-no6	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13C25-N02	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13/23-N04	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13G05-N03	3
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13C25-N06	4
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13F11-N01	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	12D27-N01	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13I23-N04	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13c25-n06	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	12b20-n06	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13g05-n03	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	NT0555M	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	14A27-B02-291256	4
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13F11-N01	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	13F11-No1	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	12H20-No7	1
Fagron	Prednicarbat, mikronisiert	12D27-N04	2
Fagron	Prednisolon 1:10 Verreibung ...	12L19-N06	1
Fagron	Prednisolon 1:10 Verreibung ...	12D04-N01	1
Fagron	Prednisolonacetat	12L11-B40-286905	8
Fagron	Prednisolonacetat	12G25-N05	3
Fagron	Prednisolonacetat	11A31-N03	1
Fagron	Prednisolonacetat	12L05-N01	8
Fagron	Prednisolonacetat	12H14-N07	1
Fagron	Prednisolonacetat	11L21-N03	2
Fagron	Prednisolonacetat	12091803	5
Fagron	Prednisolonacetat	13K20-B04-289494	1
Fagron	Prednisolonacetat	12J10-N05	1
Fagron	Prednisolonacetat	12C19-N03	3
Fagron	Prednisolonacetat	12H14-N07	2
Fagron	Prednisolonacetat	113Q-02106	1
Fagron	Prednisolonacetat	12J10/N05	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Prednisolonacetat	12L11-B40	1
Fagron	Prednisolondihydrogenphospha. . .	11C18-N11	1
Fagron	Prednisolondihydrogenphospha. . .	12H30-N08	2
Fagron	Prednisolondihydrogenphospha. . .	11K11-N11	2
Fagron	Prednisolondihydrogenphospha. . .	13A10-N04	2
Fagron	Prednison	13C13-N08	1
Fagron	Procainhydrochlorid	12I10-N07	1
Fagron	Procainhydrochlorid	10H11-N25	1
Fagron	Procainhydrochlorid	1651212	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12G05-N17	7
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12D05N06	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	C01-120322	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12D05-N06	5
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12K05-N01	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12K05-N07	2
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12A19-N04	4
Fagron	Progesteron, mikronisiert	13/11-N11	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	13b08-n01	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12k05-n07	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	13A02-N01	3
Fagron	Progesteron, mikronisiert	13H01-N03	2
Fagron	Progesteron, mikronisiert	13A02N01	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	1910213235	1
Fagron	Progesteron, mikronisiert	12a19-n04	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	12K06-N07	6
Fagron	Propranololhydrochlorid	402310015	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	1313-N04	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	12F29-N06	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	12K06N07	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	11I19-N09	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	13I13-N04	2
Fagron	Propranololhydrochlorid	13E15-B40-289355	2
Fagron	Propranololhydrochlorid	20250711-8	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	13/13-N04	4
Fagron	Propranololhydrochlorid	12A27-N04	1
Fagron	Propranololhydrochlorid	12F29-N06	3
Fagron	Propranololhydrochlorid	12f29-n06	1
Fagron	Propyl-4-hydroxybenzoat	12B13-N04	1
Fagron	Propyl-4-hydroxybenzoat	610M-01931	1
Fagron	Pyridoxinhydrochlorid	L13080030	1
Fagron	Pyridoxinhydrochlorid	12e02-n02	1
Fagron	Resorcin	13E24-N10	3
Fagron	Resorcin	12G24-N04	10
Fagron	Resorcin	11L19-N19	2
Fagron	Resorcin	12G24-N004	1
Fagron	Resorcin	12/16010	1
Fagron	Resorcin	12K30-N03	2
Fagron	Resorcin	11A19-N09	1
Fagron	Riboflavin	11K02-N01	1
Fagron	Riboflavin	13J29-B04-287534	1
Fagron	Riboflavin	12J17-N07	1
Fagron	Riboflavin	12H30-N02	1
Fagron	Rutosid-Trihydrat	13K12-B06	1
Fagron	Rutosid-Trihydrat	L14050127	1
Fagron	Saccharin-Natrium	12K26-N09	1
Fagron	Saccharin-Natrium	13D19-N01	2
Fagron	Saccharin-Natrium	SH203/11	1
Fagron	Saccharin-Natrium	12E03-N01	1
Fagron	Saccharose	5112I-02207	1
Fagron	Saccharose	12E29-N04	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Saccharose	12-E03-M01	1
Fagron	Saccharose	13D29-N08	1
Fagron	Saccharose	11B02-N12	1
Fagron	Saccharose	11L09-N16	2
Fagron	Saccharose	11E19-N04	1
Fagron	Saccharose	11/16-N01	1
Fagron	Saccharose	11I16-N01	1
Fagron	Saccharose	13A07-N03	1
Fagron	Saccharose	1011208731	1
Fagron	Saccharose	11/16-N01	1
Fagron	Saccharose	13G04-N01	1
Fagron	Saccharose	12G26-N01	3
Fagron	Saccharose	130100R	1
Fagron	Saccharose	13I30-N05	1
Fagron	Salicylsäure	11B14-N13	1
Fagron	Salicylsäure	12C20-N04	1
Fagron	Salicylsäure	13H01N08	1
Fagron	Salicylsäure	RAS1135100	1
Fagron	Salicylsäure	13H01-N01	3
Fagron	Salicylsäure	11L19-N21	1
Fagron	Salicylsäure	13H01-N04	5
Fagron	Salicylsäure	12H10-N03	5
Fagron	Salicylsäure	13K08-B31-290853	1
Fagron	Salicylsäure	xxxxxxx	1
Fagron	Salicylsäure	RAS1135300	1
Fagron	Salicylsäure	12374211	4
Fagron	Salicylsäure	11K10-N01	3
Fagron	Salicylsäure	12H10-N08	4
Fagron	Salicylsäure	13B14-N01	13
Fagron	Salicylsäure	12C20-N12	6
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	1309211186	1
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	12C08-N06	1
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	12d26-no3	1
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	13C15-N05	2
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	13B25-N02	1
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	12D26-N03	1
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	11/13-N01	1
Fagron	Schweres basisches Bismutnit. ...	1001311186	1
Fagron	Schweres, basisches Magnesium...	12F20-N04	1
Fagron	Sildenafil Citrat	13J15-N01	2
Fagron	Sorbinsäure	121394	1
Fagron	Sorbitanmonostearat	12E30-N14	1
Fagron	Sorbitanmonostearat	5052	1
Fagron	Sorbitanmonostearat	13D10_N10	1
Fagron	Sorbitanmonostearat	13D10-N10	1
Fagron	Sorbitol	12E30-N24	5
Fagron	Sorbitol	13D08-N27	1
Fagron	Sorbitol	12L17-N12	3
Fagron	Sorbitol	M721140/12L17-N12	1
Fagron	Spironolacton	13G16-B08	1
Fagron	Spironolacton	13D12-N08	1
Fagron	Spironolacton	12J15-N04	1
Fagron	Spironolacton	12/17-N01	1
Fagron	Spironolacton	13G03-N09	1
Fagron	Spironolacton	12/17-n01	1
Fagron	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	12L19-N06	1
Fagron	Sulfanilamide	11L01-No8	1
Fagron	Tannin	13H30-B03-287645	1
Fagron	Tannin	12A27-N01	1
Fagron	Tannin	12E21-N04	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Tannin	12H14-N05	1
Fagron	Tannin	11C09-N05	1
Fagron	Testosteron	12F13-N02	2
Fagron	Testosteronpropionat	12C01-N01	1
Fagron	Testosteronpropionat	11C21-N09	1
Fagron	Testosteronpropionat	13C08-N02	7
Fagron	Testosteronpropionat	3613M-02376	1
Fagron	Testosteronpropionat	zu erfassen	1
Fagron	Testosteronpropionat	12C01-N01	1
Fagron	Testosteronpropionat	12/10-N08	1
Fagron	Testosteronpropionat	32012M1	2
Fagron	Testosteronpropionat	12A02-N05	3
Fagron	Testosteronpropionat	13C08N02	1
Fagron	Testosteronpropionat	10L03-N16	1
Fagron	Testosteronpropionat	12E04-N01	4
Fagron	Testosteronpropionat	12E29-N02	1
Fagron	Testosteronpropionat	12J10N-08	1
Fagron	Testosteronpropionat	13F05-N04	4
Fagron	Testosteronpropionat	12J10-N08	2
Fagron	Tetracain Base	11L09-N03	2
Fagron	Tetracain Base	12F29-N05	4
Fagron	Tetracain Base	11D07-N20	1
Fagron	Tetracain Base	12H23-N07	1
Fagron	Tetracain Base	11G12-N13	3
Fagron	Tetracain Base	12F26-N05	1
Fagron	Tetracain Base	13D30-N11	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	14C18-B03-293966	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	4313E-02039	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	3913I-02039	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	3413U02039	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	10A29-N12	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	13H21-B02	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	12H-N05	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	13D11-N07	10
Fagron	Tetracainhydrochlorid	13G02-N01	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	12C22-N04	6
Fagron	Tetracainhydrochlorid	12H24-N05	12
Fagron	Tetracainhydrochlorid	12K01-N04	5
Fagron	Tetracainhydrochlorid	13q11-n07	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	212131/221630-0002	1
Fagron	Tetracainhydrochlorid	11A31-N15	1
Fagron	Tetracyclinhydrochlorid	13F17-N03	1
Fagron	Tetracyclinhydrochlorid	12E10-N05	1
Fagron	Thiomersal	13E22-N13	1
Fagron	Thiomersal	12C08-N02	1
Fagron	Thiomersal	12F19-N11	1
Fagron	Thymol	12K01-N02	2
Fagron	Thymol	12E30-N11	1
Fagron	Thymol	713575	1
Fagron	Thymol	12B06-N11	1
Fagron	Thymol	12H29-N02	2
Fagron	Tosylchloramid-Natrium	12/22-B02-288834	1
Fagron	Tosylchloramid-Natrium	11L08-N04	1
Fagron	Tranexamsäure	13G24-N21	1
Fagron	Tretinoin, mikronisiert	13B05-B02-287361	1
Fagron	Tretinoin, mikronisiert	13D30-N14	1
Fagron	Tretinoin, mikronisiert	13B05-B02-287360	3
Fagron	Tretinoin, mikronisiert	20120601	2
Fagron	Tretinoin, mikronisiert	12I06-N01	5
Fagron	Tretinoin, mikronisiert	13D30-N14-3365319091	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Tretinoin, mikronisiert	12D05-N08	3
Fagron	Triamcinolon, mikronisiert	13C26-N04	1
Fagron	Triamcinolon, mikronisiert	11D28-N04	1
Fagron	Triamcinolon, mikronisiert	11G26-N04	1
Fagron	Triamcinolon, mikronisiert	12A03-N09	2
Fagron	Triamcinolon, mikronisiert	13D30-N15	1
Fagron	Triamcinolon, mikronisiert	12F01-N19	4
Fagron	Triamcinolonacetonid	12I10-N09	2
Fagron	Triamcinolonacetonid	NS0996M	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	12E15-N03	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13c13-n20	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	12E15-N03	21
Fagron	Triamcinolonacetonid	13C13-20	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13E15-N03	14
Fagron	Triamcinolonacetonid	12I10-N09	3
Fagron	Triamcinolonacetonid	13E15N03	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13E15-No3	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	NS0571M	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	NS0571M	3
Fagron	Triamcinolonacetonid	C22H25CIN209	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	3212U-02516 (NP)	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13K15-B31-289027	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	120600801	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13C13-N20	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	11B22-N05	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	411082-1-P	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13I26-N11	3
Fagron	Triamcinolonacetonid	11K11-N10	4
Fagron	Triamcinolonacetonid	12B08-N01	5
Fagron	Triamcinolonacetonid	13C13-N20	10
Fagron	Triamcinolonacetonid	12I0-N09	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13E15N03	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	11N11-N10	1
Fagron	Triamcinolonacetonid	13c13-n20	1
Fagron	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	11G14-N02	1
Fagron	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	13F21-N01	1
Fagron	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	12A05-N07	3
Fagron	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	12I07-N04	1
Fagron	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	12G23-N06	2
Fagron	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	12I07-N04	1
Fagron	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	12E23-N01	3
Fagron	Tricalciumphosphat	12G10-N05	1
Fagron	Trichloressigsäure	13H22-M04	1
Fagron	Trichloressigsäure	10379405	1
Fagron	Trichloressigsäure	13B19-M04	1
Fagron	Triclosan	11H09-N02	7
Fagron	Triclosan	2901313402	1
Fagron	Triclosan	2513Q-03402	1
Fagron	Triclosan	10006226	1
Fagron	Triclosan	12G09-no9	1
Fagron	Triclosan	12G17N04	1
Fagron	Triclosan	12G17-N04	32
Fagron	Triclosan	13A11-N03	8
Fagron	Triclosan	11D20-N10	5
Fagron	Triclosan	12C21-n05	1
Fagron	Triclosan	12L06-0003	1
Fagron	Triclosan	13L18-B35-289984	2
Fagron	Triclosan	4394083	3
Fagron	Triclosan	13D02-N-02	1
Fagron	Triclosan	13H08-N10	10

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Triclosan	1209213402	1
Fagron	Triclosan	13H09-N01	28
Fagron	Triclosan	13L-18-B35-289985	1
Fagron	Triclosan	12L06-N01	1
Fagron	Triclosan	1214I03402	1
Fagron	Triclosan	13L18-B35-289988	1
Fagron	Triclosan	1403217068	1
Fagron	Triclosan	C12H7C1302	1
Fagron	Triclosan	13/10-N02	1
Fagron	Triclosan	13a11n03	1
Fagron	Triclosan	12G09N09	1
Fagron	Triclosan	11A05-N13	1
Fagron	Triclosan	13D02-N0Z	1
Fagron	Triclosan	13H09-No1	1
Fagron	Triclosan	13D02-N02	53
Fagron	Triclosan	12d02-n02	1
Fagron	Triclosan	13L18-B35	1
Fagron	Triclosan	12G09-N09	6
Fagron	Triclosan	13d02-N02	1
Fagron	Triclosan	12C21-N05	1
Fagron	Triclosan	11J28-N02	7
Fagron	Triclosan	13H08-N-10	1
Fagron	Triclosan	12G17.N04	1
Fagron	Triclosan	13D02N02	1
Fagron	Triclosan	12C21-N05	23
Fagron	Triclosan	12g17-n04	5
Fagron	Triclosan	12L06-N01	33
Fagron	Triclosan	12G17-No4	1
Fagron	Triclosan	13Do2-N02	1
Fagron	Trometamol	12I27-N03	2
Fagron	Trometamol	294101	1
Fagron	Trometamol	12k14n05	1
Fagron	Trometamol	13E22-N05	4
Fagron	Trometamol	12k14no5	1
Fagron	Trometamol	13I19-B02-286158	1
Fagron	Trometamol	11H08-N05	1
Fagron	Trometamol	13I19-B02	1
Fagron	Trometamol	C4H11N03	1
Fagron	Trometamol	286158	1
Fagron	Trometamol	12I27-N03	1
Fagron	Trometamol	13I19-B02-286158	1
Fagron	Trometamol	12I27-No3	1
Fagron	Trometamol	13C08-N07	2
Fagron	Trometamol	12K14-N05	2
Fagron	Tropicamid	12F18-N06	4
Fagron	Tropicamid	12I04-n03	1
Fagron	Tropicamid	13A30-N06	1
Fagron	Tryptophan	11G25-N02	1
Fagron	Tryptophan	12B14-N15	1
Fagron	Tyrothricin	13A14-N04	1
Fagron	Uridin	13D29-N06	1
Fagron	Uridin	721010040	2
Fagron	Uridin	13D29-N06	3
Fagron	Valin	13B13-N05	1
Fagron	Vanillin	8L05-N07	1
Fagron	Vanillin	12H09-N06	3
Fagron	Vanillin	10L22-N17	1
Fagron	Vanillin	12Ko7-N19	1
Fagron	Vanillin	314Q2548	1
Fagron	Vanillin	13J01-N07	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fagron	Vanillin	11G28-N09	1
Fagron	Wachs	13B04-N04	2
Fagron	Wachs	12D23-N05	1
Fagron	Wachs	12K20B05287421	1
Fagron	Wachs	13804-N04	1
Fagron	Weinsäure	2513M01053	1
Fagron	Weinsäure	2405211053	1
Fagron	Weinsäure	1106211053	1
Fagron	Weinsäure	11E24-N060752/764	1
Fagron	Weinsäure	xxxxxxx	1
Fagron	Weinsäure	12H02-N07	2
Fagron	Weinsäure	2414E1053	1
Fagron	Weinsäure	13B15N01	1
Fagron	Weinsäure	12K16-N02	1
Fagron	Weinsäure	13B15-N01	3
Fagron	Weinsäure	10024	1
Fagron	Weinsäure	20151112-2	1
Fagron	Xylometazolinhydrochlorid	12G31-N01	1
Fagron	Xylometazolinhydrochlorid	13171203	1
Fagron	Xylose	13133415	1
Fargo	Prednisolonacetat	12025-N05	1
fargon	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	12E22-N02	1
fargon	Progesteron, mikronisiert	8577420	1
Fargon	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11/23-N06	2
Fargon	Arginin	121429	1
Fargon	L-Leucin	8160410903	1
Fargon	L-Threonin	2114720407	1
FARGON	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	13d22-n09	1
FARGON	Benzylaminhydrochlorid	13h19-n06	1
FARGON	Betamethasonvalerat	12g09-n07	3
FARGON	Betamethasonvalerat	12b28-n01	1
FARGON	Betamethasonvalerat	12111-n01	1
FARGON	Chloralhydrat	10i14-n10	1
FARGON	Chloralhydrat	nachprüfung	1
FARGON	Chloramphenicol	13a11-n02	1
FARGON	Clotrimazol	12121-n04	2
FARGON	Clotrimazol	11112-n10	1
FARGON	Clotrimazol	12i21-n04	1
FARGON	Glucose-Monohydrat	13b01-n03	1
FARGON	Hydrocortisonacetat	12k15-n04	1
FARGON	Isosorbiddinitrat 40%	11f20-n05	1
FARGON	Menthol	12c05-n03	1
FARGON	Mometasonfuroat, mikronisiert	13d08-n06	1
FARGON	Prednisolonacetat	12g25-n05	1
FARGON	Prednisolonacetat	12l05-n01	1
FARGON	Progesteron, mikronisiert	nachprüfung	1
FARGON	Progesteron, mikronisiert	10a21-n18	1
FARGON	Progesteron, mikronisiert	13/11-n11	1
FARGON	Tretinoin, mikronisiert	11a27-n01	1
FARGON	Triclosan	12c21-n05	7
Fargon/17.07.2013/Noweda	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	12 07-N04	1
Fgron	Coffeincitrat	2013Q-01282	1
Fiebig	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11J06-N03	1
Fiebig	Chlorhexidindiacetat	12C19-N02	1
Fiebig	Ginkgoblätter, geschn.	12373604	3
Fiebig	Ginkgoblätter, geschn.	13340902	1
Fiebig	Prednisolonacetat	11158001	1
Fiebig	Weihrauch-Granulat	10349213	3
Fiebig	Zinkacetat-Dihydrat	211172/2	1
Fiebig 04.7.13 EK 4,54	Lidocainhydrochlorid	12135511	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Fiebig 10.06.13 ek: 8,58EUR	Clotrimazol	12E30-N07	7
Fiebig 16.01.13 ek: 4,18EUR	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	11350911	2
Fiebig 27.06.13 EK47,81	Betamethasonvalerat	B9/131	1
Fiebig 29.04.13 ek: 5,64EUR	Natriumsulfat-Decahydrat	1210005-01	2
Fiebig ek: 36.06EUR 31.0812	Minoxidil	111202403	1
Finze	Calciumgluconat	917857359	1
Finze	Diphenhydraminhydrochlorid	9F05-N04	2
Finze	Estradiolbenzoat	1003040-01	2
Finze	Ethacridinlactat-Monohydrat	90601	1
Finze	Harnstoff	1264	1
Finze	Leinsamen	3607E-02240	1
Finze	Menthol	9221710	1
Finze	Natriumhydrogencarbonat, gep. ...	Pr.Nr. 4311Q-01892	1
Finze	Sorbinsäure	9280207	2
Finze	Testosteronpropionat	10366002	1
Finze	Tetracainhydrochlorid	2906009-02	1
Finze	Thiaminchloridhydrochlorid	9216114	1
Finze	Wachs	10145002	1
Fischar	Kupfer(II)-sulfat-Pentahydra...	9452011	1
Fischer/VDL	Natriumhydrogencarbonat, gep. ...	6521111	7
fragon	Natriumsulfat-Decahydrat	zu erfassen	1
Fragon	Prasteron	12G04-N19	2
Galke	Anis	21278	1
Galke	Anis	23464	1
Galke	Anis	22274	1
Galke	Curcumawurzelstock, geschn.	23123	1
Galke	Curcumawurzelstock, geschn.	20184	1
Galke	Eichenrinde, geschn.	17824	2
Galke	Flohsamen	20968	2
Galke	Flohsamen	22989	7
Galke	Gelbwurz, javanisch, geschn.	15540	1
Galke	Isländisches Moos, geschn.	12369	1
Galke	Johannisbeeren, schwarze	21348	1
Galke	Kampfer	23624	1
Galke	Kornblumenblüten ohne Kelch	23131	2
Galke	Kümmel	23627	1
Galke	Kümmel, zerstoßen	18943	1
Galke	Löwenzahnwurzel, geschn.	126302	1
Galke	Löwenzahnwurzel, geschn.	20658	1
Galke	Manna, gepulvert	19784	1
Galke	Manna, gepulvert	20669	1
Galke	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	22739	1
Galke	Rosmarinblätter, geschn.	22777	1
Galke	Spargelwurzelstock, geschn.	20178	1
Galke	Tormentillwurzelstock, geschn.	21091	1
Galke	Tormentillwurzelstock, geschn.	21744	2
Galke	Walnussblätter, geschn.	21061	1
gebepharma	Natriummonohydrogenphosphat-...	20160909-2	1
geh 30.08.13	Metronidazol	121203001	1
gehe	Calciumgluconat	1209006-01	5
gehe	Glucose-Monohydrat	1401019-02	1
gehe	Melatonin	13167301	1
gehe	Mönchspfefferfrüchte	13193407	1
gehe	Tetracainhydrochlorid	1303012	1
gehe	Zimtrinde, geschn.	13304412	1
Gehe	Allantoin	12251510	9
Gehe	Anis	11370303	6
Gehe	Calciumpantothenat	1004024-01	1
Gehe	Cetylpalmitat 15	11216007	1
Gehe	Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat	10281609	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Gehe	Chloramphenicol	1107002-02	1
Gehe	Clobetasol-17-propionat 1:10...	12A03-N03	1
Gehe	Clobetasol-17-propionat 1:10...	12/19-N01	2
Gehe	Clobetasol-17-propionat 1:10...	1109D005	1
Gehe	Clobetasolpropionat	12107606	1
Gehe	Clotrimazol	10247328	1
Gehe	Dexamethason 1:10 Verreibung...	12E30-N16	1
Gehe	Diltiazemhydrochlorid	12133022	9
Gehe	Erythromycin	13189004	2
Gehe	Erythromycin	1106036-05	8
Gehe	Fructose	12B02-N07	1
Gehe	Fructose	11/07-N08	1
Gehe	Glucose-Monohydrat	130503002	1
Gehe	Harnstoff	12111822	16
Gehe	Hydrocortisonacetat	1233015	1
Gehe	Hydrocortisonacetat	11098607	1
Gehe	Hydrocortisonacetat	13291708	1
Gehe	Hypromellose E4M Prem	11D15-N06	1
Gehe	Kaliumhydrogentartrat	11345808	1
Gehe	Kampfer	10L08-N06	1
Gehe	Lactose-Monohydrat	11120220-01	1
Gehe	Macrogol 4000	1219-N13	1
Gehe	Mannit	110009-02	1
Gehe	Minoxidil	AP006/13M	2
Gehe	Natriumsulfat-Decahydrat	12257902	5
Gehe	Oxytetracyclinhydrochlorid	11336509	1
Gehe	Oxytetracyclinhydrochlorid	11336507	1
Gehe	Procainhydrochlorid	10159730	1
Gehe	Resorcin	12G-24-N04	1
Gehe	Sauerdornbeeren	2720N111109	1
Gehe	Spironolacton	11B07-N06	2
Gehe	Triamcinolonacetonid	12/10-N09	8
Gehe	Triamcinolonacetonid	122301508	1
Gehe	Triamcinolonacetonid	13124803	2
Gehe	Triamcinolonacetonid 1:10 Ve...	13A15-N05	1
Gehe	Triclosan	12145910	8
Gehe	Triclosan	12359104	5
Gehe	Triclosan	13247903	1
Gehe	Triclosan	11/19-N11	1
Gehe	Triclosan	11/28-N02	1
Gehe	Trometamol	11025103	1
Gehe	Vogelmierenkraut, geschn.	10359112	1
Gehe	Wachs	12079412	1
Gehe	Walnussblätter, geschn.	211A120123	1
Gehe	Weihrauch-Granulat	12120002	1
Gehe	Weinsäure	7284696	1
Gehe	Xylometazolinhydrochlorid	10118802	1
Gehe	Xylose	1000110821	1
Gehe	Xylose	11J06-N01	1
Gehe	Xylose	xrf12020201	4
Gehe	Zinkacetat-Dihydrat	12134803	1
GEHE	Betamethasonvalerat	12229813	2
GEHE	Calciumcitrat-Tetrahydrat	21022141/3	1
GEHE	Carbomer 35000 / 50000	11351616	1
GEHE	Chloralhydrat	21022172/4	1
GEHE	Chloramphenicol	21022141/2	1
GEHE	Chlorocresol	10145219	1
GEHE	Clobetasolpropionat	21022141/1	1
GEHE	Dequaliniumchlorid	9245-90.60	1
GEHE	Dexamethason	12033317	4

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
GEHE	Dexamethasonacetat	12021805	1
GEHE	Emulgierender Cetylstearylal. . .	8440094	1
GEHE	Estradiolbenzoat	12B08-N05	1
GEHE	Kampfer	12K17-N09	1
GEHE	Lactose-Monohydrat	12021508	2
GEHE	Magnesium(hydrogen)citrat	1110026-02	1
GEHE	Methylrosanilinumchlorid	928104	1
GEHE	Natriumedetat	11074702	1
GEHE	Salicylsäure	102455-0002	2
GEHE	Trichloressigsäure	10379406	1
GEHE	Trometamol	11376005	6
GEHE	Walnussblätter, geschn.	21022101/1	1
Gehe / 26.10.12 Fragon	Hypromellose E4M Prem	9D30-N05	1
Gehe 02.07.2013	Glucose, wasserfrei	12294515	1
Gehe 07.10.13	Betamethason, mikronisiert	1201-No2	1
Gehe 27.09.13	Salicylsäure	9220708	1
Gehe/ 27.10.12 EuRho	Menthol	11219216	1
Gehe/EuRho	Clotrimazol	12o3040-03	1
Gesundform	Ascorbinsäure	L1110704	1
ghfgh	Kaliumcitrat	3654645	1
Ginkgo-Apotheke	Betamethasonvalerat	12L11-N01	3
Großhandel	Betamethasonvalerat	12B028-N01	1
Großhandel	Bittere Mandeln	40A100901	1
Großhandel	Chlorhexidindiacetat	12142734	1
Großhandel	Citronensäure, wasserfreie	13K18-B34-291072	1
Großhandel	Clioquinol	11G20-N09	3
Großhandel	Hydrocortison	11L09-N06	2
Großhandel	Hydrocortisonacetat	157000	1
Großhandel	Polymyxin-B-sulfat	1304033-02	1
Großhandel	Testosteron	13G10-N03	1
Großhandel	Testosteron	13610-N03	1
Großhandel	Tetracainhydrochlorid	13H21-B02-286559	1
Haihang Industry	Estriol	20130824	1
Haihang Industry	Prasteron	20130816	4
Haushalt	Saccharose	123456	1
HBK Gesundheit	Maltodextrin	1143	3
HBK Gesundheit	Maltodextrin	2343	1
Hedinger	Antioxidantien NAT Komplex	51901	3
Hedinger	Macrogol 4000	13G19-N08	1
Hedinger	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	204037	1
Hedinger	Natriumsulfat-Decahydrat	205025	1
Hedinger/Ebert	Vanillin	13A30-N10	1
Heidelberger/Noweda	Magnesium(hydrogen)citrat	1070876-2	1
Heidelberger/Noweda	Natriumedetat	12181711	9
hepart ag	Silymarin	1244950401	1
hepart ag	Vitamine Komplex	1015954801	1
hepart ag	Vitamine Komplex	10159548011	1
Hepart AG	Acacia Gum	728201	2
Hepart AG	a-Liponsäure	1313025701	2
Hepart AG	Aminomix NAC	1054019101	3
Hepart AG	Aminomix NAC	41401	3
Hepart AG	Anis	B216346,kbA	1
Hepart AG	Antioxidantien NAT Komplex	30901	2
Hepart AG	Antioxidantien NAT Komplex	67201	1
Hepart AG	Antioxidantien NAT Komplex	52101	5
Hepart AG	Antioxidantien NAT Komplex	52201	3
Hepart AG	Antioxidantien NAT Komplex	67301	3
Hepart AG	Antioxidantien NAT Komplex	1034030901	2
Hepart AG	Antioxidantien NAT Komplex	1037030904	1
Hepart AG	Bioflavonoide Komplex	56001	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Hepart AG	Bioflavonoide Komplex	42501	2
Hepart AG	Bioflavonoide Komplex	68101	1
Hepart AG	Biotin	1592029603	4
Hepart AG	Biotin	29601	2
Hepart AG	Calcium	55401	6
Hepart AG	Calcium	55501	7
Hepart AG	Calcium	55201	2
Hepart AG	Calcium	55301	2
Hepart AG	Catechin-Extrakt	130208020	2
Hepart AG	Catechin-Extrakt	1574018601	1
Hepart AG	Dillfrüchte	L30057kbA	1
Hepart AG	Garcinia Cambogia	7401	2
Hepart AG	Glutathion	1254040201	1
Hepart AG	Isoflavone	1314025704	1
Hepart AG	Isoflavone	1314038801	1
Hepart AG	Isoflavone	56701	1
Hepart AG	Kalium	1124944201	2
Hepart AG	Kümmel	B-224 , kbA	1
Hepart AG	Kupfer	130415-K1	1
Hepart AG	Kupfer	1544007901	1
Hepart AG	Kupfer	1544046401	1
Hepart AG	L-5-HTP	1837999801	2
Hepart AG	L-5-HTP	1837025006	1
Hepart AG	L-Arginin	66501	1
Hepart AG	L-Arginin	1324027802	1
Hepart AG	L-Carnitin	130605301	1
Hepart AG	L-Carnitin	130605300	1
Hepart AG	L-Carnitin	480g	1
Hepart AG	L-Carnitin	1184026001	1
Hepart AG	L-Carnitin	130605301	1
Hepart AG	L-Carnosin	1812045901	2
Hepart AG	L-Glutamin	1815026901	1
Hepart AG	L-Isoleucin	66301	2
Hepart AG	L-Prolin	25707	2
Hepart AG	L-Prolin	707801	2
Hepart AG	L-Tyrosin	74601	1
Hepart AG	L-Tyrosin	1827029501	1
Hepart AG	Methylsulfonylmethan MSM	1819026101	1
Hepart AG	Na-Chondroitinsulfat	1821001801	1
Hepart AG	OPC Grape Seed	70401	2
Hepart AG	Rhodiola	70501	1
Hepart AG	Schwarzkümmelsamen	20720 , kbA	1
Hepart AG	Silymarin	67701	1
Hepart AG	Silymarin	1244029901	1
Hepart AG	Spurenelemente SE	937201	6
Hepart AG	Spurenelemente SE	120435-14	1
Hepart AG	Vitamin B1	1622030202	2
Hepart AG	Vitamin B1	53301	4
Hepart AG	Vitamin B6	1554020101	1
Hepart AG	Vitamin B6	1552025711	2
Hepart AG	Vitamin C	1084025020	4
Hepart AG	Vitamin C	73901	3
Hepart AG	Vitamin C	44601	3
Hepart AG	Vitamin C	44502	8
Hepart AG	Vitamin E NAT	65101	3
Hepart AG	Vitamin E NAT	1094025022	1
Hepart AG	Vitamine Komplex	49202	6
Hepart AG	Vitamine Komplex	1014025101	2
Hepart AG	Walnussblätter, geschn.	A120123	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu. . .	Acacia Gum	1211622002	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	Antioxidantien NAT Komplex	1034019901	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	Catechin-Extrakt	62901	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	Glutathion	1251025703	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	L-Carnitin	1184965901	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	L-Isoleucin	1804968701	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	L-Lysin	1800955002	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	Na-Chondroitinsulfat	1820031801	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	OPC Grape Seed	130208	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	Silymarin	1241046101	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	Vitamin C	1084025019	1
Hepart AG, CH-8280 Kreu...	Vitamin D3	1336008101	2
Herbasin	Ban Zhi Lian	G224H0528022	1
Herbasin	Ma Huang Gen	G278H1102121	5
Herbasinica	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	11G05-N02	3
Herbasinica	Ban Lan Gen	GENTIANAEMACROPHYLL	1
Herbasinica	Betamethasonvalerat	13g19-n01	2
Herbasinica	Bu Gu Zhi	110501G154-618631700	2
Herbasinica	Bu Gu Zhi	110501G154	8
Herbasinica	Cimicifugawurzelstock, geschn.	nachprüfung	1
Herbasinica	Diltiazemhydrochlorid	nachprüfung	1
Herbasinica	Gu Ya	H1513921	1
Herbasinica	Hartfett, pastilliert	nachprüfung	1
Herbasinica	Hong Jing Tian	H0906021	1
Herbasinica	Huang Qin	120301G089	1
Herbasinica	Hydrocortisonacetat	12182403	5
Herbasinica	Hydrocortisonacetat	13291707	2
Herbasinica	Kakaobutter	nachprüfung	1
Herbasinica	Kornblumenblüten ohne Kelch	nachprüfung	1
Herbasinica	Lactose-Monohydrat	12139910	3
Herbasinica	Miconazolnitrat	11324901	2
Herbasinica	Miconazolnitrat	13352801	3
Herbasinica	Mometasonfuroat, mikronisiert	12035602	1
Herbasinica	Povidon-Iod	10090619	1
Herbasinica	Schweres basisches Bismutnit...	nachprüfung	1
Herbasinica	Shi Gao	907540-6191317002	1
Herbasinica	Shou Wu Teng	606431-120301G081	1
Herbasinica	Tormentillwurzelstock, geschn.	nachprüfung	3
Herbasinica	Vogelmierenkraut, geschn.	nachprüfung	2
Herbasinica	Yi Zhi Ren	G015H1051321	1
Herbasinica	Zhu Ling	606831-120301G191	1
Herstellung	Miconazolnitrat	13185602	5
Holder 25.10.2012	Natriumacetat-Trihydrat	12027202	2
Holderman 21.01.2013	Coffeincitrat	12C16-N03	1
Holdermann	Fuchsin	11K18-N02	1
Holdermann	Tormentillwurzelstock, geschn.	12040708	6
holdermann euro	Kaliumhydrogencarbonat	1303002-01	3
Hollborn	Bromthymolblau	III13	1
Hustadt Apotheke	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114922	14
Hustadt Apotheke	Citronensäure, wasserfreie	1350601	1
ICHTHYOL-GESELLSCHAFT	Natriummonohydrogenphosphat-...	Caelo	1
Ichtyol/Phönix	Zinkorotat-Dihydrat	12B02-N02	1
InfectoPharm	Propranololhydrochlorid	J051201	1
InfectoPharm	Propranololhydrochlorid	J0512011	1
Inresa	3,4-Diaminopyridin	580710001	2
Inresa	3,4-Diaminopyridin	508670001	1
Jungbunzlauer	Calciumcitrat-Tetrahydrat	2012290954	1
Jungbunzlauer Ladenburg...	Citronensäure, wasserfreie	1156158	1
Kehr	Clobetasolpropionat	12107603	1
Kehr	Clotrimazol	10247331	1
Kehr	Glucose-Monohydrat	12C26-N06	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Kehr	Harnstoff	CH4N20	1
Kehr	Hartparaffin, Plätzchen	11166916	1
Kehr	Hydrocortison	1219304	1
Kehr	Hydrocortisonacetat	11263906	2
Kehr	Hydroxyethylcellulose (300 m...	110024-02	1
Kehr	Hydroxyethylcellulose (300 m...	211112PML01	1
Kehr	Hypromellose E4M Prem	12098704	1
Kehr	Iodoform	2070602	1
Kehr	Magnesium(hydrogen)citrat	12080206-01	1
Kehr	Metronidazol	1210411	1
Kehr	Metronidazol	11319817	1
Kehr	Mometasonfuroat, mikronisiert	12/29-N03	1
Kehr	Natriummonohydrogenphosphat-...	11K30-N01	1
Kehr	Prednisolonacetat	1158007	1
Kehr	Tretinoin, mikronisiert	1109014-01	1
Kehr	Triamcinolonacetonid	1267708	1
Kehr	Wachs	10F03-N09	1
Kle	Dillfrüchte	2680A110204	1
Klenk	Anis	2700a120320	1
Klenk	Anis	13037805	9
Klenk	Anis	2103311530	1
Klenk	Anis	2901311530	1
Klenk	Anis	2700A12107	1
Klenk	Anis	2700A120320	10
Klenk	Anis	2700A110701	10
Klenk	Anis	1601211530	1
Klenk	Anis	3113Q01530	1
Klenk	Anis	212M-01530	1
Klenk	Anis	nachprüfung	1
Klenk	Anis	814Q01530	1
Klenk	Anis	2700A130527	9
Klenk	Bärlauchkraut, geschn.	3511B111005	1
Klenk	Bismutgallat, basisches	12E16-N03	2
Klenk	Bittere Mandeln	40A111117	4
Klenk	Bittere Mandeln	40A120924	1
Klenk	Bittere Mandeln	40A121010	4
Klenk	Bitterer Fenchel	13020801	3
Klenk	Bitterer Fenchel	2860A140224	1
Klenk	Bockshornsamen, gepulvert	7264A110201	3
Klenk	Bockshornsamen, gepulvert	A110201	1
Klenk	Brennnesselsamen	7470A110418	1
Klenk	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1107012-02	4
Klenk	Ceylon-Zimt, echter Kaneel, ...	614B121010	2
Klenk	Ceylon-Zimt, echter Kaneel, ...	614a120411	1
Klenk	Ceylon-Zimt, echter Kaneel, ...	614b121024	1
Klenk	Ceylon-Zimt, echter Kaneel, ...	614B120411	1
Klenk	Ceylon-Zimt, echter Kaneel, ...	614B121024	4
Klenk	Chloramphenicol	11370711	10
Klenk	Cimicifugawurzelstock, geschn.	B130528	1
Klenk	Cimicifugawurzelstock, geschn.	6721b130528	1
Klenk	Cimicifugawurzelstock, geschn.	6721B130528	3
Klenk	Cimicifugawurzelstock, geschn.	3794377	1
Klenk	Cimicifugawurzelstock, geschn.	6721B130214	9
Klenk	Curcumawurzelstock, geschn.	6741B121030	1
Klenk	Curcumawurzelstock, geschn.	6741a110202	1
Klenk	Dillfrüchte	2680A-120312	1
Klenk	Dillfrüchte	2680a120312	1
Klenk	Dillfrüchte	A120312	1
Klenk	Dillfrüchte	2680A121211	3
Klenk	Dillfrüchte	2680A120312	6

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Klenk	Dillspitzen, geschn.	3531B110726	1
Klenk	Eichenrinde, geschn.	761A110816	2
Klenk	Eichenrinde, geschn.	761A090420	1
Klenk	Flohsamen	7380a111018	1
Klenk	Flohsamen	A120911	1
Klenk	Flohsamen	A130128	1
Klenk	Flohsamen	7560a120330	1
Klenk	Flohsamen	7560A130418	1
Klenk	Flohsamen	7380a120109	5
Klenk	Flohsamen	A120109	1
Klenk	Flohsamen	7380A120911	5
Klenk	Flohsamen	7380A120109	17
Klenk	Flohsamen	7380A111018	1
Klenk	Gelbwurz, javanisch, geschn.	B130117	1
Klenk	Gewürznelken	A120328	1
Klenk	Gewürznelken	1260A100617	2
Klenk	Gewürznelken	1260A110608	5
Klenk	Gewürznelken	1260A120328	2
Klenk	Gewürznelken	PZN03485222	1
Klenk	Gewürznelken	pzn03485222	1
Klenk	Gewürznelken	pzn3485222	1
Klenk	Ginkgoblätter, geschn.	2461B111108	1
Klenk	Ginkgoblätter, geschn.	2461A100429	5
Klenk	Glucose-Monohydrat	4298924	1
Klenk	Hamamelisblätter, geschn.	B110214	1
Klenk	Holunderbeeren	3010N120921	1
Klenk	Indische Flohsamen	7560A120828	4
Klenk	Indische Flohsamen	7560A120330	1
Klenk	Ingwerwurzelstock, geschält,...	6954B110801	1
Klenk	Ingwerwurzelstock, geschält,...	B121030	2
Klenk	Isländisches Moos, geschn.	5191A130116	1
Klenk	Johannisbeeren, schwarze	A121106	1
Klenk	Kaliumcitrat	11102219	1
Klenk	Koriander	2790A121023	4
Klenk	Koriander	2790a121023	1
Klenk	Koriander	A121023	3
Klenk	Kümmel	2770A110818	6
Klenk	Kümmel	2770A120403	10
Klenk	Kümmel	1810A-01537	1
Klenk	Kümmel	2770A110601	9
Klenk	Kümmel	2770A130521	7
Klenk	Kümmel	nachprüfung	2
Klenk	Kümmel	5213A1537	1
Klenk	Kümmel	412091-1-P	1
Klenk	Kümmel	A120905	3
Klenk	Kümmel	2770a120905	2
Klenk	Lapachorinde, geschn.	13298302	1
Klenk	Lärchenschwamm	1061a120312	1
Klenk	Leinsamen	7308A130110	5
Klenk	Leinsamen	7308A111107	5
Klenk	Leinsamen	7308A100705	1
Klenk	Leinsamen	2002285	1
Klenk	Leinsamen	7307A111107	9
Klenk	Leinsamen	7307A130110	10
Klenk	Leinsamen	7307A130722	3
Klenk	Leinsamen	7307a131104	1
Klenk	Leinsamen	7300a130110	1
Klenk	Leinsamen	7300A100705	1
Klenk	Leinsamen	1910212240	1
Klenk	Leinsamen	903312240	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Klenk	Leinsamen	7307A130124	1
Klenk	Leinsamen	737A130722	1
Klenk	Leinsamen	A130110	1
Klenk	Leinsamen	7307A-130722	1
Klenk	Leinsamen	7307A131104	5
Klenk	Leinsamen	7300A111107	2
Klenk	Leinsamen	7300A130722	3
Klenk	Leinsamen	7307A-130110	1
Klenk	Leinsamen	1913Q-02240	1
Klenk	Leinsamen	7307A131021	1
Klenk	Leinsamen	7307a111107	1
Klenk	Leinsamen	7307A121212	2
Klenk	Leinsamen	7300A130110	3
Klenk	Löwenzahnwurzel, geschn.	N130813	1
Klenk	Löwenzahnwurzel, geschn.	6621N130813	1
Klenk	Löwenzahnwurzel, geschn.	6621A140114	1
Klenk	Löwenzahnwurzel, geschn.	6621A120208	5
Klenk	Löwenzahnwurzel, geschn.	6621A120606	13
Klenk	Löwenzahnwurzel, geschn.	A120606	1
Klenk	Maisgriffel, geschn.	5581A081204	1
Klenk	Maisgriffel, geschn.	A110411	1
Klenk	Maisgriffel, geschn.	5581A111206	1
Klenk	Manna, geschn.	5221A110817	1
Klenk	Manna, geschn.	5221A120509	3
Klenk	Mannit	110402803	1
Klenk	Mönchspfefferfrüchte	A130613	1
Klenk	Mönchspfefferfrüchte	7110A110614	1
Klenk	Mönchspfefferfrüchte	A110614	3
Klenk	Mönchspfefferfrüchte	A120803	1
Klenk	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	7325A120903	2
Klenk	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	7325A130515	1
Klenk	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	7325a120903	1
Klenk	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	A130304	2
Klenk	Muskatnuß, gepulvert (Gewürz)	7325A130304	1
Klenk	Myrrhe	3351A120514	1
Klenk	Oxybuprocainhydrochlorid	3613M-07321	1
Klenk	Petersilienfrüchte	nachprüfung	1
Klenk	Petersilienfrüchte	7370A09120	1
Klenk	Rosmarinblätter, geschn.	2261a130201	1
Klenk	Rosmarinblätter, geschn.	A130201	2
Klenk	Rosmarinblätter, geschn.	2261a120224	4
Klenk	Rosmarinblätter, geschn.	2261A130201	14
Klenk	Rosmarinblätter, geschn.	2261A120224	17
Klenk	Salicylsäure	12134722	1
Klenk	Sandelholz, rotes, geschn. (...)	5961B111219	1
Klenk	Schwarze Senfsamen	7430A120813	2
Klenk	Schwarze Senfsamen, gepulvert	7434A120712	1
Klenk	Schwarze Senfsamen, gepulvert	A130422	1
Klenk	Schwarzer Pfeffer	A130415	2
Klenk	Schwarzkümmelsamen	A120703	1
Klenk	Schwarzkümmelsamen	7330A120703	1
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	84A130304	1
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	94A110512	1
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	64A130304	1
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	104A130304	2
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	64A080218	7
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	104A101116	1
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	64A130304	6
Klenk	Stärke (Reis-, Mais-, Weizen...)	104A120621	1
Klenk	Sulfacetamid	11085904	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Klenk	Süßer Fenchel	2870130304A	1
Klenk	Tang, geschn.	1051A110920	1
Klenk	Tormentillwurzelstock, gepul. . .	6914b120112	1
Klenk	Tormentillwurzelstock, geschn.	6911B111013	7
Klenk	Tormentillwurzelstock, geschn.	6911B131029	3
Klenk	Vogelmierenkraut, geschn.	4551B090528	1
Klenk	Vogelmierenkraut, geschn.	4551b110222	1
Klenk	Wachs	280A13011A	1
Klenk	Wachs	290A081210	1
Klenk	Wachs	290A110803	1
Klenk	Wachs	290A120627	4
Klenk	Wachs	282A120627	1
Klenk	Walnussblätter, geschn.	2111A-120123	1
Klenk	Walnussblätter, geschn.	A130410	1
Klenk	Walnussblätter, geschn.	2111A110816	1
Klenk	Walnussblätter, geschn.	2111A130410	2
Klenk	Weisser Ton	424A130507	1
Klenk	Weisser Ton	45131I01190	1
Klenk	Weisser Ton	424A130507	2
Koisser	Pregnenolon	ZH-130802	1
Krämer&Martin	Calciumlactat-Pentahydrat	11612009053019	1
Krämer&Martin	Citronensäure-Monohydrat	11742009053020	1
kräuter schulte	Ingwerwurzelstock, geschält, . .	6954B121030	2
kräuter schulte	Tormentillwurzelstock, geschn.	51952	1
Kräuter Schulte	Cimicifugawurzelstock, geschn.	3308M-02176	1
Kräuter Schulte	Pu Erh Tee (Roter Tee)	52029	1
Krieger	Chlortetracyclinhydrochlorid	12C16-No1	1
Krieger	Triclosan	12g17-N04	1
Laborchemie Apolda/Jenn. . .	Harnstoff	12345	1
Lohman	Natriumsulfat-Decahydrat	1210005-02	1
Löns Apotheke	Harnstoff	20349	1
meltem	Süßer Fenchel	türkei	1
Merck	Schweres basisches Bismutnit. . .	75419201	1
Nachprüfung	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	13d26-n16	1
Nachprüfung	Methoxsalen	4211Q-03262	1
Nachprüfung	Prasteron	120022	1
Nachprüfung	Tannin	5210A-01052	1
noweda	Anis	11101201	3
noweda	Clobetasolpropionat	1004036-03	1
Noweda	Acetylsalicylsäure	10040403	1
Noweda	Alfatradiol	12D19-N03	2
Noweda	Allantoin	11J11-N11	3
Noweda	Allantoin	13A21-N07	4
Noweda	Allantoin	12B09-N08	2
Noweda	Aluminiumchlorid-Hexahydrat, . . .	1109025-02	4
Noweda	Aluminiumchlorid-Hexahydrat, . . .	12114910	7
Noweda	Aluminiumchlorid-Hexahydrat, . . .	12047503	2
Noweda	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca. . .	12184402	5
Noweda	Ammoniumhydrogencarbonat	11145601	2
Noweda	Anis	11101203	7
Noweda	Anis	521103501	1
Noweda	Atropinsulfat	12250403	1
Noweda	Bentonit	1301012-01	1
Noweda	Betamethason, mikronisiert	M-X01-120301m1	1
Noweda	Betamethasonvalerat	11B21-N02	1
Noweda	Betamethasonvalerat	12229832	1
Noweda	Betamethasonvalerat	12B28-N01	10
Noweda	Betamethasonvalerat	11K18-N09	5
Noweda	Betamethasonvalerat	12G09-N07	21
Noweda	Bitterer Fenchel	12094707	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Noweda	Calciumcitrat-Tetrahydrat	11349309	1
Noweda	Calciumhydrogenphosphat, gep. ...	11287501	1
Noweda	Carmellose-Natrium (400/450/...	12354401	1
Noweda	Chinolingelb E104	11D13-N01	1
Noweda	Chloramphenicol	1137014	1
Noweda	Chlortetracyclinhydrochlorid	12c16-n01	1
Noweda	Chlortetracyclinhydrochlorid	11K25-N13	1
Noweda	Citronensäure, wasserfreie	11F29-N03	3
Noweda	Citronensäure, wasserfreie	12043105	2
Noweda	Citronensäure, wasserfreie	1141364	1
Noweda	Citronensäure, wasserfreie	L1202001-02	1
Noweda	Citronensäure, wasserfreie	10182420	3
Noweda	Citronensäure, wasserfreie	12043110	2
Noweda	Clioquinol	11304112	6
Noweda	Clioquinol	1201034-02	6
Noweda	Clioquinol	120103401	1
Noweda	Clioquinol	10057206	1
Noweda	Clobetasolpropionat	NR0671M	2
Noweda	Clobetasolpropionat	11300702	4
Noweda	Clobetasolpropionat	12E08-N04	14
Noweda	Clobetasolpropionat	11101312	1
Noweda	Clotrimazol	12E02-N12	11
Noweda	Clotrimazol	20111115	2
Noweda	Clotrimazol	11K21-N19	4
Noweda	Clotrimazol	10247316	1
Noweda	Clotrimazol	1203040-03	9
Noweda	Coffeincitrat	CCC-1101	1
Noweda	Dequaliniumchlorid	12b14-n05	1
Noweda	Diclofenac-Natrium	11301804	1
Noweda	Diclofenac-Natrium	11G12-N06	1
Noweda	Diltiazemhydrochlorid	12133029	3
Noweda	Diltiazemhydrochlorid	12D05-N07	12
Noweda	Diphenhydraminhydrochlorid	12007716	1
Noweda	Dithranol	APDT/375/2012	1
Noweda	Dithranol	1203025-02	13
Noweda	Emulgierender Cetylstearylal. ...	12065705	1
Noweda	Erythromycin	12E24-N04	17
Noweda	Erythromycin	11195413	1
Noweda	Glucose-Monohydrat	1204044-01	6
Noweda	Glucose-Monohydrat	12G30-N01	8
Noweda	Glucose-Monohydrat	11K16-N01	2
Noweda	Glucose-Monohydrat	1210034	1
Noweda	Glucose-Monohydrat	11B22-N06	1
Noweda	Harnstoff	11150725	4
Noweda	Harnstoff	12111807	6
Noweda	Harnstoff	4109M-02544	1
Noweda	Hydrocortison	12104303	6
Noweda	Hydrocortisonacetat	11263912	1
Noweda	Hydrocortisonacetat	11F24-N12	1
Noweda	Hydrocortisonacetat	HCA003/0611	1
Noweda	Hydroxyethylcellulose (300 m. ...	1108027-01	2
Noweda	Hydroxyethylcellulose (300 m. ...	12156907	10
Noweda	Indische Flohsamen	7560A110125	1
Noweda	Iodoform	10320402	1
Noweda	Iodoform	12070407	1
Noweda	Isosorbiddinitrat 40%	10G15-N01	1
Noweda	Kakaobutter	11117813	3
Noweda	Kaliumhydrogencarbonat	1004019-01	1
Noweda	Kaliumsorbit	12211107	11
Noweda	Koriander	13010302	4

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Noweda	Koriander	12080902	1
Noweda	Kümmel, zerstoßen	12116904	3
Noweda	Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat...	12B09-N10	1
Noweda	Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat...	11F21-N03	1
Noweda	Lactose-Monohydrat	1106022-02	3
Noweda	Leinsamen	11365504	2
Noweda	Lidocain	5308e-07003	1
Noweda	Lidocainhydrochlorid	11/19-N06	1
Noweda	Macrogol 4000	12361502	2
Noweda	Macrogol 4000	12361512	3
Noweda	Macrogol 4000	13136003	1
Noweda	Magnesium(hydrogen)citrat	10163306	1
Noweda	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	11H01-N03	1
Noweda	Magnesiumstearat	13D11-N08	1
Noweda	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1109023-01	1
Noweda	Manna, gepulvert	11170102	1
Noweda	Mannit	12105421	8
Noweda	Mannit	11219138	1
Noweda	Mannit	12105405	3
Noweda	Mannit	12105404	4
Noweda	Mannit	11219124	3
Noweda	Mannit	11219115	2
Noweda	Melatonin	11267111	3
Noweda	Melatonin	11267119	2
Noweda	Melatonin	11267126	4
Noweda	Melatonin	11267102	2
Noweda	Methyl-4-hydroxybenzoat	11345115	9
Noweda	Methyl-4-hydroxybenzoat	10113607	1
Noweda	Methyl-4-hydroxybenzoat	11090002	2
Noweda	Methyl-4-hydroxybenzoat	11090021	1
Noweda	Methyl-4-hydroxybenzoat	21022111/1	1
Noweda	Methyl-4-hydroxybenzoat	11090010	1
Noweda	Methylrosanilinumchlorid	9238101	1
Noweda	Methylrosanilinumchlorid	9238104	1
Noweda	Metronidazol	12110404	1
Noweda	Metronidazol	11319824	2
Noweda	Metronidazol	12110415	6
Noweda	Metronidazol	12110405	6
Noweda	Metronidazol	12339501	2
Noweda	Metronidazol	11J07-N07	2
Noweda	Miconazolnitrat	12K02-N06	6
Noweda	Miconazolnitrat	12A16-N02	7
Noweda	Minoxidil	12C29-N05	3
Noweda	Minoxidil	11150207	2
Noweda	Molekulardestilliertes Glyce...	11160010	1
Noweda	Natriumedetat	601H1300	4
Noweda	Natriumhydrogencarbonat, gep...	11197801	1
Noweda	Nicotinamid	12133403	2
Noweda	Nystatin	1207009-01	2
Noweda	Oxalsäure	12212402	1
Noweda	Paraffin, mikrokristallin	12266304	2
Noweda	Patentblau V, E131	10273001	1
Noweda	Patentblau V, E131	11138402	1
Noweda	Petersilienfrüchte	7370A091120	3
Noweda	Pilocarpinhydrochlorid	11037801	1
Noweda	Pilocarpinhydrochlorid	10CD04	1
Noweda	Poloxamer 407	13133201	1
Noweda	Povidon-Iod	G0354BPZ0	1
Noweda	Prednisolon 1:10 Verreibung ...	11L13-N06	1
Noweda	Prednisolonacetat	1209028-01	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Noweda	Prednisolonacetat	11I09-N08	1
Noweda	Propranololhydrochlorid	155.288	1
Noweda	Propranololhydrochlorid	11L01-N05	3
Noweda	Rosmarinblätter, geschn.	2261A100916	2
Noweda	Saccharose	12241803	3
Noweda	Saccharose	12241801	2
Noweda	Salicylsäure	11197105	1
Noweda	Salicylsäure	12036210	3
Noweda	Salicylsäure	11311903	3
Noweda	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12009706	1
Noweda	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12350204	3
Noweda	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12208604	1
Noweda	Schwarze Senfsamen, gepulvert	12208602	2
Noweda	Sorbinsäure	12038016	6
Noweda	Sorbinsäure	12038020	7
Noweda	Talkum	1205046-01	3
Noweda	Tannin	11G01-N08	1
Noweda	Testosteronpropionat	11K18-N04	7
Noweda	Tetracainhydrochlorid	1106035-02	1
Noweda	Tetracainhydrochlorid	1106035-01	4
Noweda	Tetracainhydrochlorid	120700-02	1
Noweda	Tetracainhydrochlorid	11/15-N12	2
Noweda	Tetracyclinhydrochlorid	1204039-01	4
Noweda	Thymol	12k01-no2	1
Noweda	Tragant, gepulvert	12108807	1
Noweda	Tretinoin, mikronisiert	12023302	10
Noweda	Triamcinolonacetonid	1112023-02	7
Noweda	Triamcinolonacetonid	12301506	1
Noweda	Triclosan	11L19-N11	3
Noweda	Trometamol	12113502	2
Noweda	Wachs	12124801	5
Noweda	Wachs	280A120627	3
Noweda	Wachs	11308305	2
Noweda	Walnussblätter, geschn.	11103007	4
Noweda	Walnussblätter, geschn.	11103004	3
Noweda	Walnussblätter, geschn.	10050414	1
Noweda	Weinsäure	11G19-N08	1
Noweda	Xylometazolinhydrochlorid	12287203	9
Noweda	Xylometazolinhydrochlorid	12027902	1
Noweda / 28.10.13 EuRho	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1211022-01	4
Noweda/ Fischar	Weinsäure	702061	1
Orgamol Pharma	Tetracainhydrochlorid	6093547	1
Otto Fischer	Weinsäure	7020601	1
Pfannenschmidt	Lithiumorotat-Monohydrat	ORL00212	1
Phagron	Mannit	1302C004-279405	1
pharm-a-speres	Saccharose	8731003	1
Phoenix, Jembke	Bismutgallat, basisches	10135101	1
Phonix	Poloxamer 407	12/13-N10	1
Phönix	Acetylsalicylsäure	12145402	1
Phönix	Alfatradiol	APXPC0071A	3
Phönix	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12L11-N03	3
Phönix	Aluminiumkaliumsulfat-Dodeca...	110804902	1
Phönix	Anis	13037803	1
Phönix	Anis	11370302	4
Phönix	Arginin	L1302006-01	1
Phönix	Benzocain	13F06-N10	1
Phönix	Betamethasonvalerat	12229807	1
Phönix	Betamethasonvalerat	13091201	2
Phönix	Betamethasonvalerat	13091209	4
Phönix	Bismutgallat, basisches	12-13-N11	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Phönix	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1111036-01	4
Phönix	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1305018-01	3
Phönix	Carmellose-Natrium (400/450/...	12354416	1
Phönix	Chloramphenicol	1302024-01	5
Phönix	Chloramphenicol	10341710	1
Phönix	Cinchocainhydrochlorid	13E13-N07	1
Phönix	Citronensäure, wasserfreie	13A04-N04	11
Phönix	Clioquinol	1102022-02	4
Phönix	Dexamethason	12033306	2
Phönix	Dexamethason	12033314	7
Phönix	Dexamethason	120303201	1
Phönix	Diltiazemhydrochlorid	12176801	4
Phönix	Diltiazemhydrochlorid	13196106	4
Phönix	Eichenrinde, geschn.	11351202	4
Phönix	Erythromycin	120503501	1
Phönix	Erythromycin	1205036-02	7
Phönix	Fructose	12K28-N06	3
Phönix	Furosemid	12a18-n03	1
Phönix	Histamindihydrochlorid	12e29n09	1
Phönix	Hydrocortisonacetat	1107004-01	1
Phönix	Hydrocortisonacetat	110700403	1
Phönix	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	12156902	3
Phönix	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	111002403	1
Phönix	Kaliumcitrat	12135310	4
Phönix	Ketoconazol	13179602	3
Phönix	Ketoconazol	12171018	1
Phönix	Kümmel	12226609	2
Phönix	Lactose-Monohydrat	13299102	9
Phönix	Lidocainhydrochlorid	1202035-03	6
Phönix	Magnesiumsulfat-Heptahydrat	1303008-01	3
Phönix	Mannit	12305723	3
Phönix	Mannit	1211034-02	9
Phönix	Mannit	12051601	1
Phönix	Mannit	120501602	2
Phönix	Menthol	12246204	2
Phönix	Menthol	13159105	5
Phönix	Minoxidil	1203035-02	7
Phönix	Naloxonhydrochlorid Dihydrat	13L12-B03-289511	1
Phönix	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	13390515	1
Phönix	Natriummonohydrogenphosphat-. . .	13028101	1
Phönix	Nystatin	12158010	4
Phönix	Nystatin	1212024-01	11
Phönix	Paraffin, mikrokristallin	13274301	1
Phönix	Polymyxin-B-sulfat	1202039-01	3
Phönix	Prednisolonacetat	11158008	1
Phönix	Tannin	10315110	2
Phönix	Tetracain Base	1303018-01	1
Phönix	Tetracainhydrochlorid	130301201	2
Phönix	Tretinoin, mikronisiert	1109014-02	2
Phönix	Triclosan	1202018-01	3
Phönix	Wachs	12367904	5
Phönix	Wachs	13031206	5
Phönix	Weinsäure	12286904	1
Phönix 05.11.2012	Sorbitol	1112010-01	1
Phönix 10.01.2013	Dexamethason	12165803	2
Phönix 11.11.2014	Chloramphenicol	12448509	1
Phönix 13.11.12	Diltiazemhydrochlorid	11A17-N13	1
Phönix 17.09.12	Arginin	1110017-01	1
Phönix 18.10.2013	Natriumdihydrogenphosphat-Di. . .	12198512	1
Phönix 22.11.2012	Isosorbiddinitrat 40%	11F28-N05	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Phönix 27.04.2013	Erythromycin	12J30-N01	11
Phönix, 02.10.13	Metronidazol	12339508	2
Phönix, 10.05.2013	Aluminiumchlorid-Hexahydrat,...	12114912	6
Phönix, 14.10.2013	Mometasonfuroat, mikronisiert	12351207	1
Phönix, 23.05.2013	Cholesterol	12155605	2
Phönix, 25.09.2013	Isosorbiddinitrat 40%	12K14-N02	5
Phönix, 28.10.2013	Clotrimazol	1210039-02	13
Phönix/ henry lamotte	Clotrimazol	12159911	3
phythocom	Bai Zi Ren	G052F110315	1
phythocom	Lu Jiao Shuang	G062H1419321	1
phythocom	Ma Huang Gen	g278h1102121	1
phythocom	She Chuang Zi	G076H1154122	1
phythocom	Yuan Zhi	g194h1406222	1
phytocomm	Bai Guo	G114H0509022	1
phytocomm	Bai He	H0607021	3
phytocomm	Chuan Bei Mu	G107BP020722A	1
phytocomm	Chuan Mu Tong	G009H0310121	4
phytocomm	Chuan Xiong	G136H0305121	5
phytocomm	E Jiao	G036H0861022	2
phytocomm	Fang Feng	H0728922	2
phytocomm	Fu Xiao Mai	H1078021	2
phytocomm	Ge Gen	FA1301902	4
phytocomm	Gu Ya	G177H1513021	2
phytocomm	Huo Xiang	H2005021	4
phytocomm	Jiang Huang	G085H1716022	3
phytocomm	Long Yan Rou	H1708922	2
phytocomm	Lu Jiao Jiao	g323h1158121	1
phytocomm	Lu Rong	G296BP031136	1
phytocomm	Ma Huang Gen	h1102021	1
phytocomm	Mi Meng Hua	G054BP021404	2
phytocomm	San Qi	G203H0312021	2
phytocomm	Shan Zha	G082H0331022	6
phytocomm	Shen Qu	G156H0935023	2
phytocomm	Shi Gao	g120h541024	1
phytocomm	Suo Yang	G260H1439022	1
phytocomm	Tao Ren	G184H1007122	4
phytocomm	Tao Ren	G184H1007023	1
phytocomm	Wu Gong	G311H1411021	3
phytocomm	Wu Mei	H1026021	4
phytocomm	Wu Yao	H1025021	4
phytocomm	Ye Ju Hua	G514H1187021	3
phytocomm	Zi Wan	g038h1215022	1
Phytocomm	(Bai) Dou Kou	G016H0508021	1
Phytocomm	(Bai) Ji Li	H0858021	2
Phytocomm	(Bai) Jiang Can	G269H0513222	3
Phytocomm	(Bai) Jiang Can	g144h1708221	1
Phytocomm	(Bai) Jiang Can	G269H0513121	2
Phytocomm	(Ku) Xing Ren	g029h0708122	1
Phytocomm	(Ku) Xing Ren	161213xr	1
Phytocomm	(Ku) Xing Ren	G029H0708122	5
Phytocomm	Bai Bian Dou	g093h0510221	1
Phytocomm	Bai Guo	G114H0509321	1
Phytocomm	Bai He	g139h0607221	1
Phytocomm	Bai Hua She She Cao	G173H1153222	4
Phytocomm	Bai Mao Gen	G125H0512221	1
Phytocomm	Bai Xian Pi	G090H0515121	3
Phytocomm	Bai Zi Ren	g052f110315	1
Phytocomm	Bai Zi Ren	g952f110315	1
Phytocomm	Ban Lan Gen	G128H0816221	5
Phytocomm	Ban Xia	g191h0526121	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Phytocomm	Ban Xia	G191H0526121	7
Phytocomm	Ban Xia	G191H0526023	1
Phytocomm	Ban Zhi Lian	G224H0528221	1
Phytocomm	Cang Er Zi	H1401021	1
Phytocomm	Cang Er Zi	G251H1401322	1
Phytocomm	Cang Er Zi	G251H1401123	3
Phytocomm	Cang Er Zi	g251h1401021	1
Phytocomm	Ce Bai Ye	G050H0975021	2
Phytocomm	Chai Hu	G055H1055123	5
Phytocomm	Chai Hu	H1055022	2
Phytocomm	Chai Hu	g055h1055123	1
Phytocomm	Chan Tui	G067H1817121	2
Phytocomm	Che Qian Zi	410704805	2
Phytocomm	Chong Wei Zi	G317BP021046	1
Phytocomm	Chuan Bei Mu	G107F110721	1
Phytocomm	Chuan Bei Mu	g107f110721	1
Phytocomm	Chuan Mu Tong	g009h0310321	1
Phytocomm	Chuan Niu Xi	g318h0431321	1
Phytocomm	Chuan Xiong	G135H0305121	1
Phytocomm	Chuan Xiong	G136H305121	1
Phytocomm	Chuan Xiong	g136h0305121	1
Phytocomm	Da Huang	g212h0320023	1
Phytocomm	Da Huang	G212H0320321	2
Phytocomm	Dan Zhu Ye	G046H110521	1
Phytocomm	Dan Zhu Ye	G046H1105021	2
Phytocomm	Dan Zhu Ye	G046H1105321	2
Phytocomm	Dang Gui	G022H1306023	1
Phytocomm	Dang Gui	G022H1306121	2
Phytocomm	Dang Gui	g022h1306121	3
Phytocomm	Dang Gui	G022H1306022	6
Phytocomm	Dang Shen	G077H2001022	2
Phytocomm	Dang Shen	G077H2001222	2
Phytocomm	Deng Xin Cao	G306F100617	1
Phytocomm	Deng Xin Cao	f100707	1
Phytocomm	Di Fu Zi	G131H0605122	3
Phytocomm	Di Gu Pi	G149H0601122	3
Phytocomm	Di Long	G148H0603022	3
Phytocomm	Di Long	G148H0603321	1
Phytocomm	Di Yu	G2150604121	1
Phytocomm	Ding Xiang	H0210921	1
Phytocomm	Dong Gua Zi	G049H0551221	5
Phytocomm	Dong Gua Zi	G049H0551021	1
Phytocomm	E Jiao	g036h0861121	1
Phytocomm	E Zhu	H1110021	4
Phytocomm	E Zhu	h1110021	1
Phytocomm	E Zhu	G083H111022	1
Phytocomm	Erythromycin	1203ery	1
Phytocomm	Fang Feng	g217h0728923	1
Phytocomm	Fang Feng	G217H0728923	6
Phytocomm	Fang Feng	g217h0728221	1
Phytocomm	Fang Feng	G217H728923	1
Phytocomm	Fang Feng	G21H0728923	1
Phytocomm	Fu Pen Zi	g213h1813122	1
Phytocomm	Fu Pen Zi	G213H1813122	1
Phytocomm	Fu Shen	G201H1021321	2
Phytocomm	Fu Shen	g201h1021321	1
Phytocomm	Fu Xiao Mai	G244H1078121	1
Phytocomm	Gan Cao	G119H0521121	3
Phytocomm	Gan Cao	g119h0521121	1
Phytocomm	Ge Gen	161213gg	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Phytocomm	Ge Gen	G206H1301221	1
Phytocomm	Gu Sui Bu	G094H1011221	1
Phytocomm	Gu Sui Bu	g094h1011023	1
Phytocomm	Gu Sui Bu	G094H1011023	3
Phytocomm	Gua Lou Ren	G243H1095123	1
Phytocomm	Gua Lou Ren	g243h1095123	1
Phytocomm	Gui Zhi	H1001022	8
Phytocomm	Gui Zhi	G070H1001221	3
Phytocomm	Hai Tong Pi	G100H1076221	2
Phytocomm	Hartfett, pastilliert	209314	1
Phytocomm	He Zi	G291H1239221	2
Phytocomm	He Zi	G291H1239021	2
Phytocomm	Hong Hua	G057H0901221	2
Phytocomm	Hong Hua	G057H0901121	3
Phytocomm	Hong Hua	g057h0901121	2
Phytocomm	Hong Hua	41024032/2	1
Phytocomm	Hong Jing Tian	G237H0906321	1
Phytocomm	Hong Jing Tian	G237H0906221	3
Phytocomm	Huang Jing	g196h1206121	1
Phytocomm	Huang Jing	G196H1206121	2
Phytocomm	Huang Lian	G079H1205021	1
Phytocomm	Huang Qi	g040h1202321	2
Phytocomm	Huang Qi	H1202021	5
Phytocomm	Huang Qi	G040H1202222	8
Phytocomm	Huang Qin	g225h1204121	1
Phytocomm	Huang Qin	G225H1204121	5
Phytocomm	Huang Qin	G225H1204022	6
Phytocomm	Huang Qin	161213hq	1
Phytocomm	Ji Nei Jin	G259H2102023	3
Phytocomm	Ji Xue Teng	H2101923	1
Phytocomm	Ji Xue Teng	G159H2101122	5
Phytocomm	Ji Xue Teng	g159h2101122	1
Phytocomm	Jiang Huang	G085H1716122	3
Phytocomm	Jin Yin Hua	G145H0845321	1
Phytocomm	Jin Yin Hua	G145H0845021	1
Phytocomm	Jin Yin Hua	G145H0845022	4
Phytocomm	Ku Shen	h0908121	1
Phytocomm	Ku Shen	G233H0908121	5
Phytocomm	Ku Shen	FA0908901	1
Phytocomm	Lai Fu Zi	G209H1220221	1
Phytocomm	Lai Fu Zi	G209H1220022	3
Phytocomm	Lian Zi	411502701	1
Phytocomm	Long Yan Rou	G144H1708221	2
Phytocomm	Lu Gen	G189H2014221	4
Phytocomm	Lu Jiao Jiao	G323H1158022	1
Phytocomm	Lu Jiao Jiao	G323H1158121	2
Phytocomm	Lu Jiao Shuang	FB1419901	1
Phytocomm	Lu Lu Tong	G142H1336122	4
Phytocomm	Ma Huang	G097H1101223	3
Phytocomm	Mai Ya	g123h1119022	1
Phytocomm	Mai Ya	G123H1119122	3
Phytocomm	Man Jing Zi	G250H1505122	1
Phytocomm	Man Jing Zi	G250H1505121	1
Phytocomm	Man Jing Zi	H1505922	1
Phytocomm	Mu Zei	G265H0427823	2
Phytocomm	Pang Da Hai	G529H0960023	2
Phytocomm	Pi Pa Ye	G099H0832221	3
Phytocomm	Qian Shi	G102H0836121	4
Phytocomm	Qiang Huo	G172H0840321	2
Phytocomm	Qiang Huo	g172h0841321	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Phytocomm	Rou Gui	H0617022	3
Phytocomm	Rou Gui	G069H0617123	2
Phytocomm	Ru Xiang	G174H0820123	1
Phytocomm	San Leng	g270h0311221	1
Phytocomm	San Leng	G270H0311121	1
Phytocomm	San Leng	H0311922	1
Phytocomm	Sang Bai Pi	G161H1042922	1
Phytocomm	Sang Bai Pi	G161H1042321	2
Phytocomm	Sang Shen	G163H1047121	2
Phytocomm	Sang Ye	421013801	1
Phytocomm	Sang Ye	G162H1043121	5
Phytocomm	Sha Ren	G018H0939321	1
Phytocomm	Sha Ren	g018h0939321	1
Phytocomm	Sha Shen (Bei)	G117H0754121	5
Phytocomm	Shan Zha	G082H0331324	2
Phytocomm	She Gan	G048H1034122	2
Phytocomm	Sheng Jiang	G253H0534221	3
Phytocomm	Sheng Ma	g068h04317121	1
Phytocomm	Sheng Ma	G068H0437121	3
Phytocomm	Shi Gao	G120H0541223	6
Phytocomm	Shi Gao	G120H051024	1
Phytocomm	Shi Wei	H0543021	2
Phytocomm	Suan Zao Ren	g254h1418121	2
Phytocomm	Suan Zao Ren	G254H1418121	3
Phytocomm	Suo Yang	G260H1831121	2
Phytocomm	Tai Zi Shen	G204H0446221	2
Phytocomm	Tao Ren	g184h1007122	1
Phytocomm	Tian Nan Xing	G028H0420922	2
Phytocomm	Ting Li Zi	H1340022	1
Phytocomm	Tong Cao	G531H114021	2
Phytocomm	Tong Cao	G531H1141021	1
Phytocomm	Tu Si Zi	161213tsz	1
Phytocomm	Tu Si Zi	h1243022	1
Phytocomm	Tu Si Zi	H1243022	2
Phytocomm	Tu Si Zi	H1243923	1
Phytocomm	Wang Bu Liu Xing	G281H0456221	3
Phytocomm	Wang Bu Liu Xing	H0456021	2
Phytocomm	Wu Jia Pi	H042021	1
Phytocomm	Wu Mei	G167H1026121	2
Phytocomm	Wu Yao	g140h1025221	1
Phytocomm	Wu Zhu Yu	G103H0766022	4
Phytocomm	Wu Zhu Yu	G13H0766021	1
Phytocomm	Wu Zhu Yu	G103H0766021	2
Phytocomm	Xi Yang Shen	g324h0647321	1
Phytocomm	Xi Yang Shen	G324H0647021	2
Phytocomm	Xi Yang Shen	G324H0647321	2
Phytocomm	Xia Ku Cao	H1064922	1
Phytocomm	Xia Ku Cao	G202H1064022	1
Phytocomm	Xia Ku Cao	g202h1064121	1
Phytocomm	Xian Mao	G304H0549321	1
Phytocomm	Xue Jie	G322H0631921	1
Phytocomm	Yan Hu Suo	G081H0805221	2
Phytocomm	Yan Hu Suo	g081f1000301	1
Phytocomm	Ye Jiao Teng	g228h0085223	1
Phytocomm	Ye Jiao Teng	H0885922	1
Phytocomm	Ye Jiao Teng	G288H0885223	1
Phytocomm	Yi Mu Cao	g134h1050024	1
Phytocomm	Yi Mu Cao	G134H1050024	3
Phytocomm	Yi Yi Ren	G078H1701222	3
Phytocomm	Yin Chen Hao	G034H1030121	4

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Phytocomm	Yin Xing Ye	G518H1445021	1
Phytocomm	Yu Jin	422901803	1
Phytocomm	Yuan Zhi	G194H1406222	1
Phytocomm	Yuan Zhi	421401802	1
Phytocomm	Yuan Zhi	g194h140622	1
Phytocomm	Ze Lan	G268H1606022	3
Phytocomm	Ze Lan	g268h1606221	1
Phytocomm	Zhi Shi	G044H0922121	2
Phytocomm	Zhi Shi	g044h0922221	1
Phytocomm	Zhi Shi	G044H0922221	3
Phytocomm	Zhu Ru	g047h0625321	1
Phytocomm	Zhu Ru	G047H0625122	2
Phytocomm	Zhu Ru	G=/h=&%!	1
Phytocomm	Zi Wan	H1215021	2
PhytoComm	(Bai) Ji Li	G240H1410221	1
PhytoComm	(Bai) Jiang Can	H0513021	3
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708125	3
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708322	1
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H0708024	3
PhytoComm	(Ku) Xing Ren	G029H708125	1
PhytoComm	Bai Bian Dou	H0510921	1
PhytoComm	Bai He	G139H0607321	1
PhytoComm	Bai Hua She She Cao	H1153923	2
PhytoComm	Bai Tou Weng	G207H0511221	1
PhytoComm	Bai Xian Pi	H0515921	3
PhytoComm	Ban Lan Gen	H0816922	1
PhytoComm	Ban Lan Gen	G128H0816022	3
PhytoComm	Ban Zhi Lian	H0528021	1
PhytoComm	Cang Er Zi	G251H1401021	3
PhytoComm	Cao Guo	E241050	1
PhytoComm	Chai Hu	G044H1055322	1
PhytoComm	Chai Hu	G055H1055322	1
PhytoComm	Chan Tui	G067H1817322	1
PhytoComm	Chan Tui	G06H1817121	1
PhytoComm	Che Qian Zi	G192H0723121	2
PhytoComm	Che Qian Zi	G192H0723321	2
PhytoComm	Chong Wei Zi	E341046	1
PhytoComm	Chuan Bei Mu	H0711921	1
PhytoComm	Chuan Mu Tong	H0310021	1
PhytoComm	Chuan Niu Xi	H0431923	3
PhytoComm	Chuan Niu Xi	G318H0431321	1
PhytoComm	Chuan Xin Lian	G321FB0963321	1
PhytoComm	Chuan Xiong	G136H0305221	3
PhytoComm	Cong Bai	424348	2
PhytoComm	Da Huang	G212H0320023	2
PhytoComm	Dan Dou Chi	G232H1106321	1
PhytoComm	Dan Zhu Ye	H1105921	1
PhytoComm	Dang Gui	G022H1306321	1
PhytoComm	Dang Shen	H2001021	3
PhytoComm	Deng Xin Cao	F100707	1
PhytoComm	Di Fu Zi	G131H0605021	1
PhytoComm	Di Gu Pi	H0601821	1
PhytoComm	Di Long	G148H603321	1
PhytoComm	Di Yu	803512	5
PhytoComm	Di Yu	1202636	1
PhytoComm	Ding Xiang	G058h0210021	1
PhytoComm	Dong Kui Zi	G001BP030505	1
PhytoComm	E Jiao	G036H0861221	2
PhytoComm	E Jiao	G036H0861121	2
PhytoComm	E Zhu	(083)H1110021	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
PhytoComm	E Zhu	G083H1110222	1
PhytoComm	Fang Feng	G217H0728221	2
PhytoComm	Fu Pen Zi	H1813021	1
PhytoComm	Gan Cao	H0521923	1
PhytoComm	Geng Mi	414161	1
PhytoComm	Geng Mi	G329H1320121	1
PhytoComm	Gou Qi Zi	G150H0913023	1
PhytoComm	Gu Sui Bu	(G094)H1011221	1
PhytoComm	Gui Ban Jiao	G326H2205221	1
PhytoComm	Han Lian Cao	G095H0770121	3
PhytoComm	Han Lian Cao	G263H1423121	1
PhytoComm	He Shou Wu	G198H0718222	2
PhytoComm	He Shou Wu	H0718021	1
PhytoComm	He Shou Wu	(G198)H0718222	1
PhytoComm	Huang Lian	FA1205702	1
PhytoComm	Huang Lian	G079H1205321	3
PhytoComm	Huang Lian	H1205021	3
PhytoComm	Huang Qi	G040H1202321	4
PhytoComm	Huang Qin	G225H1204221	4
PhytoComm	Huang Qin	G225H1204322	2
PhytoComm	Huo Ma Ren	G141H0449121	2
PhytoComm	Ji Nei Jin	H2102021	1
PhytoComm	Jiang Huang	G085H1716321	2
PhytoComm	Ju Hua	G064H1231021	2
PhytoComm	Kuan Dong Hua	H1219921	2
PhytoComm	Lai Fu Zi	H1220922	2
PhytoComm	Lai Fu Zi	G209H1220321	1
PhytoComm	Lian Qiao	G105H1132221	2
PhytoComm	Lian Qiao	H1132022	2
PhytoComm	Ling Zhi	G109FB2405321	1
PhytoComm	Ling Zhi	G109F-B2405221	2
PhytoComm	Ling Zhi	FA2405901	1
PhytoComm	Lu Gen	F100708	2
PhytoComm	Lu Jiao Jiao	G323H1158321	1
PhytoComm	Lu Lu Tong	G142GH1336022	1
PhytoComm	Lu Lu Tong	g142h1336122	1
PhytoComm	Ma Chi Xian	G255F110310	2
PhytoComm	Ma Huang	H1101023	3
PhytoComm	Ma Huang Gen	H1102021	2
PhytoComm	Mai Ya	H1119922	1
PhytoComm	Mai Ya	G123H1119022	2
PhytoComm	Man Jing Zi	h1505021	1
PhytoComm	Man Jing Zi	H150922	1
PhytoComm	Mu Zei	H0427822	1
PhytoComm	Niu Bang Zi	H0433021	4
PhytoComm	Niu Bang Zi	G026H0433222	3
PhytoComm	Niu Bang Zi	G026H0433321	1
PhytoComm	Pi Pa Ye	H0832922	2
PhytoComm	Pu Gong Ying	G239H1315321	2
PhytoComm	Pu Gong Ying	H1315923	1
PhytoComm	Qian Shi	H0836921	1
PhytoComm	Qiang Huo	H0840922	2
PhytoComm	Ren Dong Teng	H0751922	1
PhytoComm	Ren Dong Teng	G297H0751222	1
PhytoComm	Rou Cong Rong	444151	1
PhytoComm	Rou Dou Kou	G16BP020616	1
PhytoComm	Ru Xiang	H0820923	1
PhytoComm	Ru Xiang	G174H0820321	1
PhytoComm	San Leng	G270H0311221	1
PhytoComm	Sang Bai Pi	G161H1042121	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
PhytoComm	Sang Piao Xiao	1202642	1
PhytoComm	Sang Shen	H1047921	1
PhytoComm	Sang Shen	G163H1047221	1
PhytoComm	Sang Ye	H1043021	1
PhytoComm	Sha Ren	H0939022	6
PhytoComm	Shan Yao	G091H0330122	1
PhytoComm	Shan Yao	H0330021	2
PhytoComm	She Chuang Zi	G076H1154021	2
PhytoComm	She Gan	G048H1034021	3
PhytoComm	Shen Qu	G156H0935121	1
PhytoComm	Shen Qu	H0935021	2
PhytoComm	Sheng Jiang	G253H0534321	1
PhytoComm	Sheng Jiang	H0534022	1
PhytoComm	Sheng Ma	G068H0437021	1
PhytoComm	Shi Gao	G120H0541024	11
PhytoComm	Tao Ren	G184H1007321	1
PhytoComm	Ting Li Zi	G135H1340121	1
PhytoComm	Wei Ling Xian	420905402	2
PhytoComm	Wei Ling Xian	G075H0943223	2
PhytoComm	Wu Jia Pi	G002H0402321	3
PhytoComm	Wu Wei Zi	G220H0401122	1
PhytoComm	Wu Wei Zi	H0401021	5
PhytoComm	Wu Yao	G140H1025221	2
PhytoComm	Wu Zhu Yu	(G103)H0766321	1
PhytoComm	Wu Zhu Yu	G103H0766321	3
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064221	4
PhytoComm	Xia Ku Cao	G202H1064121	1
PhytoComm	Xian Mao	G304H0549021	3
PhytoComm	Xiao Hui Xiang	G104H0339321	1
PhytoComm	Xiao Hui Xiang	H0339021	1
PhytoComm	Xie Bai	G504H1830121	1
PhytoComm	Xuan Fu Hua	H1168921	3
PhytoComm	Xuan Fu Hua	G126H1168121	2
PhytoComm	Yan Hu Suo	G081F1000301	4
PhytoComm	Yan Hu Suo	G081H0805223	1
PhytoComm	Ye Jiao Teng	H0885021	1
PhytoComm	Ye Ju Hua	(G514)H1187021	1
PhytoComm	Yi Mu Cao	G134H1050321	2
PhytoComm	Yi Mu Cao	G134H1050023	4
PhytoComm	Yi Yi Ren	G078H1701323	1
PhytoComm	Yi Yi Ren	H1701021	9
PhytoComm	Yi Zhi Ren	G015H1051022	2
PhytoComm	Yin Chai Hu	G368H1444221	1
PhytoComm	Yin Chen Hao	G034H1030022	2
PhytoComm	Yin Chen Hao	H1030021	2
PhytoComm	Yin Xing Ye	H1445921	1
PhytoComm	Yu Jin	G084H2201221	1
PhytoComm	Yu Jin	H2201021	2
PhytoComm	Yu Jin	G084H2201322	1
PhytoComm	Yu Li Ren	H0967922	1
PhytoComm	Yu Zhu	H0517022	1
PhytoComm	Yu Zhu	G195H0517121	1
PhytoComm	Yu Zhu	G195H0517321	1
PhytoComm	Yuan Zhi	H1406924	1
PhytoComm	Ze Lan	G268H1606021	1
PhytoComm	Ze Lan	G268H1606221	1
PhytoComm	Zhi He Shou Wu	1210546	2
PhytoComm	Zhi Shi	G044H0922321	2
PhytoComm	Zhi Shi	G044H0922021	3
PhytoComm	Zhi Shi	H0922921	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
PhytoComm	Zhu Ru	G047H0625121	1
PhytoComm	Zhu Ru	G047H0625321	4
PhytoComm	Zi Hua Di Ding	G249H1216121	2
PhytoComm	Zi Su Zi	H1213921	1
PhytoComm	Zi Wan	G038H1215022	3
Premium Ingredients Int. . .	Ascorbinsäure	2012444403	1
REWE Food Ingredients	Ascorbinsäure	11572008237103	1
RFI Food Ingredients	Kaliumsorbat	2006383927	1
Richter	Maisgriffel, geschn.	B189316	1
Richter	Tormentillwurzelstock, geschn.	P209904	1
s.Prüfprotokoll	Benzocain	s.Prüfprotokoll	1
s.Prüfprotokoll	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	s.Prüfprotokoll	1
s.Prüfprotokoll	Hydroxyethylcellulose (9000 . . .	s.Prüfprotokoll	1
s.Prüfprotokoll	Kaliumsorbat	s.Prüfprotokoll	1
sanacorp	Hartfett, pastilliert	267773	1
sanacorp	Kampfer	11074501	1
sanacorp	Maisgriffel, geschn.	10034711	1
sanacorp	Miconazolnitrat	11324902	1
sanacorp	Oxalsäure	11098213	1
sanacorp	Rosmarinblätter, geschn.	12221705	1
Sanacorp	Allantoin	12374409	8
Sanacorp	Aluminiumchlorid-Hexahydrat, . . .	12C07-N01	9
Sanacorp	Bismutgallat, basisches	12/13-N11	2
Sanacorp	Calcium	Fehlt	1
Sanacorp	Calciumcitrat-Tetrahydrat	111103601	1
Sanacorp	Calciumcitrat-Tetrahydrat	1211007-01	3
Sanacorp	Cetylstearylalkohol	575778	1
Sanacorp	Chloralhydrat	12H06-N08	10
Sanacorp	Chlorhexidindiacetat	12142726	3
Sanacorp	Citronensäure, wasserfreie	1216832	1
Sanacorp	Citronensäure, wasserfreie	12156832	3
Sanacorp	Citronensäure-Monohydrat	1215937	1
Sanacorp	Clotrimazol	1230805	1
Sanacorp	Diltiazemhydrochlorid	12/12-N02	7
Sanacorp	Erythromycin	1106036-04	1
Sanacorp	Estradiolvalerat	13264002	1
Sanacorp	Estriol	13D19-N05	1
Sanacorp	Fructose	K43537721	1
Sanacorp	Harnstoff	1110023-01	2
Sanacorp	Hydrochinon	12156703	1
Sanacorp	Hydrocortisonacetat	12330103	6
Sanacorp	Hydroxyethylcellulose (300 m. . .	12H02-N06	2
Sanacorp	Kakaobutter	13027207	5
Sanacorp	Kaliumhydroxid	12382606	1
Sanacorp	Kümmel	2770A120905	6
Sanacorp	Lidocain	12H16-N05	4
Sanacorp	Lidocain	12I21-N06	3
Sanacorp	Metronidazol	13095002	2
Sanacorp	Minoxidil	1210056-01	17
Sanacorp	Minoxidil	120056-01	1
Sanacorp	Mönchspfefferfrüchte	12274006	2
Sanacorp	Mönchspfefferfrüchte	12274008	2
Sanacorp	Natriumhydrogencarbonat, gep. . .	120800801	1
Sanacorp	Progesteron, mikronisiert	C01-130504	1
Sanacorp	Progesteron, mikronisiert	12195914	3
Sanacorp	Schweres basisches Bismutnit. . .	12146909	1
Sanacorp	Spironolacton	11042612	1
Sanacorp	Spironolacton	12049103	2
Sanacorp	Tang, geschn.	11351105	1
Sanacorp	Tannin	12336011	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Sanacorp	Tannin	12171102	1
Sanacorp	Tetracyclinhydrochlorid	100403401	1
Sanacorp	Thymol	1135816	1
Sanacorp	Tormentillwurzelstock, geschn.	12040712	3
Sanacorp	Tormentillwurzelstock, geschn.	12216803	3
Sanacorp	Tosylchloramid-Natrium	12H09-N01	1
Sanacorp	Tretinoin, mikronisiert	12320302	1
Sanacorp	Tretinoin, mikronisiert	12/06-N01	1
Sanacorp	Triclosan	13D02-No2	1
Sanacorp	Trometamol	8386F030	1
Sanacorp	Walnussblätter, geschn.	2111A120123	7
Sanacorp/ F	Griseofulvin	12B06-N07	1
Sanofi-Chimie, FR/ Noweda	Dexamethason	12033308	1
Say Phytoceut. Ltd	Methoxsalen	1209015-01	6
siehe WE-Prüfprotokoll	Kaliumsorbat	61/11	1
Sino Phyto	Harnstoff	118900-0003	1
Sino Phyto	Myrrhe	90001070	1
Sino Phyto	Prednicarbat, mikronisiert	13224401	4
Sino Phyto	Tetracainhydrochlorid	12019816	5
Spagyra	Saccharose	13041920152	1
Spagyra	Saccharose	13041920154	1
Spagyra	Saccharose	13050621773	2
Spagyra	Saccharose	13061020526	1
Spagyra	Saccharose	13051520939	1
Spagyra	Saccharose	13051520941	1
Spagyra	Saccharose	13061020525	1
Spagyra	Saccharose	13061020524	1
Spagyra	Saccharose	13040921431	1
Spagyra	Saccharose	12082320717	1
Spagyra	Saccharose	12091120645	1
Spagyra	Saccharose	1210222892	1
Spagyra	Saccharose	12103020975	1
Spagyra	Saccharose	13012920302	1
Spagyra	Saccharose	13020620240	1
Spagyra	Saccharose	13030621373	1
Spagyra	Saccharose	13040921424	1
Spagyra	Saccharose	13040921427	1
Spagyra	Saccharose	13040921430	1
Spagyra	Saccharose	13072620834	1
Spagyra	Saccharose	13070420937	1
Spagyra	Saccharose	13070420936	1
Spagyra	Saccharose	13061220385	1
Spagyra	Saccharose	13061020529	1
Spagyra	Saccharose	13061020528	1
Spagyra	Saccharose	13070420938	1
Spangropharm	Glycerolmonostearat 40-55%	80402468	1
Spangropharm	Lactose-Monohydrat	91444379	1
Spangropharm	Salicylsäure	11197104	1
Spangropharm	Weinsäure	10073111	1
Spinnrad	Kakaobutter	512300202	1
Spinnrad	Kaliumsorbat	111033102	1
Spinnrad	Kaliumsorbat	1901211748	1
Spinnrad	Kaliumsorbat	312331021	2
spinnrad gmbh	Kaliumsorbat	1111331023	1
Spinnrad GmbH	Kaliumsorbat	912331023	2
Staufen-Pharma	Saccharose	161112	2
Stockmeier Food	Calciumlactat-Pentahydrat	2012331885	1
stumpf	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	1301c012-277804	1
stumpf	Mannit	1104028-02	1
Stumpf	Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat	100804	8

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Stumpf	Kaliumhydrogencarbonat	1204038-01	1
Stumpf	Povidon-Iod	11168612	1
Symbiotica	Clobetasolpropionat	121021-01	1
unbekannt	Magnesiumchlorid-Hexahydrat	unbekannt	1
unisan	a-Liponsäure	H100031	1
unisan	a-Liponsäure	66601	1
unisan	L-Arginin	52401	3
unisan	L-Carnitin	26010	6
Unisan	Acacia Gum	1211728201	4
Unisan	Acacia Gum	706310	1
Unisan	Acacia Gum	1211706310	1
Unisan	a-Liponsäure	25701	10
Unisan	a-Liponsäure	1312993101	2
Unisan	a-Liponsäure	993101	1
Unisan	Aminomix NAC	971701	1
Unisan	Aminomix NAC	19101	1
Unisan	Aminomix NAC	41402	7
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	67601	2
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	19901	3
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	52001	1
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	1034019901	2
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	51902	2
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	30904	1
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	1034030902	2
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	30903	3
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	19901	1
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	30902	1
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	67501	2
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	1034030904	2
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	11001	1
Unisan	Antioxidantien NAT Komplex	68201	3
Unisan	Bioflavonoide Komplex	42501	1
Unisan	Bioflavonoide Komplex	Pr.Nr.1452	1
Unisan	Bioflavonoide Komplex	1284042501	2
Unisan	Bioflavonoide Komplex	1284648802	1
Unisan	Bioflavonoide Komplex	1284019001	2
Unisan	Bioflavonoide Komplex	19001	1
Unisan	Biotin	983601	1
Unisan	Biotin	29603	9
Unisan	Biotin	1591983601	2
Unisan	Biotin	H100721	1
Unisan	Biotin	1592983601	1
Unisan	Calcium	55601	2
Unisan	Calcium	956001	1
Unisan	Calcium	55001	6
Unisan	Calcium	1105008901	1
Unisan	Calcium	1104008901	11
Unisan	Calcium	8901	9
Unisan	Calcium	55101	1
Unisan	Catechin-Extrakt	681501	1
Unisan	Catechin-Extrakt	208020	1
Unisan	Catechin-Extrakt	1571681501	1
Unisan	Catechin-Extrakt	1571025702	3
Unisan	Catechin-Extrakt	25702	1
Unisan	Chaga	151467601	1
Unisan	Chaga	64001	1
Unisan	Chrom	977201	11
Unisan	Chrom	1581977201	2
Unisan	Chrom	1582977201	7
Unisan	Coenzym Q10	992501	1

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Unisan	Coenzym Q10	119405601	1
Unisan	Coenzym Q10	1194015601	6
Unisan	Coenzym Q10	15601	14
Unisan	Coenzym Q10	H101311	1
Unisan	Coenzym Q10	130521-300	7
Unisan	Curcumin und Piperin	13901	5
Unisan	Curcumin und Piperin	72001	3
Unisan	Curcumin und Piperin	1534013901	1
Unisan	Curcumin und Piperin	1534002201	2
Unisan	Eisen	1114998701	6
Unisan	Eisen	1114040901	4
Unisan	Eisen	40901	13
Unisan	Eisen	998701	6
Unisan	Eisen	1114603206	1
Unisan	Folsäure	1611030201	2
Unisan	Folsäure	977701	2
Unisan	Folsäure	1613977701	2
Unisan	Folsäure	1613030201	8
Unisan	Folsäure	30201	10
Unisan	Folsäure	52301	9
Unisan	Garcinia Cambogia	1221007401	3
Unisan	Garcinia Cambogia	56601	1
Unisan	Glutathion	1254025703	2
Unisan	Glutathion	25703	3
Unisan	Glutathion	1251019703	3
Unisan	Glutathion	40201	2
Unisan	Isoflavone	1310988301	1
Unisan	Isoflavone	25704	1
Unisan	Kalium	28903	2
Unisan	Kalium	1124028903	2
Unisan	Kalium	288903	1
Unisan	Kalium	39301	9
Unisan	Kalium	944201	4
Unisan	Kalium	69201	1
Unisan	Kupfer	7901	1
Unisan	Kupfer	1542933901	2
Unisan	Kupfer	933901	2
Unisan	Kupfer	46401	3
Unisan	L-5-HTP	25006	1
Unisan	L-5-HTP	26102	1
Unisan	L-5-HTP	1836025006	1
Unisan	L-Arginin	1324950601	1
Unisan	L-Arginin	1320025705	1
Unisan	L-Arginin	1320550101	1
Unisan	L-Arginin	1320999001	1
Unisan	L-Arginin	27802	1
Unisan	L-Arginin	44301	2
Unisan	L-Carnitin	1184026020	2
Unisan	L-Carnitin	965901	1
Unisan	L-Carnitin	26020	3
Unisan	L-Carnitin	130326002	1
Unisan	L-Carnitin	26001	3
Unisan	L-Carnosin	45901	3
Unisan	L-Carnosin	1812979202	3
Unisan	L-Glutamin	61501	1
Unisan	L-Glutamin	1814026901	8
Unisan	L-Glutamin	1814026903	1
Unisan	L-Glutamin	26903	1
Unisan	L-Isoleucin	1804027701	2
Unisan	L-Isoleucin	27701	2

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Unisan	L-Isoleucin	1805968701	1
Unisan	L-Isoleucin	1805027701	3
Unisan	L-Phenylalanin	25009	3
Unisan	L-Phenylalanin	1828019707	1
Unisan	L-Prolin	1834707801	1
Unisan	L-Tyrosin	1826029501	2
Unisan	L-Tyrosin	29501	4
Unisan	L-Tyrosin	29502	4
Unisan	L-Tyrosin	979102	2
Unisan	Lycopene	4501	4
Unisan	Lycopene	47301	3
Unisan	Lycopene	1195004501	1
Unisan	Lycopene	53501	2
Unisan	Methylsulfonylmethan MSM	56201	1
Unisan	Methylsulfonylmethan MSM	25013	1
Unisan	Methylsulfonylmethan MSM	26101	1
Unisan	Methylsulfonylmethan MSM	1818025013	1
Unisan	Na-Chondroitinsulfat	1801	1
Unisan	Na-Chondroitinsulfat	31801	9
Unisan	Na-Chondroitinsulfat	1821964101	1
Unisan	Na-Chondroitinsulfat	1820001801	4
Unisan	Natriumsulfat-Decahydrat	11294605	2
Unisan	OPC Grape Seed	1504018401	3
Unisan	OPC Grape Seed	18401	3
Unisan	OPC Grape Seed	68301	2
Unisan	Selenhefe	25709	1
Unisan	Selenhefe	9001	1
Unisan	Selenhefe	1151009001	3
Unisan	Silymarin	1241950401	3
Unisan	Silymarin	46101/0	1
Unisan	Silymarin	950401	2
Unisan	Silymarin	46101	1
Unisan	Silymarin	29901	5
Unisan	Spurenelemente JK	72701	2
Unisan	Spurenelemente JK	1026919701	1
Unisan	Spurenelemente JK	11701	18
Unisan	Spurenelemente JK	1026956901	1
Unisan	Spurenelemente JK	1026011701	5
Unisan	Spurenelemente SE	42301	4
Unisan	Spurenelemente SE	1024012401	1
Unisan	Spurenelemente SE	31301	6
Unisan	Taurin	28001	4
Unisan	Taurin	1294028001	2
Unisan	Taurin	25710	4
Unisan	Taurin	1294960201	2
Unisan	Vitamin B1	977301	2
Unisan	Vitamin B1	30202	4
Unisan	Vitamin B1	1621030202	2
Unisan	Vitamin B1	1622977301	1
Unisan	Vitamin B12	1064026401	4
Unisan	Vitamin B12	26401	2
Unisan	Vitamin B12	3441377	1
Unisan	Vitamin B12	1061025017	1
Unisan	Vitamin B12	25017	8
Unisan	Vitamin B12	1064025017	4
Unisan	Vitamin B6	1554025711	1
Unisan	Vitamin B6	1552020101	1
Unisan	Vitamin B6	25711	9
Unisan	Vitamin B6	20101	1
Unisan	Vitamin C	25020	3

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Unisan	Vitamin C	44501	9
Unisan	Vitamin C	1085025020	7
Unisan	Vitamin D3	8101	12
Unisan	Vitamin D3	1335959601	2
Unisan	Vitamin D3	64801	9
Unisan	Vitamin D3	63701	7
Unisan	Vitamin D3	1335008101	6
Unisan	Vitamin D3	1335008108	1
Unisan	Vitamin E NAT	25022	11
Unisan	Vitamin E NAT	1094017701	2
Unisan	Vitamin E NAT	1095961301	1
Unisan	Vitamin E NAT	65001	2
Unisan	Vitamin E NAT	17901	1
Unisan	Vitamin E NAT	25021	1
Unisan	Vitamin E NAT	1094025021	3
Unisan	Vitamine Komplex	49301	19
Unisan	Vitamine Komplex	77201	4
Unisan	Vitamine Komplex	25101	1
Unisan	Vitamine Komplex	25201	1
Unisan	Vitamine Komplex	49302	3
Unisan	Vitamine Komplex	1014009901	1
Unisan	Vitamine Komplex	H110031	1
Unisan	Vitamine Komplex	4966901	1
Unisan	Vitamine Komplex	49201	6
Unisan	Vitamine Komplex	1014025301	2
Unisan	Zink	991001	18
Unisan	Zink	99101	2
Unisan	Zink	44502	1
Unisan	Zink	410501	1
Unisan	Zink	41501	10
Unisan	Zink	1164991001	7
Unisan	L-Carnitin	1184965901	1
Unisan	L-Lysin	1801028801	1
Unisan	Spurenelemente SE	1024042301	1
Unisan	Vitamine Komplex	1014025401	1
Unisan	Zink	1164949701	1
Unisan GmbH, 78465 Kons...	L-Glutamin	26904	1
Unisan/Hepart AG	a-Liponsäure	54301	2
Unisan/Hepart AG	Catechin-Extrakt	18601	5
Unisan/Hepart AG	Chaga	46701	1
Unisan/Hepart AG	Ginseng	38802	4
Unisan/Hepart AG	Isoflavone	38801	2
Unisan/Hepart AG	Kalium	39302	2
Unisan/Hepart AG	Kupfer	13041501	2
Unisan/Hepart AG	L-Arginin	1324044301	2
Unisan/Hepart AG	L-Glutamin	26901	1
Unisan/Hepart AG	L-Phenylalanin	1828025009	2
Unisan/Hepart AG	Methylsulfonylmethan MSM	1819025013	1
Unisan/Hepart AG	Vitamin B1	53301	1
Unisan/Hepart AG	Vitamin C	44602	2
Unisan/Hepart AG	Vitamine Komplex	48301	1
VDL	Citronensäure-Monohydrat	263669	1
VDL	Dexamethasonacetat	12021803	1
VDL	Salicylsäure	11197122	1
vedono	Anis, gepulvert	11306208	1
vedono	Weihrauch-Granulat	12120012	1
vedono	Weihrauch-Granulat	12120009	5
Wepa	Ascorbinsäure	261120415	1
Werner	Saccharose	1901208731	2
Wolf	Anis	L401F292b	4

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Lieferant	Substanz	Charge	Spektren
Wolf	Anis	215346	1
Wolf	Anis	L401F1413	1
Wolf	Anis	B671	1
Wolf	Anis	B216346	14
Wolf	Anis	B-671	2
Wolf	Anis	216346	1
Wolf	Dillfrüchte	L30057	5
Wolf	Dillfrüchte	23622	5
Wolf	Dillfrüchte	E-501	1
Wolf	Dillfrüchte	22422	3
Wolf	Kümmel	B-224	1
Wolf	Schwarzkümmelsamen	zu erfassen	1
Wolf	Schwarzkümmelsamen	B-471	1
Wolf	Schwarzkümmelsamen	L310F141b	6
Wolf	Schwarzkümmelsamen	207204	1
Wolf	Schwarzkümmelsamen	L402F1713	1
Wolf	Schwarzkümmelsamen	L402F171b	3
Wolf	Schwarzkümmelsamen	20720	8
xx	Magnesium(hydrogen)citrat	1058172	1
xxx	Hydrocortison	911Q-01719	1
xxx	Kampfer	709E-01221	1
-	Enzianwurzel, gepulvert	130063	1
-	Isländisches Moos, geschn.	4711E-01774	1
?	Kaliumsorbat	10012203	1
5N Plus Lübeck GmbH/ No...	Schweres basisches Bismutnit...	12146908	1
-	Vogelmierenkraut, geschn.	2011A-01686	1

Anhang D: Anforderungen an die Validierung

Um eine Einhaltung des gesicherten Standes der Wissenschaft zu gewährleisten, müssen die einzelnen Methoden zur Herstellung und Prüfung unter bestimmten Voraussetzungen validiert werden (vgl. § 34 Abs. 1 Nr. 3, § 35 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 b, Abs. 6 Satz 3 *ApoBetrO*). Die *ApoBetrO* enthält in § 1 a Abs. 16 eine Legaldefinition:

„Validierung ist das Erbringen eines dokumentierten Nachweises, der mit hoher Sicherheit belegt, dass durch einen spezifischen Prozess oder ein Standardarbeitsverfahren ein Arzneimittel hergestellt und geprüft wird, das den vorher festgelegten Qualitätsmerkmalen entspricht.“

Durch eine Validierungsdokumentation lässt sich nachweisen, dass Methoden oder Geräte, welche nicht im Arzneibuch beschrieben sind, i. S. v. § 6 Abs. 1 Satz 3 *ApoBetrO* die gleichen Ergebnisse wie solche aus dem Arzneibuch erzielen. Bei den Anforderungen an die geforderte Validierung ist wiederum zu beachten, ob die jeweilige Prüfmethode bereits im Arzneibuch enthalten ist.

Die NIR-Spektroskopie als Prüfmethode im Allgemeinen muss nach der ausdrücklichen Regelung im *Ph. Eur. Abschnitt 1.1*, nicht validiert werden [3], da sie bereits im *Abschnitt 2.2.40* des *Ph. Eur.* als Anwendungsgebiet für die Identifikation von Ausgangsstoffen beschrieben ist.

Ein spezielles Validierungserfordernis besteht jedoch für die Referenzdatenbank. Mit dem vorliegenden Dokument wird dieser Anforderung entsprochen. Weitere Vorschriften oder Regelungen, wie dieser Nachweis erbracht werden muss, bestehen nicht. Gefordert ist, dass die Verfahren dieselben Ergebnisse wie die Methoden und Geräte des Arzneibuchs gewährleisten [14].

Die Durchführung von Identitätsprüfungen mit *Apo-Ident* ist somit auch dann möglich, wenn das Verfahren der NIR-Spektroskopie in der Arzneibuch-Monographie der Substanz zur Identitätsprüfung nicht angeordnet wird. Jede NIR-Analyse mit *Apo-Ident* weist mehrere, oft alle Molekülgruppen nach und ist daher mit einer Reihe einzelner gezielter chemischer Nachweise vergleichbar [4]. Damit ersetzt der Identitätsnachweis mit *Apo-Ident* die Prüfreihe der Monographie (mit zwei oder mehreren Kombinationen von Prüfungen).

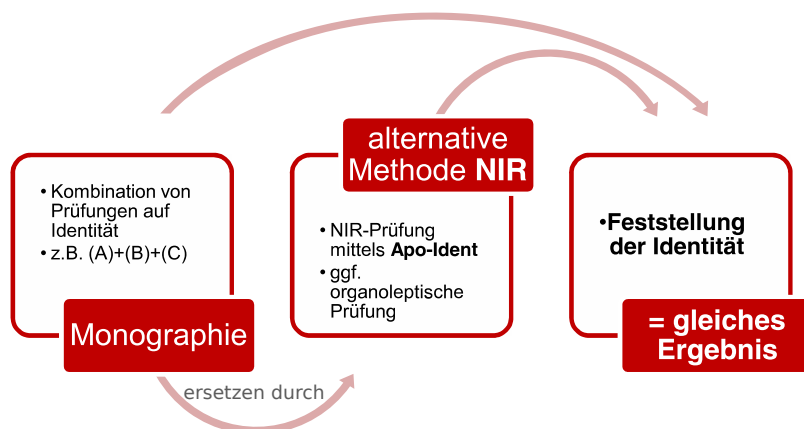


Abbildung 2: Die Kombination von Prüfungen der Monographie wird durch die alternative Methode NIR-Spektroskopie mittels *Apo-Ident* ersetzt. Dies ist zulässig, weil beide Prüfverfahren zur Feststellung der Identität des Ausgangsstoffes führen.

Mit der vorliegenden Validierungsdokumentation wird der Nachweis erbracht, dass mit *Apo-Ident* die gleichen Ergebnisse wie mit den Arzneibuch-Methoden, d.h. die Bestätigung der Identität des Ausgangsstoffes [2], erzielt werden.

Anhang E: Konformität von *Apo-Ident* mit dem Europäischen Arzneibuch

Laut *Ph. Eur. Abschnitt 2.2.40* ist NIR-Spektroskopie grundsätzlich geeignet für die: „Identifizierung von Wirkstoffen, Hilfsstoffen, Darreichungsformen, Zwischenprodukten der Herstellung, chemischen Ausgangsstoffen und Verpackungsmaterialien“ [3].

Dass *Apo-Ident* den weiteren Kriterien des Europäischen Arzneibuches unter den Überschriften des *Abschnitts 2.2.40*

- Apparatur
- Messmethoden
- Probenvorbereitung und Probenpräsentation
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Geräts
- Identifizierung und Charakterisierung (qualitative Analyse)
- Quantitative Analyse
- Laufende Modellevaluierung
- Übertragen von Datenbanken
- Datenspeicherung

entspricht, kann anhand der Dokumentation der *HiperScan GmbH* „Erfüllung von *2.2.40 Ph. Eur.* durch *Apo-Ident*“ [4] nachvollzogen werden.

Literatur

- [1] ABDA – BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE: Verordnung über den Betrieb von Apotheken (Apothekenbetriebsordnung – ApBetrO), 2012
- [2] REIMANN, B. ; REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT: Hinweise zur ordnungsgemäßen Prüfung von Arzneimitteln und Ausgangsstoffen (§§ 6 und 11 *ApBetrO*), 2007
- [3] *Europäisches Arzneibuch, Grundwerk 2011*. 7. Ausgabe. Deutscher Apotheker Verlag (978-3-7692-5416-7)
- [4] HIPERSCAN GMBH: Erfüllung von 2.2.40 Ph. Eur. durch Apo-Ident, 2013
- [5] ARBEITSGEMEINSCHAFT DER PHARMAZIERÄTE DEUTSCHLANDS (APD): Resolution in Verbindung mit §§ 6 und 11 *ApBetrO* Verwendung eines Nah-Infrarot-Spektrometers (NIR) zur Identitätsprüfung, 16. 10. 2013, DAZ 48, November 2013
- [6] *DAC/NRF*. Govi-Verlag (978-3-7741-0044-2)
- [7] KESSLER, W.: *Multivariate Datenanalyse*. WILEY-VCH Verlag, 2007 (978-3-527-31262-7)
- [8] NÆS, T. ; ISAKSSON, T. ; FEARN, T. ; DAVIES, T.: *Multivariate Calibration and Classification*. NIR Publications, 2002 (978 0 9528666 2 6)
- [9] HIPERSCAN GMBH: Identifikationsmethodik Apo-Ident, 2012
- [10] HIPERSCAN GMBH: Datenvorbehandlung des Identifikationssystems Apo-Ident, 2012
- [11] BRONSTEIN, I. N. ; SEMENDJAJEW, K. A. ; MUSIOL, G. ; MÜHLIG, H.: *Taschenbuch der Mathematik*. 5. überarbeitete und erweiterte Auflage. Verlag Harri Deutsch, 2000 (3-8171-2015-2)
- [12] MAHALANOBIS, P.: On the generalized distance in statistics. In: *Proc. Nat. Inst. Sci. India (Calcutta)* 2 (1936), S. 49–55
- [13] YAMBOR, B. ; DRAPER, W. ; BEVERIDGE, R.: Analyzing PCA-based face recognition algorithms: Eigenvector selection and distance measures. In: *Second Workshop Empirical Evaluation in Computer Vision* (2000)
- [14] CYRAN ; ROTTA: Apothekenbetriebsordnung, Kommentar § 6 Rn. 10, 2010

Index

- Acidum phenylaethylbarbituricum, *siehe* [Phenobarbital](#)
- Amfetamini sulfas, *siehe* [Amfetaminsulfat](#)
- Amfetaminsulfat, [17](#)
- Amphetaminsulfat, *siehe* [Amfetaminsulfat](#)
- Amphetaminum sulfuricum, *siehe* [Amfetaminsulfat](#)
- Barbital-Natrium, [21](#)
- Barbitalum natriucum, *siehe* [Barbital-Natrium](#)
- Buprenorphinhydrochlorid, [25](#)
- Buprenorphini hydrochloridum, *siehe* [Buprenorphinhydrochlorid](#)
- Buprenorphinum hydrochloricum, *siehe* [Buprenorphinhydrochlorid](#)
- Cocainhydrochlorid, [29](#)
- Cocaini hydrochloridum, *siehe* [Cocainhydrochlorid](#)
- Cocainum hydrochloricum, *siehe* [Cocainhydrochlorid](#)
- Codein Monohydrat, [33](#)
- Codeini phosphas hemihydricus, *siehe* [Codeinphosphat-Hemihydrat](#)
- Codeinphosphat-Hemihydrat, [37](#)
- Codeinum monohydricum, *siehe* [Codein Monohydrat](#)
- Codeinum phosphoricum, *siehe* [Codeinphosphat-Hemihydrat](#)
- Dexamfetamini sulfas, *siehe* [Dexamfetaminsulfat](#)
- Dexamfetaminsulfat, [41](#)
- Dexamphetaminsulfat, *siehe* [Dexamfetaminsulfat](#)
- Dexamphetaminum sulfuricum, *siehe* [Dexamfetaminsulfat](#)
- Dihydrocodeinhydrogentartrat, [45](#)
- Dihydrocodeini hydrogenotartras, *siehe* [Dihydrocodeinhydrogentartrat](#)
- Dihydrocodeinum bitartaricum, *siehe* [Dihydrocodeinhydrogentartrat](#)
- Fentanili citras, *siehe* [Fentanylcitrat](#)
- Fentanylcitrat, [49](#)
- Fentanylum citricum, *siehe* [Fentanylcitrat](#)
- Hydromorphinonum hydrochloricum, *siehe* [Hydromorphonhydrochlorid](#)
- Hydromorphonhydrochlorid, [53](#)
- Hydromorphoni hydrochloridum, *siehe* [Hydromorphonhydrochlorid](#)
- Methadonhydrochlorid, [57](#)
- Methadoni hydrochloridum, *siehe* [Methadonhydrochlorid](#)
- Methadonum hydrochloricum, *siehe* [Methadonhydrochlorid](#)
- Midazolam, [61](#)
- Midazolamhydrochlorid, [65](#)
- Midazolami hydrochloridum, *siehe* [Midazolamhydrochlorid](#)
- Midazolamum, *siehe* [Midazolam](#)
- Midazolamum hydrochloricum, *siehe* [Midazolamhydrochlorid](#)
- Morphinhydrochlorid, [69](#)
- Morphini hydrochloridum, *siehe* [Morphinhydrochlorid](#)
- Morphini sulfas, *siehe* [Morphinsulfat](#)
- Morphinsulfat, [73](#)
- Morphinum hydrochloricum, *siehe* [Morphinhydrochlorid](#)
- Morphinum sulfuricum, *siehe* [Morphinsulfat](#)
- Natrium diaethylbarbituricum, *siehe* [Barbital-Natrium](#)
- Oxycodonhydrochlorid, [77](#)
- Oxycodoni hydrochloridum, *siehe* [Oxycodonhydrochlorid](#)
- Oxycodonum hydrochloricum, *siehe* [Oxycodonhydrochlorid](#)
- Phenobarbital, [81](#)
- Phenobarbitalum, *siehe* [Phenobarbital](#)